


FT 3057 - DIGITÁLNY TEPLOMER

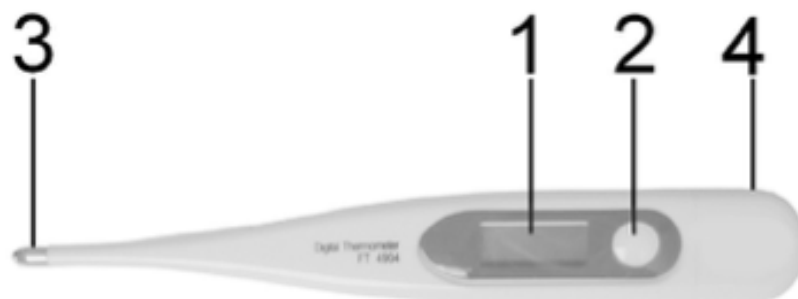

Špeciálne bezpečnostné opatrenia

Používajte tento prístroj výhradne na osobné a naň predpokladané účely. Chráňte prístroj mimo dosahu detí. Z hygienických dôvodov odporúčame prístroj používať buď len rektálne alebo orálne. Neopotápať prístroj do vody, nehryzť a porsíme neohýbať. Siliny nesmú prísť do kontaktu s displejom. Merací prístroj nesmiete opustiť a musíte zabrániť ťažkým nárazom.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržovať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Vloženie batérií

1. Vysunite krytku na priehradke s batériou.
 2. Vymeňte batériu v teplomere.
 3. Zatvorte priehradku.
- Na displeji sa zobrazí symbol vybitej batérie.

Nastavenia - celzia a farenheity

- Stlačte tlačidlo ON/OFF. Na displeji sa zobrazí „LO“ a rozbliká sa „C“ alebo „F“.
- Pridržte tlačidlo ON/OFF po dobu niekoľkých sekúnd.
- Na displeji sa zobrazí zvolený výber.

Meranie

- Stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť. Na displeji sa objaví LO po krátkom čase začne blikať „C“.
- Počas merania zostaňte v pokoji stát' alebo sedieť a spustíte meranie.
- Začnite s meraním. Pri orálnom meraní si vložte senzor do úst a zatvorte ich. Normálna teplota je 37 C.

- Potrebujete teplotu zmerať rektálne zaved'te opatrne, nakrémuje špičku teplomera napríklad vazelínou a zaved'te max. 2 cm. Normálna teplota je 37,5 C.
- Po ukončení merania sa cca po 90 sekundách ozve signál. V prípade že je teplota príliš vysoká zobrazí sa Hi „C“. V prípade, že je meranie príliš nízke uvidíte Lo C.
- Dĺžka merania - rektálne - 40 až 60 sekúnd, dĺžka merania - podpazušie - 80 až 120 sekúnd, dĺžka merania - orálne - 50 až 70 sekúnd.
- Po 8 minútach núčinnosti alebo stlačením tlačidla ON/OFF prístroj vypnete.
- Po ďalšom spustení sa zobrazí posledná meraná teplota.

Údržba a skladovanie

- Použite suchú tkaninu na vyčistenie prístroja, toto odporúčame po každom použití.
- Nepoužívať žiadne silné čistiace prípravky.
- Pri dlhodobejšom, nepoužívaním meracieho prístroja je dobre vybrať batérie. Vytekajúce batérie môžu spôsobiť poškodenie.
- Po použití teplomer uložiť do plastového puzdra.
- Merací prístroj je nutné chrániť pred priamym slnkom, vysokou teplotou, vlhkosťou a prachom.
- Nevystavovať extrémne nízkym teplotám pod mínus 20 °C alebo vysokým cez 60 °C.

Technické dáta

Typ: FT 3057
 Merení: 32 – 42,9 C, 42,9/109 F
 Presnosť merania: +/- 0,1 C (35,5 C/95,9 F – 42, 0C/107,6 F)
 +/- 0,2 C/ 0,4 F (32,0C/89,6F/ 35,5C/95,9 F)

Displej: LCD displej
 Životnosť: 3 roky
 Frekvencia: 50 Hz
 Tlak vzduchu: 700 – 1600 hPa
 Prechodná doba odozvy: 12s
 Netto hmotnosť: cca 16,2 kg

Právo vykonávať v priebehu neustáleho vývoja produktu technické zmeny a zmeny dizajnu zostáva aj naďalej vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými súčasnými smernicami ES, ako sú elektromagnetická kompatibilita a smernice o nízkom napätí, a je vyrobené podľa najnovších bezpečnostných nariadení.

Likvidácia

Význam symbolu „Preškrtnutá popolnica“

Starajte sa o naše životné prostredie, nelikvidujte elektrické prístroje spoločne s domácim odpadom. Ďalej nepoužívané alebo chybné elektrické prístroje likvidujte prostredníctvom lokálnych zberných miest. Prosím pomôžte chrániť životné prostredie správnou likvidáciou odpadom a predísť tak nežiaducim dopadom na životné prostredie a zdravie nás všetkých.

Prispejete tak k recyklácii a ďalším formám využitia starých elektrických a elektronických zariadení. Vaša miestna samospráva vám poskytne informácie o zberných miestach.

