

FT 3095 - BEZKONTAKTNÝ INFRAČERVENÝ TEPLOMER



Špeciálne bezpečnostné opatrenia

Používajte tento prístroj výhradne na osobné a naň predpokladané účely. Chráňte prístroj mimo dosahu detí. Z hygienického dôvodu odporúčame prístroj používať buď len rektálne alebo orálne. Ne-
potápať prístroj do vody, nehrýzť a porsíme neohýbať. Siliny nesmú prísť do kontaktu s displejom.
Merací prístroj nesmiete opustiť a musíte zabrániť ťažkým nárazom.


Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným ne-
bezpečnostiam. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú
vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod
mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Vloženie batérií

1. Vysunite krytku na priehradke s batériou.
 2. Vymeňte batériu v teplomere.
 3. Zatvorte priehradku.
- Na displeji sa zobrazí symbol vybitých batérií.

P odpis produktu

1. LCD Displej
2. Tlačidlo merania
3. Senzor
4. Kryt na batérie
5. Symbol pri nízkom stave batérie
6. Symbol signálu
7. Celsius/fahrenheit
8. Ukazovateľ výsledku merania
9. Ukazovateľ teploty

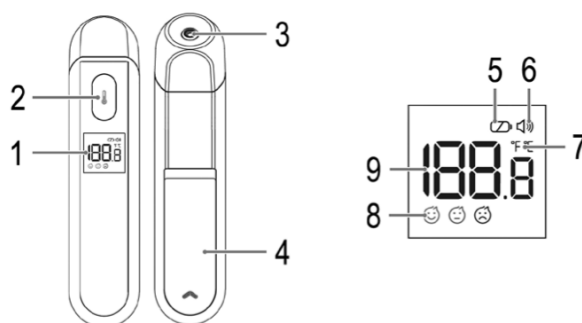

Nastavenia - celzia a farenheity

- Stlačte tlačidlo ON/OFF. Na displeji sa zobrazí „LO“ a rozbliká sa „C“ alebo „F“.
- Pridržte tlačidlo ON/OFF po dobu niekoľkých sekúnd.
- Na displeji sa zobrazí zvolený výber.


1. Pozícia merania: Stred čela
2. Odstup od čela: 3 cm (1,18 in)
3. Napájanie: DC 3V, 2 x 1,5V, AAA batérie
4. Meranie: 34 – 43C (93,2 F – 109 F)
5. Presnosť merania $\pm 0,2C$ (0,4F) medzi 35C – 42C (95 F – 107,6 F) mimo
6. Ukazovateľ 0,1C (0,1F)
7. Meranie Celzia, Fahrenheit
8. Rozptyl následného merania: $\pm 0,3C$ (0,5 F)
9. Podmienky pre prevádzku:
Teplota: 15 – 40 C (59 – 104 F)
Vlhkosť vzduchu: menej ako 95%
Tlak vzduchu: 70 kPa – 106 kPa
10. Transport/ Uskladnenie
Teplota: - 25C - 55C (-13F - 131F)
Vlhkosť vzduchu: menej ako 95%
Tlak vzduchu: 70 kPa – 106 kPa
11. LCD displej
12. Meranie: čelo
13. Očakávaná dĺžka životnosti: 5 rokov
14. Interval medzi merania: 5 sekúnd
15. Živoznosť: cca 5000 meraníInfračervený teplomer na čelo je určen k pravidelnému měření tělesné teploty. Teplota se měří na středu čela všech věkových skupin. Nedoporučuje se měření u osob které mají zranění, zánět, poranění nebo pooperační rány v místě měření.

Použitie

1. Vložte batérie do prístroja. Na displeji sa zobrazí to čo na obrázku nižšie.



Meranie telesnej teploty

Uistite sa, že senzorom ukazujete na čelo z blízkosti nie väčšiu ako 3 cm.
Neklad'te špičku senzora o kožu.

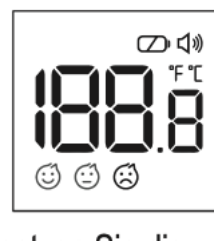

2. Stlačte tlačidlo pre zahájenie merania.

3. Po ukončení merania zaznie tón. Tón je možné vypnúť. Pokiaľ sa meranie nepodarí, tak sa na displeji zobrazí „----“, a tón nezaznie.

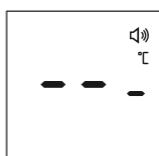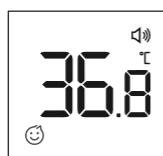

Možné príčiny nezmerania telesnej teploty:

Teplota presahuje možnosti merania alebo podmienky pre meranie nie sú dodržané.

Vypnutie teplomera

Nechajte prístroj po dobu 8 sekúnd v pokoji a prístroj sa automaticky vypne.

Nastavenie tónu

1. Stlačte dlho tlačidlo merania, keď je prístroj vypnutý. Na displeji sa zobrazí symbol zvuku a potom zmizne.

2. Pustite tlačidlo merania, ak sa na displeji zobrazí symbol zvuku pre zapnutie zvuku.

3. To isté pre vypnutie.

4. Po nastavení tónu sa na displeji zobrazí C alebo F a potom sa prístroj po 4 sekundách vypne.

Ukazovateľ telesnej teploty

1. Ak je výsledok merania menej ako 37,5 C (99,5F) ukáže sa symbol usmievajúceho smajlíka.

2. Ak je výsledok merania medzi 37,5 a 38 ukáže sa symbol prostredného smajlíka.

3. Ak je výsledok merania viac ako 38C ukáže sa symbol mračiaceho smajlíka.



Upozornenie na nízky stav batérie

Pokiaľ má prístroj málo batérie, ale dostatočne batérie na ďalšie jedno meranie tak sa ukáže na displeji symbol vybitej batérie a výsledok merania pokiaľ už bude batéria úplne vybitá vymeňte batérie.

Telesná teplota

Telesná teplota človeka je medzi 35,5C a 37,8C (95,5 – 100F). Zvýšenie o jeden stupňom celzia alebo o jeden stupeň fahrenheit nad normálnou teplotou človeka znamená, že má človek teplotu.

Rektal	97, 9 F – 99,1 F	36,6 – 38C
Podpazušie	94,5 F – 99,1 F	34,7 – 37,3 C
Oral	95,9F – 99,5F	35, 5 – 37,5 C
Ucho	96,4 – 100,4 F	35,8 – 38 C

Údržba a skladovanie

- Použite suchú tkaninu na vyčistenie prístroja, toto odporúčame po každom použití.
- Nepoužívať žiadne silné čistiace prípravky.
- Pri dlhodobejšom, nepoužívaním meracieho prístroja je dobre vybrať batérie. Vytiekajúce batérie môžu spôsobiť poškodenie.
- Po použití teplomer uložiť do plastového puzdra.
- Merací prístroj je nutné chrániť pred priamym slnkom, vysokou teplotou, vlhkosťou a prachom.
- Nevystavovať extrémne nízkym teplotám pod mínus 20 °C alebo vysokým cez 60 °C.

Technické dáta

Typ: FT 3095

Meranie: 32 – 42,9 C, 42,9/109 F

Presnosť merania: +/- 0,1 C (35,5 C/95,9 F – 42, 0C/107,6 F)
..... +/- 0,2 C/ 0,4 F (32,0 C/89,6 F/35,5 C/95,9 F)

Displej: LCD displej

Životnosť: 5 rokov

Právo vykonávať v priebehu neustáleho vývoja produktu technické zmeny a zmeny dizajnu zostáva aj naďalej vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými súčasnými smernicami ES, ako sú elektromagnetická

kompatibilita a smernice o nízkom napätí, a je vyrobené podľa najnovších bezpečnostných nariadení.

Likvidácia

Význam symbolu „Preškrtnutá popelnica“

Starajte sa o naše životné prostredie, nelikvidujte elektrické prístroje spoločne s domácim odpadom. Ďalej nepoužívané alebo chybné elektrické prístroje likvidujte prostredníctvom lokálnych zberných miest. Prosím pomôžte chrániť životné prostredie správnou likvidáciou odpadom a predísť tak nežiaducim dopadom na životné prostredie a zdravie nás všetkých.

Prispejete tak k recyklácii a ďalším formám využitia starých elektrických a elektronických zariadení. Vaša miestna samospráva vám poskytne informácie o zberných miestach.

