

beurer

HK Limited Edition



CZ **Výhřevná poduška**
Návod k použití 2

Obsah

1. Obsah balení	3	4.4 Nastavení teploty.....	5
1.1 Popis zařízení.....	3	4.5 Funkce automatického vypnutí.....	5
2. Důležité pokyny		4.6 Vypnutí.....	5
Uchovejte pro pozdější použití	3	5. Čištění a údržba.....	6
3. Použití v souladu s určením.....	4	6. Uložení.....	6
4. Obsluha	4	7. Likvidace	7
4.1 Bezpečnost	4	8. Co dělat v případě problémů?	7
4.2. Uvedení do provozu	5	9. Technické údaje.....	7
4.3 Zapnutí	5		

Vysvětlení symbolů


	Čtěte pokyny!		Extra jemné praní na 30 °C
			Nebělit
	Nevpichujte žádné špendlíky!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Nepoužívejte podušku, jestliže je přehnutá nebo složená!		Nečistit chemicky
	Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky).		Textilie použité u tohoto přístroje splňují přísné požadavky na zdravotní nezávadnost podle normy Öko Tex Standard 100, což bylo prokázáno výzkumným ústavem Hohenstein.
	VAROVÁNÍ; varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.		
	POZOR; bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.		
	UPOZORNĚNÍ; upozornění na důležité informace.		

1. Obsah balení

- 1 vyhřevná poduška
- 1 vypínač
- 1 návod k použití

1.1 Popis zařízení

- 1. Síťová zástrčka
- 2. Síťový kabel
- 3. Vypínač
- 4. Osvětlený ukazatel teplotních stupňů
- 5. Posuvný spínač pro ZAP/VYP (ON/OFF) a teplotní stupně
- 6. Zástrčková vidlice

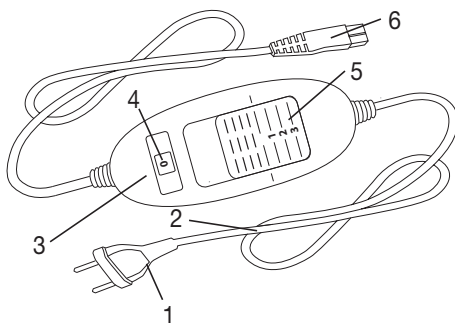

2. Důležité pokyny

Uchovejte pro pozdější použití



VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i k ochraně produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s onemocněním projevujícím se změnami na kůži nebo osoby s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po užití utišujících léků nebo po požití alkoholu).
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat děti (3–8 roky), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlízející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s vyhřevnou poduškou bezpečně zacházet.
- Tuto vyhřevnou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání vyhřevné podušky a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s vyhřevnou poduškou nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Tato vyhřevná poduška není určena pro použití v nemocnicích.
- Do podušky nepichujte žádné špendlíky.
- Nepoužívejte podušku, jestliže je přehnutá nebo složená.
- Nepoužívejte, jste-li mokří.

- Tuto výhřevnou podušku lze použít pouze ve spojení s vypínačem uvedeným na štítku.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z této výhřevné podušky mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT.
Před použitím této výhřevné podušky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Za kabely netahejte, nekrutěte s nimi nebo je nelámejte.
- Tuto výhřevnou podušku je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.
Pokud se takové známky objeví, výhřevná poduška nebyla správně používána a již se neohřívá, je třeba ji před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit.
- Jestliže je výhřevná poduška zapnutá, nesmí se na ni pokládat
 - žádné předměty (např. kufr nebo koš s prádlem),
 - žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška apod.
- Elektronické součástky ve vypínači se při používání výhřevné podušky zahřívají. Z vypínače se proto nesmí snímat kryt nebo nesmí ležet na výhřevné podušce, je-li zapnutá.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením



POZOR

Tato výhřevná poduška je určena pro zahřívání lidského těla.

4. Obsluha

4.1 Bezpečnost



POZOR

Výhřevná poduška je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato technologie snímačů v případě závady přehřátí výhřevné podušky po celé ploše. Jestliže BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM vypne výhřevnou podušku, přestanou v zapnutém stavu svítit teplotní stupně. Respektujte prosím, že po závadě již výhřevnou podušku nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu.


4.2. Uvedení do provozu



POZOR

Ujistěte se, že se vyhřevná poduška při používání neshrnula nebo zda se nevytvořily záhyby.

- Nejdříve propojte vypínač s topným tělesem tak, že zásuvkovou spojku spojte dohromady.
- Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

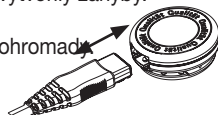

4.3 Zapnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy 1, 2 nebo 3, vyhřevná poduška se zapne. V zapnutém stavu jsou teplotní stupně (4) osvětlené.

4.4 Nastavení teploty

Stupeň 0: VYPNUTO

Stupeň 1: minimální teplota

Stupeň 2: střední teplota

Stupeň 3: maximální teplota



UPOZORNĚNÍ

Nejrychlejšího zahřátí vyhřevné podušky dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň.



UPOZORNĚNÍ

Tato vyhřevná poduška je vybavena rychlou ohřívací jednotkou, která umožňuje rychlejší zahřátí podušky během prvních 10 minut.



VAROVÁNÍ

Jestliže budete vyhřevnou podušku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na vypínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám pokožky.

4.5 Funkce automatického vypnutí

Tato vyhřevná poduška je vybavena funkcí automatického vypínání. Přívod tepla se přibližně 90 minut po zapnutí vyhřevné podušky zastaví. Ukazatel teplotních stupňů začne blikat. Abyste opět mohli obnovit funkci vyhřevné podušky, nastavte nejdříve posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně (5) na stupeň „0“ (VYPNUTO). Asi po 5 sekundách můžete přikrývku opět zapnout.



4.6 Vypnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na stupeň „0“, vyhřevná poduška se vypne. Teplotní stupně již nesvítlí.



UPOZORNĚNÍ

Jestliže nebudete vyhřevnou podušku používat, nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na stupeň „0“ (VYP) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím i vypínač od vyhřevné podušky.

5. Čištění a údržba



VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím i vypínač od výhřevné podušky. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



POZOR

- Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

Drobné znečištění výhřevné podušky můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.



POZOR

- Respektujte, že se výhřevná poduška nesmí chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat nebo žehlit.

Tuto výhřevnou podušku lze prát v pračce. Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu). Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.



POZOR

- Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní výhřevnou podušku velmi zatěžuje. Výhřevná poduška by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 10krát.

Okamžitě po vyprání rozprostřete ještě vlhkou výhřevnou podušku na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.



POZOR

- K připevnění výhřevné podušky nepoužívejte žádné kuličky na prádlo apod. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
- Vypínač propojte s výhřevnou poduškou teprve tehdy, když jsou zásuvková spojka i výhřevná poduška zcela suché. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.



VAROVÁNÍ

- V žádném případě nezapínejte výhřevnou podušku proto, aby se vysušila! Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

6. Uložení

Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji uskladnit v originálním obalu. Odpojte zásuvkovou spojku a tím i vypínač od výhřevné podušky.



POZOR

Výhřevnou podušku nechte nejdříve zchladnout. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit. Během skladování na výhřevnou podušku nepokládějte žádné předměty, aby se nepoškodila.

7. Likvidace

Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Odstranění
Teplotní stupně nesvítí, zatímco - je vypínač řádně propojen s výhřevnou poduškou, - síťová zástrčka je propojena s funkční zásuvkou, - posuvný spínač je nastaven na stupeň 1, 2 nebo 3.	Bezpečnostní systém výhřevnou podušku nezvratně vypnul.	Zašlete výhřevnou podušku a vypínač do servisu.

9. Technické údaje

Viz typový štítek na výhřevné podušce.

