


beurer

MP 41

CZ

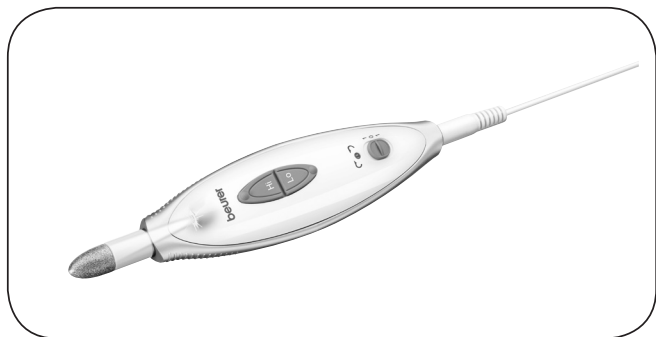

CZ Sada manikúry/pedikúry
Návod k použití

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro výrobek z našeho sortimentu. Naše jméno stojí za vysokohodnotnými a důkladně vyzkoušenými výrobky vysoké kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krevního tlaku/diagnózy, hmotnosti, masáže a vzduchu. Důkladně si prosím přečtěte návod k použití a respektujte jeho pokyny.

S přátelským doporučením
Váš team společnosti Beurer

1. Důležité pokyny

Tento návod k použití si důkladně přečtěte před prvním použitím, uschovejte ho pro pozdější použití a další uživatele.

POZOR:

- Při používání může na pleť nebo na nehtu dojít ke vývinu velkého tepla.
- Během ošetřování pravidelně kontrolujte výsledky. To platí obzvláště pro diabetiky, protože jsou méně citliví vůči bolesti a může u nich snáze dojít k poranění. Nástavce 1, 2, 3, 4 a 5, které jsou součástí dodávky, jsou vhodné pro diabetiky, protože při ošetření působí pouze plošně a nikoliv bodově. Nástavce 6 a 7 jsou oproti tomu méně vhodné pro diabetiky. Pracujte vždy velice opatrně. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.
 - Tento přístroj smí být použit pouze k účelu, k jakému byl vyvinut a způsobem uvedeném v návodu k použití. Každé nepřiměřené použití může být nebezpečné.
 - Při delším intenzivním použití přístroje, např. obrušování zrohovatělé kůže na nohou, se může přístroj silněji zahřát. Abyste zabránili popálení pokožky, musíte mezi jednotlivými použitími dodržovat delší pauzy. Z důvodu vlastní bezpečnosti průběžně kontrolujte zahřívání přístroje. To platí obzvláště pro osoby citlivé na teplo.
 - Přístroj je určen pouze pro osobní použití, nikoli k lékařským nebo komerčním účelům.

- Přístroj smí z hygienických důvodů používat pouze jedna osoba.
- Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny nepřiměřeným nebo špatným použitím.
- Před každým použitím se ujistěte, že na přístroji a příslušenství nejsou žádné viditelné škody. Pokud si nejste jisti, přístroj nepoužívejte a obraťte se na vašeho prodejce nebo na uvedenou zákaznickou adresu.
- Opravy elektrospotřebičů smí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami mohou vznikat značná nebezpečí pro uživatele.
- V případě defektů a provozních vad přístroj okamžitě vypněte.
- Opravy může provádět pouze zákaznická služba nebo autorizovaný prodejce.
- V žádném případě přístroj neopravujte sami!
- Přístroj používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez dohledu, zvláště když jsou v blízkosti děti.
- Nepoužívat u zvířat.
- Zabraňte jakémukoliv kontaktu s vodou (mimo čištění lehce navlhčenou látkou!). Voda se nikdy nesmí dostat do vnitřku přístroje. Přístroj nikdy neponořte pod vodu. V žádném případě nepoužívejte přístroj ve vaně, pod sprchou, v bazénu nebo nad vodou naplněným umývadlem. Jestliže se do přístroje dostala voda, odpojte jej ihned od elektrické sítě a obraťte se na svého specializovaného prodejce nebo zákaznický servis.
- Mějte přístroj v dostatečné vzdálenosti od teplých zdrojů.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou, polštáři atd.
- Přístroj nesmí být nepřetržitě v provozu déle než 20 minut. Abyste předešli přehřátí motoru, je po této době nutná pauza nejméně 15 minut.
- Ruce mějte při každém použití přístroje a zástrčky suché.
- Abyste vytáhli zástrčku ze sítě, netahejte za kabel ani přístroj.
- Zástrčka může být použita pouze v síti s napětím shodným, jaké je na ni uvedeno.
- Přístroj smí být používán pouze s dodávanou zástrčkou.
- Po každém použití, před každým čištěním a před každou výměnou části příslušenství vždy vytáhněte zástrčku.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely informace, jak mají přístroj správně používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

2. Uvedení do provozu

2.1 Akumulátorový provoz

Tento Manikúrní a pedikúrní přístroj je vybaven velmi kvalitními nástavci. Přiloženo je jedno posouvátko nehtové kůžičky a 7 nástavců se safírovým povlakem resp. s lešticí plstí s dlouhou životností.

Spolu s dvoustupňovou regulací rychlosti a levým a pravým chodem lze provádět profesionální péči nohou a nehtů, jakou si lze představit pouze u pedikéra.

Integrované osvětlení LED zajišťuje optimální světelné poměry při aplikaci.

3. Použití

3.1 Obecně

- Tento přístroj je určen k ošetření rukou (manikúře) a nohou (pedikúře).
- Zvolte požadovaný nástavec a nasadte ho lehkým tlakem na osu přístroje. Chcete-li nástavec sundat, tahejte od sebe za něj a přístroj, a to v přímé linii.
- Zapněte přístroj posunutím spínače dolů (levý chod, LED svítí červeně) nebo nahoru (pravý chod, LED svítí zeleně).
- Máte na výběr ze dvou rychlostních stupňů (Hi a Lo). Stiskněte příslušné tlačítko na přístroji
- Všechny nástavce, pilníky a brusky, jsou povrstveny safírovými zrny. Ta vám zaručuje extrémě dlouhou životnost a zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení.
- Nevyvíjejte silný tlak a vždy přiblížte nástavce opatrně co nejbližší na povrch, který ošetřujete.
- Pod lehkým tlakem vedte přístroj pomalu a krouživými pohyby přes oblasti, které ošetřujete.
- Dbejte na to, že nástavce na broušení, mají při namočení popř. vlhké kůži omezenou účinnost. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nepoužívali přístroj ve vodní lázni.
- Abyste zachovali přirozenou ochranu kůže, neodstraňujte zrohovatělou kůži úplně.
- Dbejte na to, aby se osa mohla otáčet vždy volně. Osa nesmí být trvale blokována, aby se přístroj příliš nezahřál a nepoškodil se.
- Po použití naneste na ošetřené partie zvlhčující krém.

Důležité:

Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. To platí hlavně pro diabetiky, protože nejsou tak citliví na ruku a nohu.

3.2 Nástavce

S nástavci zacházejte, prosím, opatrně. Jelikož se jedná o profesionální nástavce, mohli byste si jejich neodborným používáním způsobit poranění. Obzvláště při vyšších rychlostech doporučujeme obezřetné zacházení.

K přístroji jsou přibaleny tyto nástavce:



1 – Safírový disk, tenký

Jemná zrnka v safírovém disku pilují a pečují o nehty.

Zvláštní na tomto safírovém disku je, že rotuje pouze vnitřní disk a vrchní okraj zůstává pevný. To umožňuje přesné pilování nehtů, aniž by hrozilo nebezpečí spálení pokožky rychlou rotací disku.



2 – Safírový disk, hrubý

Hrubá zrnka v safírovém disku pilují a pečují o nehty. Pomocí tohoto nástavce si můžete zkrátit silné nehty sami pilováním. Protože rychle odstraňuje velké plochy nehtů, musíte s nástavcem zacházet opatrně.



3 – Safírový kužel

Odstraňuje suchou a zrohovatělou kůži nebo mozoly na chodidlech a patách a pečuje o nehty.



4 – Lešticí kužel

Vyhlazování a leštění okraje nehtů po pilování a čištění povrchu nehtů. Leštěte vždy krouživými pohyby a nenechte lešticí kužel na jednom místě, jelikož může třením vzniknout silné teplo.



5 – Válcová frézka

Obroušení zrohovatělého povrchu nehtů na nohou a jejich vyhlazení nahrubo. Válcovou frézku přiložte vodorovně k povrchu nehtu a krouživými pohyby pomalu odstraňte požadovanou vrstvu nehtu.



6 – Frézka plamínkového tvaru

K odstranění zarostlého nehtu. Plamínkovou frézku opatrně přiložte na ošetřované místo a odstraňte nutné části nehtu.



7 – Kulatá safírová frézka

Tento nástavec slouží k odstranění kuřích ok. Pokud tento nástavec používáte, uvědomte si, že při odstraňování kuřích ok rychle proniknete hluboko do kůže a tak můžete poškodit okostici.

Při pilování postupujte vždy od lůžka nehtu ke špičce!

Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. Jakmile je použití nepříjemné, ukončete ošetření.

4. Čištění/péče

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze sítě!

- Přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pokud je přístroj silněji znečištěn, můžete hadřík lehce navlhčit v mýdlové vodě.
- Nástavce můžete z hygienických důvodů dle potřeby čistit hadříkem popř. kartáčkem navlhčeným v alkoholu. Potom je prosím pečlivě usušte.
- Nenechte přístroj spadnout.
- Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda. Pokud se tak někdy stane, použijte přístroj teprve tehdy, je-li opět zcela suchý.
- K čištění nepoužívejte žádný chemický čistič nebo čisticí prostředek.
- Přístroj a zástrčku nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin.

5. Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



