


INFORMAZIONI

- Durante il trattamento sentirete i vostri denti leggermente sensibili, ciò è perfettamente normale.
- Un efficace rassodamento e tonificazione del collo si basano su un massaggio stimolante leggero e delicato dei muscoli del vostro collo. In caso di fastidio, aggiungere altro gel conduttore, diminuire l'intensità premendo il pulsante -, o rimuovere l'unità dall'area da trattare.
- Usare sempre il Tonificatore collo 60 Second associato al gel conduttore. Per acquistare altro gel conduttore, chiamare il Servizio Assistenza Clienti al seguente numero: +44 (0) 1242 702345.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido. NON usare solventi o detergenti.
- NON immergere l'unità nell'acqua.
- NON smontare o riparare il prodotto. Per qualsiasi eventuale problema nell'utilizzazione del prodotto, contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.
- Le componenti interne dell'apparecchio non richiedono alcuna manutenzione da parte dell'utente.
- Se l'unità è danneggiata, non usarla. In caso di guasto, Rio o il suo distributore autorizzato o un elettricista qualificato deve sostituire l'unità per evitare qualsiasi rischio.
- NON usare in prossimità di apparecchiatura ad onde corte o forni a microonde.
- Se il prodotto funziona in modo anormale è possibile che vi sia qualche interferenza elettromagnetica esterna. È necessario eliminare tale interferenza e riavviare il prodotto per ripristinare il funzionamento corretto.
- Il vostro Tonificatore Collo 60 Second è conforme alle recenti Norme sulla sicurezza cosmetica dell'UE ad uso dei consumatori.

INFORMAZIONI

- Durante il trattamento sentirete i vostri denti leggermente sensibili, ciò è perfettamente normale.
- Un efficace rassodamento e tonificazione del collo si basano su un massaggio stimolante leggero e delicato dei muscoli del vostro collo. In caso di fastidio, aggiungere altro gel conduttore, diminuire l'intensità premendo il pulsante -, o rimuovere l'unità dall'area da trattare.
- Usare sempre il Tonificatore collo 60 Second associato al gel conduttore. Per acquistare altro gel conduttore, chiamare il Servizio Assistenza Clienti al seguente numero: +44 (0) 1242 702345.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido. NON usare solventi o detergenti.
- NON immergere l'unità nell'acqua.
- NON smontare o riparare il prodotto. Per qualsiasi eventuale problema nell'utilizzazione del prodotto, contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.
- Le componenti interne dell'apparecchio non richiedono alcuna manutenzione da parte dell'utente.
- Se l'unità è danneggiata, non usarla. In caso di guasto, Rio o il suo distributore autorizzato o un elettricista qualificato deve sostituire l'unità per evitare qualsiasi rischio.
- NON usare in prossimità di apparecchiatura ad onde corte o forni a microonde.
- Se il prodotto funziona in modo anormale è possibile che vi sia qualche interferenza elettromagnetica esterna. È necessario eliminare tale interferenza e riavviare il prodotto per ripristinare il funzionamento corretto.
- Il vostro Tonificatore Collo 60 Second è conforme alle recenti Norme sulla sicurezza cosmetica dell'UE ad uso dei consumatori.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

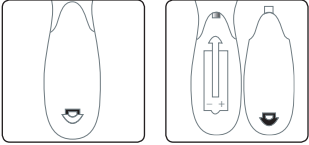

Per inserire la batteria, rilasciare il gancio e aprire il coperchio del vano batteria. Collegare una batteria alcalina PP3 9V accertandosi che la posizione del terminale + corrisponda a quella illustrata in figura. Verificare che il nastro di rilascio della batteria sia in posizione sottostante a essa, quindi rimettere il coperchio assicurandosi che sia ben fisso.

- In caso di non utilizzo dell'unità per un periodo prolungato, staccare la batteria.
- NON usare batterie ricaricabili.
- Accertarsi che le batterie vengano smaltite in maniera corretta secondo i regolamenti dell'autorità locale.

SMALTIMENTO



La direttiva sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2002/96/CE) è stata istituita per riciclare prodotti tramite le migliori tecniche di recupero per minimizzare l'impatto sull'ambiente, trattare qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare di aumentare le discariche.


Il prodotto è classificato come apparecchiatura Elettrica o Elettronica, quindi assicurarsi che al termine della vita di questo prodotto, sia smaltito nel modo adeguato in conformità con i requisiti delle autorità locali. NON gettare via con i normali rifiuti domestici.



Leggere le presenti istruzioni.



INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

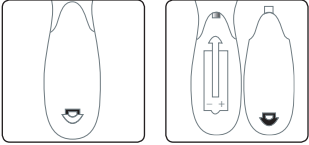

Per inserire la batteria, rilasciare il gancio e aprire il coperchio del vano batteria. Collegare una batteria alcalina PP3 9V accertandosi che la posizione del terminale + corrisponda a quella illustrata in figura. Verificare che il nastro di rilascio della batteria sia in posizione sottostante a essa, quindi rimettere il coperchio assicurandosi che sia ben fisso.

- In caso di non utilizzo dell'unità per un periodo prolungato, staccare la batteria.
- NON usare batterie ricaricabili.
- Accertarsi che le batterie vengano smaltite in maniera corretta secondo i regolamenti dell'autorità locale.

SMALTIMENTO



La direttiva sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2002/96/CE) è stata istituita per riciclare prodotti tramite le migliori tecniche di recupero per minimizzare l'impatto sull'ambiente, trattare qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare di aumentare le discariche.

Il prodotto è classificato come apparecchiatura Elettrica o Elettronica, quindi assicurarsi che al termine della vita di questo prodotto, sia smaltito nel modo adeguato in conformità con i requisiti delle autorità locali. NON gettare via con i normali rifiuti domestici.



Leggere le presenti istruzioni.



SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande o problemi nell'utilizzo del prodotto, chiamare il nostro servizio di assistenza Clienti al seguente numero di telefono: +44 (0) 1242 702345 oo inviare una e-mail al seguente indirizzo: online@riobeauty.com

Per registrare la vostra garanzia, valida 2 anni, visitare il sito: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Rio, Dezac e Tonificatore Collo 60 Second sono marchi registrati di Dezac Group Ltd
© The Dezac Group Ltd 2012,
PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET

www.riobeauty.com

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande o problemi nell'utilizzo del prodotto, chiamare il nostro servizio di assistenza Clienti al seguente numero di telefono: +44 (0) 1242 702345 oo inviare una e-mail al seguente indirizzo: online@riobeauty.com


Per registrare la vostra garanzia, valida 2 anni, visitare il sito: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Rio, Dezac e Tonificatore Collo 60 Second sono marchi registrati di Dezac Group Ltd
© The Dezac Group Ltd 2012,
PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET

www.riobeauty.com



60 SECOND NECK TONER™

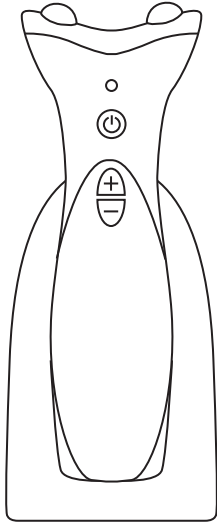

Con il Tonificatore Collo 60 Second potrete facilmente tonificare il mento e il collo per soli alcuni minuti al giorno.


Le delicate vibrazioni EMS (stimolazione muscolare elettronica) fanno tutto il duro lavoro al vostro posto, tonificando la muscolatura di supporto, aumentando la circolazione e migliorando il profilo del collo.

Sentirete gli effetti dopo appena una volta e vedrete i risultati dopo soli alcuni giorni.

1-IN-NECK2-1/2.0



60 SECOND NECK TONER™

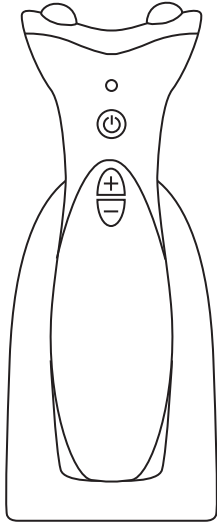


Con il Tonificatore Collo 60 Second potrete facilmente tonificare il mento e il collo per soli alcuni minuti al giorno.

Le delicate vibrazioni EMS (stimolazione muscolare elettronica) fanno tutto il duro lavoro al vostro posto, tonificando la muscolatura di supporto, aumentando la circolazione e migliorando il profilo del collo.

Sentirete gli effetti dopo appena una volta e vedrete i risultati dopo soli alcuni giorni.

1-IN-NECK2-1/2.0


PARTI DELL'APPARECCHIO

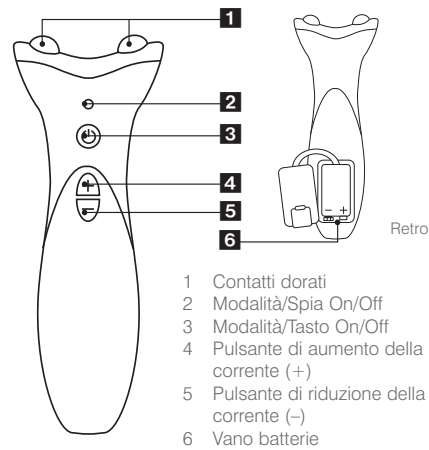

PRECAUZIONI

- **Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.**
- Il prodotto NON deve essere utilizzato da donne incinte o dalle seguenti categorie di persone: portatori di pacemaker, soggetti affetti da scompenso cardiaco, epilessia, diabete e sclerosi multipla, individui sottoposti a trattamenti per la bassa pressione sanguigna o recentemente sottoposti a intervento chirurgico.
- NON usare se avete le seguenti malattie della pelle: acne rosacea, acne con pustole, pelle sbucciata, sensibile o su cicatrici, nei o vene varicose.
- Se il gel venisse a contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, rivolgersi ad un medico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Consigliamo di usare il Tonificatore Collo 60 Second per un massimo di 60 secondi per ognuna delle aree da trattare e 3 minuti in totale per sessione.

PARTI DELL'APPARECCHIO

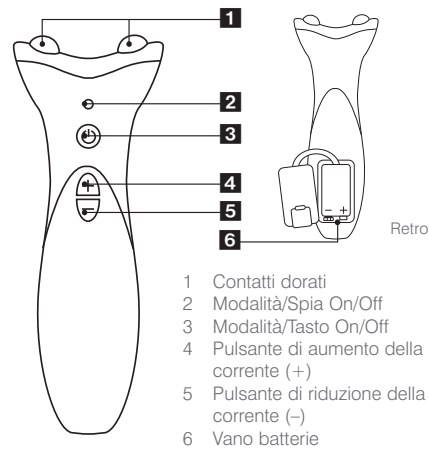

PRECAUZIONI

- **Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.**
- Il prodotto NON deve essere utilizzato da donne incinte o dalle seguenti categorie di persone: portatori di pacemaker, soggetti affetti da scompenso cardiaco, epilessia, diabete e sclerosi multipla, individui sottoposti a trattamenti per la bassa pressione sanguigna o recentemente sottoposti a intervento chirurgico.
- NON usare se avete le seguenti malattie della pelle: acne rosacea, acne con pustole, pelle sbucciata, sensibile o su cicatrici, nei o vene varicose.
- Se il gel venisse a contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, rivolgersi ad un medico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Consigliamo di usare il Tonificatore Collo 60 Second per un massimo di 60 secondi per ognuna delle aree da trattare e 3 minuti in totale per sessione.


ISTRUZIONI

IMPORTANTE - PATCH TEST

Prima di iniziare, occorre SEMPRE eseguire un patch test su una piccola zona della pelle per vedere possibili reazioni della pelle. Attendere 24 ore. Se persiste l'irritazione, non continuare il trattamento.




FASE 1 È IMPORTANTE applicare una generosa quantità di gel conduttivo sui contatti dorati. Senza il gel, è improbabile che si avvertono delle contrazioni muscolari e il trattamento potrebbe causare la sensazione di piccole punture.

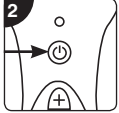


FASE 2 Accendere l'unità premendo il pulsante Modalità/On/Off, la spia sarà verde. L'unità si avvia con il programma 1, la spia Modalità/On/Off lampeggerà una volta.

NOTA: Quando viene acceso, l'apparecchio inizia sempre a funzionare al livello di potenza 1.

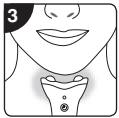

FASE 3 Quando entrambi i contatti dorati sono a contatto della pelle, collocare l'unità per la parte 1 da trattare.

NOTA: L'apparecchio utilizza delicati impulsi elettromagnetici e a bassi livelli di potenza alcune persone potranno non avvertire i muscoli contrarsi. Non emette alcun rumore né vibra.

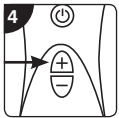

FASE 4 Premere e rilasciare il pulsante + per aumentare la potenza in singoli incrementi, sino ad un massimo di 16. Aumentare la potenza sino a sentire chiaramente i muscoli contrarsi. Se non ci si trova a proprio agio, ridurre la potenza in singoli decrementi, premendo e rilasciando il pulsante -.



FASE 5 Ripetere le fasi da 1 a 4 per le parti da trattare 2 e 3.

IMPORTANTE Riapplicare regolarmente il gel conduttore durante l'uso per evitare di sentire fastidio.


ISTRUZIONI

IMPORTANTE - PATCH TEST

Prima di iniziare, occorre SEMPRE eseguire un patch test su una piccola zona della pelle per vedere possibili reazioni della pelle. Attendere 24 ore. Se persiste l'irritazione, non continuare il trattamento.




FASE 1 È IMPORTANTE applicare una generosa quantità di gel conduttivo sui contatti dorati. Senza il gel, è improbabile che si avvertono delle contrazioni muscolari e il trattamento potrebbe causare la sensazione di piccole punture.

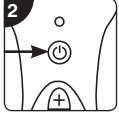


FASE 2 Accendere l'unità premendo il pulsante Modalità/On/Off, la spia sarà verde. L'unità si avvia con il programma 1, la spia Modalità/On/Off lampeggerà una volta.

NOTA: Quando viene acceso, l'apparecchio inizia sempre a funzionare al livello di potenza 1.

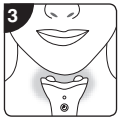

FASE 3 Quando entrambi i contatti dorati sono a contatto della pelle, collocare l'unità per la parte 1 da trattare.

NOTA: L'apparecchio utilizza delicati impulsi elettromagnetici e a bassi livelli di potenza alcune persone potranno non avvertire i muscoli contrarsi. Non emette alcun rumore né vibra.

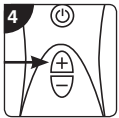

FASE 4 Premere e rilasciare il pulsante + per aumentare la potenza in singoli incrementi, sino ad un massimo di 16. Aumentare la potenza sino a sentire chiaramente i muscoli contrarsi. Se non ci si trova a proprio agio, ridurre la potenza in singoli decrementi, premendo e rilasciando il pulsante -.




FASE 5 Ripetere le fasi da 1 a 4 per le parti da trattare 2 e 3.

IMPORTANTE Riapplicare regolarmente il gel conduttore durante l'uso per evitare di sentire fastidio.

PARTI DA TRATTARE

Come per tutti i trattamenti tonificanti, è necessario un uso regolare. Usare quotidianamente per le prime settimane per avere un massimo beneficio. Trascorso questo tempo, dovrebbero essere necessarie due o tre volte a settimana per mantenere i risultati.

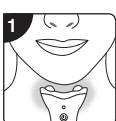

PARTE DA TRATTARE 1

Con entrambi i contatti dorati a contatto della pelle, collocare l'unità sotto il mento. Attenzione a non toccare il pomo d'Adamo. Tenere l'unità in posizione per 60 secondi.



PARTE DA TRATTARE 2

Con entrambi i contatti dorati a contatto della pelle, collocare l'unità sotto il mento, e a sinistra, vicino a dove sentite le pulsazioni. Tenere l'unità in posizione per 60 secondi.



PARTE DA TRATTARE 3


Con entrambi i contatti dorati a contatto della pelle, collocare l'unità sotto il mento, e a destra, vicino a dove sentite le pulsazioni. Tenere l'unità in posizione per 60 secondi.

Per iniziare, le pulsazioni generano una sensazione di formicolio e man mano che l'intensità aumenta, inizierete ad osservare la contrazione della muscolatura. Le contrazioni della muscolatura sono uniformi ed ogni contrazione inizierà con un lento innalzamento, tenere la pelle in posizione contratta per alcuni secondi e poi rilasciare.

Quando i contatti dorati vengono collocati correttamente, queste sensazioni di formicolio diminuiranno e si avvertirà una buona contrazione muscolare. Occorrerà regolare la posizione dei contatti dorati, finché sentirete delle contrazioni più forti.

PARTI DA TRATTARE

Come per tutti i trattamenti tonificanti, è necessario un uso regolare. Usare quotidianamente per le prime settimane per avere un massimo beneficio. Trascorso questo tempo, dovrebbero essere necessarie due o tre volte a settimana per mantenere i risultati.

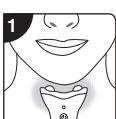

PARTE DA TRATTARE 1

Con entrambi i contatti dorati a contatto della pelle, collocare l'unità sotto il mento. Attenzione a non toccare il pomo d'Adamo. Tenere l'unità in posizione per 60 secondi.



PARTE DA TRATTARE 2

Con entrambi i contatti dorati a contatto della pelle, collocare l'unità sotto il mento, e a sinistra, vicino a dove sentite le pulsazioni. Tenere l'unità in posizione per 60 secondi.



PARTE DA TRATTARE 3


Con entrambi i contatti dorati a contatto della pelle, collocare l'unità sotto il mento, e a destra, vicino a dove sentite le pulsazioni. Tenere l'unità in posizione per 60 secondi.

Per iniziare, le pulsazioni generano una sensazione di formicolio e man mano che l'intensità aumenta, inizierete ad osservare la contrazione della muscolatura. Le contrazioni della muscolatura sono uniformi ed ogni contrazione inizierà con un lento innalzamento, tenere la pelle in posizione contratta per alcuni secondi e poi rilasciare.

Quando i contatti dorati vengono collocati correttamente, queste sensazioni di formicolio diminuiranno e si avvertirà una buona contrazione muscolare. Occorrerà regolare la posizione dei contatti dorati, finché sentirete delle contrazioni più forti.

PROGRAMMI

Il Tonificatore Collo 60 Second ha 16 livelli di intensità e 3 programmi di esercizi. Si ottengono migliori risultati variando il programma utilizzato. Consigliamo di usare il Programma 1 il giorno 1, seguito dal Programma 2 il giorno 2, seguito dal Programma 3 il giorno 3, poi ritornare al Programma 1 il giorno 4 e così via.

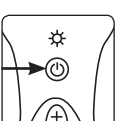

L'unità inizierà sempre dal Programma 1. Per selezionare un programma differente, ripremere brevemente il pulsante Modalità/ On/Off. La spia lampeggerà due volte indicando il Programma 2 o 3 volte per indicare il Programma 3.

La corrente si resetta ad un livello più basso ogni volta che si modifica il programma.

PROGRAMMA 1 – RASSODAMENTO


Contrazioni ritmiche della muscolatura per trattare i muscoli con un breve intervallo tra ogni pulsazione. La contrazione della muscolatura dura 2 secondi seguito da un intervallo di 3 secondi.

PROGRAMMA 2 – RASSODAMENTO ESTESO

Offre una contrazione della muscolatura estesa con un'intensità preprogrammata che varia per massimizzare l'esercizio. L'estesa contrazione della muscolatura dura 9 secondi seguita da un intervallo di 4 secondi.

PROGRAMMA 3 – TONIFICAZIONE CON LEGGERI COLPI

Rapida stimolazione per simulare una profonda azione massaggiante. L'azione massaggiante a pulsazioni dura 5 secondi seguita da un intervallo di 3 secondi.

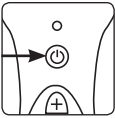


PER SPEGNERE L'UNITÀ

Premere e tenere premuto per 1,5 secondi il pulsante On/Off. Se l'unità rimane accesa, si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.

PROGRAMMI

Il Tonificatore Collo 60 Second ha 16 livelli di intensità e 3 programmi di esercizi. Si ottengono migliori risultati variando il programma utilizzato. Consigliamo di usare il Programma 1 il giorno 1, seguito dal Programma 2 il giorno 2, seguito dal Programma 3 il giorno 3, poi ritornare al Programma 1 il giorno 4 e così via.

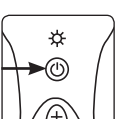

L'unità inizierà sempre dal Programma 1. Per selezionare un programma differente, ripremere brevemente il pulsante Modalità/ On/Off. La spia lampeggerà due volte indicando il Programma 2 o 3 volte per indicare il Programma 3.

La corrente si resetta ad un livello più basso ogni volta che si modifica il programma.

PROGRAMMA 1 – RASSODAMENTO


Contrazioni ritmiche della muscolatura per trattare i muscoli con un breve intervallo tra ogni pulsazione. La contrazione della muscolatura dura 2 secondi seguito da un intervallo di 3 secondi.

PROGRAMMA 2 – RASSODAMENTO ESTESO

Offre una contrazione della muscolatura estesa con un'intensità preprogrammata che varia per massimizzare l'esercizio. L'estesa contrazione della muscolatura dura 9 secondi seguita da un intervallo di 4 secondi.

PROGRAMMA 3 – TONIFICAZIONE CON LEGGERI COLPI

Rapida stimolazione per simulare una profonda azione massaggiante. L'azione massaggiante a pulsazioni dura 5 secondi seguita da un intervallo di 3 secondi.

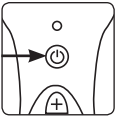

PER SPEGNERE L'UNITÀ

Premere e tenere premuto per 1,5 secondi il pulsante On/Off. Se l'unità rimane accesa, si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.