

60 SECOND FACE LIFT

ELEKTROSTIMULATOR MIŠIĆA LICA UPUTE ZA UPORABU



 the beauty specialists

!MJERE OPREZA

• **Ovaj proizvod morate koristiti odgovorno. Detaljno proučite Upute za uporabu prije korištenja uređaja i sačuvajte ih za buduću uporabu.**

• **Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva o uporabi proizvoda.**

• Uređaj NE SMIJETE koristiti za vrijeme trudnoće ili ako imate ugrađeni elektrostimulator srca (pacemaker), ako bolujete od srčanih bolesti ili poremećaja, ako primате terapiju za liječenje niskog tlaka, epilepsije, dijabetesa, multiple skleroze, ili poslije operativnih zahvata.

• Posebnu pozornost posvetite prilikom prelaženja s elektrodama u području oka. Pazite da kuglaste elektrode koje dodiruju kožu u svako vrijeme budu udaljene najmanje 1 cm od oka.

OPĆE INFORMACIJE

- Čistoću uređaja održavajte brisanjem pomoću vlažnog ubrusa.
- NE SMIJETE koristiti otapala ili deterdžente.
- Uređaj NE SMIJETE uranjati u vodu.
- Uređaj NE SMIJETE rastavljati ili popravljati. Korisnik NE SMIJE samostalno vršiti popravke dijelova uređaja. Ukoliko imate problema s radom uređaja, zatražite savjet ovlaštenog distributera i zastupnika.
- Ako uočite kvar ili oštećenje uređaja, nemojte ga koristiti.
- Uređaj NE SMIJETE rabiti u blizini drugih uređaja koji u radu odašilju kratke valove ili mikrovalove.
- Ukoliko uočite neočekivane probleme u radu uređaja, postoji mogućnost da se radi o vanjskim elektromagnetskim smetnjama, npr. zbog rada drugih električnih motora/zvučnika. U tom slučaju, premjestite uređaj i ponovno ga uključite kako bi uređaj mogao u potpunosti i nesmetano nastaviti s radom.

JAMSTVENI LIST I UVJETI JAMSTVA

Hvala Vam što ste kupili Rio proizvod. Svi Rio proizvodi imaju garanciju u trajanju od 2 godine od dana kupnje.

Molimo Vas da čuvate račun i ovjereni jamstveni list kako biste mogli ostvariti pravo na popravak ili zamjenu proizvoda unutar jamstvenog roka. Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom.

U jamstvenom roku Medikor d.o.o. se obvezuje da će:

- Omogućiti dijelove potrebne za popravak proizvoda
- Popraviti proizvod: Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja
- Zamijeniti proizvod: Ukoliko se proizvod ne može popraviti biti će zamijenjen novim proizvodom. Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja.

TIP/MODEL PROIZVODA:

SERIJSKI BROJ PROIZVODA:

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE:

OPIS KVARA:

IME I PREZIME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

Ovlašteni servis za RH:

Medikor d.o.o.
Tratinska ulica 58, Zagreb
Tel: 00 385 1 3689 699
E-mail: drogerija@medikor.hr

Zastupnik za Hrvatsku:

Medikor d.o.o.
OIB: 67863378582 Jarušćica 9E, Zagreb
Tel: 00 385 1 3689 699
E-mail: info@medikor.hr www.medikor.hr

Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.medikor.info

ZBRINJAVANJE DOTRAJALOG UREĐAJA



Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, EE otpad ne smijete odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, već imate obvezu takav otpad prikupiti odvojeno. Radi sprječavanja mogućeg štetnog utjecaja na okoliš ili na zdravlje ljudi, molimo Vas da EE otpad odvojeno prikupite te da ga predate ovlaštenoj osobi za skupljanje EE otpada, da bi se omogućila ponovna uporaba, rastavljanje i oporaba, uključujući i recikliranje EE otpada. Molimo da dotrajali uređaj odložite na otpad prema važećim zakonskim odredbama o odlaganju električnog i elektroničkog otpada. Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekrštenog spremnika za skupljanje otpada s kotačima i otisnuta je na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji. (Informacije o zbrinjavanju EE otpada zatražite pozivom na besplatni broj 0800 444 110 ili na www.eeotpad.com).

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Za sve dodatne informacije o uporabi uređaja i uvjetima jamstva, obratite se ovlaštenom distributeru i zastupniku.

Izjavu o sukladnosti, declaration of conformity možete naći na internetu, na adresi www.medikor.info

Zastupnik za RH, MEDIKOR d.o.o., Jarušćica 9E, 10020 Zagreb
tel.: 01 3689 666 fax.: 01 3666 000 e-mail: info@medikor.hr
www.medikor.hr www.shop-medikor.hr



www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2018
A készülékét gyártja a The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET
1-IN-FALIT-CRO/1.0

PROGRAM 3 – IONTOFOREZA (OSLOBAĐANJE I APSORPCIJA PRIPRAVKA)

Tijekom programa oslobađanja i apsorpcije pripravka, osjetit ćete neprekidne i brze električne impulse. Možete birati između 10 razina intenziteta. Preporučujemo Vam da započnete s najnižom razinom intenziteta za svako područje tretmana, te da postupno pojačavate intenzitet dok ne osjetite snažno peckanje.



VAŽNO: Kod programa oslobađanja i apsorpcije pripravka morate voditi računa o polaritetu elektroda. Pozitivna elektroda (+) mora biti na flasteru, dok negativna elektroda ostaje na koži.

1. KORAK

Koža mora biti čista i suha. Nemojte nanositi hidratantnu kremu ili losion. Vrh vrećice s flasterom otkinite po perforiranom rubu. Izvadite flaster iz plastičnog omota i odlijepite zaštitnu traku s flastera.

2. KORAK

Stavite jedan flaster na željeno područje tretmana. Drugi flaster stavite na suprotnu stranu lica.

3. KORAK

Nanesite obilnu količinu provodljivog gela na (-) kuglastu elektrodu. Uvijek nanesite dosta provodljivog gela kako bi elektrode što bolje prijanjale na kožu.

4. KORAK

Za odabir Programa 3, oslobađanje i apsorpciju pripravka, tri puta pritisnite gumb Program / Uključi / Isključi. Svjetlosni indikator zasvijetlit će tri puta kako bi označio odabir Programa 3.

5. KORAK

Držeći negativnu elektrodu na koži, a pozitivnu elektrodu na flasteru, polako i lagano prelazite naprijed i natrag preko flastera u trajanju od 60 sekunda. Pojačajte intenzitet dok ne osjetite ujednačeno peckanje.

6. KORAK

Ponovite postupak i preko drugog flastera. Nastavite tretman naizmjenice na jednom i drugom flasteru oko 10–30 minuta (5–15 minuta tretmana po flasteru).

7. KORAK


Flastere možete ostaviti na licu najviše sat vremena kako bi se apsorpcija lagano nastavila. Nakon što uklonite flaster, ostatak pripravka možete utrljati u kožu.

8. KORAK

Kako biste nakon uporabe uređaj isključili, pritisnite i oko dvije sekunde držite gumb Uključi /Isključi pritisnutim. **Napomena:** Uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta, ako ga pritom ne koristite.

NAUČITE SVOJE MIŠIĆE LICA

Dok se služite licem vjerovatno ste svjesni rada određenih mišića. Slijedeći vodič pomoći će Vam da odredite kada koristite određene mišiće.

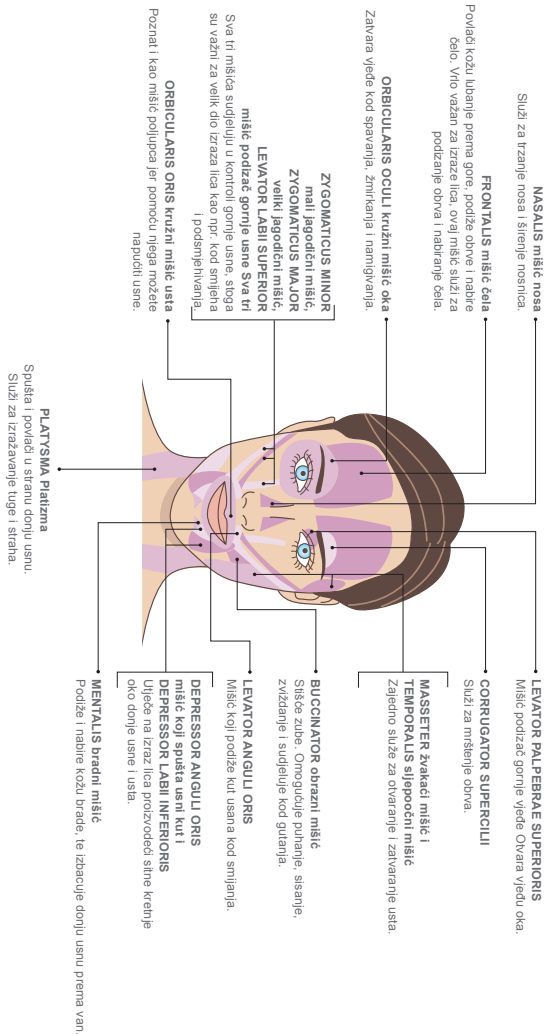


IONTOFOREZA

Iontoforeza je elektroterapijski postupak kojim se uz pomoć struje male jakosti duboko u kožu unose djelatne tvari pripravka, te se na taj način koža oporavlja i pomlađuje. Ovakav transdermalni način oslobađanja i apsorpcije djelatnih tvari povećava učinkovitost tretmana fokusiranih na određeno područje lica koje bi inače teško prodirjele u kožu.

LIFT transdermalni flasteri sadrže kolagen i retinol pozitivnog naboja koji djeluju protiv bora i protiv starenja. Kada stavite pozitivnu elektrodu na flaster, a negativnu na kožu, tada će se ove djelatne tvari izravno upiti u kožu.

Kratkotrajni vidljivi rezultati očit su skoro odmah.

Dugoročni učinak postići ćete redovitim tretmanima. Preporučujemo tretman transdermalnim flasterima s kolagenom i retinolom samo jedanput u 24 sata. Ako imate osjetljivu kožu, preporučujemo razmak od 48 sati između tretmana. Transdermalni flasteri oblikovani su tako da pristaju na područje ispod oka, preko čela, oko usta i preko brade.

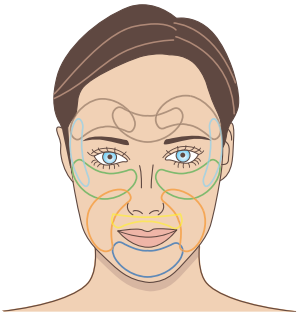

- ČELO
- BORE "SMIJALICE"
- ISPOD OKA
- PODRUČJE IZMEĐU NOSA I USTA
- BRADA
- GORNJA USNA (flaster s pregibom)

!MJERE OPREZA

- Uređaj NE SMIJETE koristiti na dijelovima kože zahvaćenim sljedećim oboljenjima: rosacea (crvenilo kože), gnojne akne, površinske ozljede kože, osjetljiva koža, ili na ožiljcima, madežima, te proširenim venama.
- Ako provodljivi gel ili flasteri slučajno dospiju u oči, odmah ih obilno treba isprati vodom. Ako se iritacija očiju nastavi, zatražite savjet liječnika.
- Držati van dosega djece i kućnih ljubimaca.

UVOD

Elektrostimulator mišića lica Rio Lift 60 Second Face Lift odlikuju 2 vrste tretmana za podizanje tonusa mišića, pomlađivanje lica i podizanje kože lica.




1) FARADIZACIJA je oblik elektroterapije u kojoj se koristi metoda elektrostimulacije mišića (EMS). Električni impulsi odrađuju sav naporni rad umjesto Vas dok nježno podižu tonus mišića, učvršćuju opušteno lice, te pomlađuju kožu.




2) IONTOFOREZA je oblik elektroterapije u kojoj se koriste transdermalni flasteri s kolagenom i retinolom. Flaster sadrži djelatne tvari koje se oslobađaju i apsorbiraju duboko u kožu radi smanjivanjapojave sitnih linija i bora, te povećanja elastičnosti kože.

SADRŽAJ PAKIRANJA

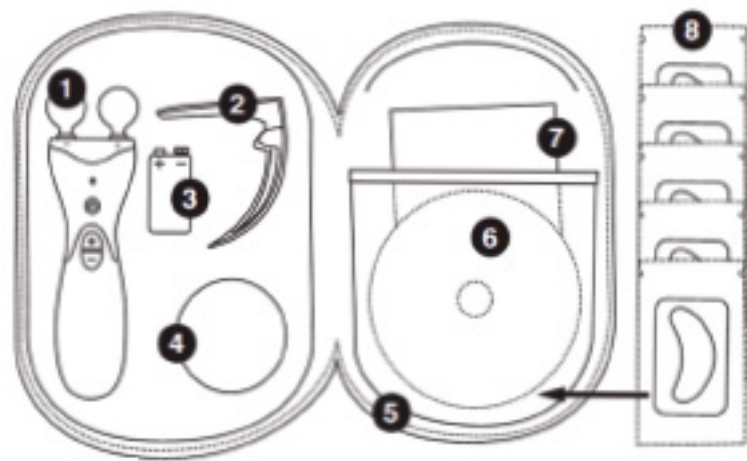


- 1 LIFT uređaj
- 2 Stalak
- 3 Baterija (PP3)
- 4 Provodljivi gel
- 5 Torbica za pohranu
- 6 DVD s uputama za korisnika
- 7 Detaljne Upute za uporabu
- 8 Flasteri s kolagenom i retinolom (5 kom.)


UPOZNAJTE SVOJ LIFTING UREĐAJ

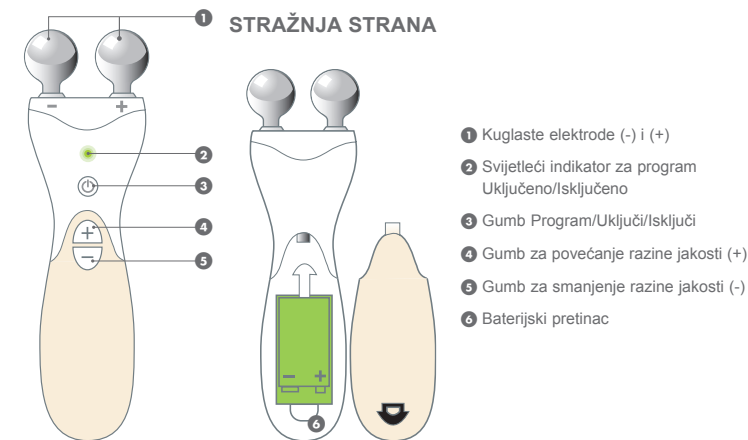

UPUTE O BATERIJI

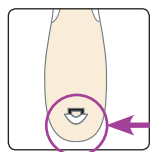

Za umetanje baterije u baterijski pretinac, povucite zaštitnu kvačicu i otvorite poklopac. Uložite alkalnu bateriju od 9V tip PP3 tako da oznaka polariteta + na bateriji bude usklađena s oznakom u baterijskom pretincu. Pritom pazite da vrpca za vađenje baterije ostane ispod baterije. Zatim vratite poklopac tako da u potpunosti prijanja na baterijski pretinac.

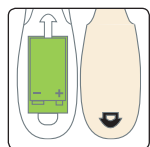


- Ukoliko uređaj na dulje vrijeme ne namjeravate koristiti, izvadite bateriju.
- NE SMIJETE koristiti punjive baterije.
- Prazne, istrošene baterije ne bacajte u komunalni otpad. Molimo odložite ih u posebno predviđene spremnike za odlaganje starih baterija.

KOŽNI TEST

VAŽNO: UVIJEK ispitajte djelovanje provodljivog gela na manje vidljivom dijelu kože, zbog moguće alergijske reakcije kože. Pričekajte 24 sata. Ako dođe do iritacije kože, odmah prekinite s tretmanom.

Također, ako dođe do alergijske reakcije prilikom prve primjene flastera s kolagenom i retinolom, odmah prekinite s tretmanom.


FARADIZACIJA

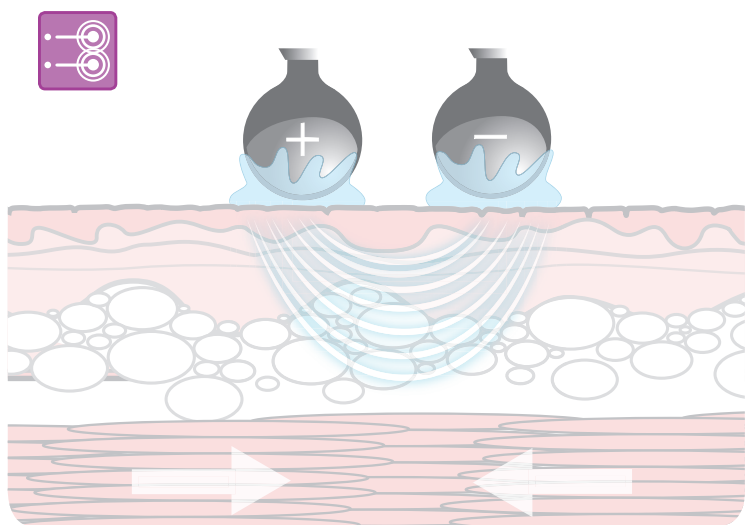

Faradizacija je oblik elektroterapije koja se u kozmetičkim salonima primjenjuje preko 40 godina, pri čemu se elektrostimulacijom mišića (EMS) postiže blaga kontrakcija i opuštanje mišića lica te njihovo podizanje, učvršćivanje i podizanje tonusa. Ovaj način elektrostimulacije među ostalim pojačava lokalnu cirkulaciju, opskrbljujući kožne stanice s više kisika, te brže uklanja toksine, nakon čega koža ostaje osvježena i pomlađena.

VAŽNO: Tijekom tretmana koristite zrcalo radi lakšeg određivanja položaja uređaja.

PODRUČJA ZA TRETMAN FARADIZACIJOM

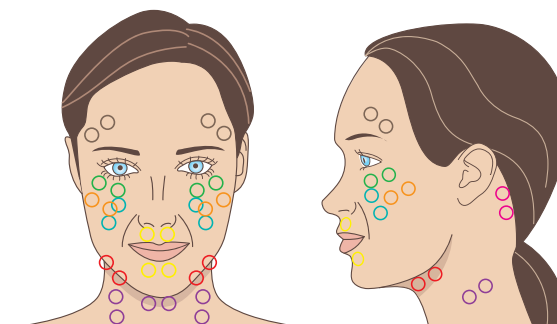


- ČELO I OBRVA
- PODRUČJE ISPOD OKA
- OBRAZI
- PODRUČJE NOSA I USANA
- DONJA USNA
- GORNJA USNA
- BRADA
- VRAT
- PODRUČJE IZA UHA



ČELO I OBRVA

Jednu elektrodu namjestite odmah iznad završetka obrve, u sredini između obrve i ruba rasta kose. Uređaj namjestite ukoso tako da druga elektroda bude smještena u sredini između obrve i ruba rasta kose.

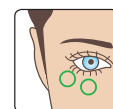

PODRUČJE ISPOD OKA

Kao vodič za postavljanje elektroda koristite rub gdje se nježna koža ispod oka spaja s očnom dupljom. Postavite jednu elektrodu na taj rub i točno ispod sredine oka. Druga elektroda bi trebala pratiti vanjski obris.



OBRAZI

Postavite elektrode ispod jagodične kosti i prateći dijagonalnu liniju jagodične kosti. Možda ćete morati lagano prilagoditi položaj uređaja kako bi odredili najbolji položaj za elektrode za vaše lice, koji ćete naći kada budete osjetili dovoljno snažnu kontrakciju uz manje peckanja.




PODRUČJE NOSA I USANA (NAZOLABIJALNO PODRUČJE)

Nazolabijalne bore javljaju se između nosa i kutova usta. Postavite jednu elektrodu na najspupčeni dio jagodice obraza, a drugu dijagonalno ispod nje prateći prirodnu liniju, tako da stoje paralelno s nazolabijalnim linijama. Ponovno napominjemo, možda ćete morati lagano prilagoditi položaj uređaja kako bi odredili najbolji položaj za elektrode za vaše lice, koji ćete naći kada budete osjetili najsnažniju kontrakciju mišića.




GORNJA I DONJA USNA

Postavite elektrode simetrično odmah iznad ruba usne. Pojačajte intenzitet kako biste dobro osjetili kontrakciju. Ponovite postupak odmah ispod donje usne. Ako Vam se učini da se usne povlače nejednako u jednu stranu, to je sasvim uobičajena pojava.

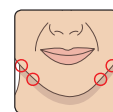

BRADA

Pratite nazolabijalnu liniju dijagonalno prema dolje i postavite elektrodu s obje strane nazolabijalne linije na rub vilice. Povečajte intenzitet dok ne nađete najbolji položaj. Možda ćete morati lagano podesiti položaj.

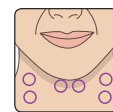

VRAT

Postavite elektrode u pravcu ispod ušne resice. Za postizanje najboljeg položaja, držite elektrode u okomitom pravcu, ali uređajem lagano klizite prema naprijed ili natrag dok ne budete osjetili najsnažniju kontrakciju mišića. Premjestite uređaj prema sredini vrata odmah ispod vilice. Povečajte intenzitet uređajem lagano klizite prema natrag dok ne nađete najbolji položaj.



PODRUČJE IZA UHA

Postavite elektrode odmah do ruba rasta kose najviše što možete a da pritom ne dodirujete uši. Ovaj je položaj odličan za snažnu kontrakciju kroz cijeli vrat.

UPORABA UREĐAJA

Za postizanje najboljih rezultata, preporučujemo Vam da tijekom prvih nekoliko tjedana svakodnevno vršite tretman faradizacije lica, te da pritom izmjenjujete programe 1 i 2. Nakon tog perioda, nastavite s tretmanima kako bi zadržali dobar tonus mišića. Na samom početku tretmana osjetit ćete lagano bockanje električnih impulsa, a kako se intenzitet povećava, primijetit ćete i kontrakcije mišića. Kontrakcije mišića su ujednačene i svaka kontrakcija će započeti sporim stezanjem, zatim će se nekoliko sekunda zadržati u kontrahiranom stanju, te će se na kraju mišić lagano opustiti. Ukupno postoji 17 razina intenziteta. Preporučujemo Vam da započnete s najnižom razinom intenziteta za svako pojedino područje odabrano za tretman, te da postupno pojačavate intenzitet dok ne osjetite kontrakciju mišića.

PROGRAM 1 – UČVRŠĆIVANJE

Ritmичne kontrakcije mišića za poboljšanje i oblikovanje mišića uz kratku stanku između svakog električnog impulsa. Kontrakcija mišića traje 2 sekunde, potom slijedi stanka u trajanju od 3 sekunde. Ukupno postoji 17 razina intenziteta. Preporučujemo Vam da započnete s najnižom razinom intenziteta za svako pojedino područje odabrano za tretman, te da postupno pojačavate intenzitet dok ne osjetite kontrakciju mišića.


PROGRAM 2 – PODIZANJE TONUSA LUPKANJEM

Brza elektrostimulacija mišića koja oponaša pokrete lupkanja koji se primjenjuju kod dubinske masaže. Pulsirajuća, lupkajuća masaža traje 5 sekunda, potom slijedi stanka u trajanju od 3 sekunde.



1. KORAK

Na obje elektrode nanosite obilnu količinu provodljivog gela kako bi kontakt s kožom bio što bolji.

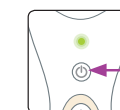


2. KORAK

Uređaj uključite kratkim pritiskom na gumb Program/ Uključi /Isključi, upalit će se zeleno svjetlo na svjetlosnom indikatoru. Uređaj će započeti s radom u Programu 1, svjetlosni indikator za Program/Uključeno / Isključeno zasvijetlit će jednom. **Napomena:** Za odabir Programa 2, još jedanput kratko pritisnite gumb Program/Uključi /Isključi. Svjetlosni indikator zasvijetlit će dva puta kako bi označio odabir Programa 2.




3. KORAK

Obje elektrode postavite na čistu kožu prvog područja odabranog za tretman.

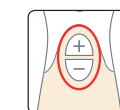


4. KORAK

Povećajte razinu intenziteta pritiskom na gumb (+), i prema potrebi premjestite elektrode dok ne osjetite mišićnu kontrakciju. Ukoliko se ne osjećate ugodno, smanjite jakost pritiskom gumba (-). **Napomena:** Potrebno je prilagoditi jakost intenziteta prilikom tretmana različitih dijelova lica.

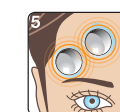

5. KORAK

Uređaj zadržite na istom mjestu u trajanju od 60 sekundi kako bi tretman tog područja bio izveden u cijelosti. Nakon 60 sekunda, smanjite razinu intenziteta prije prelaska na sljedeće područje za tretman.

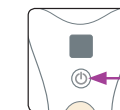

6. KORAK

Kako bi nakon uporabe uređaj isključili, pritisnite i 2 sekunde držite gumb Program/Uključi /Isključi pritisnutim. **Napomena:** Uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta, ako ga pritom ne koristite.

KORISNI SAVJETI

- Tijekom tretmana, mogli biste osjećati osjetljivost zuba, što je sasvim uobičajena pojava.
- Učinkovita tonifikacija i učvršćivanje lica temelji se na laganoj i blagoj stimulirajućoj masaži mišića lica. Ukoliko za vrijeme tretmana elektrostimulacijom osjetite i najmanju nelagodu, trebali biste nanijeti više provodljivog gela, smanjiti intenzitet pritiskom na gumb (-), ili premjestiti uređaj s područja na kojem se vrši tretman.
- Preporučujemo Vam da započnete s najnižom razinom intenziteta dok se ne naviknete na osjećaj tijekom elektrostimulacije.
- Za elektrostimulaciju mišića čela obično je potrebno odabrati višu razinu intenziteta. Pritisnite gumb (-) nekoliko puta prije premještanja uređaja na drugo područje lica.