

OSTRZEŻENIA

- NIE używaj na skórze z trądzikiem różowatym lub krostkowym, w przypadku gdy skóra jest podrażniona lub wrażliwa, ani na bliznach, pieprzykach i żyłakach.
- Jeżeli żel lub plastry wejdą w kontakt z oczami, dokładnie wypłucz je wodą. Jeżeli podrażnienie nie zniknie, skontaktuj się z lekarzem.
- Chroń ubrania i otoczenie.
- Tylko do użytku zewnętrznego.

NAUKA

Z wiekiem mięśnie twarzy tracą napięcie, a zmarszczki stają się bardziej widoczne. 60 Second Face Lift łączy dwie stosowane w salonach kosmetycznych technologie do ujędrniania, liftingu i odmładzania twarzy.

UJĘDRNIANIE PRĄDEM FARADYCZNYM wykorzystuje EMS (elektryczna stymulacja mięśni). Z pomocą żelu przewodzącego, impulsy elektryczne wykonują całą pracę za ciebie, gdyż delikatnie napinają skórę na twarzy.

INFUZJA GALWANICZNA (Iontoforeza) wykorzystuje delikatny mikroprąd do wprowadzania aktywnych składników z płatków z kolagenem i retinolem do skóry, w celu redukcji cienkich linii i zmarszczek oraz zwiększenia elastyczności skóry.

PROGRAMY I ZABIEGI

Program	Zabieg	Technologia	Poziomy natężenia	Żel/plastry
P1	WZMACNIANIE - rytmiczne 2-sekundowe skurcze mięśni; pomiędzy impulsami 3-sekundowe przerwy.	Faradyczna	1-17	Żel przewodzący
P2	UJĘDRNIANIE - Szybka stymulacja. Masaż trwa 5 sekund, a przerwa 3 sekundy.	Faradyczna	1-17	Żel przewodzący
P3	INFUZJA - Jontoforeza infuzyjna wykorzystuje mikroprądy do wprowadzania głęboko do skóry aktywnych składników, które naprawiają i odmładzają skórę.	Galwaniczna	1-10	Żel przewodzący i płatki z kolagenem i retinolem

UJĘDRNIANIE PRĄDEM FARADYCZNYM



PLAN ZABIEGÓW

Dla najlepszych rezultatów zalecamy stosowanie następującego planu codziennie przez kilka pierwszych tygodni, korzystając zamiennie z programu 1 i 2. Następnie korzystaj według potrzeb, aby zachować odpowiednie napięcie.

CZEGO POWINNAŚ SIĘ SPODZIEWAĆ?

- Impulsy powodują łagodne klucie, a wraz ze wzrostem natężenia poczuć można skurcze mięśni.
- Podczas zabiegu możesz odczuwać nadwrażliwość zębów - to zupełnie normalne.
- Efektywne wzmacnianie i ujędrnianie twarzy jest oparte na lekkim i delikatnym masażu mięśni twarzy. Jeżeli zaczniesz odczuwać dyskomfort, użyj więcej żelu przewodzącego, zmniejsz natężenie wciskając przycisk (-) lub odejmij urządzenie od miejsca zabiegu.
- Czoło wymaga zastosowania wyższego poziomu natężenia. Zanim przejdiesz do innego obszaru twarzy, wciśnij kilkakrotnie przycisk (-).

UJĘDRNIANIE PRĄDEM FARADYCZNYM



POLICZKI

Umieść głowice po obu stronach ukośnego brzegu kości policzkowej. Być może będziesz musiała lekko poprawić ułożenie szukając najlepszych punktów przyłożenia dla twojego kształtu twarzy (silniejsze skurcze i słabsze uczucie klucia).




OBSZAR NOSOWO-WARGOWY

Faldy nosowo-wargowe występują pomiędzy nosem a kącikami ust. Umieść jedną głowicę na wypukłej części policzka, a drugą ukośnie poniżej, równoległe do fałd nosowo-wargowych. Ponownie możesz potrzebować lekko dostosować pozycję, aż uzyskasz najsilniejsze skurcze.




GÓRNA I DOLNA WARGA

Ustaw głowice symetrycznie tuż nad brzegiem wargi. Drugą głowicę ułóż tak samo pod dolną wargą. Jeżeli wydaje ci się, że twoje wargi są nierówne, jest to zupełnie normalne.

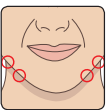

PODBRÓDEK

Śledź fałdkę nosowo-wargową ukośnie w dół i umieść głowicę po jednej ze stron kości szczękowej. Być może będziesz musiała lekko dostosować pozycję.

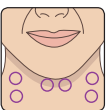

SZYJA


Umieść głowice na linii pod płakiem małżowiny usznej. Aby znaleźć najlepszą pozycję lekko przesuwaj jednostkę do przodu i do tyłu. Przejdź na środek szyi, tuż pod linią szczęki



ZA UCHEM

Umieść głowice zaraz za linią włosów, bez dotykania uszu. Jest to dobre ustawienie dla silnych skurczów przez linię szyi.

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE

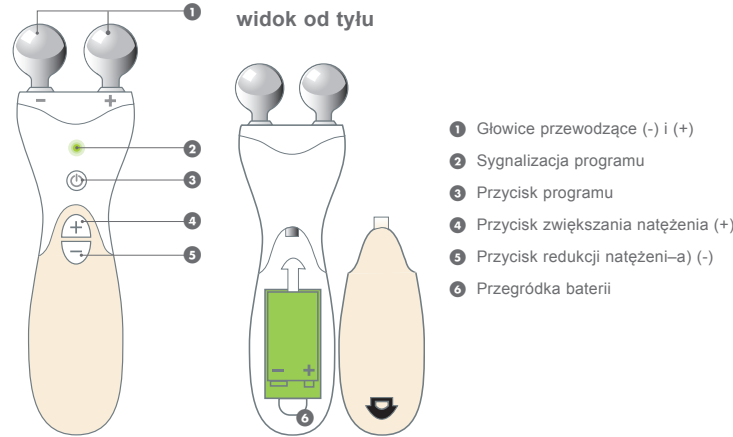


MONTAŻ BATERII I INFORMACJE

- Aby zamontować baterie zwinij zatrzask i otwórz pokrywkę. Zamontuj baterię alkaliczną PP3 9V z prawidłowo ułożonym biegunem dodatnim. Upewnij się, że taśma jest pod baterią i z powrotem zamontuj pokrywkę baterii.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię.
- NIE używaj akumulatorów.
- Zadbaj, aby baterie zostały usunięte w prawidłowy sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami.

TEST PŁATKOWY

Ważne: Zawsze wykonuj test płatkowy w niewidocznym miejscu na skórze, aby sprawdzić reakcję. Poczekaj 24 godziny. Jeżeli pojawi się podrażnienie, nie wykonuj zabiegu. Jeżeli zauważysz niepożądaną reakcję skóry podczas pierwszego użycia płatków z kolagenem i retinolem, nie kontynuuj.


UJĘDRNIANIE PRĄDEM FARADYCZNYM

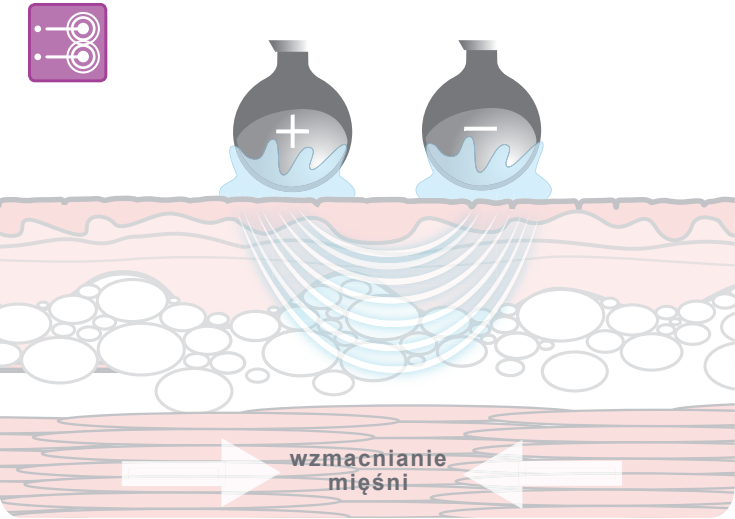

Już od ponad 40 lat w salonach kosmetycznych ujędrnianie prądem faradycznym wykorzystuje EMS (elektryczna stymulacja mięśni) do delikatnej aktywacji mięśni, w celu ujędrnienia i napięcia skóry. Stymulacja zwiększa również miejscowe krążenie, przez co do komórek dostaje się więcej tlenu, a toksyny są usuwane szybciej.


OBSZARY ZABIEGU

Porada: Podczas zabiegu możesz pomóc sobie lusterkiem w wyznaczaniu pozycji.

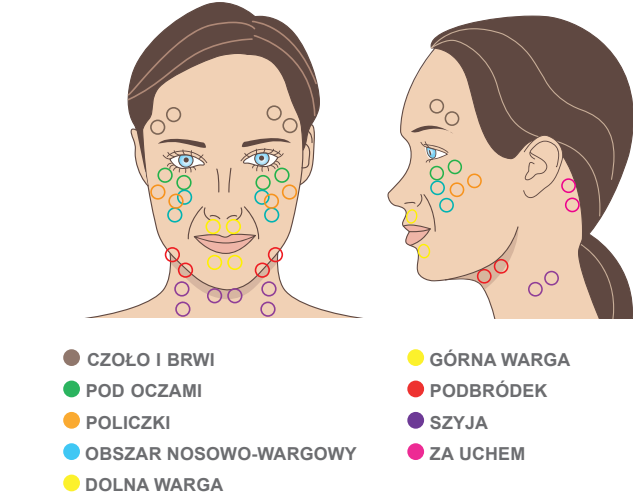

CZOŁO I BRWI

Umieść jedną głowicę bezpośrednio nad końcem brwi, na środku pomiędzy brwią a linią włosów. Ustaw jednostkę tak, aby druga głowica znajdowała się dokładnie między brwią a linią włosów.

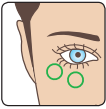


POD OCZAMI

Umieść jedną głowicę na linii, gdzie delikatna skóra styka się z kością oczodołu, a drugą pod częścią środkową oka. Druga głowica powinna być skierowana na zewnątrz.



KROK 1

Nałóż żel przewodzący na każdą głowicę. Aby kontakt ze skórą był dobry, należy nałożyć obfitą ilość żelu.

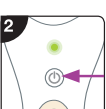

KROK 2


Włącz urządzenie wciskając przycisk programu. Kontrolka zapali się na zielono. Urządzenie rozpocznie od programu 1. Kontrolka programu zamiga.

Uwaga: Aby wybrać program 2, ponownie wciśnij przycisk programu. Zielone światło zamiga dwukrotnie, co oznacza wybór 2 programu.



KROK 3

Umieść obie głowice przewodzące na czystej skórze w miejscu zabiegu.

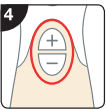

KROK 4


Zwiększ natężenie przy pomocy przycisku (+) i w razie potrzeby dostosuj pozycję głowicy przewodzących, aż poczujesz wyraźne skurcze. Jeżeli stymulacja będzie niekomfortowa, zmniejsz natężenie wciskając przycisk (-).

Pamiętaj: Wykonując zabieg w różnych miejscach na twarzy, należy oddzielnie ustawić natężenie.



KROK 5

Przytrzymaj jednostkę w pozycji przez 60 sekund, aby zakończyć zabieg w tym miejscu. Po 60 sekundach, przed przejściem do kolejnego obszaru, zmniejsz natężenie.

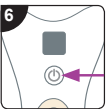

KROK 6

Po użyciu wyłącz urządzenie. Wciśnij i przytrzymaj przycisk programu przez 2 sekundy.

Pamiętaj: Pozostawione urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.