

60 SECOND **FACE LIFT**

bruksanvisning



the beauty specialists



VARNINGAR

- **Läs alla instruktioner noggrant och spara bruksanvisningen som referens i framtiden.**
- Den här apparaten kan användas av barn från åtta (8) år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk, rörelse- eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper, om personerna ges handledning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt, så att de förstår de risker som är förknippade med användningen. Apparaten är inte någon leksak. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan handledning.

VARNINGAR

- Använd INTE utrustningen om du är gravid eller om du har något av följande: pacemaker, hjärtsjukdom, behandlas för lågt blodtryck, epilepsi, multipel skleros eller om du återhämtar dig från en operation.
- Var särskilt försiktig när kulkontakterna befinner sig i närheten av ögonen. Kontrollera att kulkontakterna som rör vid huden alltid är minst 1 cm från ögonen.
- Använd INTE utrustningen på områden med hudsjukdomar som t.ex. rosacea, pustulös akne, skadad/känslig hud eller på ärr, födelsemärken eller åderbräck.

- Om gelén eller lapparna kommer i kontakt med ögonen ska du skölja noggrant med vatten. Sök läkare om irritationen kvarstår.
- Skydda kläderna och omgivningen.
- Endast för utvärtes bruk.

”för en naturlig
ansiktslyftning”

60 SECOND FACE LIFT





VETENSKAPEN

Allt eftersom vi åldras förlorar ansiktsmuskler sin toning och rynkorna blir tydligare. 60 Second Face Lift kombinerar två slags skönhets teknik som tonar, lyfter och föryngrar ansiktet.




FARADISK TONING använder EMS-teknik (elektrisk muskelstimulering). EMS-pulserna skickas genom en elektriskt ledande gelé och dessa pulser utför allt det hårda arbetet åt dig när de tonar och spänner ansiktsmuskulerna.




GALVANISK INFUSION (jontofores) är en teknik där små mikroströmmar används för att tillföra aktiva ingredienser från kollagen- och retinollapparna till huden. Metoden hjälper huden att reducera fina linjer och rynkor samtidigt som hudens elasticitet ökar.

KÄNN DIN ENHET

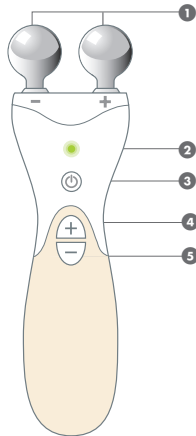


baksidan

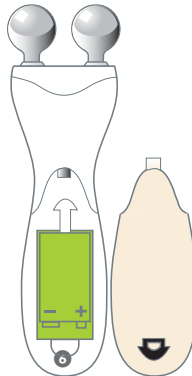


- ❶ Kulkontakter (-) och (+)
- ❷ Program/På/Av-lampa
- ❸ Program/På/Av-knapp
- ❹ Knapp för ökning av intensitet (+)
- ❺ Knapp för minskning av intensitet (-)
- ❻ Batterifack

INSÄTTNING AV BATTERI

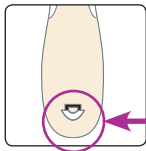

Sätt i batteriet genom att lossa klämman och öppna batteriluckan. Sätt in ett alkaliskt 9 V-batteri typ PP3 och kontrollera att pluspolen (+) sitter enligt figuren. Kontrollera att batteriets lossningsband sitter under batteriet och sätt sedan tillbaka batteriluckan.

- Ta ur batteriet om enheten inte ska användas under en längre tid.
- Använd INTE laddningsbara batterier.
- Se till att batterierna kasseras på rätt sätt enligt gällande bestämmelser.

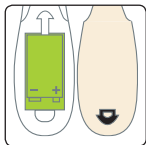

LAPPROV ✓


Viktigt: Utför alltid ett lappprov med strömledande gelé på ett diskret hudområde och kontrollera att ingen hudirritation uppstår. Vänta 24 timmar. Avbryt behandlingen om irritation uppstår.

Avbryt även behandlingen om hudirritation uppstår vid användning av kollagen- och retinollapparna.

PROGRAM OCH BEHANDLINGAR

Program	Behandling	Teknik	Intensitets-nivåer	Gelé/lappar
P1	FASTARE HUD – Rytmska muskelsammandragningar under två (2) sekunder med kort intervall på tre (3) sekunder mellan varje puls.	 Faradisk	1-17	Strömledande gelé
P2	PULSTONING – Snabba stimulerande pulser. Pulsmassagen pågår i fem (5) sekunder vilket följs av en paus på tre (3) sekunder.	 Faradisk	1-17	Strömledande gelé
P3	INFUSION – Vid jontofores-infusion används små mikroströmmar som för in de aktiva ingredienserna i huden för att reparera och föryngra den.	 Galvanisk	1-10	Strömledande gelé och lappar

FARADISK TONING

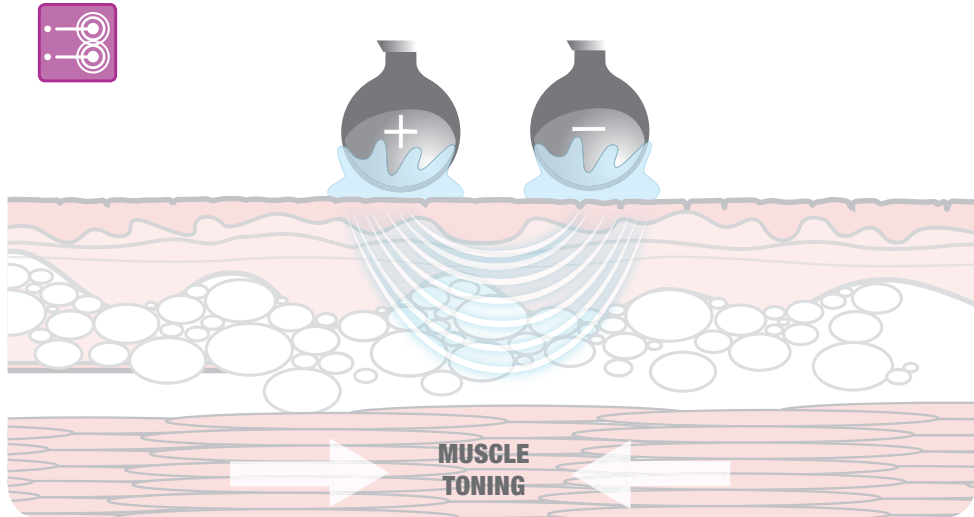

Faradisk ansiktstoning har använts i över 40 år i skönhetssalonger. Vid faradisk ansiktstoning används EMS (elektrisk muskelstimulering) som försiktigt drar samman och sedan avslappnar ansiktsmusklerna vilket hjälper toning och lyft samtidigt som ansiktsmusklerna spänns. Den här stimuleringen ökar också den lokala cirkulationen så att hudcellerna får mer syre och toxiner kan elimineras snabbare.



FARADISK TONING

BEHANDLINGSPROGRAM

För bästa resultat rekommenderar vi programmet för faradisk ansiktstoning varje dag under ett par veckor. Använd olika program varje dag – växla mellan program 1 and 2. Efter inledningsprogrammet kan du använda valfritt program för att bibehålla en god toning.


HUR KÄNNS DET?

I början kommer pulserna att ge en lätt stickande känsla och när intensiteten ökas kommer du att känna muskelsammandragningar.

- Dina tänder kan kännas en aning ömma under behandlingen, vilket är helt normalt.
- Effektiv ansiktstoning och fastare hud bygger på lätt och skonsam stimulerande massage på ansiktsmuskulerna. Om du upplever obehag kan du lägga till mer strömledande gelé eller sänka intensiteten genom att trycka på knappen (-), eller ta bort enheten från området som behandlas.
- Pannan kräver högre intensitetsnivåer. Tryck på knappen (-) flera gånger innan du går tillbaka till ansiktsområdet.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Tips: Använd en spegel under behandlingen så att positioneringen underlättas.

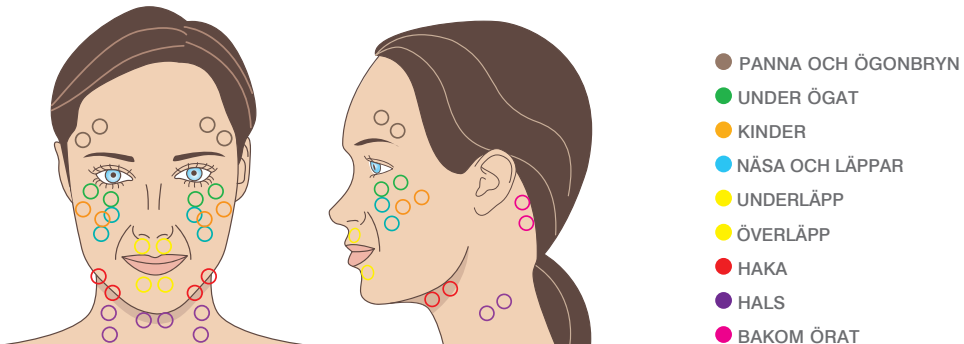


FARADISK TONING



PANNA OCH ÖGONBRYN

Sätt den ena kontakten precis ovanför ögonbrynets ände, mitt emellan ögonbrynet och hårfästet. Vinkla enheten så att den andra kontakten sitter mitt emellan ögonbrynet och hårfästet.

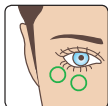

UNDER ÖGAT

Använd linjen där den känsliga huden under ögat möter ögonhållans ben som en guide. Placera den ena kontakten på den här linjen och direkt under ögats centrumpunkt. Den andra kontakten ska följa konturen utåt.



KINDER

Placera kontakten så att den vilar under kindbenet och följ kindbenet diagonalt. Du kan behöva justera läget en aning så att du hittar de bästa kontaktpunkterna för din egen ansiktsform. De bästa kontaktpunkterna är de punkter där du har en stark sammandragning men mindre stickande känsla.




NÄSA OCH LÄPPAR

Detta avser linjerna mellan näsan och mungiporna. Sätt den ena kontakten mitt på kinden och den andra kontakten snett nedanför. Flytta sedan den andra kontakten längs med den naturliga linjen mellan näsan och mungiporna. Även här kan du behöva justera läget tills att du hittar den kraftigaste sammandragningen.




ÖVER- OCH UNDERLÄPP

Placera kontaktarna symmetriskt precis ovanför läppens kant. Upprepa detta precis nedanför underläppen. Läpparna kan ibland verka dra ojämnt åt ena sidan – detta är naturligt.

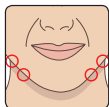

HAKA

Följ linjen från näsan till mungipan diagonalt nedåt och sätt kontakten på båda sidorna av hakan. Du kan behöva anpassa positionen en aning så att den passar dig.

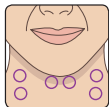

HALS

Placera kontaktarna efter varandra i en linje under örsnibben. Håll kontaktarna i linje men skjut enheten en aning framåt eller bakåt tills att du hittar den kraftigaste sammandragningen. Flytta till mitt på halsen precis under käken.



BAKOM ÖRAT


Placera kontaktarna precis bredvid hårfästet så högt upp som möjligt utan att röra vid öronen. Detta är ett bra läge för att få en kraftig sammandragning genom hela nacken.

FARADISK TONING



STEG 1

Lägg på strömledande gelé på båda kulkontakterna – det krävs en ganska riklig mängd för att få god kontakt med huden.

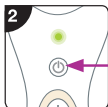

STEG 2


Starta enheten genom att trycka på Program/På/Av-knappen, varefter lampan lyser grönt. Enheten startar i program 1 och Program/På/Av-knappen blinkar en gång.

Observera: Om du vill byta till program 2 trycker du på Program/På/Av-knappen en gång till. Den gröna lampan blinkar två gånger vilket visar att program 2 har valts.



STEG 3

Gå till ren hud och placera båda kulkontakterna för den första behandlingszonen.

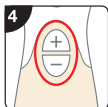

STEG 4


Öka intensiteten genom att trycka på knappen (+) och flytta kulkontakterna vid behov tills du känner tydliga sammandragningar i musklerna. Om du känner obehag minskar du intensiteten genom att trycka på knappen (-).

Observera: Anpassa intensiteten beroende på vilken del av ansiktet som du behandlar.



STEG 5

Håll enheten på plats under 60 sekunder för att slutföra behandlingen av ytan. Sänk intensiteten efter 60 sekunder innan du går vidare till nästa behandlingsområde.

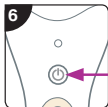


STEG 6

Stäng av enheten efter användningen. Tryck och håll in Program/På/Av-knappen under två (2) sekunder.

Observera: Om enheten lämnas påslagen kommer den automatiskt att stängas av efter 10 minuter.


FARADISK TONING

När du använder 60 Second Face Lift på ansiktet kan du känna att vissa muskler tränas. Ansiktets viktigaste muskler visas i figuren.

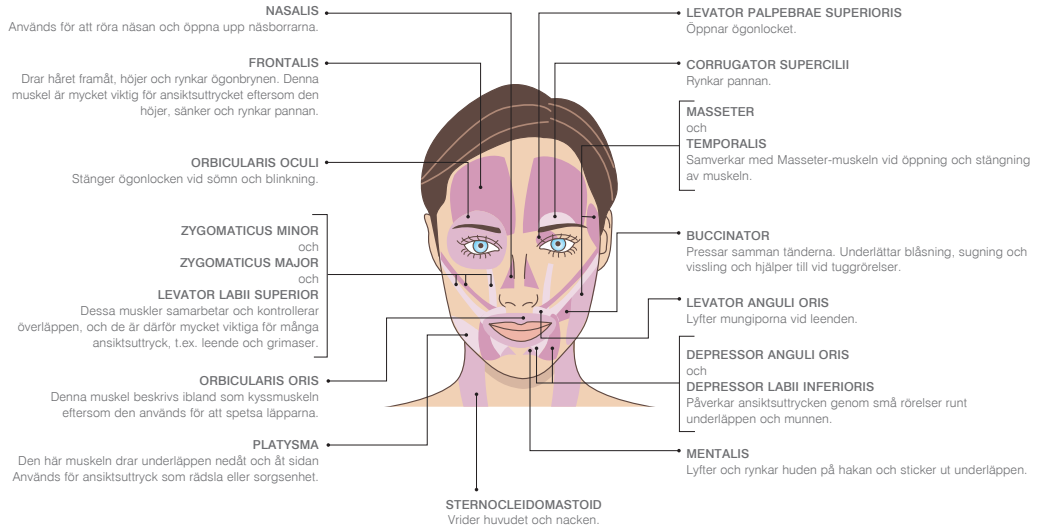

60 SECOND FACE LIFT

GALVANISK INFUSION (IONTOFORES)

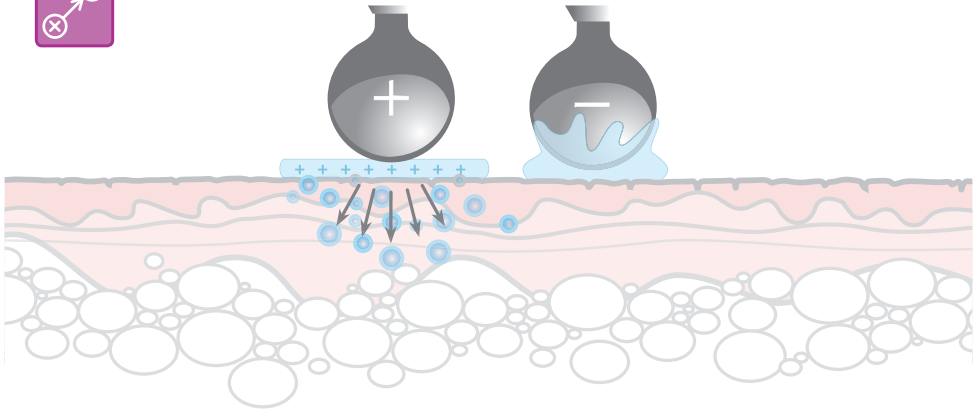

Lift Plus-lapparna innehåller plusladdad kollagen och retinol som motverkar rynkor och tecken på åldrande. När den plusladdade kontakten placeras på lappen och den minusladdade kontakten placeras på huden kommer de aktiva ingredienserna att "dras in" till huden.



GALVANISK INFUSION (JONTOFORES)

BEHANDLINGSPROGRAM

Vi rekommenderar att kollagen- och retinollappar bara används en gång under 24 timmar. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du väntar i 48 timmar mellan behandlingar.

HUR KÄNNES DET?

Lapparna är profiltillverkade för att passa under ögat, över pannan, runt munnen och över kinden. Infusionsprogrammet ger en oavbruten känsla med hög frekvens.


Vi rekommenderar att du startar på en låg intensitetsnivå vid varje behandlingszon och bygger upp intensiteten tills att du har en jämn stickande känsla.

LAPPINFORMATION

- Den största delen av infusionen sker under de första 5–15 minuterna på varje behandlingsområde, men lapparna kan vara kvar på ansiktet i upp till en timme.
- Retinol bryts ned lätt. Förvara därför lapparna på en sval, torr plats borta från solljus. De kan även förvaras i kylskåp så att du har en kylande gelélapp klar vid behandlingen.
- Retinol kan göra din hud känsligare för solen. Efter användning rekommenderar vi att du använder en solkräm med hög solskyddsfaktor.
- Se till att lapparna sitter fast ordentligt på ansiktet innan behandlingen så de inte skalas bort.
- Använd en försiktig rörelse när du flyttar kulkontaktarna över lappen och över huden.
- Lapparna är endast avsedda för engångsbruk.

BEHANDLINGSOMRÅDEN


- | | |
|----------------|-----------------------|
| ● PANNA | ● NÄSA OCH LÄPPAR |
| ● SKRATTRYNKOR | ● HAKA |
| ● UNDER ÖGAT | ● ÖVERLÄPP (vik lapp) |

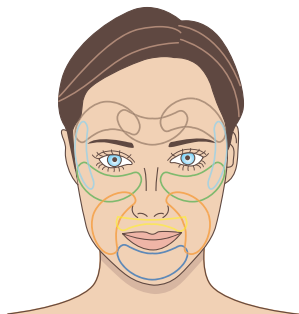

GALVANISK INFUSION (JONTOFORES)



VIKTIGT: Vid infusion måste du hålla reda på kulkontakternas pluspol och minuspol. Kulkontaktens pluspol (+) ska hållas mot lappen medan minuspolen (-) ska hållas mot huden.

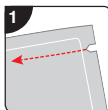

STEG 1

Rengör och torka huden noggrant. Riv längs den perforerade kanten på påsen med kollagen- och retinollappar. Ta en lapp från platsfodralet och skala bort skyddspapperet för att ta fram gelélappen.




STEG 2

Sätt en lapp på behandlingszonen. Placera den andra lappen på ansiktets motsatta sida.




STEG 3

Lägg på strömledande gelé på kulkontakten som är minuspol (-). Det krävs en ganska riklig mängd för att få god kontakt med huden.

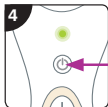

STEG 4

Välj program 3, Infusion, genom att trycka på Program/På/Av-knappen tre (3) gånger. Den gröna lampan blinkar tre gånger vilket visar att program 3 har valts.

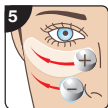


STEG 5

Placera kulkontakterna så att kulkontakten som är minuspol (-) rör vid huden och kulkontakten som är pluspol (+) hålls kvar på lappen. Höj intensiteten genom att trycka på knappen (+) tills att du känner en jämn stickande känsla. Infusionsbehandlingen har 10 intensitetsnivåer.



Observera: Om den stickande känslan blir obehaglig minskar du intensiteten genom att trycka på knappen (-).

GALVANISK INFUSION (JONTOFORES)

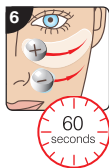


STEG 6

Flytta enheten fram och tillbaka långsamt och försiktigt längs lappen under 60 sekunder.



STEG 7

Vid längre infusionsbehandling kan lapparna lämnas kvar på ansiktet i upp till 60 minuter. När lapparna har tagits bort kan du försiktigt massera in eventuella rester i huden.

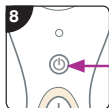

STEG 8

Stäng av enheten efter användningen. Tryck och håll in Program/På/Av-knappen i två (2) sekunder.

Observera: Om enheten lämnas påslagen kommer den automatiskt att stängas av efter 10 minuter.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Enheten kan rengöras genom avtorkning med en fuktig trasa. Använd INTE lösningsmedel eller rengöringsmedel.
- Enheten får INTE sänkas ner i vatten.
- Du får INTE ta isär eller reparera produkten. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Kontakta vår kundtjänst om du har problem med att använda produkten.
- Använd inte enheten om den är skadad.
- Använd INTE produkten nära kortvågs- eller mikrovågsutrustning.
- Om den här produkten beter sig på ett oväntat sätt är det möjligt att det beror på någon yttre elektromagnetisk störning t.ex. elektrisk motor/högtalare. Elektrostatisk urladdning kan göra att enheten stängs av. Stäng av/ta bort det som orsakar störningarna och starta sedan om apparaten.

BORTSKAFFANDE



Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE) direktiv (2002/96/EG) har antagits för att återvinna produkter genom att använda bästa tillgängliga återanvändning och återvinningsmetoder för att minimera påverkan på miljön, behandla eventuella farliga ämnen och undvika ökad deponi. Produkten är klassad som elektrisk eller elektronisk utrustning. Se därför till att denna produkt återvinns på korrekt sätt när den har förbrukats, i enlighet med de lokala myndigheternas föreskrifter. Produkten får INTE kastas i hushållsavfallet.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor eller om du har några problem, ring vår Kundtjänst på **0044 (0)1242 702345** eller skicka e-post till oss på: **online@riobeauty.com**

Registrera din två-årsgaranti online genom att gå till: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

Du kan beställa fler tillbehör från www.riobeauty.com eller via närmaste distributör.



REKOMMENDERAS FÖR DIG



Eye Refresh

Eye Refresh är en lindrande och uppiggande behandling för det känsliga området runt ögonen.

Eye Refresh använder Peltier-teknik med värmande termoterapi och kylande kryoterapi.

Värmingen hjälper absorptionen av Contour-ögonserum i hudskiktet samtidigt som den stimulerar inflödet av näringsmedel och syre. Kylningen drar samman huden och hjälper till att låsa in serumets aktiva ingredienser vilket motverkar mörka ringar och påsar under ögonen.

REKOMMENDAS FÖR DIG



Kollagen- och retinollappar

Plusladdad kollagen och retinol motverkar rynkor och tecken på åldrande. Motverkar de synliga tecknen på åldrande. Avsedda för användning tillsammans med utrustning för galvanisk infusionssterapi.



Antirynkmedel (koncentrat)

Peptider, vitamin E och B5. En lyxig förstärkning av ungdomlighet. Motverkar de synliga tecknen på åldrande. Stryks på ansiktet och halsen efter rengöring med lätta uppåtriktade drag. Parabenfri.



Strömledande gelé

Klar, luktfri gelé för användning på ansiktet och kroppen. Avsedd att användas tillsammans med toningssystemet.

SE



www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2013

Tillverkas av The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-FAL17-SE/1.0