

# 60 SECOND FACE LIFT

guide d'utilisation



 the beauty specialists

## TRAITEMENT GALVANIQUE PERMETTANT DE FAIRE PÉNÉTRER LES PRINCIPES ACTIFS DANS L'ÉPIDERME (IONOPHORÈSE)

- ÉTAPE 2**  
Positionnez un patch sur la zone de traitement. Collez l'autre patch au même endroit, de l'autre côté du visage.
- ÉTAPE 3**  
Appliquez du gel conducteur sur la boule de contact (-) : une quantité généreuse de gel est nécessaire pour assurer un bon contact avec la peau.
- ÉTAPE 4**  
Pour sélectionner le programme 3 (traitement permettant de faire pénétrer les principes actifs dans la peau), appuyez 3 fois sur le bouton Programme/On/Off. Le voyant vert clignote trois fois pour indiquer que le programme 3 a été sélectionné.
- ÉTAPE 5**  
Positionnez les boules de contact : la boule de contact (-) doit être en contact avec la peau et la boule de contact (+) doit être placée sur le patch. Augmentez l'intensité en appuyant sur le bouton (+) jusqu'à ressentir des fourmillements continus. Vous avez le choix entre 10 niveaux d'intensité pour le traitement permettant de faire pénétrer les principes actifs dans l'épiderme.  
**Remarque** : si, à un moment donné, le fourmillement devient inconfortable, réduisez l'intensité en appuyant sur le bouton (-).
- ÉTAPE 6**  
Déplacez lentement et doucement l'appareil de bas en haut et de haut en bas sur le patch pendant 60 secondes.
- ÉTAPE 7**  
Pour un traitement en profondeur, les patches peuvent rester en place sur le visage jusqu'à 60 minutes. Après avoir retiré les patches, faites pénétrer tous les résidus de gel dans la peau en effectuant un massage doux.
- ÉTAPE 8**  
Après utilisation, éteignez l'appareil. Appuyez sur le bouton Programme/On/Off et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. **Remarque** : si l'appareil reste allumé, il s'éteint automatiquement après 10 minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon humide. Ne PAS utiliser de solvants ni de détergents.
- Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne PAS démonter ni réparer. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, contactez notre service après-vente.
- Si l'appareil est endommagé, ne pas l'utiliser.
- Ne PAS utiliser à proximité d'appareils à ondes courtes ou à micro-ondes.
- Si vous constatez un fonctionnement inattendu de cet appareil, ceci peut être dû à des interférences électromagnétiques externes : moteurs électriques/haut-parleurs par ex. Une décharge électrostatique peut provoquer l'arrêt de l'appareil. Éloignez cette source d'interférences et redémarrez l'appareil pour rétablir un fonctionnement normal.

### ÉLIMINATION

 La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEE) (2012/19/EU) a été mise en œuvre en vue de recycler les produits en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accroître la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il NE doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

### SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler notre Service après-vente au : **01242 702345** ou nous adresser un e-mail à cette adresse : [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)  
Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur : [www.riobeauty.com/warranty\\_online.htm](http://www.riobeauty.com/warranty_online.htm)  
**Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site [www.riobeauty.com](http://www.riobeauty.com) ou contactez votre distributeur local.**



[www.riobeauty.com](http://www.riobeauty.com)  
© The Dezac Group Ltd 2018  
Fabriqué par The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, Angleterre GL53 7ET

1-IN-FAL7-F/1.1

## TRAITEMENT GALVANIQUE PERMETTANT DE FAIRE PÉNÉTRER LES PRINCIPES ACTIFS DANS L'ÉPIDERME (IONOPHORÈSE)



**PROGRAMME DE TRAITEMENT**  
Nous vous conseillons de n'utiliser qu'une seule fois les patches à base de rétinol et de collagène en 24 heures. Si votre peau est sensible, nous vous conseillons d'attendre 48 heures entre deux traitements.

### SENSATIONS ATTENDUES


La forme des patches est prévue pour épouser la zone située sous les yeux, sur le front, autour de la bouche et sur le menton. Lors de l'utilisation du programme permettant de faire pénétrer les principes actifs dans l'épiderme, vous sentez une haute fréquence en continu. Nous vous conseillons de débuter en sélectionnant un faible niveau d'intensité sur chaque zone de traitement et d'augmenter l'intensité jusqu'à ressentir des fourmillements continus.

### INFORMATIONS RELATIVES AUX PATCHS

- C'est au cours des 5-15 premières minutes que les patches libèrent le plus de principes actifs sur chaque zone de traitement, mais ils peuvent rester appliqués sur le visage jusqu'à 1 heure.
- Les patches rétinol se cassent facilement. Veuillez donc conserver vos patches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Vous pouvez également les conserver au réfrigérateur. Vous bénéficiez ainsi de l'effet refroidissant du gel du patch au cours du traitement.
- Le rétinol peut accroître la sensibilité de votre peau au soleil. Après utilisation, nous vous conseillons d'appliquer un écran solaire à indice élevé.
- Assurez-vous que les patches adhèrent bien au visage avant le traitement, afin qu'ils ne se décollent pas.
- Lorsque vous déplacez les boules de contact sur les patches et la peau, effectuer des mouvements doux.
- Les patches sont à usage unique.

### ZONES DE TRAITEMENT

- FRONT
- MENTON
- PATTES D'OIE
- LÈVRE SUPÉRIEURE (patch plié)
- DESSOUS DES YEUX
- ZONE NASO-LABIALE

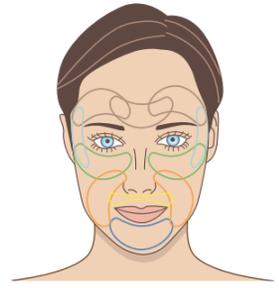


## TRAITEMENT GALVANIQUE PERMETTANT DE FAIRE PÉNÉTRER LES PRINCIPES ACTIFS DANS L'ÉPIDERME (IONOPHORÈSE)


- ÉTAPE 1**  
Nettoyez et séchez l'ensemble du visage. Déchirez le sachet contenant les patches collagène et rétinol au niveau de l'encoche. Prenez un patch dans le plastique de protection et décollez l'opercule pour découvrir la partie gélifiée du patch.

### TONIFICATION FARADIQUE

Vous utilisez 60 Second Face Lift pour raffermir votre visage. Vous devez donc connaître certains muscles sollicités par les différents traitements. Les principaux muscles du visage sont illustrés ici.

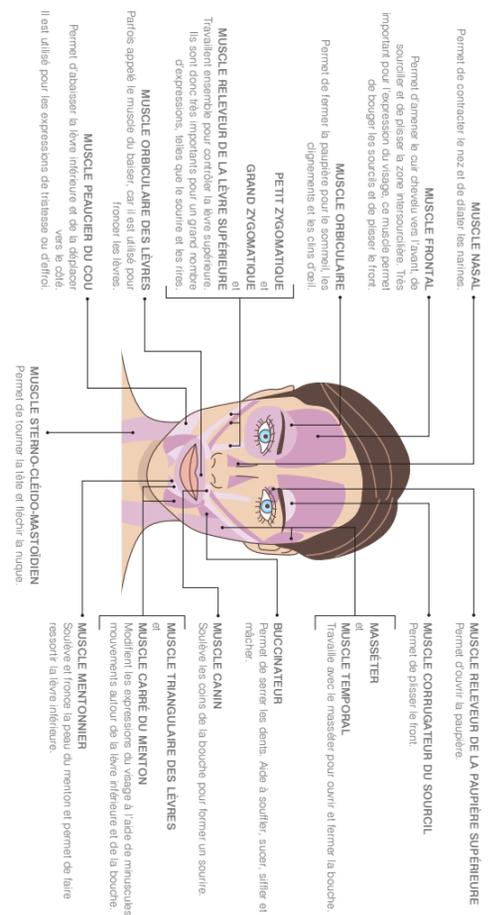

## TRAITEMENT GALVANIQUE PERMETTANT DE FAIRE PÉNÉTRER LES PRINCIPES ACTIFS DANS L'ÉPIDERME (IONOPHORÈSE)

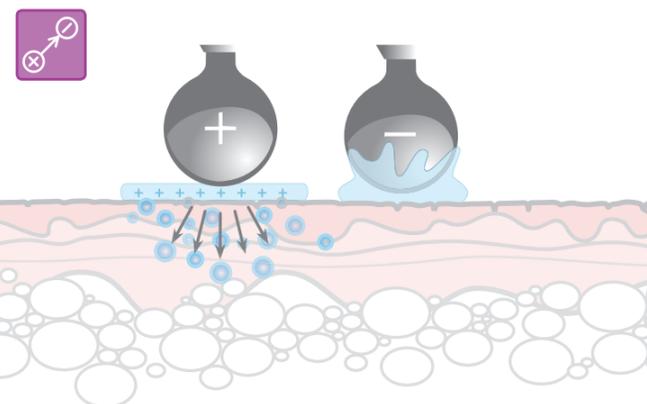

Les patches Lift Plus contiennent du collagène et du rétinol chargés positivement, à l'instar des agents anti-rides et anti-âge. Lorsque le contact, chargé positivement, est placé sur un patch et que la boule de contact, chargée négativement, est placée sur la peau, ces principes actifs sont directement « injectés » dans la peau.

## AVERTISSEMENTS

- **Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Ne PAS utiliser si vous êtes enceinte ou si vous répondez à l'une des conditions suivantes : si vous portez un stimulateur cardiaque, si vous souffrez de problèmes cardiaques, si vous suivez un traitement contre l'hypotension artérielle, si vous souffrez d'épilepsie, de sclérose en plaques ou si vous êtes en convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale.

## AVERTISSEMENTS

- Faire particulièrement attention à la position des boules de contact lorsque vous appliquez l'appareil près des yeux. Veiller à toujours garder une distance d'1 cm au moins entre les boules de contact en contact avec la peau et les yeux.
- Ne PAS utiliser sur des zones de troubles cutanés tels qu'une rosacée, une acné pustuleuse, une peau scarifiée, une peau sensible ou des cicatrices, des grains de beauté ou des varices.
- Si le gel ou les patches entrent en contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- Protéger vos vêtements et la zone qui vous entoure.
- Destiné à un usage externe uniquement.

### LA TECHNOLOGIE

Avec le temps qui passe, les muscles du visage perdent de leur tonus et les rides sont plus prononcées. 60 Second Face Lift associe deux technologies utilisées en institut pour aider à tonifier, retendre et rajeunir le visage.



La **TONIFICATION FARADIQUE** utilise la technologie de stimulation musculaire électrique (EMS). Grâce à l'action du gel conducteur, les impulsions EMS font tout le travail : elles tonifient et raffermissement, en douceur, les muscles fatigués du visage.



Le **TRAITEMENT GALVANIQUE PERMETTANT DE FAIRE PÉNÉTRER LES PRINCIPES ACTIFS DANS L'ÉPIDERME (ionophorèse)** utilise la technologie des micro-courants doux pour faire pénétrer les principes actifs contenus dans les patches à base de collagène et de rétinol dans la peau, afin de réduire visiblement rides et ridules et d'accroître l'élasticité de la peau.

## PROGRAMMES ET TRAITEMENTS

Programme	Traitement	Technologie	Niveau d'intensité	Gel/Patches
P1	<b>RAFFERMISSEMENT</b> - Contractions rythmées des muscles pendant 2 secondes, pour entretenir les muscles, avec bref intervalle de 3 secondes entre chaque impulsion.	Faradique	1-17	Gel conducteur
P2	<b>TONIFICATION TYPE TAPOTEMENTS</b> - Stimulation rapide. Action massante associée à des impulsions pendant 5 secondes, suivie par une pause de 3 secondes.	Faradique	1-17	Gel conducteur
P3	<b>PÉNÉTRATION DES PRINCIPES ACTIFS DANS L'ÉPIDERME</b> - La technologie de l'ionophorèse permet de faire pénétrer les principes actifs dans l'épiderme. Elle utilise de petits micro-courants doux pour acheminer les substances actives pour une action réparatrice. La peau est rajeunie en profondeur.	Galvanique	1-10	Gel conducteur et Patches

## TONIFICATION FARADIQUE



### PROGRAMME

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, nous conseillons d'utiliser le programme de tonification faradique du visage tous les jours pendant les premières semaines, en alternant quotidiennement les programmes 1 et 2. Utilisez ensuite ce traitement selon vos besoins, pour conserver un bon tonus.

### SENSATIONS PRODUITES

Les impulsions procurent tout d'abord une légère sensation de picotement puis, au fur et à mesure de l'augmentation de l'intensité, vous constaterez des contractions musculaires.

- Il est possible que vos dents deviennent légèrement sensibles pendant le traitement. Ceci est tout à fait normal.
- Le visage est efficacement tonifié et raffermi grâce à un massage stimulant doux et léger des muscles de votre visage. En cas de gêne, ajoutez du gel conducteur, réduisez l'intensité en appuyant sur le bouton (-) ou écartez l'appareil de la zone de traitement.
- Le front nécessite des niveaux d'intensité plus élevés. Appuyez plusieurs fois sur le bouton (-) avant de repasser à une zone du visage.

## TONIFICATION FARADIQUE



### JOUES

Positionnez la boule de contact en suivant l'inclinaison diagonale de la pommette, sous cette ligne. Il peut être nécessaire d'ajuster légèrement la position, afin de trouver les points de contact optimaux en fonction de la forme spécifique de votre visage. Vous devez ressentir une forte contraction et moins de fourmillements.




### ZONE NASO-LABIALE

Les lignes naso-labiales se situent entre le nez et les commissures des lèvres. Positionnez la boule de contact sur la pommette de votre joue et l'autre, en diagonale, dessous, en suivant la ligne naturelle et parallèle aux lignes naso-labiales de votre visage. Là aussi, il peut être nécessaire d'ajuster légèrement la position jusqu'à ressentir les contractions les plus intenses.



### LÈVRE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

Positionnez les boules de contact de façon symétrique, juste au-dessus du bord des lèvres. Positionnez les boules de contact de la même façon, juste au-dessous de la lèvre inférieure. Vos lèvres peuvent se contracter de façon irrégulière, sur un côté : il s'agit d'un phénomène normal.

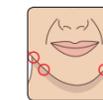


### MENTON

Suivez la ligne naso-labiale, en diagonale, sur sa partie inférieure, positionnez les boules de contact de chaque côté de l'os de la mâchoire. Il peut être nécessaire de modifier légèrement cette position.



### COU


Positionnez les boules de contact sur une ligne située sous le lobe de l'oreille. Pour trouver la meilleure position possible, maintenez les boules de contact alignées, mais faites légèrement glisser l'appareil vers l'avant jusqu'à ressentir les contractions les plus intenses. Déplacez les boules de contact vers le centre du cou, juste au-dessous du menton.

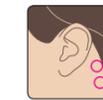

### ZONE SITUÉE DERRIÈRE L'OREILLE


Positionnez les boules de contact juste à côté de la démarcation de vos cheveux, aussi haut que possible, sans toucher vos oreilles. Position idéale pour des contractions vraiment intenses juste au niveau du décolleté.

## VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

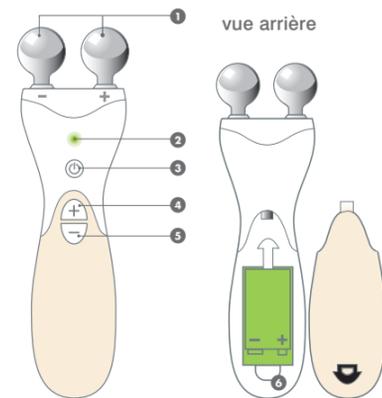

- 1 Boules de contact (-) et (+)
- 2 Voyant Programme/On/Off
- 3 Bouton Programme/On/Off
- 4 Bouton d'augmentation de l'intensité (+)
- 5 Bouton de réduction de l'intensité (-)
- 6 Compartiment à pile

### MISE EN PLACE DES PILES ET INFORMATIONS

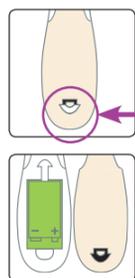


Pour insérer la pile, libérez le clip pour ouvrir le cache du compartiment à pile. Installez une pile alcaline PP3 de 9V en veillant à respecter la polarité +, comme illustré. Veillez à ce que le ruban de retrait de la pile passe sous la pile et remettez en place le cache du compartiment à pile.

• Si l'appareil reste inutilisé pendant une période prolongée, retirez les piles.

• Ne PAS utiliser de piles rechargeables.

• Veuillez vous assurer que les piles sont correctement éliminées, conformément aux exigences des autorités locales.


## TONIFICATION FARADIQUE

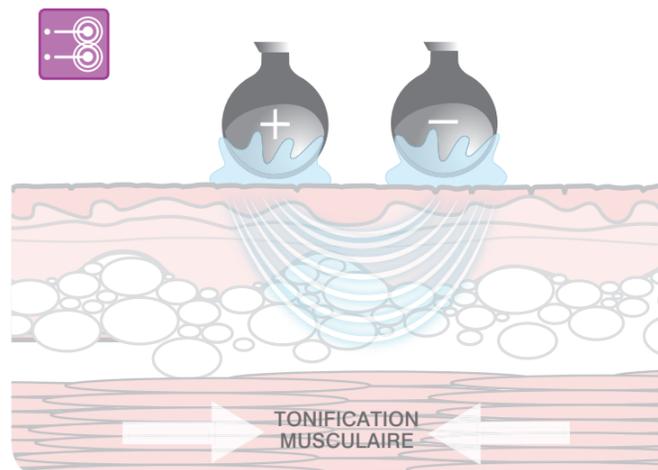

Utilisée depuis plus de 40 ans dans les instituts de beauté, la tonification faradique du visage utilise l'EMS (stimulation musculaire électrique) pour contracter et détendre, en douceur, les muscles du visage et contribuer ainsi à les tonifier, lifter la peau et raffermir les contours du visage. Cette stimulation accroît également la circulation en apportant davantage d'oxygène aux cellules de la peau et en accélérant l'élimination des toxines.

### ZONES DE TRAITEMENT

**Conseil :** utilisez un miroir lors du traitement pour vous aider à positionner correctement l'appareil.

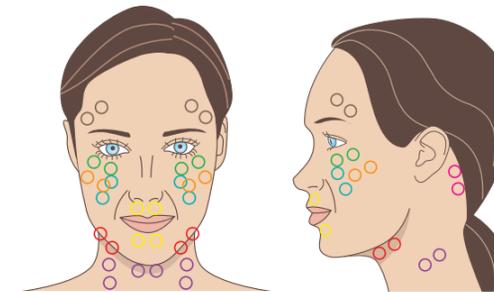

- FRONT ET SOURCILS
- DESSOUS DES YEUX
- JOUES
- ZONE NASO-LABIALE
- LÈVRE INFÉRIEURE
- LÈVRE SUPÉRIEURE
- MENTON
- COU
- ZONE SITUÉE DERRIÈRE L'OREILLE



### FRONT ET SOURCILS

Positionnez une boule de contact juste au-dessus de la pointe extérieure de votre sourcil : il doit être centré entre le sourcil et la démarcation des cheveux. Inclinez l'appareil de façon à ce que l'autre boule de contact soit centrée entre le sourcil et la démarcation des cheveux.



### DESSOUS DES YEUX

La ligne définie par la peau délicate de la zone située sous vos yeux, jusqu'au niveau de votre orbite, doit vous servir de repère : positionnez boule de contact sur cette ligne et directement sous votre œil, au milieu. L'autre boule de contact doit être placée sur le contour extérieur.



### ÉTAPE 1

Appliquez du gel conducteur sur chaque boule de contact : une quantité généreuse de gel est nécessaire pour assurer un bon contact avec la peau.



### ÉTAPE 2


Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Programme/On/Off. Le voyant vert. L'appareil programme s'allume sur le programme 1. Le voyant Programme/On/Off clignote une fois.

**Remarque :** pour sélectionner le programme 2, appuyez de nouveau sur le bouton Programme/On/Off. Le voyant vert clignote deux fois pour indiquer que le programme 2 a été sélectionné.



### ÉTAPE 3

Sur peau propre, positionnez les deux boules de contact sur la première zone de traitement.

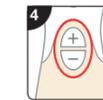

### ÉTAPE 4

Augmentez l'intensité en appuyant sur le bouton (+) et modifiez la position des boules de contact en les déplaçant, au besoin, jusqu'à ressentir des contractions musculaires franches. Si vous ressentez une gêne, diminuez l'intensité en appuyant sur le bouton (-).

**Remarque :** en fonction des différentes zones du visage traitées, vous devrez ajuster le niveau d'intensité.



### ÉTAPE 5

Appliquez l'appareil pendant 60 secondes pour terminer le traitement de la zone. Au bout de 60 secondes, diminuez l'intensité avant de passer à la zone de traitement suivante.



### ÉTAPE 6

Après utilisation, éteignez l'appareil. Appuyez sur le bouton Programme/On/Off et maintenez-le appuyé pendant 2 secondes.

**Remarque :** si l'appareil reste allumé, il s'éteint automatiquement après 10 minutes.

### TEST ÉPICUTANÉ ✓

**Important :** vous devez toujours effectuer un test épicutané avec le gel conducteur sur une partie peu visible de votre peau pour déceler les réactions cutanées éventuelles. Patientez 24 heures. En cas d'irritation, cessez le traitement.

De la même façon, si vous développez une réaction cutanée lors de la première utilisation des patches à base de collagène et de rétinol, cessez le traitement.