




Se si utilizza 60 Second Face Lift sul viso, ci si può rendere conto dell'allenamento di alcuni muscoli. Sono qui illustrati i principali muscoli facciali.

TONIFICAZIONE CON TECNOLOGIA FARADICA

INFUSIONE GALVANICA (IONTOFORESI)

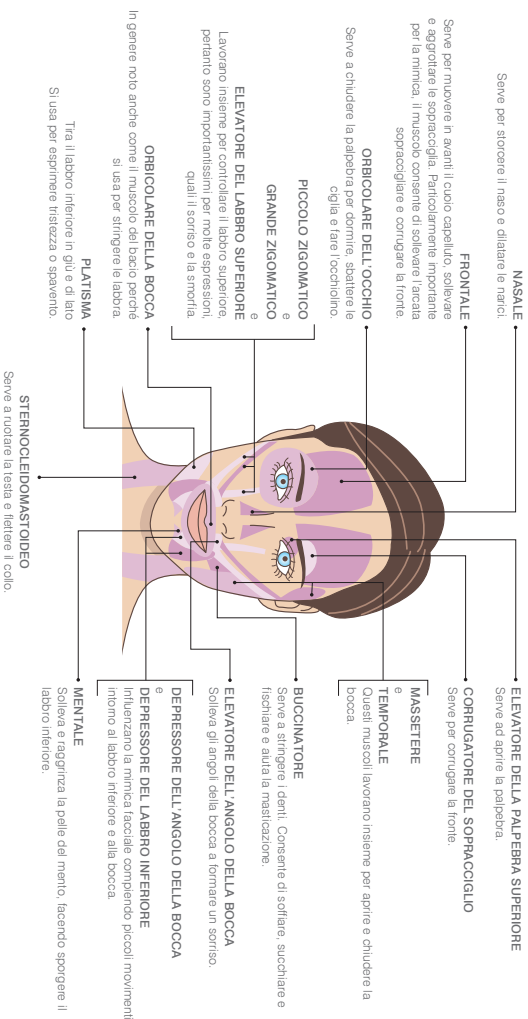

REGIME DEL TRATTAMENTO


Si consiglia l'utilizzo dei cerotti al collagene e retinolo solo una volta nell'arco delle 24 ore. In caso di sensibilità cutanea, si consiglia di fare passare 48 ore tra un trattamento e l'altro.

CHE COSA ASPETTARSI

I cerotti sono sagomati per adattarsi sotto l'occhio, sulla fronte, attorno alla bocca e sul mento. Il programma di infusione provoca una sensazione continua ad alta frequenza.


Si consiglia di iniziare con un livello di intensità basso su ciascuna area da trattare, che va ad aumentare finché non si avverte una sensazione di formicolio costante.

GALVANIC INFUSION (IONTOPHORESIS)

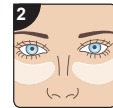


FASE 2

Posizionare un cerotto sull'area da trattare. Sistemare l'altro cerotto sull'altro lato del viso.

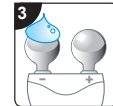


FASE 3

Applicare un'abbondante quantità di gel conduttivo sul contatto a sfera (-), per garantire un buon contatto con la pelle.

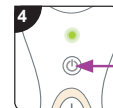

FASE 4


Selezionare il programma 3, Infusione, premendo tre volte il tasto Programma/On/Off. La spia verde lampeggerà tre volte per indicare che è stato selezionato il programma 3.

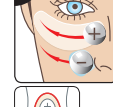

FASE 5


Posizionare i contatti a sfera in modo da tenere il contatto (-) sulla pelle e il contatto (+) sul cerotto. Aumentare l'intensità premendo il tasto (+) fino a sentire un formicolio costante. Sono 10 i livelli di intensità per il trattamento di infusione.

Nota: se in qualunque momento la sensazione è fastidiosa, diminuire l'intensità premendo il tasto (-).

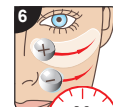


FASE 6

Con movimenti lenti e leggeri, spostare l'apparecchio avanti e indietro lungo il cerotto per 60 secondi.

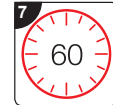

FASE 7

Per prolungare il trattamento di infusione, lasciare i cerotti sul viso fino a 60 minuti. Dopo avere tolto i cerotti, massaggiare delicatamente stendendo i residui sulla pelle.

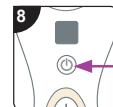

FASE 8

Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio. Tenere premuto il tasto Programma/On/Off per due secondi.

Nota: se l'apparecchio viene lasciato acceso, si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

CURA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio con un panno umido. NON usare solventi o detersivi.
- NON immergere l'apparecchio in acqua.
- NON smontare o riparare l'apparecchio. L'apparecchio non contiene componenti soggette a manutenzione da parte dell'utente. In caso di problemi nell'utilizzo del prodotto, contattare il nostro Reparto di Assistenza Clienti.
- In caso di danneggiamento, non usare l'apparecchio.
- NON usare l'apparecchio in prossimità di dispositivi o onde corte o a microonde.
- Se l'apparecchio funziona in modo anomalo è probabile che sia esposto a interferenze elettromagnetiche, ad esempio quelle di motori elettrici o altoparlanti. Scariche elettrostatiche possono provocare l'interruzione del dispositivo. In tal caso eliminare la sorgente di interferenza e spegnere e riaccendere l'apparecchio per ripristinare il normale funzionamento.

SMALTIMENTO



La direttiva sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) (2002/96/CEE) stabilisce che questi prodotti vengano riciclati secondo le migliori tecniche di recupero e riciclaggio disponibili per minimizzare l'impatto ambientale. Trattare eventuali sostanze pericolose ed evitare il crescente collocamento dei rifiuti in discarica. Questo prodotto è classificato come apparecchio elettrico o elettronico; pertanto occorre smaltirlo nel modo corretto e conformemente alle normative locali in materia. NON gettare via l'apparecchio con i rifiuti domestici.

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, contattare l'indirizzo: online@riobeauty.com

Per registrare la garanzia di due anni online, visitare il sito:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Per effettuare un nuovo ordine di accessori, visitare www.riobeauty.com o contattare il distributore locale.




www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2019
Prodotto da The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-FAL17-1/1.0

INFUSIONE GALVANICA (IONTOFORESI)

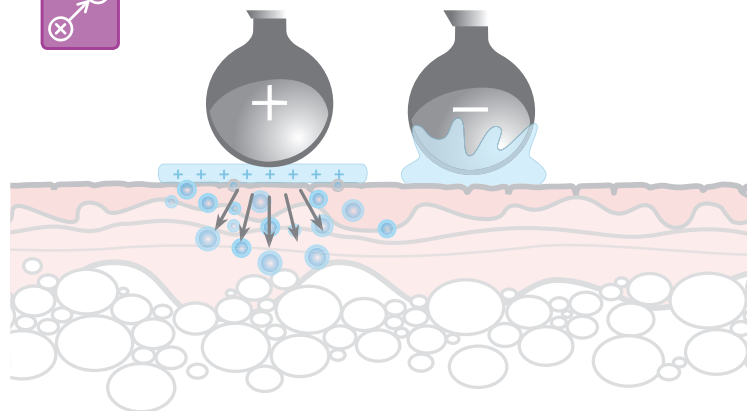

I cerotti Lift Plus contengono collagene a carica positiva e retinolo, con effetto antirughe e antietà. Il posizionamento del contatto positivo sul cerotto e di quello negativo sulla pelle favorisce l'assorbimento transdermico di questi ingredienti attivi.

INFORMAZIONI SUI CEROTTI

- Gran parte dell'infusione avviene nei primi 5-15 minuti su ciascuna area da trattare, ma i cerotti possono rimanere sul viso anche per un'ora.
- Il retinolo si decompone facilmente, pertanto è necessario conservare i cerotti in un luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi del sole. Si potrebbe preferire conservarli nel frigorifero per avere un cerotto con gel rinfrescante pronto per il trattamento.
- Il retinolo può rendere la pelle più sensibile ai raggi solari. Dopo l'uso, si consiglia di utilizzare una crema solare con fattore di protezione elevato.
- Prima del trattamento, assicurarsi che i cerotti siano bene aderenti al viso e non si staccino.
- Muovere delicatamente i contatti a sfera sul cerotto e sulla pelle.
- I cerotti sono monouso.

TREATMENT ZONES


- FRONTE
- ANGOLO ESTERNO DELL'OCCHIO (ZAMPE DI GALLINA)
- PARTE SOTTO L'OCCHIO
- ZONA NASOLABIALE
- MENTO
- LABBRO SUPERIORE (cerotto pieghevole)



INFUSIONE GALVANICA (IONTOFORESI)



IMPORTANTE: per l'infusione, è necessario tenere in considerazione la polarità dei contatti a sfera. Il contatto a sfera (+) deve rimanere sul cerotto mentre il contatto a sfera (-) rimane sulla pelle.

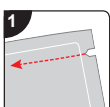

FASE 1

Pulire a fondo la pelle e asciugarla. Strappare lungo il bordo dentellato della bustina del cerotto al collagene e retinolo, togliere il cerotto dalla copertura di plastica e, per trovare il gel, staccare lo strato di protezione dal cerotto.

60 SECOND FACE LIFT

manuale utente



 the beauty specialists

AVVERTENZE

- **Leggere tutte le istruzioni con attenzione e conservarle per consultazioni successive.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenze, se controllati e se hanno ricevuto istruzioni in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e compreso i possibili pericoli ad esso connessi. Non lasciare giocare i bambini con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini se non sono controllati da un adulto.
- Questo dispositivo NON DEVE essere utilizzato su donne in stato di gravidanza o soggetti affetti dalle seguenti patologie: disturbi cardiaci, pazienti sottoposti a terapie per la pressione bassa, soggetti affetti da epilessia e sclerosi multipla o su pazienti convalescenti a causa di interventi chirurgici.
- Prestare particolare attenzione al posizionamento dei contatti a sfera in prossimità degli occhi. Assicurarsi che i contatti a sfera sulla pelle siano

AVVERTENZE

- sempre ad almeno 1 cm di distanza dall'occhio.
- Il dispositivo **NON DEVE** essere utilizzato su aree cutanee affette da patologie quali rosacea, acne pustolosa, abrasioni cutanee, cute sensibile oppure su zone su cui sono presenti cicatrici, nei o vene varicose.
- Se il gel o i cerotti vengono a contatto con gli occhi, risciacquare accuratamente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
- Proteggere gli indumenti e le zone circostanti.
- Solo per uso esterno.

L'EVIDENZA SCIENTIFICA

Con l'invecchiamento, i muscoli facciali perdono di tono e le rughe diventano sempre più definite. 60 Second Face Lift combina due tecnologie professionali che contribuiscono a tonificare, rassodare e ringiovanire il viso.




La TONIFICAZIONE FARADICA sfrutta la tecnologia dell'elettrostimolazione muscolare (EMS). Sono gli impulsi EMS che, insieme al gel conduttivo, agiscono delicatamente tonificando e rassodando i tratti del volto che presentano cedimenti.




L'INFUSIONE GALVANICA (iontoforesi) sfrutta la nuovissima e delicata tecnologia con microcorrenti per l'infusione transdermica di ingredienti attivi da cerotti al collagene e retinolo, contribuendo a ridurre l'insorgenza di linee sottili e rughe oltre che ad aumentare l'elasticità della pelle.

LEGENDA

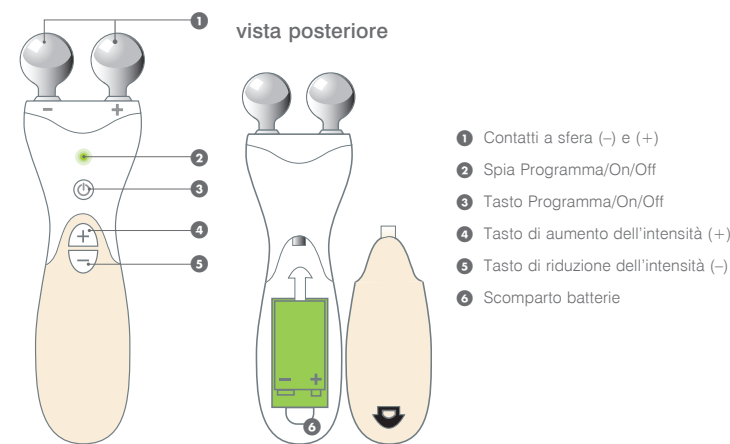

INFORMAZIONI SULL'INSERIMENTO DELLA BATTERIA

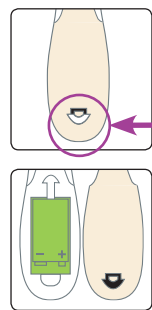

Per inserire la batteria, staccare il gancio e aprire il coperchio. Collegare una batteria alcalina PP3 da 9 V facendo attenzione che il terminale + sia come illustrato in figura. Accertarsi che il nastro di sgancio della batteria si trovi sotto ad essa e riporre il coperchio.

- Se l'apparecchio resta inutilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le pile.
- NON usare pile ricaricabili.
- Gettare via le pile attenendosi alle disposizioni previste dalle normative locali in materia.

PROVA ALLERGICA ✓

Importante: eseguire sempre un patch test con il gel conduttivo su una superficie poco visibile della pelle per monitorare eventuali reazioni cutanee. Attendere 24 ore. In caso di irritazione non continuare il trattamento.

Analogamente, se si manifesta una reazione cutanea al primo utilizzo dei cerotti al collagene e retinolo, non continuare il trattamento.

PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Programma	Trattamento	Tecnologia	Intensità livelli	Gel/cerotti
P1	RASSODAMENTO - Contrazioni muscolari ritmiche della durata di 2 secondi, per migliorare la tonicità dei muscoli con un breve intervallo di 3 secondi tra un impulso e l'altro.	 Faradica	1-17	Gel conduttivo
P2	TONIFICAZIONE CON LEGGERI COLPI - Rapida azione stimolante. L'azione del massaggio a impulsi dura cinque secondi, seguiti da una pausa di tre secondi.	 Faradica	1-17	Conductive Gel
P3	INFUSIONE - L'infusione a iontoforesi sfrutta le microcorrenti per trasportare in profondità gli ingredienti attivi che aiutano la rigenerazione e il ringiovanimento cutaneo.	 Galvanica	1-10	Gel conduttivo e cerotti

TONIFICAZIONE CON TECNOLOGIA FARADICA



REGIME DEL TRATTAMENTO

Per i migliori risultati, si consiglia di seguire il regime di tonificazione del viso con tecnologia faradica ogni giorno per le prime settimane, alternando quotidianamente i programmi 1 e 2. Dopodiché, utilizzare quando serve per mantenere una buona tonicità.

CHE COSA ASPETTARSI

All'inizio gli impulsi provocano una leggera sensazione di formicolio e, con il crescere dell'intensità, sarà possibile notare anche delle contrazioni muscolari.


- I denti potrebbero risultare leggermente sensibilizzati durante il trattamento: è perfettamente normale.
- La tonificazione e il rassodamento del viso dipendono dall'efficacia del leggero e delicato massaggio stimolante sui muscoli facciali. In caso di eventuale fastidio, aggiungere una quantità maggiore di gel conduttivo, ridurre l'intensità premendo il tasto (-) o rimuovere l'apparecchio dalla zona trattata.
- La fronte necessita di livelli di intensità maggiori. Premere il tasto (-) diverse volte prima di tornare all'area del viso.

TONIFICAZIONE CON TECNOLOGIA FARADICA



GUANCE

Appoggiare il contatto sotto lo zigomo, in modo che ne segua l'inclinazione in diagonale. È possibile che sia necessario regolare leggermente la posizione per trovare i punti di contatto migliori per la rispettiva forma del viso, consentendo l'intensità della contrazione senza troppo formicolio.

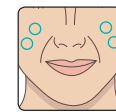


ZONA NASOLABIALE

Le linee nasolabiali sono quelle tra il naso e gli angoli della bocca. Posizionare un contatto sulla rotondità della guancia e l'altro sotto in direzione diagonale, seguendo la linea naturale e parallelamente alle linee nasolabiali. Anche in questo caso è possibile che si debba regolare leggermente la posizione, finché non si ottiene il massimo della contrazione.




LABBRO SUPERIORE E INFERIORE

Appoggiare i contatti in posizione simmetrica appena sopra il bordo del labbro. Ripetere l'operazione appena sotto il labbro inferiore. È normale che le labbra sembrino tirare in modo non uniforme da un lato.

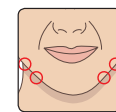


MENTO

Seguire la linea nasolabiale diagonalmente verso il basso e posizionare il contatto sul bordo della mascella in entrambi i lati. È possibile che sia necessario spostare leggermente la posizione.

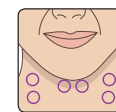

COLLO


Posizionare i contatti in linea sotto il lobo dell'orecchio. Per un posizionamento ottimale, tenere allineati i contatti ma fare scorrere leggermente l'apparecchio in avanti o indietro, finché non si ottiene il massimo della contrazione. Spostarsi verso il centro del collo appena sotto il profilo del mento.

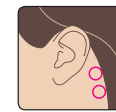

ZONA DIETRO L'ORECCHIO

Posizionare i contatti vicino all'attaccatura dei capelli il più in alto possibile, senza toccare le orecchie. In tal modo si può ottenere una contrazione molto intensa su tutto il collo.


TONIFICAZIONE CON TECNOLOGIA FARADICA

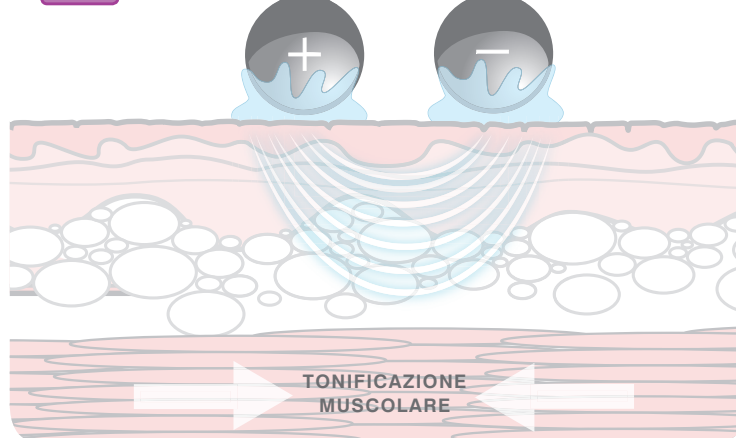

Praticata da oltre 40 anni nei saloni di bellezza, la tonificazione del viso con tecnologia faradica utilizza l'elettrostimolazione muscolare per contrarre e rilassare delicatamente i muscoli facciali, contribuendo a tonificare, rimodellare e rassodare. Questo tipo di stimolazione aumenta inoltre la circolazione localizzata, apportando maggiore ossigeno alle cellule cutanee e accelerando l'eliminazione delle tossine.

AREE DA TRATTARE

Consiglio: durante il trattamento, utilizzare uno specchio per consentire il posizionamento.

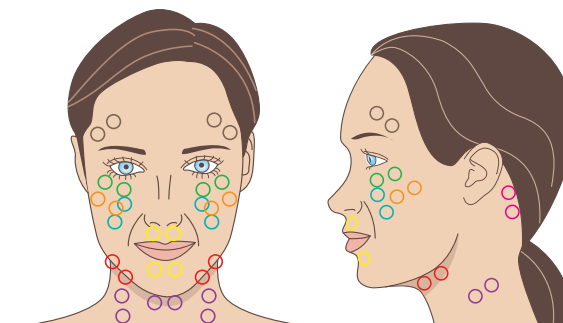


- FRONTE E ARCATA SOPRACCIGLIARE
- PARTE SOTTO L'OCCHIO
- GUANCE
- ZONA NASOLABIALE

- LABBRO INFERIORE
- LABBRO SUPERIORE
- MENTO
- COLLO
- ZONA DIETRO L'ORECCHIO




FRONTE E ARCATA SOPRACCIGLIARE

Posizionare un contatto poco sopra l'estremità del sopracciglio, centrato tra il sopracciglio e l'attaccatura dei capelli. Inclinare l'apparecchio in modo tale che l'altro contatto si posizioni a metà tra il sopracciglio e l'attaccatura dei capelli.

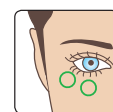


PARTE SOTTO L'OCCHIO

Seguire la linea su cui la pelle delicata sotto l'occhio incontra l'osso zigomatico e posizionarvi un contatto direttamente sotto il centro dell'occhio. L'altro contatto deve seguire il contorno verso l'esterno.

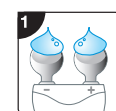

FASE 1

Applicare il gel conduttivo su ciascuno dei contatti a sfera: è necessaria una quantità generosa per garantire un buon contatto con la pelle.

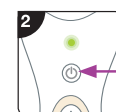

FASE 2

Accendere l'apparecchio premendo il tasto Programma/On/Off: la luce diventerà verde. L'apparecchio si accenderà nel programma 1 e la spia Programma/On/Off lampeggerà una volta.

Nota: per selezionare il programma 2, premere di nuovo il tasto Programma/On/Off. La spia verde lampeggerà due volte per indicare che è stato selezionato il programma 2.



FASE 3


Sulla pelle pulita, posizionare entrambi i contatti a sfera per la prima area da trattare.



FASE 4


Aumentare l'intensità premendo il tasto (+) e, se necessario, spostare la posizione dei contatti a sfera finché non si avvertono chiaramente delle contrazioni muscolari. Se la sensazione è fastidiosa, diminuire l'intensità premendo il tasto (-).

Nota: se vengono trattate diverse aree del viso, è necessario regolare di volta in volta il livello di intensità.

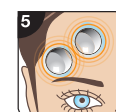

FASE 5

Mantenere l'unità in posizione per 60 secondi per completare il trattamento di una determinata area. Trascorsi 60 secondi, ridurre il livello di potenza prima di passare alla successiva area da trattare.

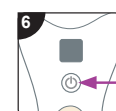

FASE 6

Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio. Tenere premuto il tasto Programma/On/Off per due secondi.

Nota: se l'apparecchio viene lasciato acceso, si spegne automaticamente dopo 10 minuti.