



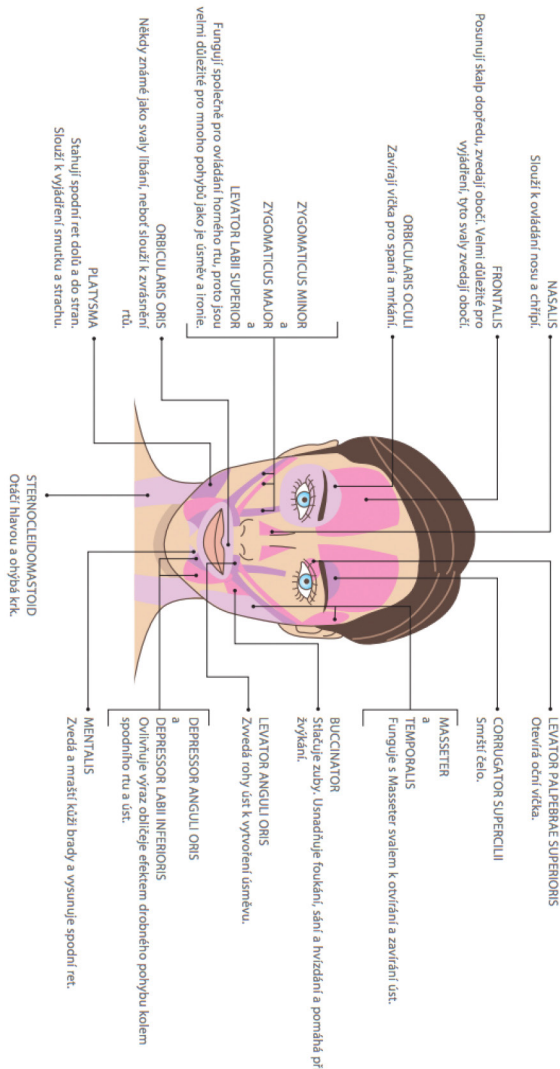

Při použití obličej se cvičí určité svaly. Toto je návod, který Vám pomůže určit, které svaly procvičujete a k čemu slouží.

## POZNEJTE SVALOVÉ SKUPINY

## IONTOFORÉZNÍ INFUZE

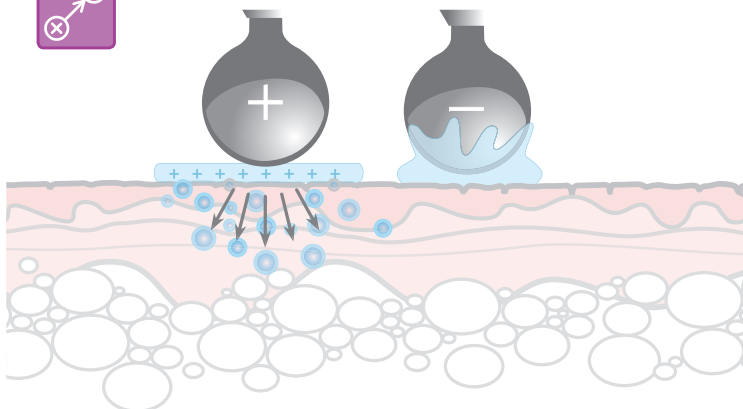

Iontoforézní infuze používá mikroproud pro proniknutí aktivních ingrediencí k ošetření hluboko do kůže. Tato Transdermální infuze úžasně zvyšuje efektivitu místně aplikovaného přípravku, který v opačném případě obtížně prochází kůží.

Kolagenovo-retinolové gelové náplasti obsahují kladně nabitý kolagen a retinol jako činidla proti vráskám a věku. Při umístění kladného kontaktu na každou náplast a záporného kontaktu na kůži tyto aktivní ingredience jsou přímo "vtlačovány" do kůže.

Krátkodobé výsledky jsou viditelné většinou ihned. S pravidelným použitím se účinek prodlužuje.

Doporučujeme kolagenovo-retinolové náplasti používat jednou za 24 hodin. Pokud máte citlivou pokožku, ponechte přestávku 48 hodin mezi ošetřeními.

Náplasti jsou tvarované podle oblasti pod očima, na čelo, kolem úst a přes bradu.

## REŽIM OŠETŘENÍ

Doporučujeme kolagenovo-retinolové náplasti používat pouze jednou za 24 hodin. Pokud máte citlivou pleť vám doporučujeme pauzu 48 hodin před další aplikací náplastí.

## CO MŮŽETE POCÍTOVAT

Doporučujeme začít na nízké úrovni intenzity na každé zóně. Postupně zvyšujte intenzitu, až pocítíte nestabilní brnění.



## INFORMACE O NÁPLASTECH


- Základ infuze nastane v prvních 5–15 minutách ošetřované oblasti, ale náplasti mohou zůstat na obličej 1 hodinu.
- Retinol se snadno znehodnotí, proto skladujte náplasti na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření. Můžete je skladovat v chladničce.
- Retinol může zvýšit citlivost vaší kůže na slunce. Nevystavujte pokožku po aplikaci slunečnímu či solárnímu záření. Po použití doporučujeme použít krém s ochranným faktorem.
- Zajistěte, aby se náplasti dobře přilepily na obličej.
- Při použití přístroje používejte jemný pohyb po kůži.
- Náplasti jsou určeny pro jedno použití

## ZÓNY OŠETŘENÍ

- ČELO
- KOLEM RTŮ
- ODSTRANĚNÍ
- BRADA
- POD OČIMA
- HORNÍ RET (proklad)



**DŮLEŽITÉ:** Pro infuzi musíte dbát správné polarity kontaktů. Kontakt (+) musí zůstat na náplasti, zatímco kontakt (-) musí být na kůži.

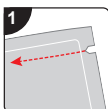


## KROK 1

Důkladně vyčistěte a vysušte kůži. Neaplikujte zvlhčovače. Otevřete balíček s náplastí. Vyndejte náplast z obalu a odstraňte obal pro odkrytí kontaktu náplastí.



## KROK 2

Umístěte náplast na ošetřovanou oblast. Další náplast dejte na protilehlou stranu obličej..

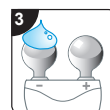


## KROK 3

Aplikujte dostatek gelu na kulíčkový kontakt (-). Použijte dostatečné množství gelu pro zajištění dobrého kontaktu s pokožkou..




## KROK 4

Zvolte program , Iontoforeza, stisknutím tlačítka program/ on/off š-krát. Zelená kontrolka bude blikat

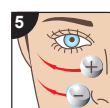

## KROK 5

S kontaktem ( - ) na kůži a kontaktem (+) na náplasti jemně pohybujte vpřed a vzad po dobu 60 sekund. Zvyšte výkon, pokud cítíte statické brnění.

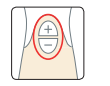


## KROK 6

Opakujte proces na druhé náplasti. Pokračujte v ošetření mezi náplastmi po dobu 60ti sekund.



## KROK 7

Náplasti mohou zůstat na kůži 1 hodinu pro dokončení infuze. Po sejmutí náplastí můžete vmasírovat veškeré zbytky do kůže.

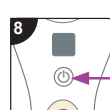

## KROK 8

Po použití přístroj vypněte. Stiskněte a podržte tlačítko Program/ On/ Off na 2 sekundy.

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Přístroj můžete tit vlhkou utěrkou.
- NEPOU ÍVEJTE rozpouštědla.
- NEP JTE přístroj do vody.
- NEDEMONTUJTE. Uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části V případě nutnosti kontaktujte autor ované servisní středisko. Pokud je přístroj poškozený, nepoužívejte jej.
- NEPOU ÍVEJTE v blízkosti krátkovlnných nebo mikrovlnných přístrojů. Pokud si všimnete nestandardního provozu přístroje, mohl být vystavený externímu elektromagnetickému rušení, např. z motorů/ reproduktorů. Odstra te tento zdroj rušení a restartujte přístroj.

## LIKVIDACE



Směrn o likvidaci rých elektrických a elektron kých přístrojů (WEEE) (2002/96/) platí pro recyklaci produktů nejlepším možným způsobem a nejlepšími technikami pro minim a dopadu na životní prostředí, úsporu energie a přírodních zdrojů. Výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení, proto zajistěte na kon jeho životnos právnou likvidaci v souladu s místními předpisy. NESMÍ se likvidovat společně s běžným domovním odpadem.

## OBSŁUGA KLIENTA

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:  
Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:  
BORGY CZ, a. s.  
Reklamační / servis  
Zápy 4 (areál RTK)  
250 01 Zápy, Česká republika  
Tel.: +420 326 320 662  
E-mail: reklamační@borgy.cz, www.borgy.cz



www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2018  
Wyprodukowano przez The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, Anglia GL53 7ET  
1-IN-FAL17-CZ/1.1

## 60 SECOND FACE LIFT



the beauty specialists

## UPOZORNĚNÍ

- Prosím, pozorně si přečtete veškeré instrukce a ponechte si je pro budoucí použití.
- Toto zařízení smí být používáno dětmi staršími 8 let, lidmi se sníženými fyzickými, zrakovými nebo mentálními schopnostmi i lidmi bez předchozích zkušeností, pokud byli instruováni o správném použití a rozumí potenciálnímu nebezpečí nebo pokud jsou pod dohledem zkušené osoby. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dohledu dospělého.
- NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste těhotná nebo máte kardiostimulátor, epilepsii, cukrovku, sklerózu multiplex nebo pokud se zotavujete po operaci.
- Zvyšte pozornost při použití kontaktů v blízkosti očí. Dodržujte odstup kontaktů nejméně 1 cm od očí. Zvyšte pozornost při použití kontaktů v blízkosti očí. Dodržujte

## UPOZORNĚNÍ

odstup kontaktů nejméně 1 cm od očí.

- NEPOUŽÍVEJTE na místech postižených rosaceou, na zánětlivém akné, odřené kůže, citlivé kůže ani na jizvách, mateřském znamínku nebo křečových žilách.
- Přečtěte si důkladně veškeré pokyny a odložte si je pro použití v budoucnosti.
- Pokud se gel dostane do kontaktu s očima, důkladně je vypláchněte vodou. Pokud se objeví podráždění, kontaktujte lékaře.
- Chraňte oblečení a okolí.
- Pouze pro vnější použití.

## VĚDA

Jak stárneme, naše obličejové svaly ztrácí svůj tonus. Tváře padají, objevuje se druhá brada a přibývají vrásky. Lift Plus kombinuje dvě technologie kosmetických salonů pro lifting, rejuvenaci a omlazení pleti.




**FARADICKÝ PROUD EMS** (elektricko-svalová stimulace) Zpevňuje pokleslé rysy obličeje a celkově omlazuje pokožku. S použitím trochy vodivého gelu face lift udělá všechnu těžkou práci za vás.




**IONTOFORÉZA**- používá jemný mikro proud pro transport účinných látek hluboko do kůže. S pomocí kolageno-retinolových náplastí pomáhá redukovat vrásky a zlepšuje elasticitu pokožky.

## SEZNAMTE SE

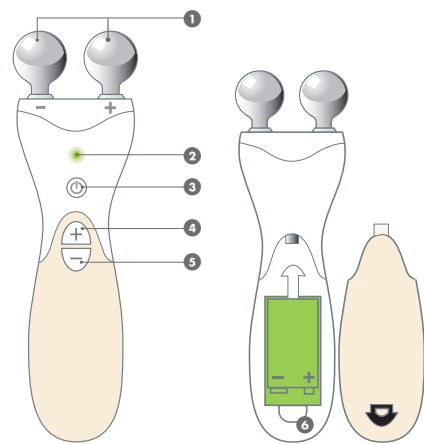

- 1 Kuličkové kontakty (-) a (+)
- 2 Světelný indikátor
- 3 Tlačítko On/Off
- 4 Tlačítko zvýšení výkonu (+)
- 5 Tlačítko snížení výkonu (-)
- 6 Prostor pro baterie

### BATERIE

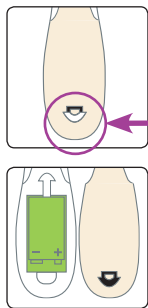

K vložení baterie uvolněte sponu a otevřete kryt. Připojte PP3 9V alkalickou baterii a ujistěte se, že kontakt + je připojen podle obrázku. Vložte uvolňovací pásek pod baterii a nasadte kryt na místo.

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterii vyndejte.
- NEPOUŽÍVEJTE nabíjecí baterie.
- Zajistěte správnou likvidaci starých baterií v souladu s místními předpisy

### TEST SNÁŠENLIVOSTI

**Důležité:** Vždy proveďte test vodivosti s vodivým gelem na méně viditelném místě kůže pro možné reakce. Počkejte 24 hodin. Pokud se objeví podráždění pokožky, přístroj nepoužívejte. Pokud se objeví kožní reakce po použití kolagenu a retinolu, ošetření s neprovádějte

## PROGRAMY & OŠETŘENÍ

| Program | Ošetření                                                                                                                 | Technologie | Intenzita | Gel/ Náplati                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| P1      | Zpevnění rytmické dvou sekundové stažení svalů pro získání kondice a krátké tří sekundové pauzy mezi jednotlivými pulsy. | EMA=S       | 1-17      | Vodivý gel                                |
| P2      | Poklepávání masážní stimulace svalů. Střídání 5ti sekundové masážní akce s tří sekundovou relaxací.                      | EMS         | 1-17      | Vodivý gel                                |
| P3      | Intoforesní infuze využívá slabý mikroproud k zapracování účinných látek hluboko do pokožky.                             | Intoforesza | 1-10      | Kolageno-retinolové náplasti a vodivý gel |



### REŽIM OŠETŘENÍ

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme faradické ošetření provádět každý den po dobu prvních několika týdnů, střídavě programy 1 a 2 každý den. Poté používejte podle potřeby pro udržení zpevněných svalů.

### CO BUDETE POCIŮVAT

Impulsy powodują łagodne klucie, a wraz ze wzrostem napięcia poczuc można skurcze mięśni.

- Zpočátku ucítíme jemné vibrace, s přidáním intenzity se sval začne stahovat.

- Vaše zuby mohou být citlivé v průběhu ošetření, to je naprosto normální.


- Efektivní ošetření obličeje je založeno na příjemné stimulaci svalů. Pokud máte nepříjemný pocit, přidejte vodivý gel nebo snižte intenzitu, případně se přesuňte na jinou oblast.

- Před přesunutím na jinou oblast snižte intenzitu.



### LÍCE

Umístěte kontakty pod a podél diagonální křivky lící kosti. Najděte nejvhodnější pozici podle tvaru obličeje, v případě silné kontrakce s jemnějším brněním.

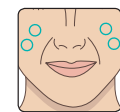


### KOLEMRTŮ

Tyto linie se nachází mezi nosem a rohem úst. Umístěte jeden kontakt na "jablko" líce a druhý kontakt diagonálně pod tento bod podle přirozené linie a paralelně s retními liniemi. Upravte pozici, dokud neucítíte silnější kontrakce




### HORNÍ A SPODNÍ RET

U místěte kontakty symetricky nad okraj rtu. Zvyšte výkon pro dosažení dobré kontrakce. Opakujte tento postup pod spodním rtem. Pokud rty vypadají nerovnoměrné do jedné strany, to je přirozen.

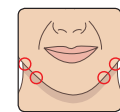

### BRADA

Kopírujte bradovou linii diagonálně dolů a umístěte kontakty na některou stranu čelisti. Zvyšte výkon pro dosažení nejlepších kontrakcí. Může být nutné mírně upravit pozici pohybem

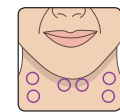

### KRK A PODBRADEK


Nejprve umístěte kontakty podél svalů zdvihačů hlavy přibližně v místech, kde tepe krev. Dále umístěte kontakty na sval pod bradou. Pro nejlepší umístění držte kontakty v linii, ale mírně je posuňte nahoru či dolů, dokud nenajdete silnější kontrakce.



### ZA UŠIMA

Umístěte kontakty k vlasové linii co nejvýše bez kontaktu s ušima. Ucítíte skutečně silné kontrakce přes linii šije..


## FARADICKÁ OBLIČEJOVÁ GYMNASTIKA

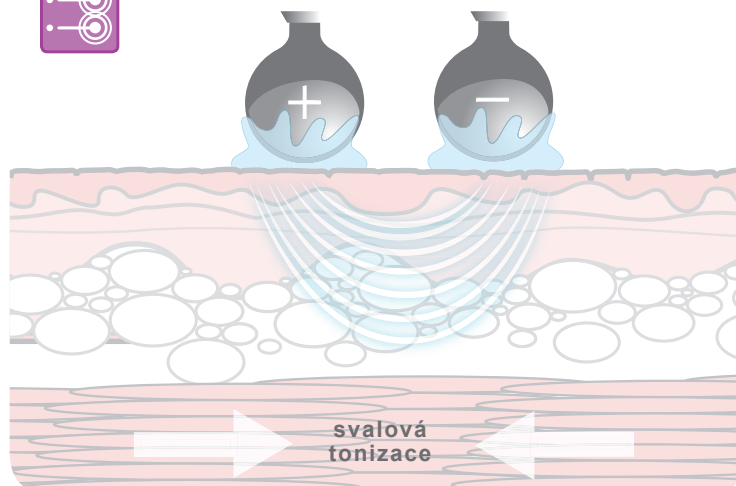

Již více než 40 let se v salónech krásy využívá faradická tonizace s EMS (Elektrická stimulace svalů) pro jemné stahování a uvolňování obličejových svalů pro lifting a zpevnění pleti. Tato stimulace také zvyšuje cirkulaci, což přináší více kyslíku do kožních buněk a rychleji odstraňuje toxiny, zanechává kůži svěží a omlazenou. Rovněž provádí lymfatickou drenáž.

### OBLASTI OŠETŘENÍ

Při ošetřování doporučujeme používat zrcadlo.

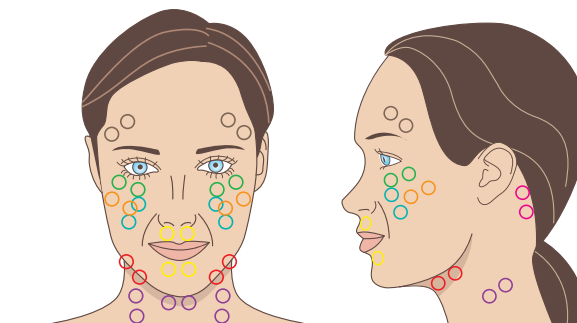


- ČELO A OBOČÍ
- POD OČIMA
- LÍC
- KOLEM RTŮ
- SPODNÍ RET

- HORNÍ RET
- BRADA
- ŠÍJE
- ZA UŠIMA




### ČELO A OBOČÍ

Umístěte jeden kontakt nad konec obočí, vycentrujte mezi obočí a linií vlasů. Nasměrujte přístroj tak, aby byl druhý kontakt uprostřed mezi obočím a vlasovou linií.

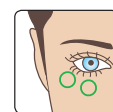


### POD OČIMA

Použijte linii pod očima, na hraně kosti, umístěte jeden kontakt na tuto linii a přímo doprostřed pod oko. Další kontakt musí sledovat konturu směrem ven.

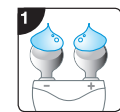

### KROK 1

Naneste dostatečné množství vodivého gelu na kuličkové kontakty. Dostatečné množství gelu je důležité pro správný kontakt s kůží

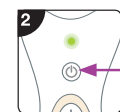

### KROK 2


Stisknutím tlačítka / On / Off po dobu 3 sekund se přístroj zapne. Jakmile se zapne, rozsvítí se zelená kontrolka. Přístroj začne na programu 1. Opakovaně stiskněte Program / On / Off tlačítko pro výběr programu 2

**Poznámka:** Zelená kontrolka 2x zabliká a tak poznáte, že je vybrán program 2.




### KROK 3

Na čistou kůži umístěte kuličkové kontakty pro ošetření první oblasti.

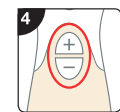


### KROK 4

Zvyšte výkon stisknutím tlačítka (+) a přesuňte pozici kontaktů, dokud neucítíte požadované kontrakce svalů. Pokud se necítíte dobře, snižte výkon tlačítkem (-).

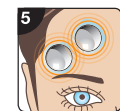

### KROK 5

Držte přístroj v pozici 60 sekund pro dokončení ošetření oblasti. Po 60 sekundách přístroj pípne jako signalizace, že se můžete přesunout na další oblast. Snižte výkon před přemístěním na další oblast.

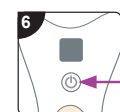

### KROK 6

Po použití přístroj vypněte. Stiskněte a podržte tlačítko /On/ Off na 2 sekundy

**Poznámka:** Pokud ponecháte přístroj zapnutý a nebudete ho používat, automaticky se vypne po 10 minutách..