

WAARSCHUWINGEN

- NIET gebruiken als er water in het apparaat is gesijpeld.
- NIET onderdompelen in water.

Ongeschikte huid- en haartypes:

- IPL is niet geschikt voor donkere huidtypes, bijvoorbeeld, mensen afkomstig uit de Caraïben, Zwart Afrika, India of Pakistan. Zie “Geschikt huidtypes” en voer steeds een vlektest uit.
- IPL is niet geschikt om rood, licht blond, grijs of wit haar te verwijderen.

Niet te behandelen zones:

- Niet gebruiken op tatoeages, permanente make-up, puisten, acne, wratten, haar op zwarte vlekken of moedervlekken, donkere sproeten, huidziekten, brandwonden, tepels, genitale of anale zones, spataders, eczeem, koortsuitslag, psoriasis, open wonden op abnormale huidpigmentatie zoals albinisme en vitiligo of op kloven.

Niet gebruiken bij:

- Zwangerschap of wanneer u borstvoeding geeft, epilepsie hebt of medicatie neemt waardoor de lichtgevoeligheid verhoogt. Bij een verleden van epileptische aanvallen raden wij het gebruik van IPL AF. Gewone medicatie kan lichtgevoeligheid veroorzaken. Wanneer u medicatie gebruikt kunt u best letten op waarschuwingen voor lichtgevoeligheid. Raadpleeg bij twijfel een arts. Gewone medicatie die lichtgevoeligheid kan veroorzaken zijn onder andere sommige diuretica, antibiotica, tricyclische antidepressiva en medicatie die werd voorgeschreven voor schildklierandoeningen zoals lupus en artritis.
- Het toestel NIET gebruiken als u huidkanker hebt of had.
- NIET gebruiken bij diabetes, nierziekten, hartziekten of schildklierandoeningen.
- Hetzelfde gebied NIET meerdere keren behandelen in één sessie.

WAARSCHUWINGEN

- Nooit gebruiken op een gedeelte van het lichaam waar u het haar wellicht terug wilt laten groeien.

Mogelijke reacties:

De volgende effecten vereisen dat de behandeling wordt stopgezet. Koel het behandelde gebied in ieder geval goed – we raden aan een verfrissende gel met aloë vera te gebruiken. Win medisch advies in als de symptomen langer dan 48 uur aanhouden.

- Pijn in het behandelde gedeelte
- Jeuk in het behandelde gedeelte
- Roodheid

Raadpleeg uw arts als u blaren of verbranding ervaart.

- Mocht dit product bij gebruik onverwacht gedrag vertonen, dan kan dit worden veroorzaakt door externe elektromagnetische interferentie. Elektrostatische ontlading kan ervoor zorgen dat het apparaat wordt uitgeschakeld. Verwijder de bron van de interferentie en start het product opnieuw om een volledig gebruik te hervatten.

INLEIDING

De Rio Lux IPL Hair Remover is ontworpen voor moeiteloos ontharen zonder dat daarvoor een pijnlijke en dure behandeling in een salon nodig is.

Deze wetenschappelijk bewezen, veilige en doeltreffende ontharingsmethode is meer dan 15 jaar getest. De resultaten zijn meestal voor het eerst zichtbaar na vier sessies en u zult meestal een zeer duidelijke vermindering van de hoeveelheid haar zien na 8-10 sessies. De resultaten zijn afhankelijk van het individuele haartype en de groeicyclus, daarom is het resultaat bij sommige personen al na een aantal sessies te zien, terwijl het bij anderen langer duurt.


IPL ONTHARING UITGELEGD

Bij plaatsing van het apparaat tegen de huid worden zachte pulsen van intens licht op de haarfollikel gericht om zo de haarwortel te vernietigen zonder de zone er omheen te beschadigen. De haarfollikel wordt vernietigd als resultaat van aanhoudende schade aan de haarwortel.

De lichtenergie wordt opgenomen door het melaninepigment in het haar, dit zorgt voor de snelle opwarming van de haarfollikel, en deze warmte vernietigt de cellen die verantwoordelijk zijn voor haargroei.



DE HAARGROEICYCLUS

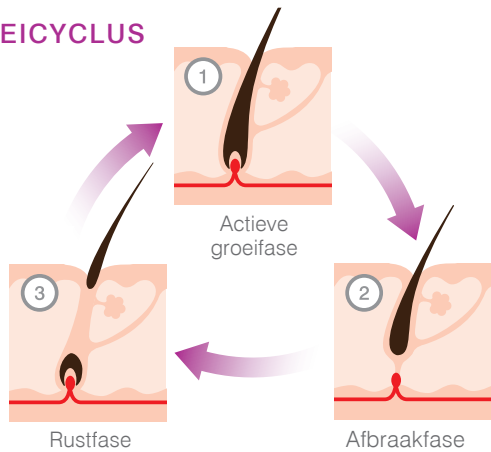

IPL-behandeling is het effectiefst wanneer het haar zich in de actieve groeifase bevindt. Op elk moment is er een percentage haren in de actieve groeifase (het effectieve percentage varieert van de ene lichaamszone tot de andere).

Om alle haren in de actieve groeifase te behandelen kunnen er best verschillende sessies verspreid over een aantal maanden worden gepland.

Een goed voorbeeld van een behandelplan is:

BEHANDELING 1-4: ELKE 2 WEKEN

BEHANDELING 5-8: ELKE 4 WEKEN

BEHANDELING 8+: ELKE 4-6 WEKEN OF WANNEER NODIG

GESCHIKTE HUIDTYPES

Uw IPL onthaarder is geschikt voor een lichte huid tot olijfkleurige/gebruinde en donkere huidtypes. Om resultaat te verkrijgen van de behandeling, moet het haar donkerder zijn dan de huid er omheen. Het geeft de beste resultaten op lichte huid met donker haar. Het kan zijn dat er verschillende vermogensniveaus nodig zijn voor verschillende zones. Elke zone moet worden getest voor het geschikte maximale vermogensniveau.

Gebruik de huidtintkaart om uw huidtint/-type precies te bepalen.

HUIDKAART

Huidtype	Huidskleur	Huidtint	UV-gevoeligheid	Maximaal vermogensniveau
I	Erg licht, "transparant"		Verbrandt altijd, bruint nooit	Na de patchtest kunnen alle 5 vermogensniveaus gebruikt worden
II	Licht		Verbrandt altijd	
III	Licht tot licht olijfkleurig		Verbrandt snel	Na de patchtest kunnen de vermogensniveaus 1, 2, 3 en 4 gebruikt worden
IV	Olijfkleurig/gebruind		Verbrandt zelden.	
V	Gepigmenteerd		bruint gemakkelijk	Na de patchtest kunnen de vermogensniveaus 1, 2 en 3 gebruikt worden
VI	Donkere huid		Verbrandt zelden	NIET geschikt voor IPL behandeling

PATCH TEST

Controleer 24 uur voor de behandeling op reactie door te testen op een kleine zone.

De vlektest zal het maximale vermogensniveau voor uw huidtype bepalen.

Behandel een zone met elke vermogensniveau (bijv. arm, been) tot op het maximale vermogensniveau voor uw huidtype (zie Huidkaart). Gebruik de vermogensknop om het vermogensniveau met telkens één stap te verhogen en werk de zone af met het apparaat op telkens een ander deel van de huid.

Als u ongemak ervaart, dan is het vorige vermogensniveau het maximale vermogensniveau dat u mag gebruiken.

Er kan, maar hoeft niet noodzakelijk, een lichte roodheid optreden binnen een uur na de behandeling. Als de roodheid echter langer dan 24 uur aanhoudt, dan wijst dit erop dat u een te hoog vermogensniveau hebt gekozen voor uw huidtype.

BELANGRIJK: Omdat huidskleur verschilt op verschillende lichaamszones, hebt u mogelijk verschillende vermogensniveaus nodig voor verschillende zones. Elke zone moet worden getest voor het geschikte maximale vermogensniveau.

VOORDAT U BEGINT

Zorg ervoor dat u de 'Waarschuwingen' leest en begrijpt voordat u verder gaat.

- Gebruik geen ontharingsmethode die de haren uit de follikel trekt, hierdoor verliest de IPL zijn effect.
- Verwijder alle juwelen rond behandelingszone voor gebruik.
- Zorg ervoor dat u de vlektest hebt uitgevoerd op de te behandelen zone, 24 uur voor de behandeling, en wees bewust van het maximale vermogensniveau.

GEBRUIKSISTRUCTIES

STAP 1

Zorg ervoor dat de huid voor gebruik geschoren, schoon en droog is.

STAP 2

Breng de uitstekende kanten van de stekker in lijn met de uitsparingen van de adapter

STAP 3

Duw de stekker in de uitsparingen op de adapter en schuif hem in dezelfde beweging omhoog.

STAP 4

Sluit het snoer van de adapter aan op het apparaat, en steek de stekker van de adapter dan in het stopcontact.

STAP 5

Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen. Het gele waarschuwingslampje voor het vermogensniveau licht op, gevolgd door het groene waarschuwingslampje 'ON/OFF/READY'.



KEN UW APPARAAT



- 1 Pulsknop
- 2 Indicator vermogen
- 3 Aan/uitknop
- 4 Lamp
- 5 Stroomaansluiting

GEBRUIKSINSTRUCTIES

STAP 6

Druk op de aan/uitknop om het vermogensniveau te kiezen dat geschikt is voor uw huidtype. Als er een niveau geselecteerd is, zal het waarschuwinglampje voor dat niveau geel oplichten.

STAP 7

Om het apparaat te gebruiken drukt u de lamp stevig tegen de huid. Als het oppervlak volledig contact maakt met de huid zal het groene 'ON/OFF/READY' waarschuwinglampje gaan knipperen.

STAP 8

Druk op de pulsknop om een lichtpuls vrij te geven. U zult een beetje een

Let op: Er zijn twee standen beschikbaar, afhankelijk van het te behandelende gedeelte:

- De **Precisiestand** is bedoeld voor het behandelen van gevoelige, kwetsbare gedeelten van het lichaam (bijv. gezicht, oksels en bikinilijn).

- De **Glijstand** is geschikt voor grotere gedeelten (bijv. benen, rug, armen of borstkas). Plaats op de huid en druk de pulsknop in. Glijd tussen elke puls over de huid naar

warm gevoel en een lichte tinteling op uw huid voelen.

STAP 9

Haal het apparaat van uw huid af plaats dit, zonder tussenruimte, terug op de huid voor de volgende puls. De drukmarkering op uw huid geeft aan waar u de huid behandeld heeft. Behandel hetzelfde stukje huid nooit meer dan een keer tijdens een sessie.

STAP 10

Schakel het apparaat aan het einde van de sessie uit door de aan/uitknop 2 seconden lang ingedrukt te houden. Haal de stekker uit het stopcontact.

de volgende te behandelen plek, zonder het apparaat op te tillen. Laat de pulsknop los om de stand uit te schakelen.

De te verwachten behandel tijd is ongeveer:

Half been: 8-10 minuten in Glijstand

Heel been: 15 minuten in Glijstand

Bikinilijn: 2 minuten in Precisiestand

Oksel: 1 minuut in Precisiestand

GEBRUIKSINSTRUCTIES

AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE

Als het apparaat meer dan 10 minuten niet gebruikt wordt, schakelt het zichzelf automatisch uit en wordt het 'ON/OFF/READY' waarschuwinglampje oranje. Druk op de aan/uitknop om het apparaat opnieuw in te stellen op het gewenste vermogensniveau.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

VOOR GEBRUIK OP HET GEZICHT

Gebruik altijd de Precisiestand om gezichtsbehandling te verwijderen, gebruik nooit de Glijstand. Wacht bij het behandelen van het gezicht altijd vijf seconden tussen elke puls en gebruik niet langer dan 10 minuten per sessie.

De Rio Lux IPL Hair Remover kan veilig gebruikt worden op het gezicht binnen het gebied aangegeven door witte stippe lijn.

Voorzorgsmaatregelen:

- Kijk tijdens de puls niet direct naar het gedeelte dat behandeld wordt.
- Niet gebruiken op wimpers, hoofdhaar of wenkbrauwen.
- Niet gebruiken rondom de ogen of op de lippen.

HUIDVERZORGING NA GEBRUIK

Na uw ontharingssessie:

- Vermijd blootstelling aan de zon van het behandelde gedeelte.
- Bescherm uw huid met zonnebrandcrème gedurende de behandelingsperiode en tot tenminste twee weken na de laatste sessie.
- Gebruik geen geparfumeerde crèmes, lotions, parfum of deodorant op de behandelde gedeeltes na gebruik.



VRAGEN EN ANTWOORDEN

Hoe voelt het?

Sommige mensen ervaren een warm gevoel op de huid. Lichte irritatie (zoals van een lichte verbranding door de zon) kan worden gevoeld als er een te hoog vermogensniveau wordt gebruikt, of wanneer de zone niet is geschoren. Mannen die de procedure ondergaan voelen meer ongemak – omdat mannelijk haar meestal dikker is dan vrouwelijk haar – hoewel dit gevoel snel wegtrekt.

Kan ik IPL ontharing gebruiken op gevoelige huid?

Ja, de IPL gaat een reactie aan met het haar, de huid er omheen mag niet worden beïnvloed.

Hoe zal mijn huid eruit zien na de behandeling?

Normaal gezien zal er geen zichtbare verandering zijn. Er kan een lichte roodheid ontstaan na de behandeling, maar deze verdwijnt na 24 uur. Er kan plaatselijke roodheid zijn rond de haarfollikel - dit is normaal. Als er echter roodheid of ontsteking aanwezig blijft na 24 uur, dan wijst dit erop dat u een te hoog vermogensniveau voor uw huidtype hebt gekozen. Zie "Vlekkentest".

Moet er iets worden vermeden na de IPL ontharing?

Blootstelling aan de zon en zelfbruiners moeten gedurende 48 uur worden gemeden.

Als de huid wordt blootgesteld, gebruik dan een zonnecrème. Vermijd ook agressieve reinigingsmiddelen of peelingbehandelingen. Vermijd zwemmen in chloorwater of het gebruik van een jacuzzi gedurende 48 uur. Chloor in het water kan jeuk veroorzaken.

Hoe vaak moet ik de IPL ontharingsbehandeling herhalen.

De timing voor nabehandelingen hoeft niet strikt te zijn. Wij raden aan om in het begin een tussentijd van 2 weken aan te houden, hoewel sommigen de voorkeur geven aan een wekelijkse en anderen aan een maandelijkse behandeling, afhankelijk van de voorkeur en het te behandelen gedeelte. Op voorwaarde dat de haarfollikel of de omringende huid niet rood, pijnlijk of ontstoken is, kan de behandeling worden herhaald na minimaal 48 uur. Vermijd dat u een zone te vaak behandelt. Dit kan zorgen voor roodheid en zwellen. Om de huid haarvrij te houden en te voorkomen dat onklaar gemaakte haarfollikels weer actief worden herhaalt u de behandeling elke 4-6 weken, of indien nodig.

Is er een nazorgroutine die ik moet volgen?

Als u dit wenst, kunt u een ongeparfumeerde, verzachtende lotion, een ijszak of een natte handdoek aanbrengen om de behandelde zones af te koelen, maar we raden aan om gedurende 24 uur geen zeep te gebruiken op deze zones. Vermijd het gebruik van deodorants gedurende 2-3 dagen bij het behandelen van de oksels. Vermijd onnodige blootstelling aan de zon gedurende 48 uur.

Hoeveel behandelingen zal ik nodig hebben?

Dit varieert al naargelang de persoon en hangt af van de zone die u behandelt, de dikte van haren en de groeicyclus en kleur van uw haar. Donker haar op lichte huid reageert het beste, maar zowel donker als licht haar hebben meerdere behandelingen nodig voor resultaten op lange termijn. In het begin zult u met elke behandeling een geleidelijke verdunning/vermindering van haargroei opmerken in de behandelde zone. Om de huid haarvrij te houden en te voorkomen dat onklaar gemaakte haarfollikels weer actief worden herhaalt u de behandeling elke 4-6 weken, of indien nodig.

Kan ik tussen de behandelingen andere ontharingsmethodes gebruiken?

Omdat er voor de IPL behandeling haar aanwezig moet zijn in de follikel, zijn ontharingsmethodes die het haar uittrekken zoals waxen, epilators en pincetten NIET geschikt voor gebruik tussen behandelingen. De haren bleken is ook NIET geschikt omdat het pigment verwijdert en ervoor zorgt dat de IPL behandeling zijn effect verliest. Scheren, micro-dermabrasieschijven en ontharingscrèmes zijn geschikt voor tussen de behandelingen.

Waarom groeit er haar terug op plekken die ik recent behandeld heb?

Het is normaal dat het haar doorgroeit gedurende een of twee weken na een behandelingsessie. Na twee weken zult u merken dat dit haar uitvalt of losraakt van de follikel, maar u moet het altijd natuurlijk laten uitvallen en het niet uittrekken. Sommige haren zullen niet reageren - omdat het apparaat niet juist gebruikt is, of omdat het haar in een rustperiode was. Maar dit haar kan in de volgende sessies behandeld worden.

Is gebruik over langere periode schadelijk voor mijn huid?

In de afgelopen 15 jaar is het gebruik van lichtpulsen goed gedocumenteerd in vakliteratuur en er zijn geen bijwerkingen of letsels gemeld die verband houden met gebruik van dit type behandeling over langere periode.

BELANGRIJK

- IPL mag geen duidelijk gevoel van onbehagen veroorzaken. U kunt mogelijk een warm gevoel waarnemen in het behandelde gebied. Indien u zich ongemakkelijk voelt of pijn hebt, is het apparaat mogelijk te hoog ingesteld.
- Dek de ventilatiegaten aan de achterkant van het apparaat niet af tijdens het gebruik.
- Niet op een zacht oppervlak plaatsen waardoor de ventilatiegaten aan de onderkant van het apparaat mogelijk worden afgedekt.
- Niet gebruiken na alcoholgebruik, bij ziekte of vermoeidheid.
- Niet gebruiken in de buurt van kortegolfapparatuur of magnetrons.
- Het apparaat kan worden aangetast door elektromagnetische storingen. Indien zulke effecten worden verwacht, schakelt u het toestel uit en vervolgens weer in om het te resetten.
- Omzeil geen veiligheidskenmerken.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan beschreven in de instructies.
- Dit product is bedoeld voor thuisgebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in een commerciële omgeving.

ONDERHOUD

- Gebruik dit product uitsluitend met de bijgeleverde netadapter.
- Trek de adapter na gebruik steeds uit het stopcontact en bewaar buiten het bereik van kinderen.
- Staak het gebruik onmiddellijk zodra u schade vaststelt aan het apparaat of de netadapter.
- Als de netadapter beschadigd is, moet deze door de fabrikant, de tussenpersoon of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen om zo gevaar te voorkomen.
- Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of vervangen. Niet uit elkaar halen of herstellen. Indien u problemen ondervindt met het product, neem dan contact op met de klantenservice.
- Reinig door het product schoon te vegen met een licht bevochtigde doek.
- Een ophoping van productresten op de lamp kan de doeltreffendheid ervan aantasten. Indien u afzettingen opmerkt, schakelt u het apparaat UIT en verwijdert u het snoer. Reinig met een pluivrije doek of wattenstaafje en zorg ervoor dat er geen vezels op het apparaat achterblijven.

INSTRUCTIES

 De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Het product is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch toestel. Zorg er dus voor dat het product en de lampcartridge op de juiste manier worden afgedankt, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Ze mogen NIET met het huisvuil worden weggegooid.

KLANTENSERVICE

Bel onze servicelijn indien u vragen hebt of wanneer u problemen ondervindt: **+44 (0)1242 702345** of stuur een e-mail naar: **online@riobeauty.com**

Om u online te registreren voor uw 2 jaar garantie, gaat u naar: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

Om extra accessoires te bestellen, kijkt u op www.riobeauty.com of neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur.

SPECIFICATIE

APPARAAT:		STROOMADAPTER:	
Lichtbron:	kwartslamp	Input:	AC100-
Behandelingszone:	30 - 10 mm		240V ~ 50/60Hz
Output golflengte:	550 nm	Uitvoer:	12V = 3A ⓈⓈⓈ
Input:	12V = 3 A, 36 W		

MILIEU

TEMPERATUUR:
In bedrijf: 0 tot 35 graden Celsius
Opslag: -5 tot 40 graden Celsius

VOCHTIGHEID:
In bedrijf: 10% tot 60% RV
Opslag: 5% tot 90% RV



www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2019
Geproduceerd door The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Engeland GL53 7ET
1-IN-IPHH-D/2.0

LUX IPL HAIR REMOVER

gebruikershandleiding



the beauty specialists

WAARSCHUWINGEN

• Neem alle instructies grondig door en bewaar ze voor later gebruik.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.

• Richt het apparaat nooit op of in de buurt van uw ogen.

• Weerkaatsingsgevaar: Verwijder alle juwelen binnen het behandelingsgebied voor gebruik.

• NOOIT gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen.

• Het apparaat NOOIT gebruiken in een vochtige omgeving (in de buurt van een bad of douche).