

**VAROVÁNÍ****• Přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny a uchovejte je pro pozdější potřebu.**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům spojenými s provozem přístroje. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič musí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči. Pokud je některá část napájecího adaptéru nebo kabelu poškozena, přestaňte jej používat. Ohledně výměny se obraťte na středisko péče o zákazníky.
- Neponořujte výrobek do vody. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud spadl nebo byl poškozen.
- NEPOUŽÍVEJTE handLITE, pokud užíváte léky, které mohou způsobit fotocitlivost. Pokud používáte handLITE a užíváte jakékoli léky, které mohou způsobit fotocitlivost, můžete si způsobit těžkou kožní reakci. Fotocitlivost je častým vedlejším účinkem různých léků. Mohou ji způsobovat některá antibiotika, chemoterapeutické léky a diuretika. Pokud si nejste jisti jakýmkoli lékem, který užíváte, poraďte se s poskytovatelem zdravotní péče.
- NEPOUŽÍVEJTE handLITE k léčbě jakýchkoli dalších stavů kromě těch, které jsou uvedeny v indikacích k použití.
- NEPOUŽÍVEJTE handLITE, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte. handLITE NENÍ testován na těhotných nebo kojících ženách, a proto riziko pro plod, novorozence nebo těhotné ženy není známo.
- NEPOUŽÍVEJTE systém handLITE LED, pokud trpíte lupus erythematosus, fotocitlivým ekzémem nebo albinismem. Pokud používáte systém handLITE LED k léčbě Lupus erythematosus, fotocitlivého ekzému nebo albinismu, můžete způsobit těžkou kožní reakci.
- NEPOUŽÍVEJTE handLITE, pokud trpíte jakoukoli fotocitlivou poruchou (senzibilizací na světlo).
- Před použitím handLITE musíte provést test senzibilizace.
- NEPOUŽÍVEJTE handLITE způsobem, který není přesně stanoven v tomto návodu k použití.
- VYPNĚTE a okamžitě ODSTRANĚTE handLITE, pokud je horký nebo na vaší pokožce pociťujete nepříjemné teplo.
- NEPOUŽÍVEJTE handLITE, aniž byste nejprve odstranili krémy nebo make-up. Některé přísady v těchto produktech mohou způsobit senzibilizaci na světlo nebo snížit účinek ošetření.
- NIKDY nepoužívejte handLITE v blízkosti vody nebo tam, kde může dojít k rozlití vody na výrobek. NEPOUŽÍVEJTE handLITE, pokud si myslíte, že přišel do styku s vodou.
- HandLITE udržujte v dostatečné vzdálenosti od HORKÝCH povrchů.
- NEPOKOUŠEJTE se žádným způsobem upravovat handLITE. Úpravou handLITE zanikne záruka. handLITE neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem.
- NEPOUŽÍVEJTE handLITE, pokud je světelná podložka, ovladač nebo nabíjecí kabel poškozený.
- Popruh handLITE obsahuje směs polyesteru, nylonu a lycry. Pokud jste alergičtí na některý z těchto materiálů, může se stát, že nebudete moci použít dodaný popruh.

POPIS PŘÍSTROJE

handLITE kombinuje klinicky ověřené vlnové délky světla s LED technologií nejnovější generace k energizaci buněčných funkcí a vytváří kaskádu biochemických reakcí, které pomáhají revitalizovat matnou, stárnoucí pleť, jemné linie a vrásky a zlepšují pevnost pokožky a její pigmentaci. handLITE používá k zajištění tohoto jedinečného, rychlého a snadného ošetření řízené červené a blízké infračervené světlo.



- ① Zapnuto / Vypnuto
- ② USB-C zásuvka
- ③ Popruh
- ④ LED kontrolka nabíjení
- ⑤ USB nabíjecí kabel

NABÍJENÍ

Pro nabíjení handLITE vložte konec USB-C nabíjecího kabelu do podložky handLITE. Zasuňte konektor USB do napájecího zdroje USB. 3 LED diody u tlačítka napájení začnou blikat, což indikuje nabíjení. Po úplném nabití zůstanou rozsvíceny všechny 3 kontrolky LED.

Poznámka: Přístroj vždy dobijte, když začne blikat poslední LED kontrolka. handLITE nebude během nabíjení fungovat.

ČIŠTĚNÍ

Před každým použitím se doporučuje handLITE vyčistit.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a NENÍ nabíjeno.
2. Světelnou podložku očistěte vodou nebo vlhkým čistým hadříkem. Odolné skvrny lze odstranit jemným otřením 70% alkoholem. NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plasty.
3. Očistěte horní část rukavice vlhkým čistým hadříkem.


TEST CITLIVOSTI

Před prvním ošetřením musíte provést test citlivosti (patch test).

1. Umístěte si handLITE přes vnitřní paži.
2. Pokud na pokožce kdykoli pocítíte nepříjemné HORKO, přestaňte zařízení okamžitě používat.
3. Po ošetření počkejte nejméně 6 hodin. Pokud se pokožka na vnitřní paži jeví červená nebo svědí, pak je handLITE pro vás nevhodný.

OŠETŘENÍ

1. Očistěte a omyjte pokožku, abyste odstranili veškeré stopy po péči o pleť.
2. Chcete-li nasadit handLITE, provlékněte popruh otvory na obou stranách rukavice. Obtočte si pásy kolem zápěstí a zajistěte - v případě potřeby upravte.

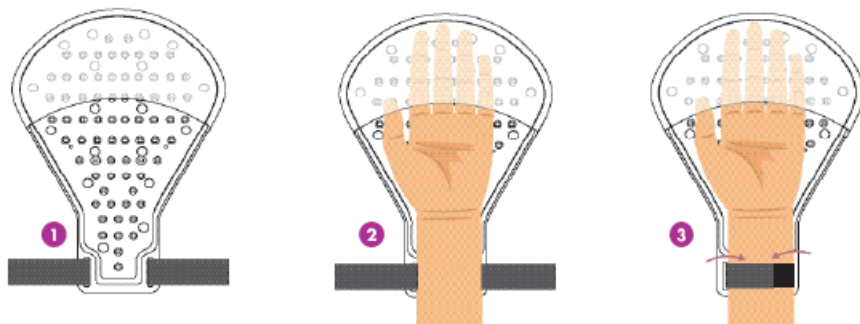

3. Stisknutím tlačítka ON / OFF zapněte. Zařízení se automaticky vypne po 10 minutách. Ošetření můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka ON / OFF.
4. Na konci ošetření odstraňte světelnou podložku.
5. Naneste běžný hydratační a opalovací krém.

Poznámka: Ihned po ošetření může pokožka vypadat červeně.

Měla by se vrátit do normálu během 1-2 hodin.

Nejlepších výsledků dosáhnete po dobu 3–5 dní v týdnu po dobu minimálně 4 týdnů.

Údržbová ošetření by měla být prováděna podle potřeby, v závislosti na životním stylu a stavu pokožky.

SKLADOVÁNÍ

HandLITE skladujte při pokojové teplotě v suchu. Neskladujte handLITE v prašném prostředí, na přímém slunečním světle nebo ve vlhkých podmínkách.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nesvítí žádné červené světlo	Zařízení není nabito	Nabijte zařízení
Nesvítí žádné červené světlo	Zařízení se právě nabíjí	Odpojte nabíjecí kabel od zařízení

LIKVIDACE



Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19 / EU) byla zavedena k recyklaci produktů za použití nejlepších dostupných technik recyklace a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, nakládalo se s jakýmkoli nebezpečnými látkami a zabránilo se narůstajícím skládkám. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto se prosím ujistěte, že na konci životnosti tohoto produktu bude zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Přístroj NESMÍ být likvidován spolu s domovním odpadem.

SPECIFIKACE

Vstup řadiče:	5V 500mA 
Vstup světelné podložky:	5V 280mA (CC)
	Tento produkt je v souladu s platnou legislativou EU o produktech
	Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a poté je uschovejte pro budoucí použití.
	Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
	Zařízení chraňte před přímým slunečním světlem.
	Stejnoseměrný proud
	Tento výrobek NENÍ vhodný pro nabíjení v koupelně.
	Tento symbol označuje konektor USB.
	Tento symbol znamená, že zařízení používá lithium-iontovou polymerovou baterii.
	Tento symbol odkazuje na katalogové číslo zařízení handLITE.
	Tento symbol označuje dávkový kód zařízení handLITE.
Váha	280g
LED diody:	Červené: 630 nm +/- 10 nm. Blízké infračervené: 830nm +/- 17,5nm
Celkové rozměry zařízení:	Světelná podložka: max. 180 mm (š) x 265 mm (v)
Program / doba ošetření:	10 minut
Provozní teplota:	0°C to 40°C
Skladovací a přepravní teplota:	-5°C to 55°C
Provozní vlhkost:	30% až 95% bez kondenzace
Vlhkost při skladování a přepravě:	20% až 85% bez kondenzace

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese: online@riobeauty.com

Chcete-li objednat další příslušenství, navštivte stránku www.riobeauty.com nebo kontaktujte místního distributora.

ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat online dvouletou záruku, navštivte:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4,

250 01 Zápy,

Česká Republika

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz

**VAROVANIE**

- **Prečítajte si prosím dôkladne všetky pokyny a uchovajte ich pre neskoršiu potrebu.**
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám spojenými s prevádzkou prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič musí byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči. Ak je niektorá časť napájacieho adaptéra alebo kábla poškodená, prestaňte ho používať. Ohľadom výmeny sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Neponárajte výrobok do vody. **NEPOUŽÍVAJTE** rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič, ak nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- **NEPOUŽÍVAJTE** handLITE, ak užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť fotocitlivosť. Ak používate handLITE a užívate akékoľvek lieky, ktoré môžu spôsobiť fotocitlivosť, môžete si spôsobiť ťažkú kožnú reakciu. Fotocitlivosť je častým vedľajším účinkom rôznych liekov. Môžu ju spôsobovať niektoré antibiotiká, chemoterapeutické lieky a diuretiká. Ak si nie ste istí akýmkoľvek liekom, ktorý užívate, poraďte sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
- **NEPOUŽÍVAJTE** handLITE na liečbu akýchkoľvek ďalších stavov okrem tých, ktoré sú uvedené v indikáciách na použitie.
- **NEPOUŽÍVAJTE** handLITE, ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte. handLITE **NIE JE** testovaný na tehotných alebo dojčiacich ženách, a preto riziko pre plod, novorodenca alebo tehotné ženy nie je známe.
- **NEPOUŽÍVAJTE** systém handLITE LED, ak trpíte lupus erythematosus, fotocitlivým ekzémom alebo albinizmom. Ak používate systém handLITE LED na liečbu Lupus erythematosus, fotocitlivého ekzému alebo albinizmu, môžete spôsobiť ťažkú kožnú reakciu.
- **NEPOUŽÍVAJTE** handLITE, ak trpíte akoukoľvek fotocitlivou poruchou (senzibilizáciou na svetlo).
- Pred použitím handLITE musíte urobiť test senzibilizácie.
- **NEPOUŽÍVAJTE** handLITE spôsobom, ktorý nie je presne stanovený v tomto návode na použitie.
- **VYPNITE** a okamžite odstráňte handLITE, ak je horúci alebo na vašej pokožke pociťujete nepríjemné teplo.
- **NEPOUŽÍVAJTE** handLITE, bez toho aby ste najprv odstránili krémy alebo make-up. Niektoré prísady v týchto produktoch môžu spôsobiť senzibilizáciu na svetlo alebo znížiť účinok ošetrenia.
- **NIKDY** nepoužívajte handLITE v blízkosti vody alebo tam, kde môže dôjsť k rozliatiu vody na výrobok. **NEPOUŽÍVAJTE** handLITE, ak si myslíte, že prišiel do styku s vodou.
- HandLITE udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od **HORÚCICH** povrchov.
- **NEPOKÚŠAJTE** sa žiadnym spôsobom upravovať handLITE. Úpravou handLITE zanikne záruka. handLITE neobsahuje žiadne časti opraviteľné užívateľom.
- **NEPOUŽÍVAJTE** handLITE, ak je svetelná podložka, ovládač alebo nabíjací kábel poškodený.
- Popruh handLITE obsahuje zmes polyesteru, nylonu a lycry. Ak ste alergický na niektorý z týchto materiálov, môže sa stať, že nebudete môcť použiť dodaný popruh.

POPIS PRÍSTROJA

handLITE kombinuje klinicky overené vlnové dĺžky svetla s LED technológiou najnovšej generácie k energizácii bunkových funkcií a vytvára kaskádu biochemických reakcií, ktoré pomáhajú revitalizovať matnú, starnúcu pleť, jemné línie a vrásky a zlepšujú pevnosť pokožky a jej pigmentáciu. handLITE používa na zabezpečenie tohto jedinečného, rýchleho a jednoduchého ošetrenia riadené červené a blízke infračervené svetlo.



- ① Zapnutie / Vypnutie
- ② USB-C zásuvka
- ③ Popruh
- ④ LED kontrolka nabíjania
- ⑤ USB nabíjací kábel

NABÍJANIE

Pre nabíjanie handLITE vložte koniec USB-C nabíjacieho kábla do podložky handLITE. Zasuňte konektor USB do napájacieho zdroja USB. 3 LED diódy pri tlačidle napájania začnú blikať, čo indikuje nabíjanie. Po úplnom nabití zostanú rozsvietené všetky 3 kontrolky LED.

Poznámka: Prístroj vždy dobite, keď začne blikať posledná LED kontrolka. handLITE nebude počas nabíjania fungovať.

ČISTENIE

Pred každým použitím sa odporúča handLITE vyčistiť.

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a NIE JE nabíjané.
2. Svetelnú podložku očistite vodou alebo vlhkou čistou handričkou. Odolné škvrny možno odstrániť jemným pritláčaním 70% alkoholom. NEPOUŽÍVAJTE žiadne iné čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť plasty.
3. Očistite hornú časť rukavice vlhkou čistou handričkou.


TEST CITLIVOSTI

Pred prvým ošetrovaním musíte vykonať test citlivosti (patch test).

1. Umiestnite si handLITE cez vnútornú pažu.
2. Ak na pokožke kedykoľvek pocítite nepríjemné TEPLÔ, prestaňte zariadenie okamžite používať.
3. Po ošetrovaní počkajte najmenej 6 hodín. Ak sa pokožka na vnútornej paži javí červená alebo svrbí, potom je handLITE pre vás nevhodný.

OŠETRENIE

1. Očistite a umyte pokožku, aby ste odstránili všetky stopy po starostlivosti o pleť.
2. Ak chcete nasadiť handLITE, prevlečte popruh otvormi na oboch stranách rukavice. Obtočte si pásy okolo zápästia a zaistite - v prípade potreby upravte.

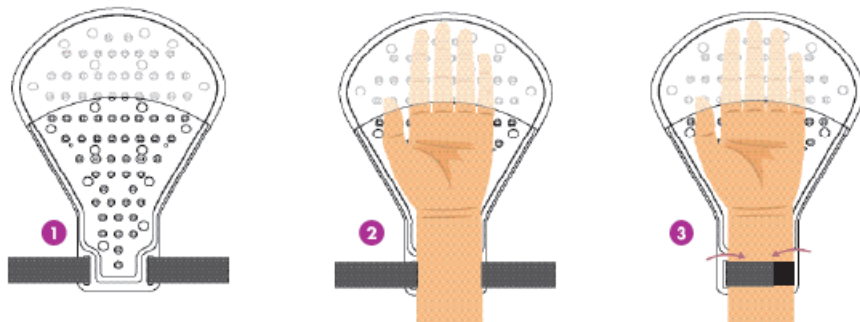

3. Stlačením tlačidla ON / OFF zapnete. Zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach.

Ošetrovanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla ON / OFF.

4. Na konci ošetrovania odstráňte svetelnú podložku.
5. Naneste bežný hydratačný a opaľovací krém.

Poznámka: Ihneď po ošetrovaní môže pokožka vyzeráť červeno.

Mala by sa vrátiť do normálu v priebehu 1-2 hodín.

Najlepšie výsledky dosiahnete po dobu 3-5 dní v týždni po dobu minimálne 4 týždňov.

Údržbové ošetrovania by mala byť vykonávané podľa potreby, v závislosti na životnom štýle a stave pokožky.

SKLADOVANIE

HandLITE skladujte pri izbovej teplote v suchu. Neskladujte handLITE v prašnom prostredí, na priamom slnečnom svetle alebo vo vlhkých podmienkach.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nesvieti žiadne červené svetlo	Zariadenie nie je nabité	Nabite zariadenie
Nesvieti žiadne červené svetlo	Zariadenie sa práve nabíja	Odpojte nabíjací kábel od zariadenia

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19 / EÚ) bola zavedená na recykláciu produktov za použitia najlepších dostupných techník recyklácie a recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, zaobchádzalo sa s akýmikoľvek nebezpečnými látkami a zabránilo sa narastajúcim skládkam. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto sa prosím uistite, že na konci životnosti tohto produktu bude zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. Prístroj NESMIE byť likvidovaný spolu s domovým odpadom.

ŠPECIFIKÁCIA

Vstup radiča:	5V 500mA 
Vstup svetelnej podložky:	5V 280mA (CC)
	Tento produkt je v súlade s platnou legislatívou EU o produktoch
	Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a potom ich uschovajte pre budúce použitie.
	Tento výrobok je určený iba pre vnútorné použitie.
	Zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom.
	Jednosmerný prúd
	Tento výrobok NIE JE vhodný pre nabíjanie v kúpeľni.
	Tento symbol označuje konektor USB.
	Tento symbol znamená, že zariadenie používa lítium-iónovú polymérovú batériu.
	Tento symbol odkazuje na katalógové číslo zariadenia handLITE.
	Tento symbol označuje dávkový kód zariadenia handLITE.
Váha	280g
LED diódy:	Červené: 630 nm +/- 10 nm. Blízke infračervené: 830nm +/- 17,5nm
Celkové rozmery zariadenia:	Svetelná podložka: max. 180 mm (š) x 265 mm (v)
Program / doba ošetrenia:	10 minút
Prevádzková teplota:	0°C to 40°C
Skladovacia a prepravná teplota:	-5°C to 55°C
Prevádzková vlhkosť:	30% až 95% bez kondenzácie
Vlhkosť pri skladovaní a preprave:	20% až 85% bez kondenzácie

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese: online@riobeauty.com

Ak chcete objednať ďalšie príslušenstvo, navštívte stránku www.riobeauty.com alebo kontaktujte miestneho distribútora.

ZÁRUKA

Ak chcete zaregistrovať online dvojročnú záruku, navštívte:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4,

250 01 Zápy,

Česká Republika

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz