



FACELIFT & TONE

BEAUTY SPA

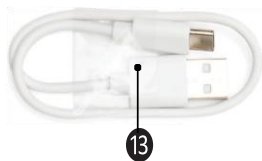

RIO-FCTL

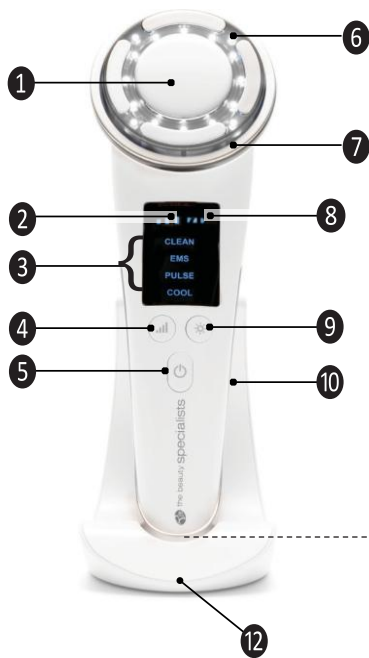

VAROVÁNÍ

- **Prosím, přečtěte si všechny pokyny důkladně a uchovejte si je pro budoucí použití.**
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí spojeným rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Uklid a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Neukládejte ani neskladujte na přímém slunci. Skladujte na chladném a suchém místě.
- Držte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
- Pokud trpíte kožním onemocněním, porad'te se před použitím s dermatologem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme používat pouze pro jednu osobou.
- Bezpečný teplotní rozsah nabíjení je 0-40 °C.
- Nepoužívejte přístroj na místa, která vykazují známky: křečových žil, kožních onemocnění (například ekzém, psoriáza, dermatitida), řezné rány a odřeniny, podráždění, bradavice, znaménka, kožní výrůstky, kožní vyrážky, přecitlivělost nebo spálení od slunce, flebitida, čerstvě zjizvená tkáň, další kožní onemocnění. Doporučujeme konzultaci s lékařem, pokud trpíte některým z výše uvedených problémů.
- Nepoužívejte na řezné rány nebo popraskanou kůži.
- Nepoužívejte na místa, kde byla provedena kosmetická operace.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru. Vypněte přístroj, než opustíte místnost.
- Tento přístroj musí být provozován pouze při bezpečném nízkém napětí (SELV) odpovídajícím označení na přístroji.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento přístroj, pokud nefunguje správně, spadl na zem nebo je poškozen.
- Nenabíjete déle než 24 hodin.
- Nepoužívejte v oblasti okolo očí.
- Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Přístroj lze čistit vlhkým hadříkem. **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani abrazivní čističe.
- Pouze pro vnější použití.

O PŘÍSTROJI

(viz strana 3)

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| 1 Ošetřující plocha | 5 Zapnuto/vypnuto/mode | 10 Vodivý kontakt |
| 2 Indikátor
intenzity/teploty | 6 Světelná terapie (červená,
modrá, zelená) | 11 USB-C zásuvka |
| 3 Indikátor režimu
(čištění, EMS, pulzy a
ochlazování) | 7 Magnetický fixační
kroužek | 12 Stojánek |
| 4 Intenzita/Teplota | 8 Indikátor nabití baterie | 13 USB nabíjecí kabel |
| | 9 LED světlo | 14 Vodivý gel |

ÚVOD

Rio FaceLift & Tone Beauty Spa kombinuje šest technologií inspirovaných profesionálními procedurami – zahřívání, chlazení, EMS mikroproudů, EMS přerušovanými pulzy, sonickými vibracemi a trojbarevnou LED světelnou terapií – každá z nich nabízí cílené přínosy pro pokožku.

Kombinované v jednom efektivním, holistickém zařízení tyto technologie poskytují kompletní proceduru, která hloubkově čistí, zpevňuje, zlepšuje vstřebávání produktů a zafixuje hydrataci.

Ať už chcete zmírnit viditelné známky stárnutí, hladkou strukturu pleti nebo udržet zdravý, zářivý lesk pokožky,

Rio FaceLift & Tone Beauty Spa je navržen tak, aby kopíroval přirozené kontury obličeje a poskytoval kompletní péči o pleť zaměřenou na výsledek v pohodlí vašeho domova.

ŠEST TECHNOLOGIÍ

ZAHŘÍVÁNÍ: Pomáhá uvolnit napětí v obličeji a změkčit povrch pokožky, což zlepšuje čištění a vstřebávání produktů. Funkce ohřevu (od 38°C do 42°C) podporuje tvorbu kolagenu a buněčnou opravu, přičemž jemně otevírá póry pro hlubší čištění.

Systém tepelné kontroly zajišťuje bezpečnou a účinnou teplotu – chrání pokožku a zachovává tukové buňky.

SONICKÁ VIBRACE: Pracuje na 8 000 vibrací za minutu, stimuluje průtok krve a pomáhá aktivovat lymfatický odtok, podporuje přirozené odstraňování toxinů a podporuje celkovou vitalitu pokožky.

EMS - MIKROPROUD: Nízké elektrické impulzy jemně stimulují obličejové svaly, podporují zpevnění. Svaly obličeje jsou jedinečné tím, že jsou jedinými svaly v těle, které jsou spojené s pokožkou, čehož využívá což EMS terapie při ošetření a stimulaci svalů.

EMS - PŘERUŠOVANÉ PULZY: Provádí rytmičké pulzy inspirované tradičními akupresurními technikami, které pomáhají uvolnit svalové napětí a zjemnit vzhled vrásek a unavené kůže. Stimuluje mikrocirkulaci, přivádí do pokožky kyslík a živiny, aby pomohly oživit matně vypadající pleť.

OCHLAZOVÁNÍ: Poskytuje okamžitý uklidňující účinek (od 15°C až po 6°C), pomáhá zklidňovat otok, zjemňovat póry a uklidňovat vystresovanou pokožku. Zamyká vlhkost, zvyšuje pevnost a zanechává pokožku svěží, hladkou a vypracovanou.

LED SVĚTLA: Modré světlo: Zaměřuje se na povrch, aby působilo čištění pleti k rovnoměrnému vzhledu. Zelené světlo: Pomáhá podpořit regeneraci pokožky a zvýrazňuje přirozený zářivý vzhled. Červené světlo: Proniká hlouběji do kůže a podporuje buněčný metabolismus a produkci kolagenu.

DŮLEŽITÉ – TEST NA POKOŽCE

Než začnete, VŽDY byste si měli udělat test na pokožce s Conductive Gelem, kvůli možné kožní reakci. Počkej 24 hodin. Pokud se objeví podráždění, nepokračujte v léčbě.

Poznámka: Vždy začínejte s nejnižší úrovní u každého režimu, aby se vaše pokožka mohla přizpůsobit. Intenzitu můžete postupně zvyšovat, tak abyste se cítili pohodlně.

Funkce sonických vibrací se aktivuje při kontaktu s kůží, tedy když se vaše ruka dotýká vodivých kontaktů (10) na stranách zařízení.

Při uvolnění se vibrace zastaví, což šetří energii a prodlužuje výdrž baterie.

NABÍJENÍ

- Připojte zařízení k USB portu pomocí USB nabíjecího kabelu.
- Indikátor baterie bliká během nabíjení zařízení. Jeden pruh znamená nízkou úroveň baterie, zatímco 3 pruhy znamenají plné nabití. Po úplném nabití se zařízení automaticky vypne po 5 minutách.
- Úplné nabití trvá asi 3 hodiny.
- Po plném nabití by zařízení mělo fungovat přibližně 40 minut.

DŮLEŽITÉ: Před použitím odpojte USB nabíjecí kabel.



POUŽÍVÁNÍ FACELIFTU A TÓNU

Zvolená úroveň intenzity/teploty je uvedena (**2**).

1. Vyčistěte a vysušte pokožku v oblasti, která má být ošetřena.
2. Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout/Režim na 2 sekundy, pro zapnutí přístroje.
Výchozí režim "CLEAN" se aktivuje automaticky.
3. Pro výběr jiného režimu ošetření stiskněte tlačítko Režim a přepínáte mezi čtyřmi možnostmi:

CLEAN: Hluboké, relaxační čištění

EMS: Zvýrazní a vytónuje pleť

PULSE: Zlepší vstřebávání produktu

COOL: Hydratuje, osvěží pleť

4. Podle režimu použijte tlačítko
Intenzita/Teplota k výběru následujících:

CLEAN: Teplota ohřevu: 38 °C, 40 °C, 42 °C

EMS: Intenzita mikroproudu: nízká, střední, vysoká

PULZ: Intenzita pulzů: nízká, střední, vysoká

CHLAD: Teplota chlazení: 15°C, 10°C, 6 °C

5. Pro výběr barvy LED světla stiskněte tlačítko LED světlo a přepínejte mezi dostupnými možnostmi: Bez světla, Červené, Modré nebo Zelené. Výběr LED je dostupný ve všech režimech.
6. Pomalu pohybujte ošetřovací hlavou po kůži podle směru šipek (viz ošetřované oblasti). Každý pohyb by měl trvat 5 až 8 sekund. Opakujte 4 až 5krát na každou oblast.
7. Pro vypnutí zařízení stiskněte a držte tlačítko Zapnout/Vypnout/Režim po dobu 2 sekund.

Důležité:

- Nepoužívejte déle než 5 minut v jedné ošetřované oblasti.
- Přístroj se automaticky vypne po 5 minutách při režimy CLEAN, EMS a PULSE a po 2 minutách při režimu COOL.

OŠETŘOVANÉ OBLASTI



1 Čelo

2 Pravá tvář

3 Levá tvář

4 Krk

OBJEVTE 4 KOMBINOVANÉ LÉČBY

Každé ošetření lze provádět samostatně nebo v kombinaci v následujícím pořadí:

CLEAN

Ohřívání + sonická vibrace + světelná terapie

- *Nejlepší začátek vaší kosmetické péče.*

Jemně odpojte magnetický upevňovací kroužek od zařízení. Položte vatový tampón na ošetřovací hlavici. Znovu připevněte kroužek, aby byl pevně připevněn.

Naneste svou oblíbenou čisticí vodu nebo odličovač. Pomalu klouzejte přístrojem od středu obličeje ven, abyste pokožku důkladně vyčistili a připravili na další režim.

Tip: Pokud máte rádi dvojité čištění, zkuste tento postup. Začněte s olejovým produktem, který rozpustí make-up, opalovací krém, maz a další olejové nečistoty. Následujte vodou ředitelným čisticím gelem.

EMS

Mikroproud + sonická vibrace + světelná terapie.

Naneste dostatečné množství Conductive Gelu na ošetřovací hlavu nebo přímo na pokožku, na ošetřovaná místa. Pomalu klouzejte přístrojem od středu plochy směrem ven. Pokud gel začne schnout, naneste ho znovu.

Tip: EMS je účinnější, když je vaše pleť dobře hydratovaná – před ošetřením vypijte sklenici vody a/nebo před gelem naneste hydratační sérum na vodní bázi.

Můžete také použít Rio Conductive Gel.

PULSE

Přerušované pulzy + sonické vibrace + světelná terapie

- *Lze ji použít po čištění a/nebo po léčbě EMS.*

Naneste své oblíbené sérum, esenci, oční krém nebo použijte přes textilní masku, abyste zlepšili vstřebávání produktu. **Tip:** Pohybujte se pomalu a jemně po obličeji – to umožní mikropulzům maximalizovat vstřebání, aniž byste přístrojem na pokožku tlačili.

COOL

Chlazení + sonická vibrace + světelná terapie

Aplikujte po vstřebání produktu jemným pohybem přitlačte a držte, pohybujte se po plošce: položte nástroj na jednu plochu na několik sekund, poté pomalu pohybujte od středu plochy směrem ven.

Tip: Na pokožku můžete aplikovat jemnou mlhu termální vody, abyste zvýšili osvěžující pocit a pohodlí během ošetření.

Každé ošetření si můžete přizpůsobit výběrem barvy LED světla, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

PO POUŽITÍ

- Pokud máte velmi citlivou pokožku, můžete si po použití všimnout zarudnutí. To by mělo odeznít po 30 minutách.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před a po použití otřete ošetřovací hlavici čistým vlhkým hadříkem, neponořujte ji do vody.

LIKVIDACE

Směrnice o odpadech elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19/EU) byla zavedena za účelem recyklace produktů s využitím nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace, minimalizace dopadu na životní prostředí, zpracování nebezpečných látek a zabránění narůstajícímu počtu skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Nesmí být vyhazován s domácím odpadem.

Recyklujte zodpovědně:

1. Zkontrolujte místní městské pokyny
2. Oddělte komponenty a správně je zlikvidujte



SPECIFIKACE

Model: FCTL
Vstup: 5,0V 1,0A 5,0W Max ☐
Baterie: Li-Po 3.7V 1000mAh 3.7Wh



Před použitím si tyto pokyny pečlivě přečtěte a pak si je uchovejte pro budoucí použití.



Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento produkt je v souladu s platnou legislativou EU o výrobcích.



Tato jednotka splňuje aktuální legislativu UKCA týkající se produktů.



Recyklační papír



PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na:

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.



Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

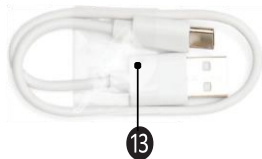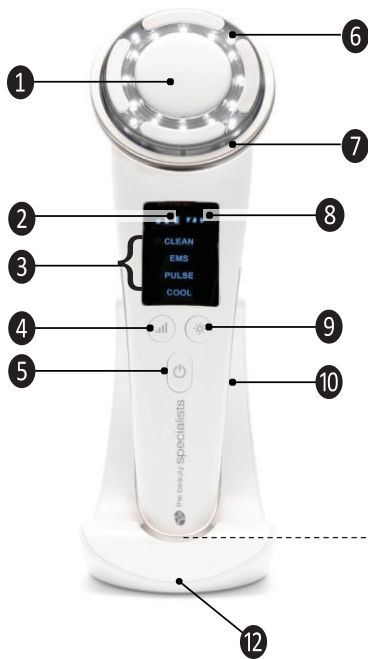

UPOZORNENIE

- **Prosím, dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uchovajte si ich pre budúce použitie.**
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Neskladujte ani neskladujte na priamom slnku. Skladujte na chladnom, suchom mieste .
- Držte sa ďalej od detí a domácich miláčikov.
- Ak trpíte plesňovým traktom, poraďte sa pred použitím s dermatológom.
- Z hygienických dôvodov odporúčame používať ho len pre jednu osobu.
- Bezpečná teplota nabíjania je 0-40°C.
- Nepoužívajte zariadenie na miestach, ktoré vykazujú príznaky: krčových žíl, kožných ochorení (napr. ekzém, psoriáza, dermatitída), rezov a odrenín, podráždenia, bradavíc, znamienok, kožných výrastkov, kožných vyrážok, precitlivenosti alebo spálenia od slnka, flebitídy, čerstvo zjazveného tkaniva, iných kožných ochorení. Ak trpíte niektorým z vyššie uvedených problémov, odporúčame poradiť sa s lekárom.
- Nepoužívajte na rezy alebo popraskanú kožu.
- Nepoužívajte na miestach, kde bola vykonaná kozmetická chirurgia.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru. Pred odchodom z miestnosti spotrebič vypni.
- Toto zariadenie musí byť prevádzkované iba pri bezpečnom nízkom napätí (SELV) zodpovedajúcim označeniu na zariadení.
- **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem alebo je poškodený.
- Nenabíjajte viac ako 24 hodín.
- Nepoužívajte v oblasti očí.
- Spotrebič nesmie prísť do kontaktu s vodou.
- Spotrebič sa dá čistiť vlhkou handričkou. **NEPOUŽÍVAJTE** rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Len na vonkajšie použitie.

O ZARIADENÍ

(pozri stranu 3)

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 Liečebná oblasť | 5 Zapnuto/vypnuto/mode | 10 Vodivý kontakt |
| 2 Indikátor
intenzity/teploty | 6 Svetelná terapia (červená,
modrá, zelená) | 11 USB-C zásuvka |
| 3 Indikátor režimu
(čistenie, EMS, impulzy
a chladenie) | 7 Magnetický fixačný
krúžok | 12 Stand |
| 4 Intenzita/Teplota | 8 Indikátor nabitia batérie | 13 USB nabíjací kábel |
| | 9 LED svetlo | 14 Vodivý gél |

ZAVEDENIE

Rio FaceLift & Tone Beauty Spa kombinuje šesť technológií inšpirovaných profesionálnymi procedúrami – vykurovanie, chladenie, EMS mikroprúdy, EMS prerušované pulzy, sonické vibrácie a trojfarebnú LED svetelnú terapiu – každá ponúka cielené benefity pre pokožku.

V kombinácii v jednom účinnom, holistickom zariadení tieto technológie poskytujú kompletnú liečbu, ktorá hlboko čistí, stvrdne, zlepšuje vstrebávanie produktov a opravuje hydratáciu.

Či už chcete znížiť viditeľné známky starnutia, hladkú textúru pokožky alebo udržať zdravý, žiarivý lesk svojej pokožky, **Rio FaceLift & Tone Beauty Spa** je navrhnutý tak, aby napodobňoval prirodzené kontúry vašej tváre a poskytoval komplexnú, na výsledky orientovanú starostlivosť o pleť v pohodlí vášho domova.

ŠEŠŤ TECHNOLOGIÍ

ZAHRIEVANIE: Pomáha uvoľniť napätie v tvári a zmäkčiť povrch pokožky, čo zlepšuje čistenie a vstrebávanie produktov. Funkcia ohrevu (od 38°C do 42°C) podporuje tvorbu kolagénu a opravu buniek, pričom jemne otvára póry pre hlbšie čistenie. Systém tepelnej regulácie zabezpečuje bezpečnú a efektívnu teplotu – chráni pokožku a zachováva tukové bunky.

ZVUKOVÁ VIBRÁCIA: Funguje rýchlosťou 8 000 vibrácií za minútu, stimuluje prietok krvi a pomáha aktivovať lymfatický odtok, podporuje prirodzené odstraňovanie toxínov a podporuje celkovú vitalitu pokožky.

EMS - MIKROPRÚD: Nízke elektrické impulzy jemne stimulujú tvárové svaly a podporujú spevnenie. Svaly tváre sú jedinečné tým, že sú jedinými svalmi v tele, ktoré sú spojené s pokožkou, čo EMS terapia využíva na liečbu a stimuláciu svalov.

EMS - PRERUŠOVANÉ PULZY: Vykonáva Rytmické pulzy inšpirované tradičnými akupresúrnymi technikami, ktoré pomáhajú uvoľniť svalové napätie a zjemniť vzhľad vrások a unavených pokožk. Stimuluje mikrocirkuláciu, prináša do pokožky kyslík a živiny, aby pomohla oživiť matnú pokožku.

CHLADENIE: Poskytuje okamžitý upokojujúci účinok (od 15°C do 6°C), pomáha zmierniť opuch, zjemniť póry a upokojiť vystresovanú pokožku. Zamyká vlhkosť, zvyšuje pevnosť a zanecháva pokožku sviežu, hladkú a vypracovanú.

LED SVETLÁ: Modré svetlo: Zameriava sa na povrch, aby očistilo pokožku a dosiahlo rovnomerný vzhľad. Zelené svetlo: Pomáha podporovať regeneráciu pokožky a zvýrazňuje prirodzený žiarivý vzhľad. Červené svetlo: Preniká hlbšie do pokožky a podporuje bunkový metabolizmus a tvorbu kolagénu.

DÔLEŽITÉ – KOŽNÝ TEST

Pred začiatkom by ste mali VŽDY urobiť kožný test s Conductive Gelom, kvôli možnej kožnej reakcii. Počkaj 24 hodín. Ak sa objaví podráždenie, nepokračujte v liečbe.

Poznámka: Vždy začnite s najnižšou úrovňou pre každý režim, aby si vaša pokožka mohla zvyknúť. Intenzitu môžete postupne zvyšovať, aby ste sa cítili pohodlne.

Funkcia sonických vibrácií sa aktivuje, keď príde do kontaktu s pokožkou, teda keď sa vaša ruka dotkne vodivého (10) kontaktu na bokoch zariadenia.

Po uvoľnení vibrácie prestanú, čím sa šetrí energia a predlžuje výdrž batérie.

NABÍJANIE

- Pripojte zariadenie k USB portu pomocou USB nabíjacieho kábla.
- Indikátor batérie bliká počas nabíjania zariadenia. Jeden pruh znamená nízku úroveň batérie, zatiaľ čo 3 pruhy znamenajú plné nabitie. Keď je úplne nabité, zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach.
- Úplné nabitie trvá asi 3 hodiny.
- Po úplnom nabití by zariadenie malo fungovať približne 40 minút.

DÔLEŽITÉ: Pred použitím odpojte USB nabíjací kábel.



POUŽITIE FACELIFTU A TÓNU

Zvolená úroveň intenzity/teploty je uvedená (**2**).

1. Vyčistite a vysušte pokožku v oblasti, ktorá sa má ošetriť.
2. Stlačte tlačidlo On/Off/Mode na 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli.
Predvolený režim "CLEAN" sa aktivuje automaticky.
3. Na výber iného režimu liečby stlačte tlačidlo
Režim a prepínajte medzi štyrmi možnosťami:

CLEAN: Hlboké, relaxačné **EMS**

čistenie: melíry a tóny pokožky

PULZ: Zlepšuje vstrebávanie

produktov **COOL:** Hydratuje,

osviežuje pokožku

4. V závislosti od režimu použite tlačidlo
Intenzita/Teplota na výber nasledujúceho:

CLEAN: Teplota ohrevu: 38 °C, 40 °C, 42 °C

EMS: Intenzita mikroprúdu: nízka, stredná, vysoká

PULZ: Intenzita pulzu: nízka, stredná, vysoká

STUDENÁ: Chladná teplota: 15°C, 10°C, 6°C

5. Na výber farby LED svetla stlačte tlačidlo LED svetla a prepínajte medzi dostupnými možnosťami: Bez svetla, Červená, Modrá alebo Zelená. Výber LED je dostupný vo všetkých režimoch.
6. Pomaly pohybujte ošetrovateľskou hlavou po koži v smere šípk (pozri oblasti, ktoré sa majú ošetriť). Každý pohyb by mal trvať 5 až 8 sekúnd. Opakujte 4 až 5-krát pre každú oblasť.
7. Na vypnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo Zapnuté/Vypnuté/Režim na 2 sekundy.

Dôležité:

- Nepoužívajte viac ako 5 minút v jednej ošetrenej oblasti.
- Zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach v režimoch CLEAN, EMS a PULSE a po 2 minútach v režime COOL.

LIEČEBNÉ OBLASTI



1 Čelo

2 Pravá tvár

3 Ľavé líce

4 Krk

OBJAVTE 4 KOMBINOVANÉ LIEČBY

Každé ošetrenie môže byť vykonané samostatne alebo v kombinácii v nasledujúcom poradí:

ČISTÉ

Zahrievanie + sonická vibrácia + svetelná terapia
- *Najlepší začiatok vašej kozmetickej rutiny.*

Jemne odpojte magnetický zadržiavací krúžok od zariadenia. Na ošetrovateľskú hlavu priložte vatový tampón. Znovu pripevnite krúžok tak, aby bol pevne pripevnený.

Použite svoju obľúbenú čistiacu vodu alebo odličovač. Pomaly posúvajte zariadenie od stredu tváre smerom von, aby ste dôkladne vyčistili pokožku a pripravili ju na ďalšiu rutinu.

Tip: Ak máte radi dvojité čistenie, vyskúšajte tento postup. Začnite s masným produktom, ktorý rozpúšťa make-up, opalovací krém, maz a ďalšie masné nečistoty. Následne použite vodou riediteľný čistiaci gél.

EMS

Mikroprúd + zvukové vibrácie + svetelná terapia.

Naneste dostatočné množstvo vodivého gélu na ošetrovanú hlavu alebo priamo na pokožku, na ošetrované oblasti. Pomaly posúvajte zariadenie od stredu povrchu smerom von. Ak gél začne schnúť, naneste ho znova.

Tip: EMS je účinnejší, keď je vaša pokožka dobre hydratovaná – pred ošetrením si dajte pohár vody a/alebo pred gélom naneste hydratačný sérum na vodnej báze.

Môžete použiť aj Rio Conductive Gel.

PULSE

Prerušované pulzy + sonické vibrácie + svetelná terapia

- *Môže sa používať po čistení a/alebo po ošetrovaní EMS.*

Naneste svoje obľúbené sérum, esenciu, očný krém alebo na látkovú masku, aby ste zlepšili vstrebávanie produktu. **Tip:** Pohybujte sa pomaly a jemne po tvári – to umožní mikropulzom maximalizovať vstrebávanie bez toho, aby zariadenie tlačilo na pokožku.

SUPER

Chladenie + Zvukové vibrácie + Svetelná terapia
Aplikujte po vstrebávaní produktu, jemne pritlačte a držte, pohybujte sa po oblasti: umiestnite nástroj na jednu plochu na niekoľko sekúnd, potom pomaly pohybujte od stredu oblasti smerom von.

Tip: Môžete na pokožku aplikovať jemnú hmlu termálnej vody, aby ste zvýšili osviežujúci pocit a pohodlie počas ošetrovania.

Každé ošetrovanie si môžete prispôbiť výberom farby LED svetla, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

PO POUŽITÍ

- Ak máte veľmi citlivú pokožku, môžete si po použití všimnúť začervenanie. To by malo ustúpiť po 30 minútach.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred a po použití utrite ošetrovací hlavu čistou, vlhkou handričkou, neponorte ju do vody.

LIKVIDÁCIA

Smernica o odpadoch, elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať produkty pomocou najlepších dostupných techník zberu a recyklácie, minimalizovať environmentálny dopad, spracovávať nebezpečné látky a predchádzať rastúcemu počtu skládok. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto prosím zabezpečte, aby bol na konci svojej životnosti správne zlikvidovaný v súlade s požiadavkami miestnych úradov. Nesmie sa vyhadzovať s domácim odpadom.

Recyklujte zodpovedne:

1. Skontrolujte miestne mestské smernice
2. Oddelte komponenty a správne ich zlikvidujte



ŠPECIFIKÁCIE

Model: FCTL
Vstup: 5,0V 1,0A Max 5,0W ☐
Batérie: Li-Po 3.7V 1000mAh 3.7Wh



Prosím, pred použitím si tieto pokyny dôkladne prečítajte a potom si ich uchovajte pre budúce použitie.



Tento produkt je určený výhradne na použitie v inter



Tento produkt je v súlade s platnou legislatívou EÚ o výrobkoch.



Táto jednotka spĺňa aktuálnu legislatívu UKCA o produktoch.



Recyklačný papier



ZÁKAZNÍCKA STAROSTLIVOST

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na:

KONTAKTUJTE SERVISNÉ CENTRUM:

Exkluzívny dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:

BORGY CZ, a. s.

Sťažnosti / služba

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz