

LED maska na obličej
Maska FCAA



the beauty specialists



BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Prosím, přečtěte si všechny pokyny důkladně a uchovejte si je pro budoucí použití.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou instrukcionovány ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí spojeným rizikům, nebo dohledem dospělé osoby. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Úklid a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. Kontaktujte zákaznickou podporu a domluvte si výměnu.
- Neponořujte produkt do vody. Tento spotřebič lze čistit otřením vlhkým hadříkem. **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani abrazivní čističe.
- LED masku nepoužívejte při užívání léků, které by mohly způsobit citlivost na světlo.
- Používání masky při užívání léků citlivých na světlo může vést k podráždění kůže nebo jiným reakcím.
- Některé léky, například některá antibiotika, léčba rakoviny a diuretika, mohou vaši pokožku učinit citlivější na světlo, proto se vždy poraďte se svým lékařem, pokud si nejste jisti.
- Používejte zařízení pouze způsobem uvedeným v návodu.
- Nepoužívejte masku, pokud jste těhotná, kojíte nebo se snažíte otěhotnět.
- Vyhněte se používání zařízení, pokud máte zdravotní potíže, jako je lupus, albinismus nebo fotosenzitivní ekzém.
- Nepoužívejte masku, pokud máte nějakou poruchu způsobující citlivost na světlo.
- Před prvním použitím zařízení vždy proveďte test na ruce, abyste zjistili případnou citlivost pokožky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** LED masku žádným jiným způsobem, který není přesně uveden v těchto instrukcích.
- Masku okamžitě přestaňte používat, pokud cítíte přehřátí pokožky.

- Používejte pouze doporučené gelové kosmetické prostředky, které jsou určeny pro bezpečnou aplikaci této masky.
- Před použitím masky si pleť vyčistěte a odstraňte veškerý make-up, krémy nebo lotiony.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody a nepoužívejte ho ve vlhkém prostředí nebo pokud došlo k kontaktu s kapalinami.
- Neumísťujte zařízení blízko horkých povrchů ani ho nevystavujte vysokým teplotám.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení upravovat nebo opravovat sami, protože tím můžete zrušit záruku a může to být nebezpečné.
- Masku nepoužívejte, pokud je poškozena nějaká její část, například maska, ovladač nebo nabíjecí kabel.
- Pásek obsahuje polyester, nylon a lykru, proto jej nepoužívejte, pokud jste na některý z těchto materiálů alergičtí.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte sklony k bolestem hlavy způsobeným jasným nebo blikajícím světlem.
- Vždy připojte správný adaptér před zapojením zařízení do zásuvky.
- NESDÍLEJTE LED masku s nikým jiným. LED maska je určena pouze pro jednu osobu.
- Dodržujte doporučený postup ošetření pleti a vyhýbejte se používání masky častěji, než je doporučeno.
- LED maska musí být používána pouze při bezpečném nízkém napětí (SELV) odpovídajícím označení na LED masce.
- Nepoužívejte na místech, na kterých byla provedena kosmetická operace.
- Vždy zařízení odpojte ihned po použití a před čištěním.
- Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. Vypni masku vždy než opustíte místnost.
- Držte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
- Nepoužívejte ve vaně ani ve sprše.
- Nenabíjejte déle než 24 hodin.
- LED maska na obličej se používá pouze s dodaným ovladačem (LED Face Mask Controller).
- Pokud trpíte kožním onemocněním, poraďte se před použitím s dermatologem;

Citlivost na světlo, neboli fotosenzitivita, je známý vedlejší účinek mnoha léků. To může zahrnovat určité typy antibiotik, léčbu rakoviny a odvodňovací pilulky (diuretika). Pokud si nejste jisti, zda lék, který užíváte, může tuto reakci vyvolat, je nejlepší poradit se s lékařem nebo lékárníkem.

Kromě léků mohou i jiné látky způsobit, že kůže reaguje na sluneční záření. Mezi běžné příklady patří: třezalka, dehet, některé deodoranty, antibakteriální mýdla, umělá sladidla, naftalín (obsahující naftalen), produkty na bázi ropy, optické zesvětlovače v pracích prostředcích a sulfid kadmia (někdy používaný v pigmentech tetování).

ÚVOD

Přirozeným stárnutím pokožka postupně ztrácí pevnost, vlhkost a pružnost, což často vede k vráskám a matnosti. Tato LED pleťová maska je navržena tak, aby podporovala omlazení obličeje pomocí cílených vlnových délek světelné terapie.

Maska vyzařuje světlo na specifických vlnových délkách, které jsou známé tím, že podporují redukci jemných linek a vrásek a časem podporují zdravější vzhled pokožky.

Toto zařízení je určeno pro domácí použití dospělými, kteří hledají neinvazivní možnost ke zlepšení vzhledu obličeje a snížení viditelnosti jemných linek. Výsledky se mohou lišit v závislosti na individuálním kožním stavu a frekvenci užívání.

Popis LED masky

- | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 Řemeny na hlavu | 6 Indikátor režimu/barev | 11 Indikátor baterie |
| 2 LED maska | 7 Indikátor intenzity | 12 Čas |
| 3 USB nabíjecí kabel | 8 Zapnuto/Vypnuto | 13 Mode |
| 4 Cestovní taška na | 9 Zvýšení intenzity | 14 Navýšení času |
| 5 Ovladač | 10 Snížení intenzity | 15 Snížení času |

PATCH TEST

Před zahájením první terapie je důležité provést test citlivosti:

1. Vyberte si čistou, malou oblast pokožky (například vnitřní stranu předloktí).
2. Na tuto oblast umístěte LED masku a proveďte kompletní terapii na plánované intenzitě.
3. Počkejte 6–8 hodin po testu. Pokud si všimnete nadměrného zarudnutí, svědění nebo podráždění, nepokračujte v používání na obličej.
4. Pokud nejsou pozorovány žádné nežádoucí účinky, můžete zahájit běžnou terapii.

NABÍJENÍ

Pro nabíjení LED masky vložte USB nabíjecí kabel do ovladače a zapojte ho do USB portu. Ukazatele baterie ukazují 5 čárek po úplném nabití. Ovladač se plně nabíjí mezi 2,5–3 hodinami.


Poznámka: Vždy dobíjejte, když má indikátor baterie 1 čárku. LED maska nefunguje během nabíjení.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Před každou terapií se ujistěte, že je LED maska vypnutá a čistá. Podrobné pokyny najdete v sekci čištění na další stránce.

Maska je vybavena nastavitelnými popruhy na hlavě pro bezpečné a pohodlné usazení:

1. Vložte popruhy přes drážky na každé straně masky.
2. Omotejte si popruhy kolem hlavy a zapněte je pomocí přiloženého systému háčků a smyček. Upravte pro pohodlí a stabilitu.
3. Vložte vodič z LED masky do ovladače.

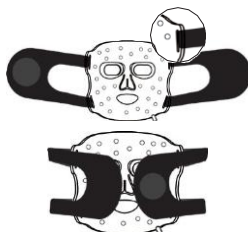

LED TERAPIE

Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje používat LED obličejovou masku pravidelně po několik týdnů.

- Začněte s 3 až 5 ošetřeními týdně během prvních 6 týdnů.
 - Upravte frekvenci podle citlivosti vaší pokožky a vaší rutiny v péči o pleť.
1. Stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout** pro zapnutí masky. Výchozí režim (**Režim 1**: červená + blízké infračervené světlo) se aktivuje automaticky.
 2. Pro výběr světelného režimu stiskněte tlačítko **"Mode"** a přepínáte mezi čtyřmi možnostmi ošetření:
 - Režim 1**: červené + blízké infračervené světlo (maximálně 17 minut)
 - Režim 2**: pouze na červené světlo (maximálně 25 minut)
 - Režim 3**: modré světlo (maximálně 20 minut)
 - Režim 4**: červené + modré světlo (maximálně 20 minut)
 3. Pro nastavení intenzity použijte tlačítka **"Intensity +"** nebo **"Intensity -"** pro nastavení jasu (úroveň 1–3). Začněte s nižší intenzitou a zvyšujte podle pohodlí.
 4. Pro nastavení času ošetření stiskněte tlačítka **"čas +"** nebo **"čas -"** pro úpravu délky ošetření po **5 minutách**. Obrazovka časovače odpočítává a maska se automaticky vypne, jakmile čas ošetření skončí.

Poznámka: Každý režim má stanovené maximální časové limity – viz výše.
 5. Po skončení ošetření sundejte masku, vypněte zařízení a naneste běžný hydratační krém a opalovací krém.

PÉČE PO OŠETŘENÍ A REAKCE

Po léčbě mohou někteří jedinci zaznamenat dočasné kožní reakce:

- Po použití se může objevit mírné zarudnutí, ale obvykle během několika hodin zmizí.
- V některých případech mohou uživatelé pociťovat mírné olupování, suchost nebo svědění, které obvykle rychle odezní.
- Po sezeních byly hlášeny občasné mírné bolesti hlavy.

Zařízení využívá světelné vlnové délky, které jsou obecně považovány za bezpečné pro kosmetické použití. Pokud však pociťujete neobvyklé nepohodlí nebo kožní reakci, okamžitě přestaňte masku užívat a v případě potřeby se poradte s lékařem.

Možné použití gelů/sér na posílení účinku ošetření:

Účinky používání LED masky lze podpořit použitím kosmetických gelů/sér, určených k použití při terapii LED červeným světlem.

ČIŠTĚNÍ

Správné čištění je nezbytné pro udržení hygieny a prodloužení životnosti zařízení. Před každým použitím:

- Vypněte zařízení a odpojte ho od jakéhokoli zdroje nabíjení.
- Vnitřek i vnější část masky otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- Vyhněte se agresivním chemikáliím, abrazivním materiálům nebo ponoření zařízení do vody.
- Pro důkladnější čištění lehce použijte hadřík navlhčený 70% alkoholem.

Péče o ovladač:

- Jemně otřete suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
- Vyhněte se vlhkosti v blízkosti konektorů.

UKLÁDÁNÍ

- Masku skladujte na čistém, suchém místě při pokojové teplotě.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo prachu.
- Používejte přiloženou tašku k ochraně zařízení během cestování nebo když není používáno.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
LED světla se nerozsvítí	Baterie není nabitá	Zařízení plně nabít pomocí dodaného USB kabelu.
Světla zůstávají rozsvícená i po uplynutí doby ošetření	Chyba časovače	Vypněte ručně. Pokud se to bude opakovat, kontaktujte zákaznickou podporu.
Blikající světla	Vnitřní porucha	Přestaňte používat a požádejte o náhradu.
Zařízení se nezapne	Volné spojení	Zkontrolujte všechny kabely a ujistěte se, že je maska nabitá. Zkuste to znovu po odpojení.

Poznámka: Pokud problém přetrvává i po odstranění problémů, přestaňte zařízení používat a kontaktujte zákaznickou podporu Rio.

LIKVIDACE



Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19/ EU) byla zavedena za účelem recyklace produktů s využitím nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace, minimalizace dopadu na životní prostředí, zpracování nebezpečných látek a předcházení rostoucímu počtu skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Nesmí být vyhazován s domácím odpadem.

Recyklujte zodpovědně:

1. Zkontrolujte místní městské pokyny
2. Oddělte komponenty a správně je zlikvidujte

SPECIFIKACE

Vstup ovladače: 5V $\equiv$ 1.0A 5.0W $\leftrightarrow$

Vstup do masky: 5V $\equiv$ 1.0A 5.0W Max z ovladače



Tento produkt je v souladu s platnou legislativou EU o výrobcích.



Tento symbol označuje USB konektor.



Před použitím si tyto pokyny pečlivě přečtěte a pak si je uchovejte pro budoucí použití.



Symbol třídy III (IEC 60417-5180).



Tato jednotka splňuje aktuální legislativu UKCA týkající se produktů.



Tento produkt je určen pouze pro

vnitřní použití. $\equiv$ Stejnoseměrný proud.



Recyklujte papír.



Odnímatelný zdroj IEC 60417-6181.

Modelové číslo: FCAA

Čas programu: 5–25 minut

Vlnové délky: • Červená (650-655 nm)
• Modrá (405-410nm)
• NIR (845-855 námořních m)

Maximální intenzita výstupu:

30mW/cm²

Provozní teplota:

0°C až 30°C (32°F až 86°F)

Teplota skladování a transportu:

-5°C až 55°C (23°F až 131°F)

Provozní vlhkost:

30 % až 95 % bez kondenzace

Skladování a přeprava vlhkosti:

20 % až 85 % bez kondenzace

Elektrický výstup: 5V, 1A

IP22

ZÁRUKA

Výrobce EU RP: The Dezac Group (Evropa) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Nizozemsko
Pro registraci dvouleté záruky online navštivte:

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s. Reklamace / servis areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika Tel.:
+420 326 320 662, E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prosím, dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uchovajte si ich pre budúce použitie.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a vedomostí, ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, alebo pod dohľadom dospelého. Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Kontaktujte zákazníčku podporu a dohodnite si výmenu.
- Neponorte produkt do vody. Tento spotrebič je možné vyčistiť utieraním vlhkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte LED masku počas užívania liekov, ktoré môžu spôsobiť citlivosť na svetlo.
- Používanie masky pri užívaní liekov citlivých na svetlo môže viesť k podráždeniu pokožky alebo iným reakciám.
- Niektoré lieky, ako sú antibiotiká, liečby rakoviny a diuretiká, môžu vašu pokožku zvýšiť citlivosť na svetlo, preto sa vždy poraďte so svojim lekárom, ak si nie ste istí.
- Používajte zariadenie len spôsobom špecifikovaným v inštrukciách.
- Nepoužívajte rúško, ak ste tehotná, dojčíte alebo sa snažíte otehotnieť.
- Vyhnite sa používaniu zariadenia, ak máte zdravotné stavy ako lupus, albinizmus alebo fotosenzitívny ekzém.
- Nepoužívajte masku, ak máte akúkoľvek poruchu spôsobujúcu citlivosť na svetlo.
- Vždy si pred prvým použitím zariadenia urobte ručný test, aby ste zistili prípadnú citlivosť pokožky.
- NEPOUŽÍVAJTE LED masku inak, ak to nie je výslovne uvedené v týchto návodoch.
- Masku okamžite prestať používať, ak cítiš prehrievanie pokožky.

- Používajte len odporúčané gélové kozmetické prípravky, ktoré sú navrhnuté na bezpečnú aplikáciu tejto masky.
- Pred použitím masky si vyčistí pokožku a odstráni všetok make-up, krémy alebo krémy.
- Udržiavajte zariadenie mimo kontaktu s vodou a nepoužívajte ho vo vlhkých podmienkach alebo v prípade kontaktu s kvapalinami.
- Neumiestňujte zariadenie blízko horúcich povrchov ani ho nevystavujte vysokým teplotám.
- Nikdy sa nepokúšajte zariadenie upravovať alebo opravovať sami, pretože by to mohlo zrušiť záruku a byť nebezpečné.
- Nepoužívajte masku, ak je poškodená akákoľvek časť masky, napríklad maska, ovládač alebo nabíjací kábel.
- Popruh obsahuje polyester, nylon a lykru, preto ho nepoužívajte, ak ste alergický na niektorý z týchto materiálov.
- Nepoužívajte zariadenie, ak máte sklony k bolestiam hlavy spôsobeným jasným alebo blikajúcim svetlom.
- Vždy pripojte správny adaptér predtým, než zariadenie zapojíte do zásuvky.
- NEZDIEĽAJTE LED masku s nikým iným. LED maska je určená len pre jednu osobu.
- Dodržujte odporúčaný postup ošetrovania pokožky a masku používajte častejšie, než je odporúčané.
- LED maska sa musí používať iba pri bezpečnom nízkom napätí (SELV) zodpovedajúcom označeniu na LED maske.
- Nepoužívajte v oblastiach, kde bola vykonaná kozmetická chirurgia.
- Vždy spotrebič odpojte hneď po použití a pred čistením.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté. Vypni masku, než opustíte miestnosť.
- Držte sa ďalej od detí a domácich miláčikov.
- Nepoužívajte vo vani ani sprche.
- Nenabíjajte viac ako 24 hodín.
- LED Face Mask Controller sa používa iba s dodávaným ovládačom (LED Face Mask Controller).
- Ak trpíte plesňou, poraďte sa pred použitím s dermatológom;

Citlivosť na svetlo, alebo fotosenzitivita, je známy vedľajší účinok mnohých liekov. To môže zahŕňať určité typy antibiotík, liečbu rakoviny a diuretické tabletky. Ak si nie ste istí, či liek, ktorý užívate, môže túto reakciu vyvolať, je najlepšie poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.

Okrem liekov môžu aj iné látky spôsobiť reakciu pokožky na slnečné svetlo. Bežné príklady zahŕňajú: ľubovník bodkovaný, decht, niektoré deodoranty, antibakteriálne mydlá, umelé sladidlá, naftalen (obsahujúci naftalín), produkty na báze ropy, optické zosvetľovače v pracích prostriedkoch a sulfid kadmia (niekedy používaný v pigmentoch na tetovania).

ZAVEDENIE

Pri prirodzenom starnutí pokožka postupne stráca pevnosť, vlhkosť a elasticitu, čo často vedie k vráskam a matnosti. Táto LED pleťová maska je navrhnutá tak, aby podporovala omladenie tváre pomocou cieľových vlnových dĺžok svetelnej terapie.

Maska vyžaruje svetlo na špecifických vlnových dĺžkach, ktoré sú známe tým, že podporujú redukciu jemných liniek a vrások a časom podporujú zdravší vzhľad pokožky.

Toto zariadenie je určené na domáce použitie dospelými, ktorí hľadajú neinvazívnu možnosť na zlepšenie vzhľadu tváre a zníženie viditeľnosti jemných vrások. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho kožného ochorenia a frekvencie používania.

Popis LED masky

- | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| ❶ Popruhy na hlavu | ❸ Indikátor režimu/farby | ❺ Indikátor batérie |
| ❷ LED maska | ❹ Indikátor intenzity | ❻ Čas |
| ❸ USB nabíjací kábel | ❺ Zapnuto/Vypnuto | ❼ Mode |
| ❹ Cestovná taška pre | ❻ Zvýšenie intenzity | ❽ Zvýšenie času |
| ❺ Ovládač | ❼ Zníženie intenzity | ❾ Zníženie času |

PATCH TEST

Pred začiatkom prvej terapie je dôležité vykonať test citlivosti:

1. Vyberte si čistú, malú časť pokožky (napríklad vnútornú stranu predlaktia).
2. Na túto oblasť umiestnite LED masku a vykonajte kompletnú terapiu s plánovanou intenzitou.
3. Počkajte 6-8 hodín po teste. Ak si všimnete nadmerné začervenanie, svrbenie alebo podráždenie, nepoužívajte ho ďalej na tvár.
4. Ak sa neobjavia žiadne vedľajšie účinky, môžete začať pravidelnú liečbu.

NABÍJANIE


Na nabíjanie LED masky vložte USB nabíjací kábel do ovládača a zapojte ho do USB portu. Indikátory batérie ukazujú 5 pruhov pri úplnom nabití. Ovládač sa plne nabíja medzi 2,5-3 hodinami.

Poznámka: Vždy dobíjaj, keď má indikátor batérie 1 pruh. LED maska nefunguje počas nabíjania.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Pred každou terapiou sa uistite, že je LED maska vypnutá a čistá. Podrobné pokyny nájdete v sekcii o čistení na nasledujúcej strane. Masku je vybavená nastaviteľnými popruhmi na hlave pre bezpečné a pohodlné nasadenie:

1. Vložte popruhy cez drážky na každej strane masky.
2. Omotajte si popruhy okolo hlavy a upevnite ich pomocou priloženého systému háčikov a slučiek. Upravte pre pohodlie a stabilitu.
3. Vložte vodič z LED masky do ovladača.

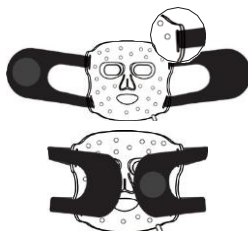

LED TERAPIA

Pre optimálne výsledky sa odporúča pravidelne používať LED rúško niekoľko týždňov.

- Začnite s 3 až 5 ošetreniami týždenne počas prvých 6 týždňov.
 - Prispôbujte frekvenciu podľa citlivosti vašej pokožky a vašej rutiny starostlivosti o pleť.
1. Stlačte tlačidlo **Zap/Vypnutie** na zapnutie masky. Predvolený režim (**Režim 1**: červené + blízke infračervené svetlo) sa aktivuje automaticky.
 2. Na výber svetelného režimu stlačte tlačidlo **"Režim"** a prepínajte medzi štyrmi možnosťami liečby:
 - Režim 1**: červené + blízke infračervené svetlo (maximálne 17 minút)
 - Režim 2**: len červené svetlo (maximálne 25 minút)
 - Režim 3**: modré svetlo (maximálne 20 minút)
 - Režim 4**: červené + modré svetlo (maximálne 20 minút)
 3. Na nastavenie intenzity použite tlačidlá **"Intensity +"** alebo **"Intensity -"** na nastavenie jasú (úrovne 1-3). Začnite s nižšou intenzitou a zvyšujte intenzitu podľa pohodlia.
 4. Na nastavenie času ošetrenia stlačte tlačidlá **"čas +"** alebo **"čas -"**, aby ste upravili trvanie ošetrenia po **5 minútach**. Časovač odpočítava a maska sa automaticky vypne, keď skončí čas ošetrenia.

Poznámka: Každý režim má maximálny časový limit – viď vyššie.
 5. Po ošetrení odstráňte masku, vypnite zariadenie a naneste bežný hydratačný krém a opaľovací krém.

NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ A REAKCIE

Po liečbe môžu niektorí ľudia zaznamenať dočasné kožné reakcie:

- Po použití sa môže objaviť mierne začervenanie, ale zvyčajne zmizne do niekoľkých hodín.
- V niektorých prípadoch môžu používatelia pociťovať mierne olupovanie, suchosť alebo svrbenie, ktoré zvyčajne rýchlo ustúpi.
- Po sedeniach boli hlásené občasné mierne bolesti hlavy.

Zariadenie používa svetelné vlnové dĺžky, ktoré sú všeobecne považované za bezpečné na kozmetické použitie. Ak však pociťujete nezvyčajné nepohodlie alebo kožnú reakciu, okamžite prestaňte masku používať a v prípade potreby sa poraďte s lekárom.

Možné použitie gélov/sér na zvýšenie účinku liečby:

Účinky používania LED masky možno podporiť použitím kozmetických gélov/sér určených na použitie v LED terapii červeným svetlom.

ČISTENIE

Správne čistenie je nevyhnutné na udržiavanie hygieny a predĺženie životnosti zariadenia. Pred každým použitím:

- Vypnite zariadenie a odpojte ho od akéhokoľvek zdroja nabíjania.
- Vnútro a vonkajšok masky utrite mäkkou, vlhkou handričkou.
- Vyhnite sa agresívnym chemikáliám, abrazívnym materiálom alebo ponoreniu zariadenia do vody.
- Pre dôkladnejšie čistenie jemne použite handričku navlhčenú 70% alkoholom.

Starostlivosť o vodiča:

- Jemne utrite suchou alebo mierne vlhkou handričkou.
- Vyhýbajte sa vlhkosti v blízkosti konektorov.

SKLADOVANIE

- Masku skladujte na čistom, suchom mieste pri izbovej teplote.
- Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo prachu.
- Použite priloženú tašku na ochranu zariadenia počas cestovania alebo keď sa nepoužíva.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
LED svetlá sa nezapínajú	Batéria nie je nabitá	Zariadenie úplne nabite pomocou priloženého USB kábla.
Svetlá zostávajú zapnuté aj po období liečby	Chyba časovača	Vypnite manuálne. Ak sa to stane znova, kontaktujte zákaznícku podporu.
Blikajúce svetlá	Vnútoraná porucha	Prestaňte používať a požiadajte o vrátenie peňazí.
Zariadenie sa nezapne	Voľné pripojenie	Skontrolujte všetky káble a uistite sa, že je maska nabitá. Prosím, skúste to znova po odpojení.

Poznámka: Ak problém pretrváva aj po jeho odstránení, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte zákaznícku podporu Rio.

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpadoch, elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať produkty s využitím najlepších dostupných techník zberu a recyklácie, minimalizovať environmentálny dopad, zaobchádzať s nebezpečnými látkami a predchádzať rastúcemu počtu skládok. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto prosím zabezpečte, aby bol na konci svojej životnosti správne zlikvidovaný v súlade s požiadavkami miestnych úradov. Nesmie sa vyhadzovať s domácim odpadom.

Recyklujte zodpovedne:

1. Skontrolujte miestne mestské smernice
2. Oddelte komponenty a správne ich zlikvidujte

ŠPECIFIKÁCIE

Vstup ovládača: 5V $\equiv$ 1,0A 5,0W $\leftrightarrow$

Vstup do masky: 5V $\equiv$ 1.0A 5.0W Max z ovládača



Tento produkt je v súlade s platnou legislatívou EÚ o výrobkoch.



Tento symbol označuje USB konektor.



Prosím, pred použitím si tieto pokyny dôkladne prečítajte a potom si ich uchovajte pre budúce použitie.



Symbol triedy III (IEC 60417-5180).



Táto jednotka spĺňa aktuálnu legislatívu UKCA o produktoch.



Tento produkt je určený výhradne



Recyklujte papier.

na použitie v interiéri. $\equiv$

Jednosmerný prúd.

$\oplus \square \ominus$ Odnímateľný zdroj napájania IEC 60417-6181.

Modelové číslo: FCAA

Čas programu: 5-25 minút

Vlnové dĺžky: • Červená (650-655 nm)
• Modrá (405-410nm)
• NIR (845-855 námorných m)

Maximálna intenzita vzostupu:

30mW/cm²

Prevádzková teplota:

0°C až 30°C (32°F až 86°F)

Teplota skladovania a prepravy:

-5°C až 55°C (23°F až 131°F)

Prevádzková vlhkosť:

30 % až 95 % nekondenzujúce

Ukladanie a transport vlhkosti:

20 % až 85 % nekondenzujúce

Elektrický výstup: 5V, 1A

IP22

ZÁRUKA

Výrobca EÚ RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Holandsko
Ak chcete zaregistrovať svoju dvojročnú záruku online,
navštívte:

KONTAKTUJTE SERVISNÉ CENTRUM:

Exkluzívny dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:
BORGY CZ, a.s. Komplex sťažností / služieb RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika Tel.:
+420 326 320 662, E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz



UK Product RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Anglie, GL53 7ET
Produkt EÚ RP: The Dezac Group (Európa) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Nizozemsko

©The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, Anglie GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-FCAA-EU/1.0