


WATER FLOSSER

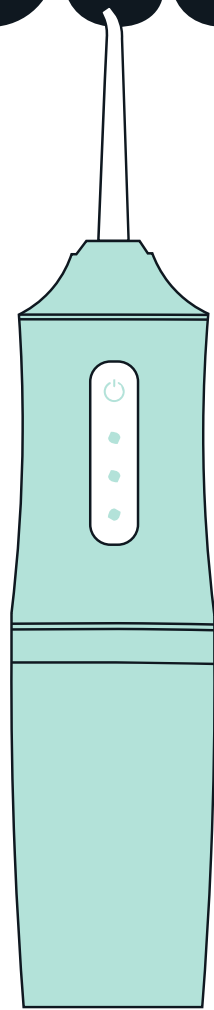

Návod k použití

⚠ POZNÁMKA

- A. Nepoužívejte tento výrobek bez nainstalované trysky.
- B. Některé ústní vody mohou být do určité míry žíravé. Před použitím si ověřte složení ústní vody a nepoužívejte ji, pokud si nejste jisti, že nemůže poškodit přístroj.
- C. Pokud přístroj užívají děti, starší osoby nebo osoby, které nevědí, jak tento výrobek používat, zajistěte prosím, aby někdo dohlížel na uživatele.
- D. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a kojenců a nepoužívejte jej jako hračku.
- E. Pacienti s onemocněním zubů nebo ti, kteří podstoupili operaci ústní dutiny v posledních 2 měsících, nebo kteří trpěli ústními problémy, se musí nejdříve poradit s lékařem.

⚠ POZNÁMKA

- A. Nepoužívejte vysokou intenzitu k neustálému mytí poškozených dásní nebo krvácejících zubů, abyste předešli zánětu.
- B. Upravte intenzitu proplachování podle aktuálního stavu vašich zubů a dásní

⚠ POZNÁMKA

- A. Nenamáčejte celý stroj do vody, mohlo by dojít k poruše výrobku nebo úplnému poškození.
- B. Pokud tento produkt delší dobu nepoužíváte, ujistěte se, že nádrž na vodu je před uskladněním suchá a bez vody, aby se zabránilo množení bakterií.

PARAMETRY PRODUKTU

Čistá hmotnost produktu: 225g
Objem vodní nádrže: 220ml
Kapacita baterie: 1200mAh
Nabíjecí napětí: 5V =
Nabíjecí proud: 1A Jmenovité napětí: 3,7V =
Jmenovitý výkon: 3,5W

UŽITÍ PRODUKTU

- A. Silný pulzní proud vody dokáže zcela odstranit bakterie, zubní skvrny, zubní kámen a zbytky jídla ve všech částech dutiny ústní,
- B. Ultra jemný proud vody dokáže bez bariér čistit hluboko mezi zuby a zlepšit zdraví dásní.
- C. Dokáže účinně odstranit většinu odolného plaku na povrchu zubu a účinek je mnohem lepší než tradiční dentální nit.
- D. Rychlé čištění dutiny ústní: Ať už doma nebo po jídle mimo domov, je to nejúčinnější způsob, jak rychle obnovit čistotu dutinu ústní.
- E. Poměrně dobře působí na čištění zubních implantátů a zubních faset.
- F. Rozvíjí zdravé návyky každodenního čištění mezizubních prostor.

OPATŘENÍ



⚠ NEBEZPEČÍ

- A. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, abyste předešli zranění nebo škodám způsobeným nesprávnou obsluhou.
- B. Nerozebírejte tento produkt sami, aby nedošlo k poškození produktu nebo úrazu elektrickým proudem.
- C. Nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 40 stupňů Celsia k naplnění nádržky na vodu k propláchnutí
- D. Pokud by výrobek během nabíjení náhodou spadl do vody, před vyjmutím produktu odpojte napájecí zástrčku.
- E. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, před použitím vyměňte napájecí adaptér.
- F. Neumísťujte výrobek na místo s vysokou teplotou, nevhazujte výrobek do ohně, baterie by mohla explodovat.

⚠ VAROVÁNÍ

- A. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům než k čištění ústní dutiny.
- B. Nepoužívejte trysku k příliš silnému tlaku na dásně nebo zuby, aby nedošlo k poškození dásní.
- C. Neponořujte výrobek do vody, aby nedošlo k jeho selhání.
- D. Nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
- E. Nepokračujte v používání napájecího kabelu, pokud je poškozený

POPIS PRODUKTU

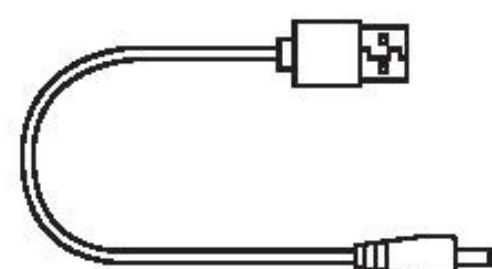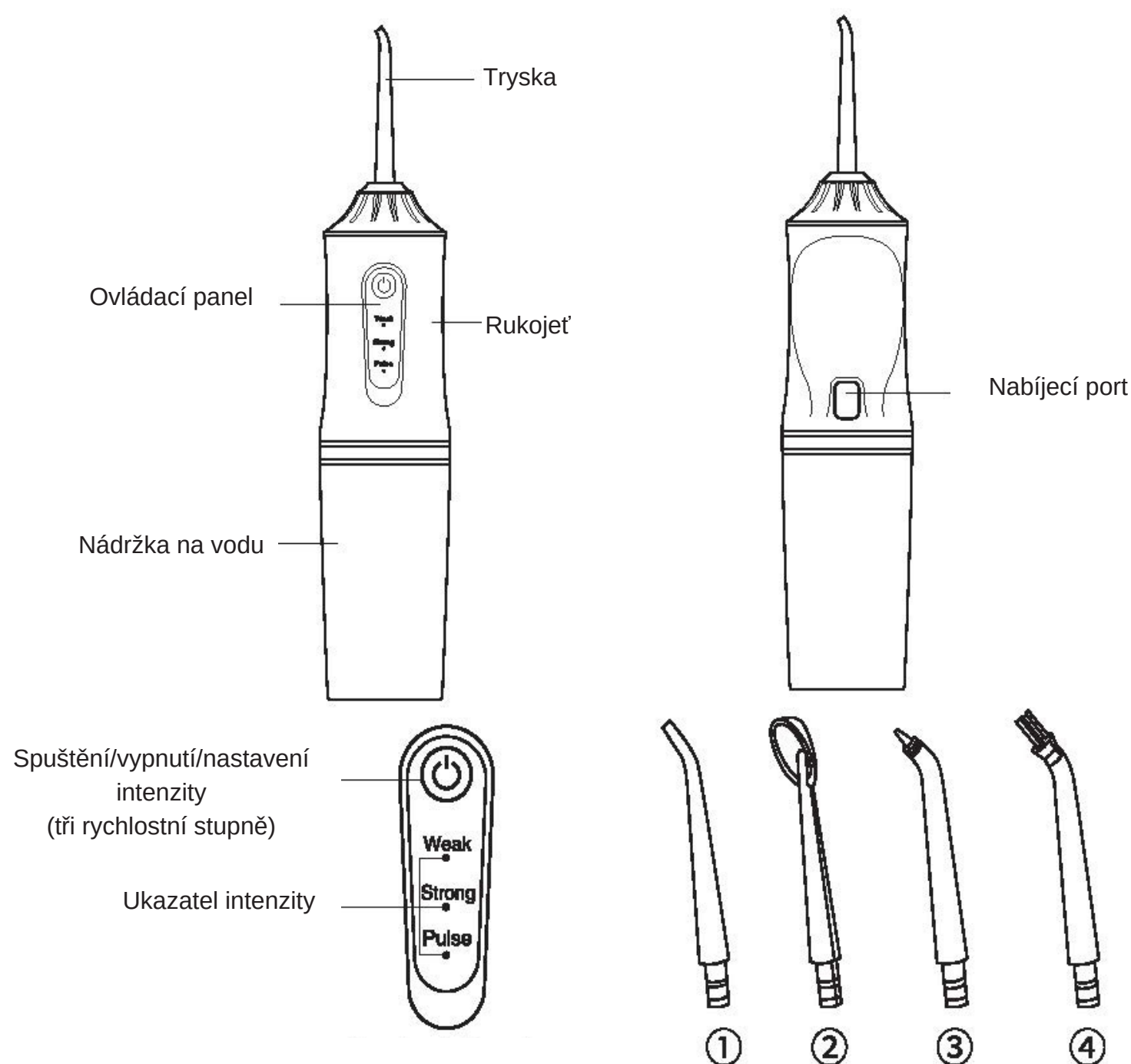

Nabíjecí kabel


TYPY TRYSEK

- 1.Klasická tryska pro každodenní použití
- 2.Tryska na škrábání jazyka je určena k čištění povlaku jazyka
- 3.Tryska pro parodontální kapsy pro čištění parodontálních kapes při paradentóze
- 4.Ortodontická tryska vhodná pro čištění rovnátek

POUŽITÍ TLAČÍTKA A PŘEPÍNÁNÍ INTENZIT

- Krátkým stisknutím zapnete výchozí režim (Normal - silný) a rozsvítí se příslušný indikátor.
- Dlouze stisknete na 2 sekundy, tím se režim přepne na rychlostní stupeň Pulse a kontrolka se taképřepne. Dalším dlouhým stisknutím přepnete na režim Sensitive.
- Krátkým stisknutím opět vypnete.
- Přístroj se automaticky vypne po pěti minutách provozu.
- Když se baterie dá do nabíječjy, tři kontrolky jednou bliknou, když je baterie plně nabitá, tři kontrolky se rozsvítí.


POSTUP POUŽITÍ

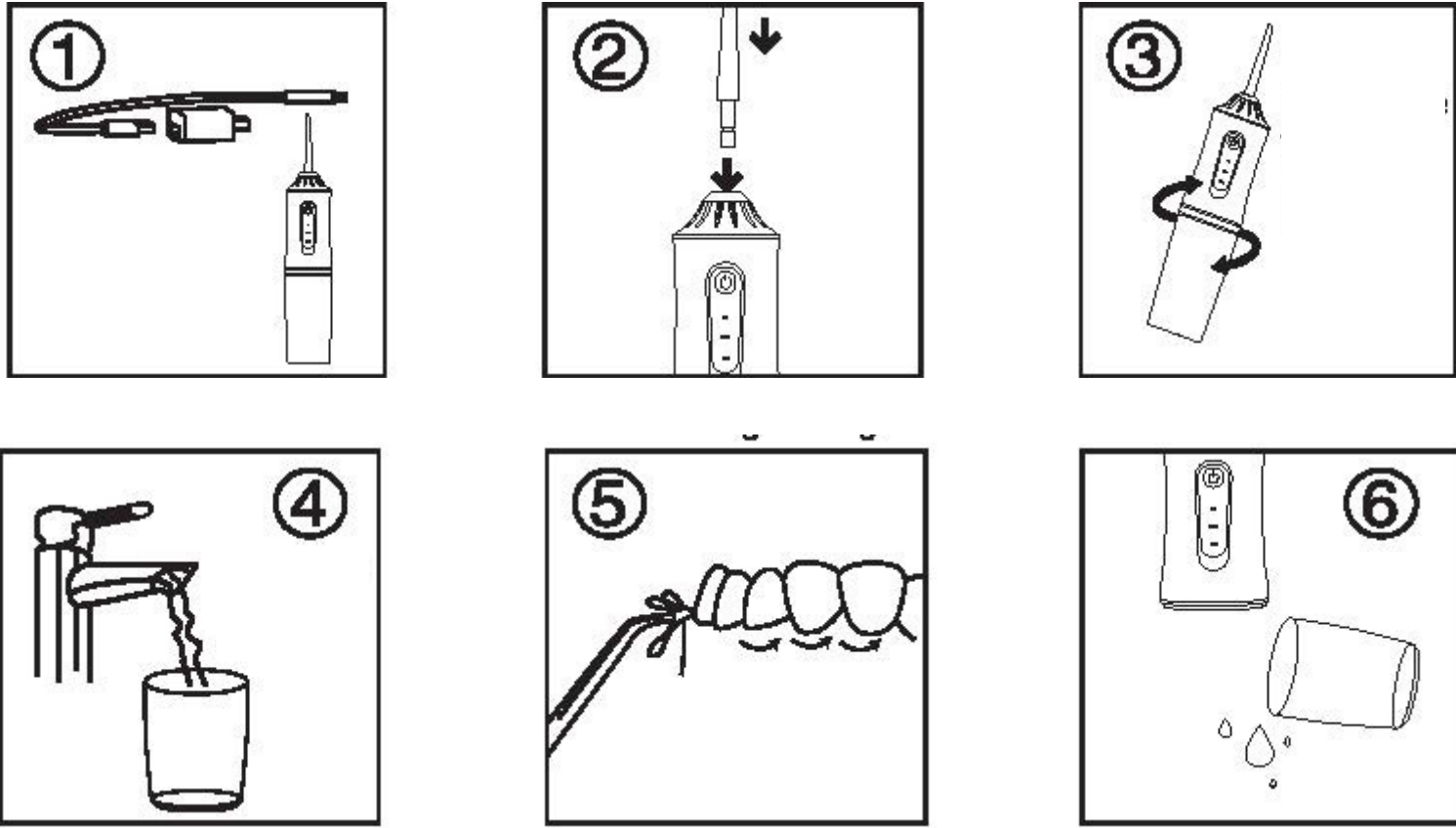

- 1. Před prvním použitím přístroj plně nabijte
- 2. Nasadte vybranou hlavici a dotáhněte ji
- 3. Odšroubujte nádrž na vodu
- 4. Naplňte nádrž vodou nebo ústní vodou dle vaší preference
- 5. Vložte hlavici do úst ve správném úhlu a čistěte zuby
- 6. Po použití vylijte vodu z nádoby a nechte ji vyschnout


JAK SI SPRÁVNĚ ČISTIT ZUBY ÚSTNÍ SPRCHOU

Vyberte si nastavení, které vám vyhovuje. Doporučuje se začít zkoušku od nejnižšího stupně intenzity a postupně najít tu, která vám nejlépe vyhovuje. Při čištění zubů vysuňte trysku do úst, zamiřte na mezeru mezi zuby nebo dásněmi a pootevřete ústa tak, aby proud vody mohl při vyplachování zubů plynule vytékat. Po výběru intenzity a trysky, které vám vyhovuje, srovnejte trysku s horními dásněmi a oplachujte je stejným směrem od nejvnitřnější strany (například 1 nebo 4), dokud se nevypláchne dásně posledního zubu, a poté otočte trysku, srovnejte ji s dásněmi a pokračujte stejným směrem zevnitř. Opláchněte ve směru (např. 2 nebo 3), dokud nedosáhnete dásně posledního zubu. Pro spodní zuby postupujte stejně.

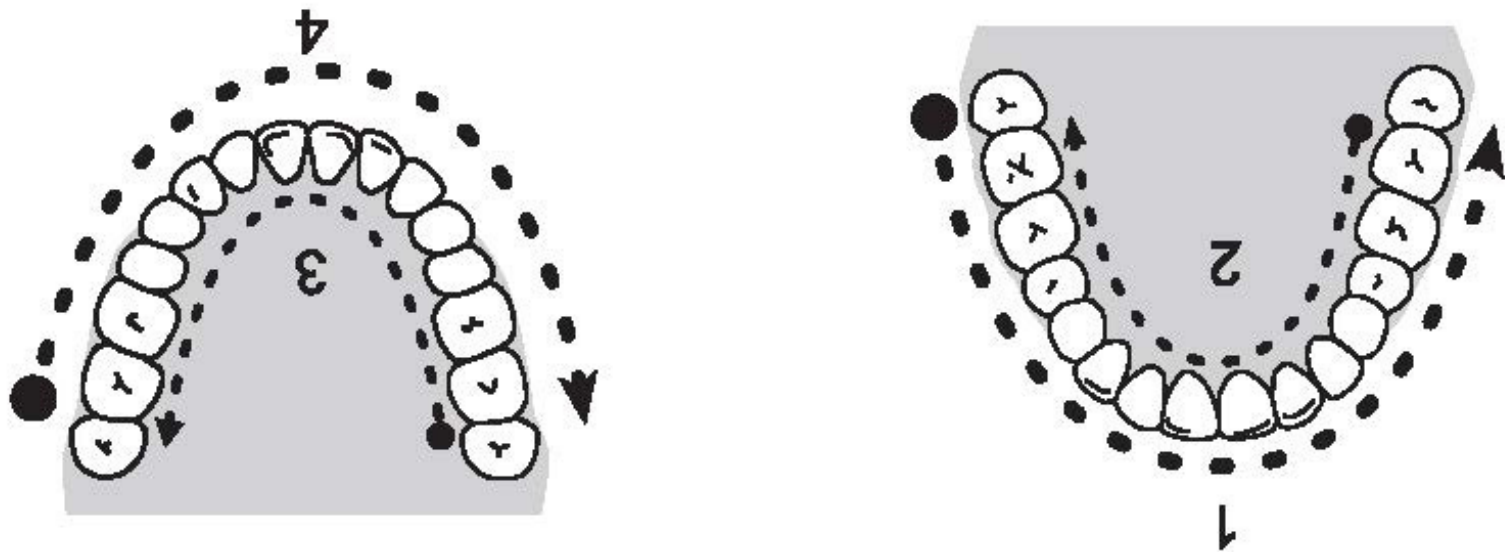

DALŠÍ TIPY PRO POUŽITÍ

- Doporučujeme nejdříve používat na nejslabší intenzitu (cca týden) a poté přejít na vyšší intenzitu
- Proud vody by měl směřovat kolmo k zubům a dásním
- Nejdříve vložte násůtek do úst a pak teprve přístroj spustěte, aby vám voda nestříkala po koupelně.

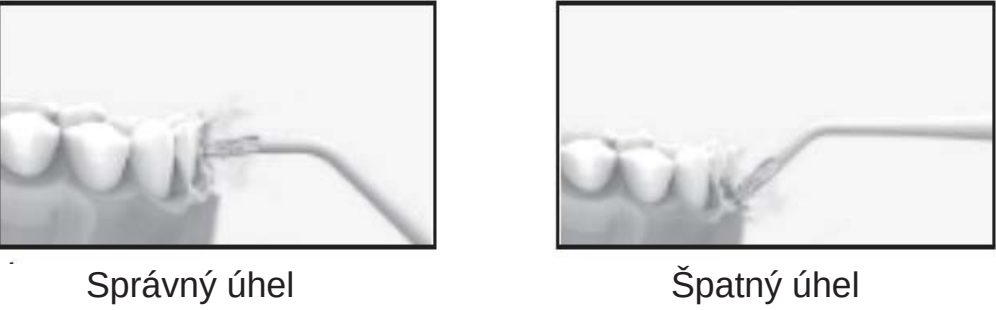

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

- Přístroj otírejte vlhkým hadříkem a poté nechte uschnout
- Neponořujte přístroj do vody
- Nepoužívejte vodu s teplotou nad 50°C
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte nádobku na vodu a skladujte jej na suchém místě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- PŘÍSTROJ SE NAZAPÍNÁ - dejte jej nabíjet na více na 4 hodiny
- TLAK VODY JE VELMI SLABÝ - náústek je zablokovaný nebo zdeformovaný, propláchněte, profoukněte nebo vyměňte náústek
- VYDRŽÍ NABITÝ VELMI KRÁTKOU DOBU, INDIKÁTOR NABITÍ SE NEROZSVICUJE NEBO ZVLÁŠTNĚ BLIKÁ - baterie nebyla nabita dostatečně dlouho nebo došla životnost baterie
- PŘÍSTROJ SE NEZAPÍNÁ I PO DOSTATEČNÉM NABITÍ - Mohlo dojít ke zkratu, kontaktujte prodejce

10 OBDOBÍ POUŽITÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A RECYKLACE

Období použití pro ochranu životního prostředí (E-PUP) je doba, ve které zakázané látky neuniknou ani nezmutují, aby mohly způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí. U tohoto produktu je tato doba 10 let. Během této doby užívejte tento produkt dle návodu. Jakmile nebudete přístroj nadále používat, vyhodte jej do kontejnerů na drobný elektroodpad, odvezte do sběrného dvora nebo využijte zpětného odběru při nákupu nových elektrospotřebičů. Nevhazujte do směsného odpadu.