


GIO perfect Neck Brace

Urządzenie do masażu szyi

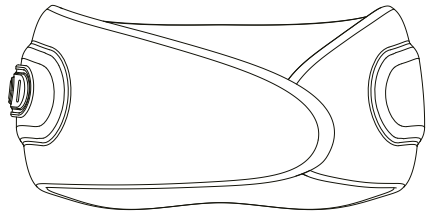


OPIS PRODUKTU

Powłoka zewnętrzna

Rdzeń urządzenia

Panel sterowania

Kabel ładowania

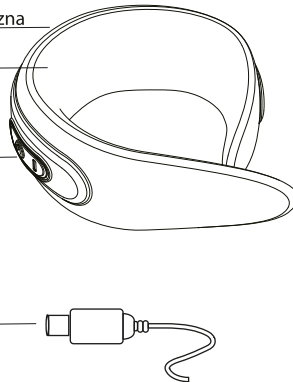

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Jednostka główna
- Kabel USB-C
- Instrukcja

SPOSÓB UŻYCIA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie (zielona dioda sygnalizuje zasilanie).
2. Krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie między 3 trybami (zielony, niebieski, czerwony).
3. Dwukrotne kliknięcie powoduje włączenie/wyłączenie funkcji ogrzewania (55°C; domyślnie wyłączona).
4. Funkcje ogrzewania i wibracji mogą działać jednocześnie.
5. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach. W razie potrzeby uruchom je ponownie ręcznie.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć urządzenie podczas użytkowania.
7. Naładuj urządzenie, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
8. Używaj wyłącznie oryginalnego kabla do ładowania.
9. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
10. Pełne naładowanie trwa 3–4 godziny (zielona lampka sygnalizuje zakończenie ładowania). Przed użyciem odłącz urządzenie od źródła zasilania.
11. Akcesoria są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	Niski poziom baterii	Naładuj i uruchom ponownie
Zatrzymuje się podczas użytkowania	Czas się skończył albo słaba bateria	Naładuj i uruchom ponownie

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, przeczytaj dokładnie instrukcję.

BEZPIECZEŃSTWO

- Ten produkt ma funkcję ogrzewania — używaj go ostrożnie, zwłaszcza jeśli jesteś wrażliwy na ciepło.
- Aby zachować optymalną wydajność, ładuj baterię co najmniej raz na 1–2 miesiące.
- Używaj tylko certyfikowanej ładowarki 5 V 1 A. Wyższe napięcie może uszkodzić urządzenie.
- Upewnij się, że napięcie wejściowe jest zgodne ze specyfikacją produktu.
- Nie używaj nieoryginalnych akcesoriów ani zamienników.
- Nie ładuj urządzenia podczas wahań napięcia.
- Nie ładuj ani nie używaj produktu w łazienkach ani w wilgotnym otoczeniu.
- Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- Unikaj długotrwałego wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- Dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych muszą używać urządzenia pod nadzorem.
- Nie wyrzucaj wbudowanej baterii litowej wraz z odpadami domowymi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie używać, jeśli:

- Nie uruchamia się.
- Bateria wyczerpuje się w trybie czuwania.
- Sesja kończy się z powodu wyłączenia timera lub wyczerpania baterii.

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

- Jesteś w trakcie leczenia lub źle się czujesz.
- Cierpisz na ostrą lub przewlekłą chorobę.
- Jesteś pod wpływem alkoholu.
- Jesteś osobą niepełnoletnią.

Ładowanie i utylizacja baterii

- Aby zachować wydajność, baterię należy ładować co najmniej raz na 1–2 miesiące.
- Używać certyfikowanej ładowarki 5 V 1 A. Wyższe napięcie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wyrzucać baterii wraz z odpadami domowymi.

SPECYFIKACJA

Nazwa: GIOperfect Neck Brace
Model: GIO-750
Wymiary: 180 × 210 × 90 mm
Pobór mocy: 8 W
Napięcie ładowania: 5 V
Prąd ładowania: 0,5 A
Pojemność akumulatora: 1200 mAh
Czas ładowania: 3–4 godziny

innogIO

Wyprodukowano w Chinach dla
INNIOGIO GLOBAL sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska
www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com