

# GIO perfect Eye

Sonický LED masážní přístroj  
na obličej s EMS terapií



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

Tento produkt je určen výhradně k vnějšímu kosmetickému použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není vhodný pro osoby s lékařskými implantáty nebo vážnými zdravotními potížemi bez předchozí konzultace s lékařem.

### Nepoužívejte, pokud:

- Máte kardiostimulátor, přístroj pro srdce-plíce nebo jiné implantované lékařské elektronické zařízení.
- Podstupujete lékařské ošetření, trpíte kožními onemocněními, horečkou, akutním onemocněním, tuberkulózou, onemocněním orgánů nebo teleangiektázií.
- Jste těhotná, menstrujete nebo kojíte (před použitím se poraďte se svým lékařem).
- Máte extrémně citlivou pokožku, alergie na kovy, dědičnou dermatitidu nebo poruchu vnímání teploty.
- Nedávno jste podstoupili operaci očí nebo obličeje (např. laserovou korekci zraku, implantáty, lifting nitěmi); poraďte se se svým lékařem.
- Podstupujete zubní léčbu nebo ortodancii nebo máte plomby – vyhněte se silné stimulaci v okolí úst.
- Nosíte kontaktní čočky při použití přístroje v okolí očí (nejprve čočky vyjměte).
- Trpíte šedým zákallem, glaukomem, poruchami sítnice nebo jakýmkoli očními onemocněními – před použitím se poraďte s lékařem.

1. Před prvním použitím vždy otestujte zařízení na zápěstí.
2. Neponořujte produkt do vody ani jej nevystavujte vlhkosti. Není vodotěsný.
3. Čistěte pouze měkkým vlhkým nebo suchým hadříkem, jakmile je zařízení vypnuté a vychladlé.
4. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a kontaktu s korozivními materiály.
5. Zařízení nerozebírejte ani neopravujte sami. Pro servis kontaktujte podporu.
6. Během používání nedržte masážní hlavici příliš dlouho na jednom místě na kůži.
7. Pouze dospělí. Vhodné pro muže i ženy.

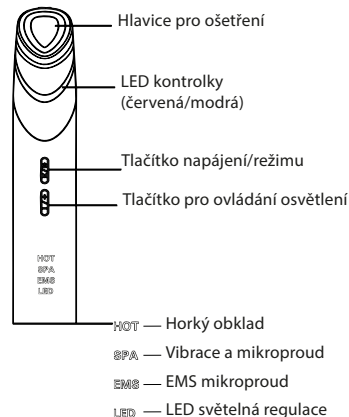

### ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ

Stiskněte a podržte tlačítko napájení/režimu po dobu 2 sekund, aby se zařízení zapnulo. Stiskněte a podržte stejné tlačítko znovu po dobu 2 sekund, aby se zařízení vypnulo.

## VÝBĚR REŽIMU

Po zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu HOT (červená LED + ohřev). Každým krátkým stisknutím tlačítka napájení/režimu se přepnete mezi následujícími režimy v tomto pořadí:  
Režim HOT (červené světlo + ohřev)  
Režim SPA (vibrace + jemný mikroproud)  
Režim EMS (modré světlo + silnější mikroproud)  
Režimy se budou opakovat ve stejném cyklu při každém stisknutí.

## OVLÁDÁNÍ LED SVĚTLA

Ve výchozím nastavení je LED světlo aktivní, když je zařízení zapnuté. Chcete-li LED světla vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Light Control po dobu 2 sekund. Stisknutím a podržením tlačítka světla znovu zapnete. To lze provést v jakémkoli režimu.

## UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE

Když je baterie téměř vybitá, červená kontrolka na hlavici přístroje několikrát zabliká, než se přístroj automaticky vypne.

## INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Červená kontrolka svítí – přístroj se nabíjí  
Zelená kontrolka svítí – baterie je plně nabitá



## JAK POUŽÍVAT

1. Po očištění naneste tenkou vrstvu gelu nebo séra rovnoměrně kolem oční oblasti.



2. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Režim, aby se zařízení zapnulo. Vyberte požadovaný režim a úroveň intenzity.

3. Jemně přejíždějte přístrojem od vnitřního k vnějšímu koutku oka nebo použijte metodu bodového tlaku: přitlačte hlavici na jedno místo na 4–5 sekund a poté, co pocítíte zahřátí, přejděte na další místo.



4. Po použití vypněte zařízení, otřete ošetřovací hlavici do sucha a uložte ji na suchém místě.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy ihned po použití vyčistěte ošetřovací hlavici.
- Zařízení nečistěte vodou ani jej neponořujte do vody.
- Nepoužívejte agresivní nebo korozivní čisticí prostředky, ředidla ani abrazivní hadříky.
- Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření.

## SPECIFIKACE PRODUKTU

- Název produktu: GIOperfect Eye
- Model produktu: GIO-720
- Rozměry produktu: 138 × 24 × 24,8 mm
- Jmenovitý výkon: 3 W
- Provozní napětí: 3,7 V
- Kapacita baterie: 500 mAh
- Funkce horkého obkladu:  $42 \pm 3^\circ\text{C}$

Scan the QR code to download the manual  
Zeskanuj kod QR, aby pobrač instrukcję  
Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen  
Scannez le code QR pour télécharger le manuel  
Escanee el código QR para descargar el manual  
Digitalize o código QR para descarregar o manual  
Scansiona il codice QR per scaricare il manuale  
Scan de QR-code om de handleiding te downloaden  
Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію  
Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití  
Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku  
Scanează codul QR pentru a descărca manualul  
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją  
Nolasiēt QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu  
Lae juhend alla, skannides QR-koodi  
A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.  
ليزني لايونزنتال افي رسال قيايحتسالا زير حيدما



Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o.,  
Márova 2805/6, 155 00 Praha,  
[www.andys.cz](http://www.andys.cz)

innogIO

Vyrobena v Číně pro společnost  
**INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.  
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko  
[www.innogio.com](http://www.innogio.com)  
f @innogIO.official i @innogio\_com

