

GIO perfect Eye Sonic LED masážny prístroj na tvár s EMS terapiou



NÁVOD NA POUŽITIE


Aby ste predišli zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním, pozorne si prečítajte pokyny a používajte tento výrobok výhradne v súlade s pokynmi.

Tento produkt je určený výhradne na vonkajšie kozmetické použitie. Uchovávať mimo dosahu detí. Nie je vhodný pre osoby s medicínskymi implantátmi alebo vážnymi zdravotnými problémami bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

Nepoužívajte, ak:

- Máte kardiostimulátor, umelé srdce a pľúca alebo iné implantované elektronické zdravotnícke zariadenie.
- Podstupujete liečbu, trpíte kožnými ochoreniami, horúčkou, akútnym ochorením, tuberkulózou, ochorením orgánov alebo teleangiektáziou.
- Ste tehotná, menštruujete alebo dojčíte (pred použitím sa poraďte so svojím lekárom).
- Máte extrémne citlivú pokožku, alergiu na kovy, dedičnú dermatitídu alebo poruchy vnímania teploty.
- Nedávno ste podstúpili operáciu očí alebo tváre (napr. laserovú korekciu zraku, implantáty, lifting nitkami); poraďte sa so svojím lekárom.
- Podstupujete zubné ošetrenie alebo ortodonómiu, alebo máte výplne; vyhnite sa silnej stimulácii v okolí úst.
- Nosíte kontaktné šošovky, keď používate zariadenie v okolí očí (najskôr si šošovky vyberte).
- Trpíte šedým zákalom, glaukómom, poruchami sietnice alebo akýmkoľvek ochorením očí – pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.

1. Pred prvým použitím vždy vyskúšajte zariadenie na zápästí.
2. Nevystavujte výrobok vode ani vlhkosti. Nie je vodotesný.
3. Čistite iba mäkkou vlhkou alebo suchou handričkou, keď je zariadenie vypnuté a vychladnuté.
4. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a kontaktu s korozívnymi materiálmi.
5. Neodmontujte ani neopravujte zariadenie sami. Pre servis kontaktujte podporu.
6. Počas používania nedržte masážnu hlavicu príliš dlho na jednom mieste na pokožke.
7. Určené len pre dospelých. Vhodné pre mužov aj ženy.

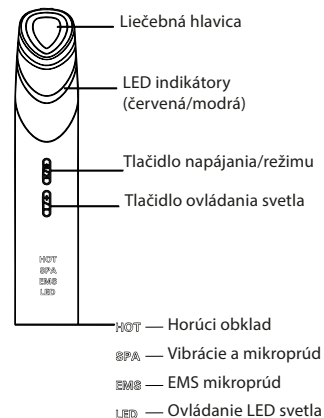

ZAPNUTIE/ VYPNUTIE

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/režimu po dobu 2 sekúnd, aby ste zariadenie zapli. Stlačte a podržte to isté tlačidlo opäť po dobu 2 sekúnd, aby ste zariadenie vypli.

Po zapnutí sa zariadenie automaticky prepne do režimu HOT (červená LED + ohrev). Každým krátkym stlačením tlačidla napájania/režimu sa prepnete medzi nasledujúcimi režimami v tomto poradí:
 Režim HOT (červené svetlo + ohrievanie)
 Režim SPA (vibrácie + jemný mikroprúd)
 Režim EMS (modré svetlo + silnejší mikroprúd)
 Režimy sa budú opakovať v rovnakom cykle pri každom stlačení.

V predvolenom nastavení je LED svetlo aktívne, keď je zariadenie zapnuté. Ak chcete LED svetlá vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo ovládania svetla na 2 sekundy. Stlačte a podržte tlačidlo svetla znovu, aby ste ho opäť zapli. To je možné urobiť v akomkoľvek režime.

Keď je batéria takmer vybitá, červená kontrolka na hlave zariadenia niekoľkokrát zabliká, než sa zariadenie automaticky vypne.

Červená kontrolka svieti – zariadenie sa nabíja
Zelená kontrolka svieti – batéria je úplne nabitá



Indikátor nabíjania

Nabíjací port typu C

1. Po očistení naneste tenkú vrstvu gélu alebo séra rovnomerne na oblasť okolo očí.



2. Stlačte a podržte tlačidlo Napájanie/Režim, aby ste zariadenie zapli. Vyberte požadovaný režim a úroveň intenzity.

3. Jemne presuňte zariadenie z vnútorného kútika oka k vonkajšiemu alebo použite metódu bodového tlaku: pritlačte hlavicu na jedno miesto na 4–5 sekúnd a potom, keď pocítite, že sa ohrieva, presuňte sa na ďalšie miesto.




4. Po použití zariadenie vypnite, utrite hlavicu do sucha a uložte ju na suchom mieste.



- Vždy ihneď po použití vyčistite ošetrovaciu hlavicu.
- Nečistite zariadenie vodou ani ho neponárajte do vody.
- Nepoužívajte agresívne alebo korozívne čistiace prostriedky, riedidlá ani abrazívne utierky.
- Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

- **Názov produktu:** GIOperfect Eye
- **Model produktu:** GIO-720
- **Rozmery produktu:** 138 × 24 × 24,8 mm
- **Menovitý výkon:** 3 W
- **Prevádzkové napätie:** 3,7 V
- **Kapacita batérie:** 500 mAh
- **Funkcia horúceho obkladu:** 42 ± 3 °C

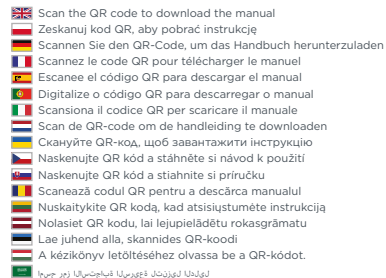

Distribútor pre Českú republiku
a Slovensko: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk

innogio

Vyrobené v Číne pre spoločnosť
INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko
www.innogio.com
f @innogIO.official i @innogio_com

