

GIO-450 GIO-451 GIO-455

InnoGIO

SKAŅAS ZOBU
BIRSTE BĒRNIEM


LIETOTĀJO VADOVAS

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU


Nosaukums: Skaņas zobu birste bērniem
Modelis: GIO-450/ GIO-451/ GIO-455
Barošanas avots: AAA baterija
 (baterija nav iekļauta komplektā)
Izstrādājuma izmērs: 160,5 x 35 x 35 mm
Nominālais spriegums: 1,5 V
Nominālā jauda: 0,51 W
Nominālā strāva: 0,34 A
Ūdensizturības pakāpe: IPX7




PIRMĀ IZMANTOŠANA

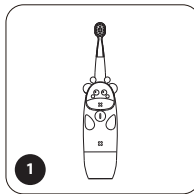


Izņemiet zobu birsti.

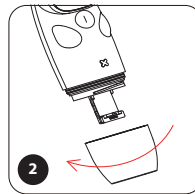


Pagrieziet apakšējo vāciņu pretēji pulkstenrādītāja rādītāja virzienam un atveriet apakšējo vāciņu.

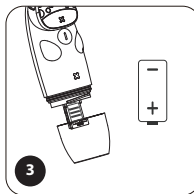


Izņemiet akumulatoru un aizsargplēvi un nomainiet akumulatoru (Pozitīvais uz leju).

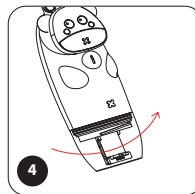


Uzlieciet atpakaļ apakšējo vāciņu un pieskrūvējiet to pulkstenrādītāja kustības virzienā.

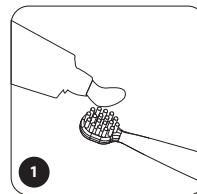


Izspiediet zobu pastu uz zobu birstes.

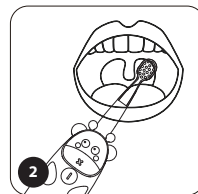


Ievietojiet zobu birsti mutē.

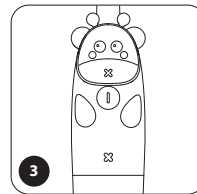

Taimeris atskaita 2 zobu tīrīšanas minūtes. Ir arī atgādinājums par to, ka ik pēc 30 sekundēm ir jāmaina zobu tīrīšanas zona. Nospiediet un turiet nospiestu 3 s, lai to izslēgtu.

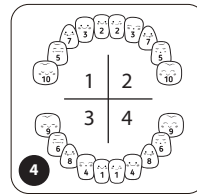

Tīriet zobus saskaņā ar zobārstu ieteikumiem: lai zobi būtu tīrāki, katru zobu zonu tīriet 30s.

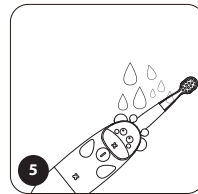

Pēc zobu tīrīšanas izskalojiet muti ar ūdeni un notīriet zobu birsti ar ūdeni.

ČETRI PĀRNESUMI

- Pirmais pārnese Septiņu krāsu režīms: ieslēdziet ierīci, un tā parādīs dažādas krāsas: sarkanu, oranžu, dzeltenu, zaļu, zilu, indigo un violetu, krāsu maiņas intervāls ir 0,5 bez vibrācijas, kopējais tīrīšanas laiks ir 1 minūte. Šo rīku ieteicams lietot bērniem, kuri nepanes vibrāciju.
- Otrais maigās tīrīšanas režīms: gaisma nemainās 2 minūtes. Šis pārnese ieteicams bērniem vecumā no 2 līdz 5 gadiem.
- Trešais pārnese Standarta tīrīšanas režīms: pēc otrā pārnese gaisma mainās uz nākamo krāsu, kopējais tīrīšanas laiks ir 2 minūtes. Šis pārnese ieteicams bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem.
- Ceturtais pārnese Spēcīgas tīrīšanas režīms: pēc trešā pārnese gaisma nomaina krāsu uz nākamo, kopējais tīrīšanas laiks ir 2 minūtes. Šis pārnese ieteicams bērniem vecumā no 8 līdz 12 gadiem.

2 MINŪŠU LAIKA REŽĪMS

Otrā, trešā un ceturta pārnese režīmos pēc 30, 60 un 90 sekundēm gaismas mirgo attiecīgi vienu, divas un trīs reizes, un motors apstājas attiecīgi vienu, divas un trīs reizes. Mirgošanas un apstāšanās laiks ir 0,5s, lai atgādinātu lietotājam, ka jāmaina suku zona. 120s, gaisma mirgo divas reizes, un pēc tam tā izslēdzas.

ATMIŅAS FUNKCIJA

Ierīce var iet atmiņas režīmā katrā pārnese. Nospiediet un turiet, lai automātiski izslēgtos vai izslēgtos. Nākamreiz, kad ierīci ieslēgsiet, tā automātiski ieies pēdējā izmantotajā režīmā.



DUPONT BIRSTE

Birste ir izgatavota no DuPont materiāla ar noapaļotu galu, kas ir izturīgs un nodilumizturīgs. Tā aizsargā bērna smaganas, vienlaikus efektīvi tīrot zobus.


SILIKONA UZMAVAS
DIZAINS

Unikālais un radošais silikona dizains ir trīsdimensiju, kas nodrošina ērtāku un gludāku sajūtu. Bērniem patiks zobu tīrīšanas sajūta.



KRĀSAINI LUKTURIŠI

Zobu birstei ir jauks dzīvnieka dizains ar krāsainu gaismu – bērniem tas patiks, vienlaikus apgūstot abu ieradumu tīrīt zobus.

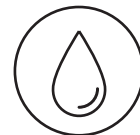

IPX7 ŪDENSIKTURĪBA

Ierīces ūdensnecauraidības pakāpe ir IPX7, kas nozīmē, ka zobu birsti var pilnībā mazgāt un pat lietot peldes laikā.

1. Parastā darba temperatūra ir 0-50°C.

2. Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku, izņemiet akumulatoru un uzglabājiet zobu birsti kastītē vēsā vietā.

3. Pēc zobu tīrīšanas atstājiet zobu birstes galviņu nožūt.

4. Kad izstrādājums tiek lietots, tas sasniedz maksimālo izejas jaudu. Izstrādājums nedrīkst darboties nepārtraukti ilgu laiku. Parasti katram lietošanas laikam nevajadzētu pārsniegt 10 minūtes.

5. Zobu birstes lietošanas laikā nekad nestaigājiet un nebrauciet.

6. Pārliecinieties, ka bērnus zobu tīrīšanas laikā vienmēr uzrauga pieaugušais.



InnoGIO

Ražots Ķīnā priekš: **INNOGIO** sp. z o.o.
 iela Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polija

www.innogio.com

f @innogio.official
 @innogio_com