


SK

GIO-711

innoGIO

GIO perfect Care

Sónické LED zariadenie na starostlivosť
o pleť s EMS terapiou

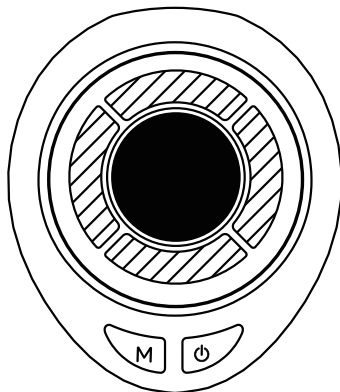

NÁVOD NA POUŽITIE

Abyste predišli zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním, pozorne si prečítajte pokyny a používajte tento výrobok výhradne v súlade s pokynmi.

OBSAH

Informácie o produkte	1
Popis zariadenia	2
Bezpečnostné opatrenia	3
Návod na použitie	4
Ako pripojiť vatovú tyčinku	4
Ako používať	5
Nabíjanie	5
Upozornenie	5



INFORMÁCIE O PRODUKTE

1. Princíp sonických vibrácií

Toto zariadenie využíva technológiu mikrovibrácií a svetelnej terapie v kombinácii s inteligentným dizajnom, ktorý sa prispôsobuje kontúram tváre a umožňuje hlboké čistenie pleti bez vynechania akýchkoľvek oblastí.

Vysiela približne 8 000 vysokofrekvenčných vibrácií za minútu, ktoré uvoľňujú hlboko usadený kožný maz a nečistoty z pórov. Po použití je pokožka čistá, jemná, hladká a pružná, čo predstavuje novú úroveň účinného čistenia pokožky.

2. Princíp tepelnej starostlivosti

Jemné zahrievanie stimuluje krvný obeh v hlbších vrstvách pokožky a urýchľuje jej metabolizmus. Táto funkcia účinne redukuje tmavé kruhy a jemné vrásky okolo očí a zlepšuje priehľadnosť a jas pokožky aj bez make-upu.

V kombinácii s mikrovibráciami pomáha ohrievanie zlepšiť pevnosť pokožky a zmierniť únavu.

A. Účinky mikrovibrácií

Zvyšuje pevnosť a pružnosť pokožky

Pomáha predchádzať alergiám a kožným problémom

Stiahne póry, uzamkne vlhkosť a redukuje vrásky

Uvoľňuje svalové napätie, únavu pokožky, začervenanie a opuchy

Pomáha predchádzať opätovnému výskytu akné

B. Otepľujúci účinok

Upokojuje pokožku a svaly, zmierňuje bolesť a napätie

Stimuluje krvný obeh, otvára póry a zlepšuje vstrebávanie kozmetických prípravkov

Zlepšuje pružnosť a hydratáciu pokožky

Pri použití s bavlneným tampónom umožňuje hlboké čistenie a účinnejšie odstránenie kožného mazu a nečistôt

3. Princíp svetelnej terapie

Červené svetlo:

Podporuje bunkovú aktivitu a metabolizmus, stimuluje produkciu kolagénu, zlepšuje krvný obeh a pružnosť pokožky. Redukuje matnosť a žltý odtieň pokožky, má protivráskové a regeneračné účinky.

Modré svetlo:

Účinne redukuje zápal pri tvorbe akné. Potláča baktérie spôsobujúce akné bez poškodenia okolitého tkaniva a skracuje zápalovú fázu.

Žlté svetlo:

Preniká do hlbších vrstiev pokožky, je absorbované červenými krvinkami a podporuje fotochemické reakcie. Pomáha rozkladať pigmentáciu, podporuje lymfatický odtok a zlepšuje drsnosť, začervenanie a celkovú imunitu pokožky.

Fialové svetlo:

Má antibakteriálne a protizápalové účinky, podporuje produkciu kolagénu, zlepšuje pružnosť a jas pokožky a pomáha redukovať príznaky starnutia a podráždenia.

4. Účinok jadeitovej terapie


Jadeit je považovaný za kameň s prirodzenými dezinfekčnými, detoxikačnými a upokojujúcimi vlastnosťami. Podporuje krvný obeh, spomaľuje starnutie, zlepšuje kvalitu spánku a posilňuje metabolizmus a imunitu. Pomáha potláčať široké spektrum baktérií a vírusov bez vedľajších účinkov.

5. Technológia EMS mikroprúdu

Zariadenie využíva technológiu EMS (elektrická stimulácia svalov), ktorá aktivuje kožné bunky, stimuluje produkciu kolagénu a svalové kontrakcie.

Počas používania môžete pocítiť jemné brnenie a pocit napnutia. EMS pomáha redukovať jemné vrásky a linky a obnovuje hladký, pevný a mladistvý vzhľad pokožky – bezpečne a bezbolestne.

POPIS ZARIADENIA

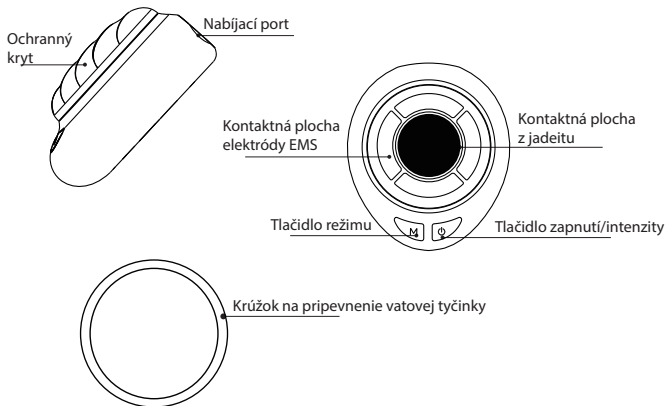

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


1. Neodporúča sa používať:
 - osobám s implantovanými elektronickými zdravotníckymi zariadeniami (napr. kardiostimulátormi)
 - osobám s prístrojmi na udržanie života (napr. umelými srdcovo-pľúcnymi strojmi)
 - osobám s akútnymi alebo infekčnými ochoreniami (napr. tuberkulózou)
 - osoby s vysokým krvným tlakom alebo poruchami krvi
 - osoby s kožnými ochoreniami, ekzémom, alergiami
 - osoby so zníženou citlivosťou na teplo alebo bolesť
 - osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami
2. Nepoužívajte na:
 - miestach s implantátmi alebo kovom pod kožou
 - zapálenej, začervenej alebo podráždenej koži
 - vyvýšených alebo nepravidelných materských znamienkach, viečkach a oblasti okolo očí
3. Ak pocítite bolesť alebo akékoľvek nezvyčajné pocity na pokožke alebo tele, okamžite prestaňte zariadenie používať.
4. Zariadenie po každom použití pravidelne čistite, aby sa zabránilo hromadeniu prachu alebo vlhkosti, ktoré môžu znížiť jeho životnosť.
5. Ak zaznamenáte nezvyčajné zahrievanie, okamžite prestaňte zariadenie používať, aby ste predišli riziku poranenia.
6. Ak zariadenie nepoužívate, skladujte ho na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Produkt neskladujte ani nepoužívajte v kúpeľniach alebo iných vlhkých prostrediach.
7. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom používať zariadenie ani vkladáť kovovú špičku do úst, pretože by mohlo dôjsť k úrazu.
8. Zariadenie neupúšťajte ani s ním neudierajte. Ak dôjde k jeho poškodeniu v dôsledku nárazu, ďalej ho nepoužívajte.
9. Zariadenie neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou po dlhší čas.
10. Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať ani opravovať.
11. Nepoužívajte zariadenie na miestach postihnutých akné, pupienkami, začervenaním alebo zápalom. Pri citlivej pokožke sa neodporúča používať zariadenie denne — obmedzte používanie na raz týždenne.
12. Nepripájajte nabíjací kábel mokrými rukami. Vždy nabíjajte v suchom prostredí a pred nabíjaním sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
13. Ak zariadenie nebudete používať dlhšie ako sedem dní, odpojte ho od nabíjacieho kábla a uskladnite ho vypnuté.
14. Nečakajte, kým sa batéria úplne vybijie, než zariadenie nabijete. Odporúča sa dobíjať zariadenie podľa potreby pred každým použitím.

NÁVOD NA POUŽITIE


1. Stlačte a podržte tlačidlo [] po dobu 2 sekúnd na zapnutie zariadenia – zaznejú dve pípnutia. Opäť stlačte a podržte tlačidlo [] po dobu 2 sekúnd na vypnutie – tentoraz zaznie jedno dlhé pípnutie.
2. Intenzita vibrácií je v predvolenom nastavení nastavená na nízku úroveň. Ťuknite na tlačidlo [] na nastavenie úrovne v poradí: nízka – stredná – vysoká. Každé ťuknutie na tlačidlo [] / [**M**] je sprevádzané krátkym pípnutím. Dvojitém ťuknutím na tlačidlo [] zapnete alebo vypnete vibrácie.
3. Režim rozjasnenia a omladenia sa aktivuje automaticky po zapnutí zariadenia. Aktivuje červené svetlo, indukčné vibrácie a ohrev.
4. Na aktiváciu režimu spevnenia ťuknite na tlačidlo [**M**]. Aktivuje sa modré svetlo, mikroprúd a indukčné vibrácie.
5. Na aktiváciu režimu hydratácie a regenerácie ťuknite znovu na tlačidlo [**M**]. Aktivuje sa žlté svetlo, indukčné vibrácie a ohrev.
6. Na aktiváciu režimu upokojenia ťuknite ešte raz na tlačidlo [**M**]. Aktivuje sa fialové svetlo, indukčné vibrácie, mikroprúd a ohrev.
7. Pri nízkom stave batérie bude kontrolka blikať. Počas sonických vibrácií bude blikať modré svetlo. Zariadenie vydá šesť pípnutí a potom sa automaticky vypne.
8. Inteligentný 8-minútový časovač zariadenie automaticky vypne po jednom ošetrení.

AKO PRIPOJIŤ VATOVÚ TYČINKU

Montáž:

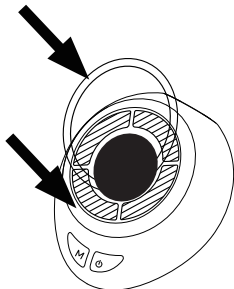

Demontáž:

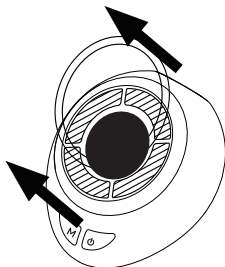

AKO POUŽÍVAŤ

1. Pred použitím si očistite tvár, odstráňte všetok make-up a pokožku dôkladne osušte. Odstráňte všetky kovové šperky z tváre, krku a rúk.
2. Podľa potrieb vašej pleti naneste tenkú vrstvu vodivého gélu alebo primerané množstvo vášho obľúbeného kozmetického prípravku. Zvoľte vhodný režim a úroveň intenzity.
3. Pred prvým použitím otestujte zariadenie na zadnej strane ruky alebo za uchom. Ak sa do 24 hodín neobjaví žiadna kožná reakcia (napr. začervenanie, pálenie, podráždenie), zariadenie je možné bezpečne používať. Ak sa objaví akákoľvek neobvyklá reakcia, test prerušte a zariadenie nepoužívajte.
4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na zapnutie zariadenia. Potom krátkym stlačením tlačidla prepínajte medzi režimami a krátkym stlačením tlačidla intenzity nastavte úroveň. Keď je zvolený požadovaný režim a intenzita a kontrolka svieti, zariadenie je pripravené na použitie.
5. Ošetrojúcu hlavicu jemne priložte k pokožke a začnite masírovať. Pohybujte zariadením pomaly smerom nahor zdvíhacími pohybmi tak, aby bola rovnomerne ošetrovaná celá tvár.
6. Po použití stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým nezaznie dlhé pípnutie, ktoré signalizuje vypnutie zariadenia. Ošetrojúcu hlavicu utrite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Uistite sa, že ste vyčistili aj okraje a záhyby, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt, ktoré by mohli ovplyvniť budúce použitie. Po vyčistení zariadenie uskladnite na chladnom a suchom mieste.
7. Opláchnite si tvár vodou a naneste svoje bežné kozmetické prípravky.

UPOZORNENIE

1. Pred čistením vždy vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť.
2. Na čistenie hlavy a povrchu zariadenia používajte nealkoholové utierky alebo mäkkú handričku.
3. Nepoužívajte ocelovú vlnu ani agresívne čistiace prostriedky.
4. Zariadenie udržiavajte v suchu. Neponárajte ho do vody ani ho nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vlhkosti, pretože by mohlo dôjsť ku skratu alebo poškodeniu.

NABÍJANIE

1. Zariadenie umiestnite na suché a dobre vetrané miesto. Správne pripojte nabíjací kábel k hlavnej jednotke aj k elektrickej zásuvke.
2. Keď modrá kontrolka bliká, zariadenie sa nabíja.
3. Keď všetky modré kontrolky svietia nepretržite a zaznejú tri pípnutia, znamená to, že batéria je úplne nabitá. Pred zapnutím a použitím zariadenie odpojte od zdroja napájania.
4. Zariadenie nezapínajte počas nabíjania.

UPOZORNENIE

Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu akýchkoľvek ochorení. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

-  Scan the QR code to download the manual
-  Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
-  Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
-  Scannez le code QR pour télécharger le manuel
-  Escanee el código QR para descargar el manual
-  Digitalize o código QR para descarregar o manual
-  Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
-  Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
-  Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
-  Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
-  Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
-  Scanează codul QR pentru a descărca manualul
-  Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
-  Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
-  Lae juhend alla, skannides QR-koodi
-  A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
-  لي ليدل لي زنتل دة يرسل اة باجات سال ا زم ح س ا



Distribútor pre Českú republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.sk

innogIO

Vyrobené v Číne pre spoločnosť **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko

www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com