

## PŘED POUŽITÍM PROSTUDUJTE VŠECHNY POKYNY

-1-

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zubní kartáček Power je bezpečný a účinný, pokud je používán podle pokynů. Stejně jako u všech jiných elektrických spotřebičů je však nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, především v přítomnosti dětí.

## RIZIKA – VODA

Abyste snížili riziko vzniku popálenin, zabití elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

- Nabíjecí základnu neumísťte ani neuchovávejte v místech, kde může být stažena do vany, umyvadla nebo záchodu.
- Nabíječku neumísťte ani ji neupusťte do vody nebo jiné kapaliny.
- Pro výrobek nesahejte, pokud spadl do vody nebo jiné kapaliny. Ihned jej odpojte do přívodu elektrické energie.
- Nepoužívejte při koupání.
- Nabíjecí základnu před čištěním odpojte ze zásuvky a přesvědčte se, že je před připojením do elektrické zásuvky suchá.

## RIZIKA – NAPĚTÍ

Abyste snížili riziko vzniku popálenin, zabití elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

- Nezapojte nabíjecí základnu do zásuvky s napětím jiným než uvedeným na spodní části základny.
- Tento výrobek je určen pro provoz v rozpětí 100 až 240 V.
- Měnič napětí nezaručuje kompatibilitu.
- Zástrčku nezasunujte do zásuvky silou.
- Pokud se zástrčka snadno do zásuvky nezasune, nepoužívejte ji.

## RIZIKA – VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko vzniku popálenin, zabití elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osobami neznalými a nezkušenými, pokud nejsou pod adekvátním dohledem dospělé osoby zodpovědné za jejich zdraví nebo touto osobou nebyly poučeny o použití tohoto výrobku.
- Děti musí být pod dozorem, aby si s výrobkem nehrály.
- Tento výrobek používejte pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto návodu. Tento výrobek je určen pouze pro čištění zubů, dásní a jazyka.
- Nepoužívejte nástavce nebo kartáčové hlavice jiné než doporučené výrobcem.
- Zubní kartáček je určen pro osobní péči, nikoliv pro použití více pacienty v lékařské ordinaci nebo instituci.
- Pokud vaše zubní pasta obsahuje peroxid, jedlou sodu nebo jiný bikarbonát (běžný v bělících pastách), hlavici a rukojeť kartáčku vždy důkladně očistěte, aby nedošlo k popraskání plastových částí.
- Tento výrobek nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, zástrčku nebo nabíjecí základnu.
- Tento výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, byl poškozen nebo upuštěn do vody. Výrobek přestaňte neprodleně používat, pokud bude jevit jakékoli známky poškození.
- Zubní kartáček, nabíjecí základnu a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah vytápěných povrchů.
- Pokud budete při čištění zubů pociťovat nepohodlí nebo bolest, přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte svého zubního lékaře.
- Baterii nevyjímejte.
- Zubní kartáček nečistěte v myčce na nádobí.
- Tento přístroj má polarizovanou zástrčku (jeden kontakt je širší než druhý). Proto lze tuto zástrčku z důvodu bezpečnosti zasunout do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem.
- Pokud zástrčka v zásuvce nesedí, otočte ji. Pokud stále nesedí, kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika. Tento bezpečnostní prvek se nesnažte nijak obejít.
- Nepoužívejte venku nebo tam, kde jsou používány aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se podává kyslík.

-2-

- Zubní kartáčky mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osobami neznalými a nezkušenými, pokud jsou pod dohledem dospělé osoby nebo byly touto osobou poučeny o bezpečném použití tohoto přístroje a rozumí rizikům spojeným s jeho používáním. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Před likvidací přístroje z něj musí být odstraněna baterie.
- Při odstraňování baterie musí být přístroj odpojen od přívodu elektrické energie.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce či podobně kvalifikovaná osoba, abyste se vyvarovali rizika.
- Čištění povrchů kartáčku přicházejících do styku s rukou a pokožkou je uvedeno v části <ÚDRŽBA>.

## ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pokud jste v posledních dvou měsících podstoupili chirurgický zásah v dutině ústní nebo operaci dásní, před použitím výrobku kontaktujte svého zubního lékaře.
- Pokud dojde při použití tohoto výrobku k nadměrnému krvácení nebo drobné krvácení pokračuje ještě po týdnu používání, kontaktujte svého zubního lékaře.
- Před použitím tohoto výrobku kontaktujte svého praktického lékaře nebo výrobce implantátu, pokud máte otázky týkající se kombinovaného použití tohoto výrobku s kardiostimulátorem nebo jiným implantovaným zdravotnickým prostředkem (implantovanými zdravotnickými prostředky).
- Pokud máte před použitím zubního kartáčku jakékoli dotazy týkající se zdraví, kontaktujte svého praktického lékaře.
- Zubní kartáček byl testován a je certifikován v souladu s nařízeními ETL a CE.
- Po použití tento výrobek vždy odpojte od zdroje napájení.
- Nikdy jej nepoužívejte ve spánku nebo pokud jste ospalí.

## USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

-3-



## ZAČÍNÁME

### Nabíjení kartáčku

Před nabíjením kartáček vypněte. Zástrčku zasuněte do zásuvky. Rukojeť umístěte do nabíječky. Indikátor nabíjení se rozsvítí a označí probíhající nabíjení. Po úplném nabití baterie se barva indikátoru nabíjení změní na trvale svítící zelenou a označí tak úplné nabití kartáčku.


### Poznámky:

- Úplné nabití kartáčku trvá alespoň 24 hodin.
- Zubní kartáček musí být nabíjen 24 hodin, pokud:
  - se jedná o první použití kartáčku,
  - kartáček nebyl používán déle než tři měsíce.
- Abyste baterie zůstala plně nabitá, doporučujeme, abyste kartáček nechali v nabíječce, když není používán.
- Během nabíjení se kartáček zahřeje, což je normální.
- Doba provozu se při zestejnění baterie zkrátí. Pokud zubní kartáček pracuje pouze jednou krátkou dobu po úplném nabití, znamená to, že je baterie na konci své životnosti. Požádejte servisní centrum o radu.

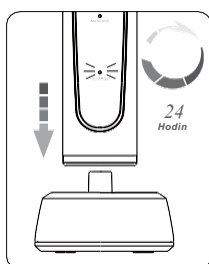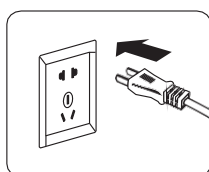


## POUŽITÍ


- Zasuňte hlavici kartáčku do rukojeti. Hlavici kartáčku zatlačte směrem dolů, dokud nezapadne na místo v rukojeti. Poznámka: Mezi barevným prstencem a rukojetí je malá mezera. (Obr. 1)
- Namočte štětinky kartáčku a naneste malé množství zubní pasty.
- Štětinky umístěte proti zubům v mírném úhlu směrem k linii dásně. (Obr. 2)
- Pro výběr režimu stiskněte tlačítko režimu. Pokud víte, jaký režim jste minule používali, nemusíte jej znovu měnit. Kartáček je vybaven 4 režimy.
  - ČISTĚNÍ:** Standardní režim pro perfektní čištění zubů.
  - SOFT:** Jemná péče pro citlivé zuby.
  - BĚLENÍ:** Čištění zubů s leštěním a bělením.
  - MASÍROVÁNÍ:** Pulzace s mírnou stimulací dásní.

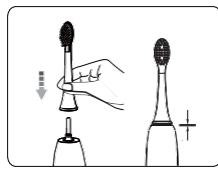

Obr. 1

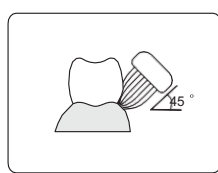

Obr. 2

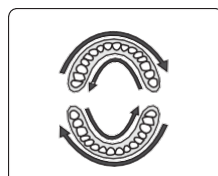

Obr. 3

**Poznámky:** Pokud během čištění stisknete tlačítko režimu, kartáček přejde na další režim, spustí další 2minutový cyklus a rozsvítí se indikátor režimu.


-4-

## ÚDRŽBA

Před čištěním výrobku vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

### Kartáček

- Sejměte hlavici kartáčku.
- Všechny povrchy ořete vlhkým hadříkem a rukojeť vraťte zpátky do nabíječky. Rukojeť neponořujte do vody.
- Hlavici kartáčku a štětinky opláchněte vodou po každém použití.
- Nečistěte je v myčce na nádobí.==

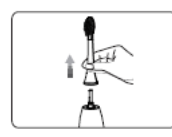



Obr. 4



Obr. 5

### Nabíječka

- Pomocí měkkého hadříku ořete veškerou špínu z nabíječky a místa uložení.
- Zástrčku pravidelně čistěte, aby zůstala v dobrém provozním stavu. Prach nebo špína nahromaděná na zástrčce mohou způsobit úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo požár.

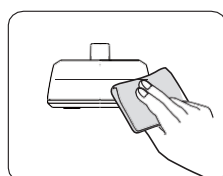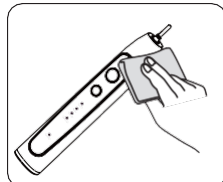

## ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Kartáček nefunguje.	Právě jste výrobek zakoupili nebo jste ho nepoužívali déle než 3 měsíce.	Nabíjete hlavní jednotku alespoň 24 hodin.
Slabé nebo snížené vibrace.	Zubní kartáček je silně zatlačen na zuby.	Kartáček se má o zuby mírně opírat.
Kartáček pracuje pouze velice krátkou dobu dokonce i po nabití.	Baterie dosáhla konce životnosti. Doba nabíjení nebyla dostatečná.	Požádejte servisní centrum Nabíjete hlavní jednotku alespoň 24 hodin.

-5-





## LIKVIDACE

Napájecím zdrojem je lithium-iontová baterie, kterou lze recyklovat. Na konci životnosti výrobku před jeho likvidací vždy vyjměte baterii a recyklujte ji nebo ji zlikvidujte v souladu s místními požadavky na nakládání s odpady. Pokud máte otázky týkající se recyklace, kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady.

### Vyjmutí a recyklace baterie

Výrobek nerozebírejte jindy, než při jeho likvidaci. Pokud to provedete dříve, výrobek zničíte. Dodržujte základní bezpečnostní opatření. Při odstraňování baterie musí být přístroj odpojen od přívodu elektrické energie.

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je jednotka zcela vybitá.
- Pomocí šroubováku sejměte kryt šroubu a kryt baterie.
- Rukojeť podržte vzhůru nohama, stiskněte hřídel zubního kartáčku a vyjměte dva háčky, abyste uvolnili vnitřní součásti rukojeti.
- Zasuňte šroubovák vedle připojení baterie a šroubovákem otočte, abyste toto spojení přerušili. Odstraňte obvodovou desku a vyjměte baterii z plastového nosiče.
- Baterii řádně recyklujte nebo zlikvidujte. U místního úřadu pro nakládání s odpady zjistěte, zda pro recyklaci přijmou i zbytkující součásti zubního kartáčku.

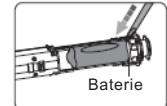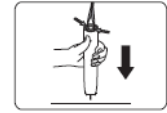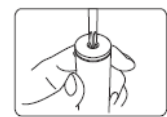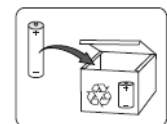

Dbejte na to, abyste nevyzkratovali záporný a kladný pól baterie. Přístroj po vyjmutí baterie nepřipojujte k síti.



Dr. Mayer  
Life and Health

E-mail: office@doctor-mayer.com  
Web: www.doctor-mayer.com

-6-