



SÖNIK B0116-01

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz

A Vyměnitelná kartáčová hlava (1. stupeň)

B Vyměnitelná kartáčová hlava (2. stupeň)


C LED kontrolka

D Tlačítko pro zapnutí

E Rukojeť kartáčku

F Příhrádka na baterie

G Podstavec kartáčku

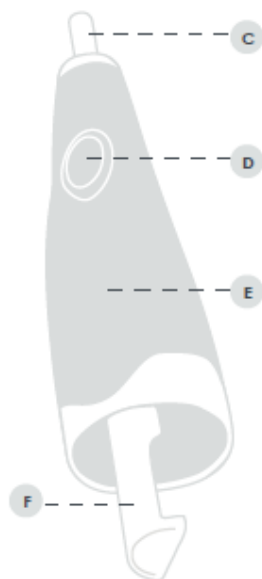


PŘED POUŽITÍM

1. Zubní kartáček držte vzhůru nohama. Vyjměte základnu kartáčku G tak, že ji otočíte proti směru hodinových ručiček a vytáhnete nahoru.
2. Vložte jednu baterii AAA do přihrádky na baterie a dbejte na to, aby odpovídala uvedené polaritě.



3. Uzavřete zubní kartáček tak, že zarovnáte značky na základně kartáčku G a na rukojeti kartáčku E.

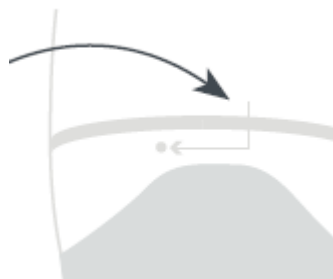

4. Otáčením ve směru hodinových ručiček zajistíte základnu kartáčku G.

JAK POUŽÍVAT SÖNIK

1. Pečlivě navlhčete štětiny na hlavě kartáčku A/B a naneste malé množství zubní pasty.
2. Jednou stiskněte tlačítko napájení D, aby se rozsvítila kontrolka LED C.
3. Druhým stisknutím tlačítka napájení D aktivujete vibrační režim.
4. Zubní kartáček používejte podle doporučení zubního lékaře.
5. Po vyčištění zubů stiskněte tlačítko napájení D pro ukončení vibračního režimu. Opláchněte hlavici kartáčku A / B pod tekoucí vodou.

POZNÁMKA: Aby nedošlo k postříkání, přiložte kartáčkovou hlavu k zubům před zapnutím vibračního režimu.


VÝMĚNA VYMĚNITELNÉ HLAVICE KARTÁČKU

1. Odjistěte vyměnitelnou hlavu kartáčku A / B otočením proti směru hodinových ručiček.

Poté ji vytáhněte směrem nahoru a vyjměte ji.

2. Vložte novou výměnnou hlavici A / B a otočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte.

POZNÁMKA: Aby se výměnná hlava kartáčku zajistila na svém místě, musí se zárez na krku zarovnat s vnitřními zářezy hlavy kartáčku.

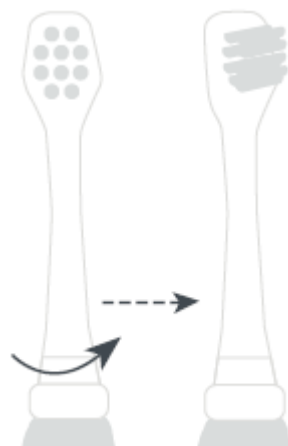

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nevystavujte přístroj Sönik přímému slunci ani vysokým teplotám.
- Neponořujte tento výrobek na delší dobu do vody.
- Rukojeť kartáče a hlavici kartáče čistěte odděleně a před opětovným sestavením je otřete do sucha.

UPOZORNĚNÍ

- Sönik mohou používat děti a osoby s malými zkušenostmi, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti by si s přístrojem Sönik neměly hrát, čistit jej ani opravovat.
- Na přístroji Sönik neprovádějte žádné úpravy kromě výměny baterie nebo hlavice kartáčku.
- Nepokoušejte se přístroj Sönik sami opravovat.
- Vložte baterii se správně umístěnými póly.
- Nepokoušejte se dobíjet nenabíjecí baterii (je součástí balení).

TECHNICKÉ PARAMETRY

SPECIFIKACE	
Materiál: DuPont Nylon/ABS/TPE	Napájení: 1 x baterie AAA
Velikost produktu: 28 x 25 x 135 mm	Norma výrobku: GB4706.59-20 08
Frekvence: 16 000 pohybů za minutu	