

SŤONIK B0116-01

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Distribútor: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.sk

A Vymeniteľná hlavica kefy (1. stupeň)

B Vymeniteľná hlavica kefy (2. stupeň)


C LED kontrolka

D Tlačidlo na zapnutie

E Rukoväť kefy

F Priehradka na batérie

G Základňa kefy

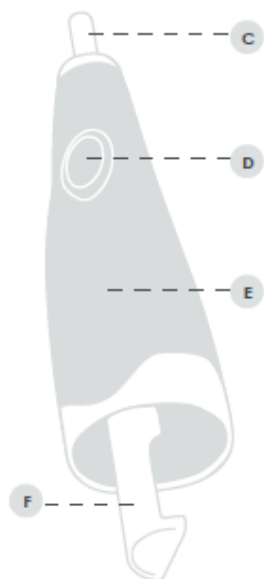


PRED POUŽITÍM

1. Držte zubnú kefku hore nohami. Odstráňte základňu zubnej kefky G jej otočením proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnutím nahor.
2. Vložte jednu batériu AAA do priestoru pre batérie a uistite sa, že zodpovedá uvedenej polarite.



3. Zubnú kefku zatvorte tak, že zarovnáte značky na základni zubnej kefky G a rukoväti zubnej kefky E.

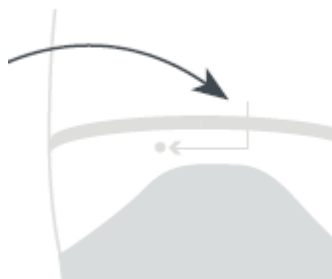

4. Otočením v smere hodinových ručičiek zaistíte základňu zubnej kefky G.

AKO POUŽÍVAŤ SÖNIK

1. Opatrne navlhčíte štetiny na hlavici kefky A/B a naneste malé množstvo zubnej pasty.
2. Stlačte raz tlačidlo napájania D, aby sa rozsvietila kontrolka C.
3. Druhým stlačením tlačidla napájania D aktivujete vibračný režim.
4. Zubnú kefku používajte podľa odporúčania zubného lekára.
5. Po vyčistení zubov stlačte tlačidlo napájania D, aby ste ukončili vibračný režim. Hlavu kefky A/B opláchnite pod tečúcou vodou.

POZNÁMKA: Aby ste zabránili postriekaniu, pred zapnutím vibračného režimu priložte hlavu kefky k zubom.


VÝMENA VYMENITEĽNEJ HLAVICE KEFKY

1. Vymeniteľnú hlavu kefkы A/B vyberte jej otočením proti smeru hodinových ručičiek.

Potom ju vytiahnite smerom nahor a vyberte ju.

2. Vložte novú výmennú hlavu kefkы A/B a otočením v smere hodinových ručičiek ju zaistite.

POZNÁMKA: Aby bola náhradná hlavica kefkы zaistená na svojom mieste, zárez na krčku musí byť v jednej línii s vnútornými zárezmi hlavice kefkы.

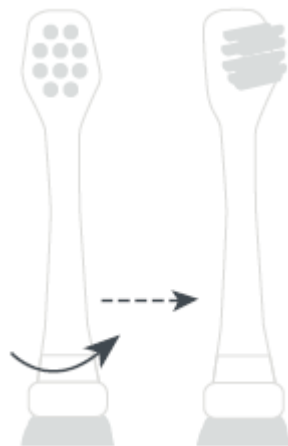

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Sönik nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Neponárajte tento výrobok na dlhší čas do vody.
- Rukoväť a hlavicu kefkы čistite oddelene a pred opätovným zostavením ich utrite do sucha.

UPOZORNENIE

- Sönik môžu používať deti a osoby s malými skúsenosťami, pokiaľ sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by sa s kefkou Sönik nemali hrať, čistiť ju ani opravovať.
- Nevykonávajte na Söniku žiadne úpravy s výnimkou výmeny batérie alebo hlavice kefkы.
- Nepokúšajte sa Sönik opravovať sami.
- Batériu vkladajte so správne umiestnenými pólmi.
- Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľnú batériu (je súčasťou dodávky).

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

ŠPECIFIKÁCIE	
Materiál: DuPont Nylon/ABS/TPE	Napájanie: 1 x batérie AAA
Veľkosť výrobku: 28 x 25 x 135 mm	Štandard produktu: GB4706.59-20 08
Frekvencia: 16 000 pohybov za minútu	