

Elektrický zubní kartáček


s časovačem

Návod k použití

Model: GTS1050

Dr. Mayer

LIFE & HEALTH

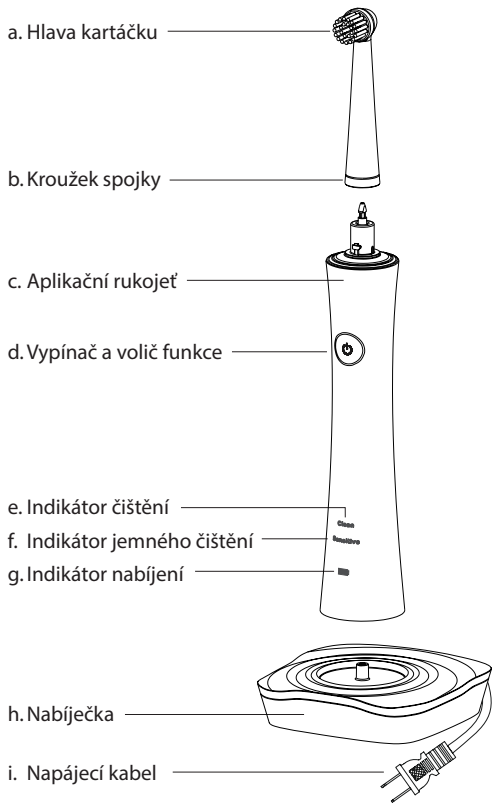

NEPŘEHLEDNĚTE

Než začnete výrobek používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny zde uvedené vám pomohou používat výrobek správně, a nezranit sebe ani jiné osoby. Při používání elektrických výrobků je třeba dodržovat základní bezpečnostní zásady, zejména v přítomnosti dětí.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

POZOR NA VODU

- Nabíječku nastavte a neukládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení do umývadla, vany či záchodu.
- Chraňte zařízení před pádem do vody či jiné tekutiny.
- Spadne-li nabíječka do vody, nedotýkejte se jí. Okamžitě ji odpojte.
- Nepoužívejte přístroj při koupání.
- Před čištěním odpojte nabíječku ze sítě. Před dalším nabíjením dbejte, aby byla suchá.

POZOR NA ELEKTRICKÝ PROUD

- Nabíječku připojujte výhradně do elektrické zásuvky s napětím uvedeným na štítku na spodku základny.
- Tento přístroj může fungovat na napětí v rozsahu 100 – 240 V.
- Zárukou kompatibility nejsou napěťové převodníky.
- Zástrčku do zásuvky nezapojujte násilně.
- Pokud zástrčka do zásuvky nepasuje, nelze přístroj použít.
- Po použití nabíječku odpojte ze zásuvky.
- Nenechávejte přístroj nabíjet v době, kdy spíte nebo podřimujete.
- Napájecí šňůra se nedá vyměnit. Pokud dojde k jejímu poškození, zařízení se musí zlikvidovat.

POZOR NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA

- O používání elektrického kartáčku v době dvou měsíců po operačním zákroku v ústní dutině nebo na dásních se poraďte se zubním lékařem.
- Pokud se s čištěním zubů elektrickým kartáčkem objeví silné krvácení nebo pokud se po týdnu užívání objevuje slabé krvácení, poraďte se s lékařem.
- Osoby se zdravotními potížemi musejí použití elektrického kartáčku konzultovat s lékařem předem.
- Osoby s kardiostimulátory nebo jinými implantovanými zdravotnickými prostředky musí použití elektrického kartáčku předem konzultovat s lékařem nebo výrobcem zařízení.

UPOZORNĚNÍ


- Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezučené smí zubní kartáček používat pouze pod dohledem a po bezpečnostním poučení. Také čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dohledu.
- S přístrojem si nesmí hrát děti.
- Přístroj používejte pouze k účelu popsanému v této příručce. Je určen k čištění zubů a dásní. Nepoužívejte nástavce a příslušenství bez doporučení výrobce.
- Zubní kartáček je předmět osobní péče a není určen k použití více osobami, v zubních ordinacích či institucích.
- Pokud používáte zubní pastu, která obsahuje peroxid vodíku, jedlou sodu nebo jiný bikarbonát (jak je obvyklé v bělicích zubních pastách), důkladně nástavec i rukojeť kartáčku čistěte, aby plasty nepopraskaly.
- Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozenou šňůrou, zásuvkou nebo nabíječkou. Nepoužívejte přístroj, který dobře nefunguje, přístroj poškozený například pádem nebo přístroj, který se dostal do vody. Zjistíte-li jakékoliv poškození, přístroj ihned vypněte a nepoužívejte.
- Chraňte přístroj před horkými předměty.
- Pokud vám kartáček začne v ústech působit nepříjemnosti nebo bolest, přestaňte jej používat, poraďte se se zubním specialistou.
- Nepokoušejte se z přístroje vyndat baterii.
- Nemyjte přístroj v myčce.
- Přístroj nepoužívejte venku, v prostředí s aerosoly rozptýlenými v ovzduší a v prostředí se zvýšeným přívodem kyslíku.
- Do žádného otvoru nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Přístroj je určen k domácímu použití.

TENTO NÁVOD SI DOBRĚ ULOŽTE

ZAČÍNÁME

Nabíjení baterie kartáčeku

- Před nabíjením kartáček vypněte.
- Vsaďte rukojeť do nabíječky. Rozsvítí se kontrolka nabíjení (obr. 1).

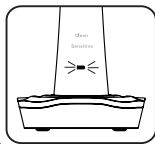


Obr. 1

Poznámky:

- Úplné nabití baterie vyžaduje alespoň 24 hodin.
- Nabíjení 24 hodin je potřebné:
 - a. před prvním použitím kartáčku,
 - b. pokud se přístroj nepoužíval déle než 3 měsíce.
- Úplné nabití je vhodné provést v době, kdy se kartáček nepoužívá.
- Během nabíjení se kartáček zahřívá. Jde o normální jev.
- Se stárnutím baterie se zkracuje doba použitelnosti po nabití. Jakmile se dá kartáček po nabití použít jen krátce, znamená to, že životnost baterie končí. Obratě se na servisní středisko.

ZPŮSOB POUŽITÍ


1. Nástavec kartáčku nasadíte shora na aplikační rukojeť a otočením po směru hodinových ručiček zamkněte (obr. 2).
2. Na hlavu kartáčku naneste zubní pastu.
3. Vsuňte kartáček do úst.
4. Zlehka stiskněte vypínač na rukojeti. Tím se kartáček rozběhne. Během čištění zubů svítí indikátor čištění. (obr. 3).

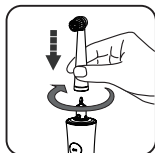

Obr. 2


- Důkladně kartáčkem očistěte zuby ve čtyřech fázích podle obr. 4:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. horní zuby –
vnější strana | 3. horní zuby –
vnitřní strana |
| 2. dolní zuby –
vnější strana | 4. dolní zuby –
vnitřní strana |

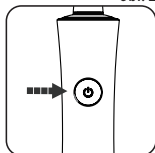


Obr. 3

5. Veďte hlavu kartáčku pomalu od zuby k zubu.
 - Na každém zubu kartáček několik sekund přidržte.
 - Kromě zubů očistěte také dásně. Nejprve z vnější strany, poté z vnitřní a nakonec žvýkací plochy.
 - Kartáčkem na zuby netlačte, působení na zuby nechte na přístroji.

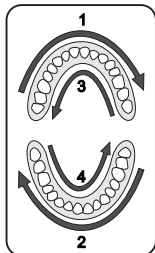

Obr. 4

6. Při čištění rukojeť funguje ve dvouminutovém cyklu v dílčích intervalech po 30 sekundách.
7. Stiskem tlačítka se přístroj přepne z režimu čištění na režim jemného čištění a rozsvítí se indikátor jemného čištění (obr. 5).
8. Dalším stiskem tlačítka se přístroj vypne (obr. 3).

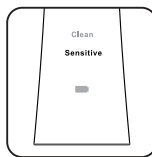


Obr. 5

POZNÁMKA:


Cyklus dvou minut je obecně optimální pro dobré vyčištění zubů. Důkladnějšího čištění může uživatel podle potřeby dosáhnout zapnutím na další dvě minuty. Zpočátku může elektrický kartáček způsobovat mírné krvácení. Po několika dnech si dásně zvyknou a krvácení při čištění zubů by mělo ustát. Pokud krvácení trvá, je třeba obrátit se na zubního lékaře.

ÚDRŽBA

1. Zapněte kartáček a v tekoucí vodě odstraňte z hnačio trnu zbytky zubní pasty (obr. 6).
2. Vypněte kartáček, odpojte nástavec a opláchněte jeho vnitřek ve vodě o teplotě do 60 °C (obr. 7).
3. Zapněte kartáček a opláchněte jeho hlavu pod tekoucí vodou (obr. 8).
4. Nasadte nástavec na rukojeť (obr. 2).
5. Těleso kartáčku a nabíječku očiňte měkkou zvlhčenou utěrkou nebo papírovou utěrkou (obr. 9.).
6. Pokud se kartáček delší čas nepoužívá, odpojte jej ze sítě a uložte do krabice. Nemotejte šňůru na přístroj.

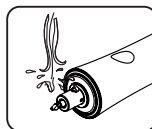


Obr. 6

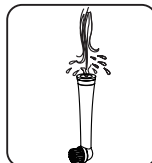

Obr. 7



Obr. 8

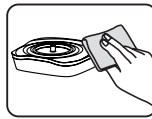

Obr. 9

POZNÁMKA:

- V zájmu optimálního účinku čištění každé tři měsíce vyměňte kartáček – nástavec.
- Vyměňte jej také v případě, že se štětiny zdeformují.
- Veškeré další servisní zásahy musí provádět odborný servis. Žádné součásti výrobku nejsou určeny k servisní údržbě uživatelem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Kartáček nefunguje.	Koupili jste výrobek, který nebyl používán déle než 3 měsíce.	Nechte přístroj nabíjet alespoň 24 hodin.
Indikátor režimu svítí, ale kartáček nefunguje.	Je vybitá baterie.	Nechte přístroj nabíjet alespoň 24 hodin.
Slabě nebo slábnoucí vibrace.	Kartáček tlačíte na zuby příliš silně.	Kartáček na zuby přikládejte s citem.
Přístroj i po dobití funguje jen několik minut.	Končí životnost baterie.	Obratě se na servisní středisko.
	Doba nabíjení nebyla dostatečná.	Nechte přístroj nabíjet alespoň 24 hodin.

LIKVIDACE


Zdrojem napájení tohoto přístroje je recyklovatelná baterie typu NiMH. Před likvidací po skončení životnosti ji vyndejte z přístroje. Přístroj zlikvidujte v souladu s předpisy platnými pro likvidaci elektrických zařízení. S případnými dotazy k recyklaci se obračtejte na místní správu.

Vyjmutí a recyklace baterie


Přístroj se smí rozebírat pouze pro účely likvidace. Rozebrání se zníčí. Dodržte základní bezpečnostní opatření.

Před demontáží baterie musí být zařízení odpojeno od přívodu proudu.

1. Vypačte ze spodku rukojeti koncové víčko. Křížovým šroubovákem vyšroubujte dva šrouby a víčko vyndejte (obr. 10).
2. Vypačte z rukojeti sponu lůžka a vytáhněte lůžko (obr. 11).
3. Plochým šroubovákem vypačte z lůžka baterii (obr. 12).
4. Dbejte, aby nedošlo ke zkratu mezi póly baterie. Demontované baterie už nepřipojujte k nabíječce nepřipojujte.
 - Baterii předejte na sberném místě k recyklaci. S případnými dotazy k recyklaci elektrického odpadu se obračtejte na místní správu.

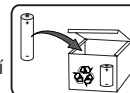


Obr. 10

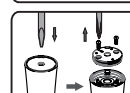

Obr. 11



Obr. 11

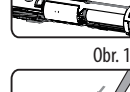

Obr. 12

Kontakty:

Distributor pro ČR a SR: info@bbcomp.cz
 Best Brands Company, s.r.o. www.doctor-mayer.cz
 Karlova 344, Velim 281 01 nebo www.bbcomp.cz