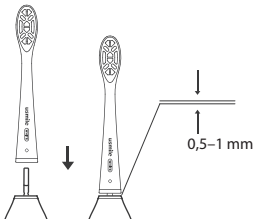
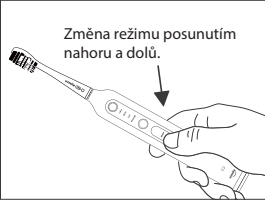
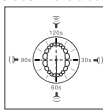
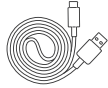
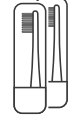
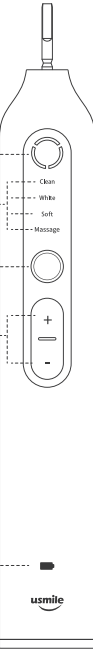
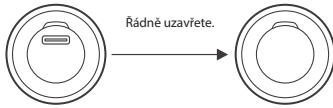
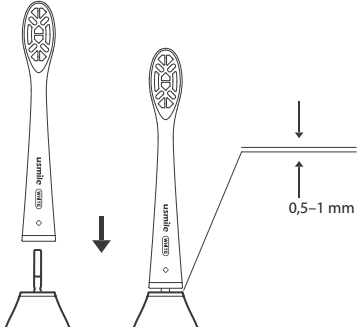
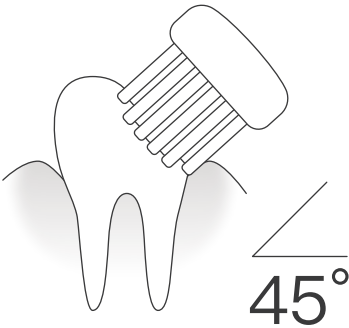
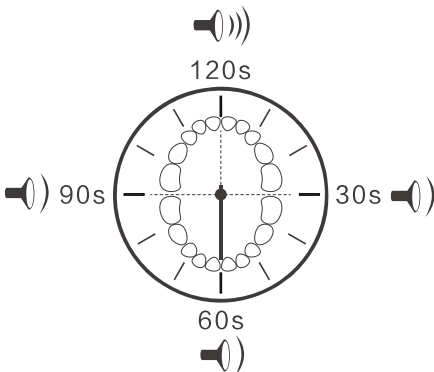
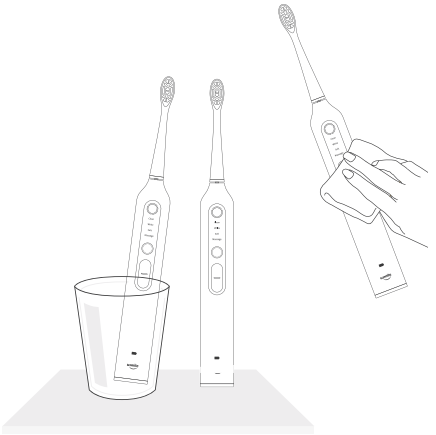
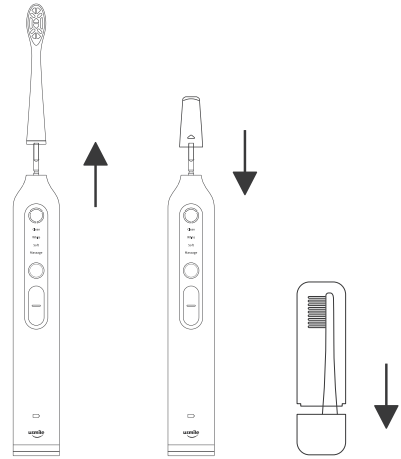


 Sonický elektrický zubní kartáček usmile U3 Uživatelská příručka 	Stručná příručka: Nasazení hlavice kartáčku Značka usmile patří na přední stranu kartáčku. Nenasazujte prosím hlavici značkou vzad. V opačném případě nebude výrobek správně fungovat a může dojít k jeho poškození.  Čištění zubů: 1. Stisknutím tlačítka pro volbu režimu zvolte požadovaný režim čištění. 	2. Namočte hlavici kartáčku, naneste zubní pastu, vložte do úst, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a začněte s čištěním zubů.   3. Během čištění nastavte požadovanou intenzitu vibrací stisknutím funkčního tlačítka.  4. Podle odborníků by mělo čištění zubů trvat 2 minuty, proto kartáček každých 30 sekund jedenkrát zavibruje, aby vám připomněl, že máte přejít na další část chrupu. Po 2 minutách upozorní kartáček trojitou vibrací na ukončení čištění a automaticky se vypne.  Upozornění: Pokud používáte kartáček poprvé nebo máte citlivé dásně, doporučuje se pro začátek používat režim pro citlivou péči a intenzitu postupně zvyšovat. Na celý proces si tak snáze přivyknete.	Děkujeme, že jste si vybrali sonický elektrický zubní kartáček usmile. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste při čištění zubů a péči o chrup dosahovali co nejlepších výsledků. Příručku si uložte pro pozdější použití. Obsah Bezpečnostní pokyny Správné používání kartáčku Stav a nabíjení baterie Nasazování hlavice kartáčku usmile Nastavení režimu čištění Řádné vyčištění zubů Čištění jednotlivých částí chrupu Čištění a uložení kartáčku Cestování s kartáčkem usmile Ochrana životního prostředí Informace o výrobku Záruka a servis	Bezpečnostní opatření Dodržujte následující bezpečnostní opatření a vyhněte se tak riziku poruchy, úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru či škody na zařízení nebo majetku. - Výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii a nesmí být vystaven působení ohně nebo slunečního záření. V opačném případě může dojít k úniku elektrolytu a k přehřátí či explozi baterie. - Nepoužívejte výrobek během nabíjení. - Nepoužívejte výrobek, pokud není port pro nabíjení řádně zakrytý. - Nikdy neopravujte tento výrobek sami. - Nabíjecí kabel, který je připojený k výrobku, nesmí být umístěn ve vlhku nebo ve vodě. - Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. - Nepoužívejte výrobek k jinému účelu než k péči o ústní dutinu. - Chraňte výrobek před pádem a prudkými nárazy. - Nepoužívejte výrobek v době, kdy se sprchujete, koupete nebo si dáváte parní lázeň. - Pokud trpíte závažnou parodontitidou, podstupujete zubní ošetření nebo vás trápí nepříjemné pocity v ústech, konzultujte prosím použití předem se svým zubním lékařem. - K čištění výrobku nikdy nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol ani jiné chemikálie. - Pokud s používáním tohoto výrobku teprve začínáte, může se objevit slabé krvácení, protože vaše dásně ještě nejsou na podobný způsob dráždění zvyklé.	Během jednoho či dvou týdnů krvácení obvykle ustane. Pokud krvácení přetrvává i po dvou týdnech, může to být způsobeno neobvyklým stavem vašich dásní. V tom případě přestaňte výrobek používat a situaci konzultujte se svým zubním lékařem. 13. Během prvních dní používání můžete v ústní dutině pociťovat svědění. Jedná se o běžný jev, protože povrch vašeho jazyka a ústní dutiny není ještě zvyklý na vysokofrekvenční vibrace hlavice kartáčku. Po několika dnech pravidelného používání tento pocit ustane. 14. Pokud se na výrobku objeví poškození, rez, prasklina apod., ihned ho přestaňte používat. Jednotlivé části výrobku    	 Indikátor intenzity Indikátory režimu Tlačítko pro zapnutí/vypnutí Funkční tlačítka (Před spuštěním) Nastavení režimu (Po spuštění) Nastavení intenzity Indikátor stavu baterie	Správné používání kartáčku Stav a nabíjení baterie Kartáček je z výroby dodáván nabitý a připravený k použití. Jakmile začne indikátor stavu baterie červeně blikat, znamená to, že je baterie téměř vybitá a je třeba ji co nejdříve nabít.  Červeno-bílá kontrolka indikátoru Červená: vyžadováno nabití Bílá: v chodu / nabíjí se / plně nabit	Pro nabíjení odklopte kryt nabíjecího portu na spodní straně těla kartáčku a zapojte dodaný nabíjecí kabel k USB napájecímu adaptéru splňujícímu příslušné normy pro nabíjení. Během nabíjení musí být výrobek umístěn v suchém prostředí.  Indikátor stavu baterie bliká během nabíjení bíle. Jakmile je baterie plně nabitá, zůstane kontrolka svítit bíle. Jakmile se blíží vybití baterie, rozsvítí se indikátor červeně. Výrobek není možné použít a je třeba jej dát co nejdříve nabít. Pokud je baterie zcela vybitá, začne indikátor bíle blikat až po několika minutách napájení. Po ukončení nabíjení se před dalším použitím ujistěte, že je kryt nabíjecího portu řádně uzavřený. 
Nasazování speciální hlavice kartáčku usmile Pro tento výrobek prosím používejte jen odpovídající hlavice kartáčku usmile. Po pravidelném používání po dobu tří měsíců, nebo pokud zjistíte, že štětiny kartáčku vypadávají nebo se ohýbají, hlavici vyměňte, abyste zabránili poškození zubů a dásní. Při vyměňování nasadte hlavici kartáčku na dřík a jemně zatlačte. Po nasazení zůstane mezi hlavicí a tělem kartáčku mezera o velikosti 0,5–1 mm umožňující správnou vibraci hlavice zubního kartáčku. 	Nastavení režimu čištění Stisknutím funkčních tlačítek můžete podle potřeby plynule měnit režim čištění.  Indikátor tlaku: silný/střední/slabý Režim pro každodenní čištění Režim pro odstraňování skvrn Režim pro citlivé zuby Masážní režim	Režimy čištění: Dříve než elektrický zubní kartáček spustíte, zvolte stisknutím funkčních tlačítek požadovaný režim. Režim pro každodenní čištění: Po dobu 2 minut probíhá čištění zubů normální silou. Kartáček vás během této doby každých 30 sekund upozorní, abyste změnili oblast čištění. Režim pro odstraňování skvrn: Rozjasňuje povrch zubů tím, že je čistí a leští pomocí měnících se frekvencí. Kartáček vás každých 30 sekund upozorní, abyste změnili oblast čištění, a po uplynutí dvou minut se automaticky vypne. Režim pro citlivé zuby: Po dobu 2 minut čistí zuby menší silou. Kartáček vás každých 30 sekund jednorázovou vibrací upozorní, abyste změnili oblast čištění. Po 2 minutách upozorní kartáček trojitou vibrací na ukončení čištění a automaticky se vypne. Masážní režim: Po dobu 2 minut čistí kartáček zuby přímou masážní frekvencí. Kartáček vás každých 30 sekund upozorní, abyste změnili oblast čištění a po uplynutí 2 minut vám trojitou vibrací oznámí ukončení čištění a automaticky se vypne. Intenzita čištění: Tři úrovně intenzity čištění, slabá/střední/silná, dokážou uspokojit různé potřeby uživatele. Požadovanou intenzitu vibrací nastavte během čištění stisknutím funkčního tlačítka.	Řádné vyčištění zubů Při používání sonického elektrického zubního kartáčku usmile na hlavici kartáčku zbytečně netlačte, stačí udržovat štětiny v kontaktu s povrchem zubu a pomalu přitom pohybovat kartáčkem do stran. Mezi štětinami kartáčku a povrchem zubu se při čištění z vnější i vnitřní strany zubů doporučuje pro efektivnější vyčištění udržovat úhel 45°, jak je uvedeno na obrázku. 	Začátek čištění Doporučuje se rozdělit si pomyslně chrup na čtyři oblasti a čištění každé z nich věnovat 30 sekund. Po spuštění vás kartáček každých 30 sekund upozorní na uplynutí dané doby změnou frekvence. Po uplynutí 2 minut čištění vás kartáček upozorní třemi po sobě jdoucími změnami frekvence. 	Čištění a uskladnění kartáčku Po ukončení čištění vypněte kartáček stisknutím vypínacího tlačítka na těle kartáčku. Hlavici a tělo kartáčku omyjte vodou. Osušte ručníkem a svisle postavte na suchý povrch nebo vložte do kelímku. 	Cestování s kartáčkem usmile Pokud si s sebou chcete sonický elektrický zubní kartáček usmile přibalit na cesty, sejměte prosím hlavici kartáčku a vložte ji do ochranného pouzdra, které je součástí balení. Tělo kartáčku prosím vkládejte do pouzdra opatrně, aby nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka. 	Ochrana životního prostředí Součástí sonického elektrického zubního kartáčku usmile je vestavěná dobíjecí lithiová baterie. Při likvidaci ji prosím nevhazujte do běžného domovního odpadu. Baterii odevzdejte ve sběrném místě pro recyklaci baterií nebo ji zašlete zpět do oddělení poprodejního servisu usmile. Přispějte tak k ochraně životního prostředí. Informace o výrobku Název výrobku: Sonický elektrický zubní kartáček usmile U3 Model: U3 Jmenovitě napětí: DC = 3,6 V; Jmenovitý příkon: 1,2 W Výrobce: Guangzhou Haoxingwan Technology Co., Ltd. Adresa: Room 718, No. 9 Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou Původ: Vyrobeno v Číně. usmile® usmile je registrovaná obchodní značka výrobků pro orální péči dodávaných společností Guangzhou Haoxingwan Technology, Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.	Záruka a servis V případě jakýchkoli závad nebo poškození potvrzených naším oddělením poprodejního servisu, které jsou zjištěny při běžném používání po dobu jednoho roku od zakoupení výrobku, máte právo na bezplatnou záruční opravu. Bezplatné záruční služby se nevztahují na hlavice kartáčku, škody způsobené nesprávným používáním, nedodržení bezpečnostních opatření, úpravami nebo neoprávněnou opravou, běžným opotřebením, včetně prasklin, poškrábání, odření, změny barvy, a škod způsobených zásahem vyšší moci. Součástí sonického elektrického zubního kartáčku usmile je vestavěná dobíjecí lithiová baterie. Při likvidaci ji prosím nevhazujte do běžného domovního odpadu. Baterii odevzdejte ve sběrném místě pro recyklaci baterií nebo ji zašlete zpět do oddělení poprodejního servisu usmile. Přispějte tak k ochraně životního prostředí. V případě potřeby nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu na info@mysmile.com