


Uživatelská příručka pro sonický elektrický zubní kartáček usmile Soft Bubbles



Model P4

Děkujeme, že jste si vybrali sonický elektrický zubní kartáček usmile.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste při čištění vyvíjeli optimální tlak a dosahovali co nejlepších výsledků. Příručku si rádně uložte pro pozdější použití.

Obsah

- **Bezpečnostní upozornění**
- **Správné používání sonického elektrického zubního kartáčku usmile**
 - Stav a nabíjení baterie
 - Nasazování hlavice kartáčku usmile
 - Přepínání režimu čištění a začátek čištění
 - Správný způsob čištění
 - Očištění a uložení kartáčku
 - Cestování se sonickým elektrickým zubním kartáčkem usmile
- **Ochrana životního prostředí**
- **Informace o výrobku**

• Bezpečnostní upozornění

Dodržte prosím následující bezpečnostní opatření a vyhněte se tak riziku poruchy, úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru či škody na zařízení nebo majetku.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akopptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí provoz.

1. Výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nevhazujte jej proto do ohně a nevystavujte působení slunečního záření. V opačném případě může dojít k úniku kapalniny z baterie a k přehřátí či explozi baterie.
2. Nepoužívejte výrobek během nabíjení.
3. Nepoužívejte výrobek, pokud je kryt portu pro nabíjení otevřený.
4. Nikdy neopravujte tento výrobek sami.
5. Nabíjecí kabel dodávaný společně s výrobkem nesmí být umístěn ve vlnku nebo ve vodě.
6. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a nemlučáků.
7. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu než k péči o ústní dutinu.
8. Zabraňte prosím pádu výrobku a prudkým nárazům.
9. Výrobek nepoužívejte v době, kdy se sprchujete, koupete nebo si dáváte parní lázeň.
10. Pokud podstupujete léčbu zivádné formy parodontitidy nebo vás trápí nepřiměřené pocity v ústech, poraďte se před použitím se svým zubním lékařem.
11. Při čištění výrobku nikdy nepoužívejte fediol, benzen, alkohol ani jiné chemikálie.
12. Při používání tohoto výrobku se může ze začátku objevovat slabé krvácení dásní, protože dásně ještě nejsou na podobný způsob dráždění zvyklé. Během jednoho či dvou týdnů tento problém obvykle ustane. Pokud krvácení přetrvává déle, může to značit neobvyklý stav dásní. V tom případě přestaňte výrobek používat a situaci konzultujte se svým zubním lékařem.
13. Během prvních dní používání můžete v ústní dutině pociťovat svědění, protože povrch vašeho jazyka a ústní dutiny není ještě zvyklý na vysokofrekvenční vibrace hlavice zubního kartáčku. Po několika dnech pravidelného používání pocit svědění obvykle ustane.
14. Pokud se na výrobku objeví poškození, rez, prasklina apod., přestaňte ho používat.
15. Nepoužívejte hlavici kartáčku s poškrabými nebo zohýbanými štětinami. Hlavici kartáčku vyměňte každé tři měsíce, v případě opotřebení i dříve. Nepoužívejte jiné než výrobcem doporučené hlavice kartáčku.
16. Děti starší 12 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo pokud byly řádně poučeny o jeho bezpečném použití a jsou si vědomy souvisejících rizik. Výrobek není určen jako hračka pro děti. Čištění a uživatelskou údržbu kartáčku nesmí provádět děti, nejoucí starší 12 let a pod dohledem.
17. Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
18. Výrobek používejte pouze pro zamýšlený účel popsany v této příručce. Nepoužívejte nástavce, které nedoporučuje výrobce.

1

19. Pokud vám výrobek upadne, je třeba před dalším použitím vyměnit hlavici, a to v případě, že nevykazuje žádné viditelné poškození.

20. Výrobek nerozebírejte, s výjimkou výměny baterie před likvidací.

21. Pokud podstupujete jakýkoliv lékařský zákrok v ústní dutině, poraďte se před použitím se svým zubním lékařem.


22. Tento zubní kartáček je určený pro osobní péči, nikoli pro použití u více pacientů ve stomatologické ordinaci nebo klinice.

23. Nepřipojte nabíjecí zařízení určené pro jiné napětové soustavy. Při použití nesprávného napětí dojde k poškození výrobku.


**Elektromagnetické pole (EMF)
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA**

Tento elektrický zubní kartáček splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí. Při správné manipulaci podle pokynů obsažených v této příručce je jeho použití bezpečné. Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo jiné zařízení, poraďte se před použitím kartáčku se svým lékařem a s výrobcem zařízení.


Nákres jednotlivých součástí




Nabíjecí kabel 1 ks



Kryt nabíjecího portu



Hlavice kartáčku pro šetrné čištění 1 ks




Hlavice kartáčku pro profesionální čištění 1 ks

2

• Správné používání sonického elektrického zubního kartáčku usmile

Stav a nabíjení baterie


Výrobek je z výroby dodáván plně nabitý a připravený k přímému použití. Pokud indikátor stavu baterie na těle kartáčku svítí červeně, značí to nízkou úroveň nabití. Kartáček dlejte co nejdříve nabít.

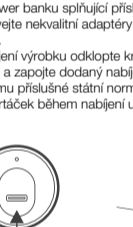

Červená
Vyžadováno nabít

Clean
White
Massage

K nabíjení výrobku slouží standardní nabíjecí port typu C zaručující vysokou kompatibilitu a rychlé nabíjení. K nabíjení lze použít i USB napájecí adaptér nebo power banku splňující příslušné státní normy. K nabíjení výrobku nepoužívejte nekvalitní adaptéry – mohly by způsobit jeho poškození nebo poruchu. Pro nabíjení výrobku odklopte kryt nabíjecího portu na spodní straně těla kartáčku a zapojte dodaný nabíjecí kabel k USB napájecímu adaptéru splňujícímu příslušné státní normy pro nabíjení. Dbejte na to, aby byl elektrický zubní kartáček během nabíjení umístěn v suchém prostředí.

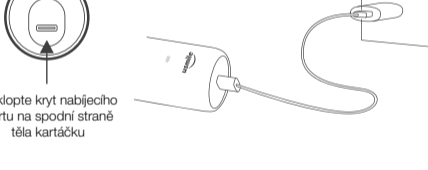


Odklopte kryt nabíjecího portu na spodní straně těla kartáčku

4

Indikátor stavu baterie bliká během nabíjení bíle; po nabití zůstane svítit bíle. Je-li baterie kartáčku téměř vybitá, indikátor režimu / stavu baterie na těle kartáčku se rozsvítí červeně a kartáček není možné použít. Dejte ho prosím co nejdříve nabít. Pokud byla baterie zcela vybitá, začne kontrolka indikátoru režimu / stavu baterie při nabíjení přecházet do bílé barvy a až po několika minutách od připojení nabíjecího kabelu přejde do stavu označujícího nabíjení.

U ukončení nabíjení se před dalším použitím ujistěte, že je kryt nabíjecího portu řádně uzavřený.

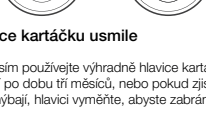


Uzavřený

Nasazování hlavice kartáčku usmile

Pro tento výrobek prosím použijte výhradně hlavice kartáčku značka usmile. Po pravidelném používání po dobu tří měsíců, nebo pokud zjistíte, že štětiny kartáčku vypadávají nebo se ohýbají, hlavici vyměňte, abyste zabránili poškození zubů a dásní.

Při nasazování hlavice umístěte štětiny nad kontrolní otvor a drík kartáčku zesponu jemně zasuňte do dutiny hlavice. Po nasazení zůstane mezi spodní plochou hlavice a horní hranou těla kartáčku mezera o velikosti 0,5–1 mm umožňující správnou vibraci hlavice zubního kartáčku.

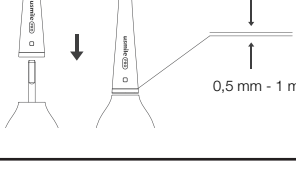

0,5 mm - 1 mm

5


Popis jednotlivých režimů čištění:

Režim pro každodenní čištění: Po dobu 2 minut probíhá čištění zubů normální silou. Kartáček vás během této doby každých 30 sekund upozorní, abyste změnil oblast čištění. Po uplynutí 2 minut kartáček třikrát zavibruje, aby vás upozornil, že doba čištění skončila, a poté se automaticky vypne.

Režim pro odstraňování skvrn: Čištění zubů probíhá po dobu 2 minut zvýšenou silou. Kartáček vás během této doby každých 30 sekund upozorní, abyste změnil oblast čištění. Po uplynutí 2 minut kartáček třikrát zavibruje, aby vás upozornil, že doba čištění skončila, a poté se automaticky vypne.

Masážní režim: Probíhá jemné čištění zubů a současně i masáž dásní. Kartáček vás během této doby každých 30 sekund upozorní, abyste změnil oblast čištění. Po uplynutí 2 minut kartáček třikrát zavibruje, aby vás upozornil, že doba čištění skončila, a poté se automaticky vypne.


Namočte hlavici kartáčku, naneste na ni příměřené množství zubní pasty, stiskněte spouštěcí tlačítko na těle kartáčku, vlozte hlavici kartáčku do úst a začnete s čištěním zubů.



1. Namočte hlavici kartáčku.
2. Naneste pastu
3. Vložte do úst
4. Stiskněte tlačítko

5. Začněte s čištěním zubů v různých částech úst (viz obrázek níže).


Doporučuje se rozdělít si pomyslné chrup na čtyři části a čištění každé z nich vést postupně 30 sekund. Po spuštění váš kartáček každých 30 sekund upozorní na uplynutí dané doby frekvencí. Po uplynutí 2 minut čištění váš kartáček upozorní třemi po sobě jdoucími změnami frekvence.



7

Přepínání režimu čištění a začátek čištění

Přepínání režimu čištění: Stisknete tlačítko pro zapnutí / volbu režimu a spustíte kartáček. Opakovaným stisknutím během 4 sekund od spuštění přepnete na požadovaný režim. Po uplynutí 4 sekund slouží tlačítko k vypnutí činnosti kartáčku. Nastavení intenzity: Po spuštění výrobku nastavíte stisknutím příslušného tlačítka intenzitu čištění. U každého režimu je možné přepínat mezi 3 úrovněmi intenzity.

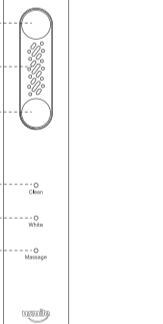


6

Správný způsob čištění

Při používání sonického elektrického zubního kartáčku usmile na hlavici kartáčku zbytečně netlačte, stačí udržovat štětiny v kontaktu s povrchem zubu a pomalu přitom pohybovat kartáčkem do stran.


Mezi štětinami kartáčku a povrchem zubu se při čištění z vnější i vnitřní strany zubů doporučuje pro efektivnější vyčištění udržovat úhel 45°, jak je uvedeno na obrázku.



45°

Očištění a uložení kartáčku


Po dokončení čištění vypněte kartáček stisknutím vypínacího tlačítka na těle kartáčku. Hlavici a tělo kartáčku opláchněte čistou vodou. Osušte ručnickem a vsuňte postavte na suchý povrch nebo vložte do kelímku. Dbejte na to, aby byl kartáček ve stabilní poloze a nemohlo dojít k jeho překlápění nebo pádu.



8

Cestování se sonickým elektrickým zubním kartáčkem usmile

Pokud si s sebou chcete kartáček přibírat na cesty, sejměte prosím hlavici kartáčku a vložte ji do ochranného pouzdra, které je součástí balení. Do cestovního pouzdra je možné společně vložit kartáček i hlavici. Tělo kartáčku prosím vkládejte do pouzdra opatrně, aby nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka.

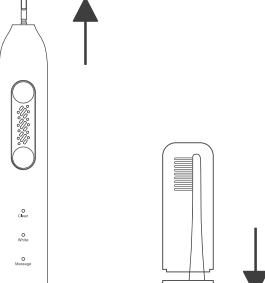

9

• Ochrana životního prostředí

Součástí sonického elektrického zubního kartáčku usmile je vestavěná dobíjecí lithiová baterie, kterou nelze při likvidaci vhažovat do běžného domovního odpadu. S chledem na ochranu životního prostředí nevazujte výrobek do komunálního odpadu. Odnešte jej do místa určeného ke sběru elektroodpadu, kde dobíjecí baterii profesionálně vyjmuou.


Uživatel nemůže baterii měřit sám. Před vyjmutím prosím ověřte, že je baterie zcela vybitá.

Při likvidaci prosím dodržte pravidla, jimž se ve vaší zemi řídí třídní sběr elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Správná likvidace napomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví.

Varování: Dobíjecí baterii vyjměte pouze tehdy, pokud se chystáte spotřebič vyhodit. Dbejte na to, aby byla baterie při vyjmutí zcela vybitá.

• Informace o výrobku

Název výrobku: sonický elektrický zubní kartáček usmile Soft Bubbles
Model: P4
Jmenovité napájení: 5 V = 1 A
Jmenovitý příkon: 5 W
Vodododnost: IPX7
Specifikace baterie: Lithiové baterie 3,7 V, 2 500 mAh
Výrobce: Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.
Vyrobeno v Číně.



10