

Oclean sterilizačný sanitizér

Dovozca: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva

Výrobca: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., Čína



S1

Sterilizačný sanitizér - Užívateľský manuál SK

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie sonického sterilizačného sanitizéra Oclean S1. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostné pokyny. Uschovajte si tento manuál pre budúcu potrebu, aby ste predišli nesprávnemu použitiu výrobku. Pokiaľ budete potrebovať detailnejšie informácie, obráťte sa prosím na predajcu, alebo distribútora produktu.

Distribútor: BELdental s.r.o., Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika, tel: + 420 596 638 223, email: obchod@beldental.cz


Dôležité bezpečnostné pokyny

- Svetlo UVC-LED sa nachádza na vnútornej strane sterilizačného puzdra. Aby ste predišli poraneniu, nerozoberajte prístroj ani nepozerajte do UVC svetla z neobvyklých uhlov, kým je sterilizátor v prevádzke.
- UVC je neviditeľné žiarenie. Viditeľné modré svetlo pochádza z kontrolky indikujúcej priebeh sterilizácie.
- Aby ste predišli zraneniu, upevnite prístroj na stenu a nenechávajte ho na nevhodných miestach. Nepoužívajte ho na iný účel, než na ktorý je určený.
- Použite originálnu nálepku na stenu. Pripevnite zariadenie na nálepku na stenu a aktivujte spínač, aby sa zariadenie aktivovalo.

Varovanie

- Zubná kefka musí byť napájaná len bezpečným veľmi nízkym napätím zodpovedajúcim označeniu na spotrebiči.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Tento spotrebič obsahuje nevymeniteľné batérie.

Popis zariadenia

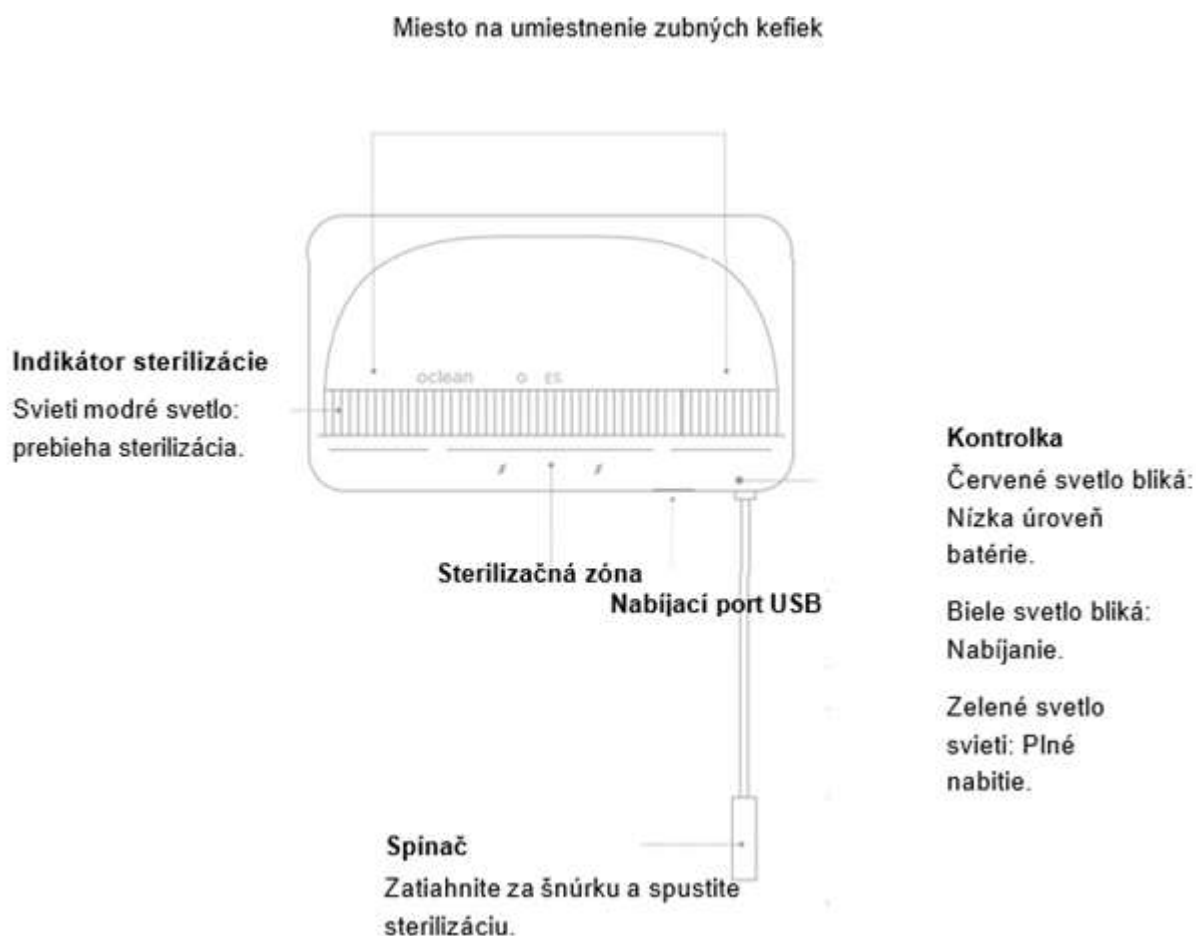

Ak sa hlavná jednotka odpojí od nástenného držiaka, jednotka sa automaticky vypne a sterilizátor nebude fungovať. Hlavnú jednotku je možné nabíjať, keď je zavesená alebo odobraná z nástenného držiaka.


Čistenie zariadenia

V prípade potreby neumývajte zariadenie pod tečúcou vodou. Na čistenie sa odporúča používať vlhkú handričku.

Montáž na stenu

Nájdite na stene vhodnú výšku a nezabudnite ponechať dostatok miesta na zavesenie zubných kefiek.

Ubezpečte sa, že je lepiaca plocha suchá a čistá (vhodné pre hladké povrchy, ako je keramika, sklo atď.). Dbajte na správne umiestnenie podľa šípok nahor/nadol. Nálepku prilepte na stenu. Trochu pritlačte, aby ste sa ubezpečili, že je pevne pripevnená.

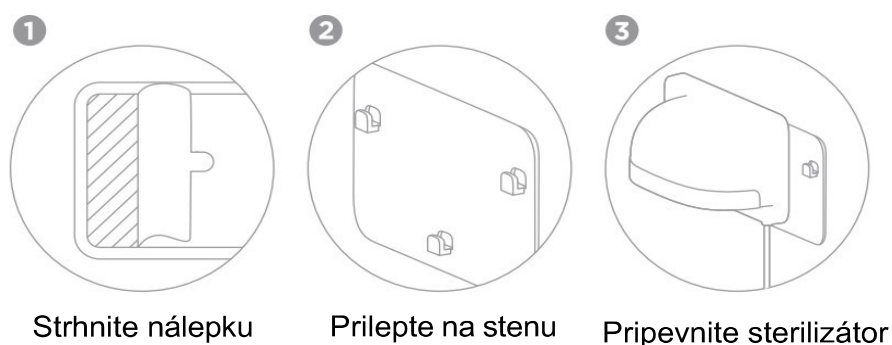

Zapnutie/vypnutie napájania

Po pripevnení zariadenia k nálepke zatiahnite za šnúrk, čím spustíte sterilizáciu. Po jej skončení sa zariadenie automaticky zastaví. Automatická sterilizácia prebieha každých 6 hodín. Po vybratí zariadenia z nástennej nálepky sa zariadenie automaticky vypne.

Časovač

Zatiahnutím za šnúrk spínača počas sterilizácie sa sterilizátor automaticky zastaví. Zatiahnutím spínača počas nefunkčného stavu sa spustí proces sterilizácie. Automatická sterilizácia prebieha každých ďalších 6 hodín po ukončení prvého sterilizačného procesu. Po ukončení každej sterilizácie je prístroj v pohotovostnom režime.

Poznámka

Toto zariadenie je navrhnuté predovšetkým pre sonické zubné kefky Oclean a najbežnejšie značky zubných kefiek. Nie je zaručená kompatibilita so všetkými zubnými kefkami na trhu.

Technické údaje

Názov produktu	Oclean UVC sanitizer zubných kefiek
Model	Oclean S1
Pracovná teplota	-20 °C ~ 60 °C
Nabíjacie rozhranie	USB-A na USB typu C
Špecifikácie nabíjania	5 V $\equiv$ 0,6 A
Kapacita batérie	1 000 mAh
Vstupný výkon	3 W
Pracovný čas	Automatická dezinfekcia každých 6 hodín
Režim inštalácie	Montáž na stenu
Čas nabíjania	2,5 hodiny

Záručné podmienky

Na nový výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, pričom je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (domácnosti)

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste.



EU vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Distribútor:

BELdental, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika

IČ: 28570219

Dovozca: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva

Predmet vyhlásenia:

Názov: Oclean UVC sterilizačný sanitizér na zubné kefky

Model: S1

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach:

Smernica 2014/30/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU

