




Uživatelská příručka

Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí využití.

Přehled zařízení

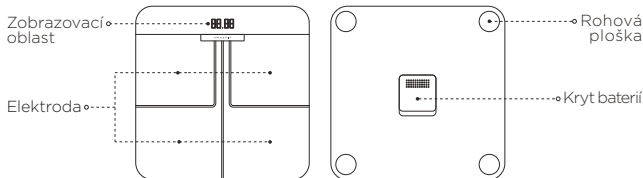

Instalace aplikace

Naskenováním QR kódu dole si stáhněte aplikaci Zepp (dále zde nazývaná jen jako „aplikace“) nebo si najdete „Zepp“ v obchodě s aplikacemi a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.


Poznámky:

1. Pro co nejlepší výsledek proveďte na vyžádání aktualizaci aplikace na nejnovější verzi.
2. Systém je kompatibilní s verzemi Android 5.0 nebo iOS 10.0 a novějšími.



Vložení baterií

Otevřete kryt baterií a vložte čtyři baterie typu AAA ve směru označeném uvnitř přihrádky baterií.

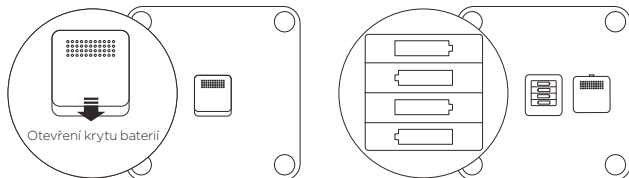

Spárování váhy

Otevřete aplikaci Zepp, zaregistrujte se nebo se přihlaste na svůj účet, poté spárujte váhu se svým účtem a zadejte své osobní údaje podle pokynů na obrazovce.

Po spárování váhy se můžete v aplikaci podívat na záznamy o vážení a na informace o tělesné kompozici.

Osobní údaje slouží k analýze vaší tělesné kompozice. Pro zajištění přesnosti výsledků zadejte přesné osobní údaje.

Konfigurace Wi-Fi

Na požádání klikněte po prvním spárování na položku Konfigurace Wi-Fi, vyberte připojení Wi-Fi, zadejte heslo a počkejte na dokončení konfigurace.

Poznámky:

1. Váha podporuje jen Wi-Fi připojení 2,4 GHz, nikoli Wi-Fi připojení 5 GHz.
2. Pokud chcete nakonfigurovat Wi-Fi později, můžete tak učinit, když otevřete aplikaci, stoupnete si na váhu, aby došlo k připojení aplikace, kliknete na položku Konfigurace Wi-Fi, vyberete připojení Wi-Fi a zadáním hesla dokončíte konfiguraci.


Zahájení měření

Položte váhu na tvrdou, rovnou podlahu.

Bosýma nohama si stoupněte na váhu, jak je vidět na obrázku. Dbejte, aby kůže na nohou byla v dobrém kontaktu se čtyřmi elektrodami na váze.

Po změření hmotnosti váha zahájí výpočet vaší tělesné kompozice, například podílu tuku v tele, tepové frekvence.

Během měření se vám postupně zobrazují na obrazovce typy informací měřené váhou. Po skončení měření a synchronizaci údajů si můžete prohlédnout detaily v aplikaci.

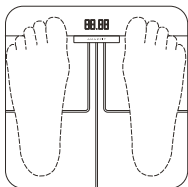

Poznámky:

1. Údaje o tělesné kompozici poskytované touto váhou slouží jen pro informaci a nemají význam lékařské rady.
2. Pohyby váhy nebo nárazy na ni mohou ovlivnit přesnost, v takovém případě se zvažte znovu, aby byla zajištěna přesnost.

Zobrazované značky

	Wi-Fi		Vypnout měření složení těla
	Bluetooth		Hodnota tělesného tuku
	Hmotnost svaloviny		Procenta vody v těle
	Procenta tuku		Hmotnost kostí
	Hodnota útrobního tuku		Bazální metabolismus
	Podkožní tuk		Kosterní svaly
BMI	BMI		Fyzický věk
	Tepová frekvence	OL	Nadváha

Výběr jednotek hmotnosti

Ve výchozím stavu váha počítá hmotnost v kilogramech (kg). Jednotky hmotnosti váhy můžete změnit v nastavení zařízení v aplikaci.

Váha umí zobrazovat hmotnost v kilogramech (kg), librách (lbs) a kamenech (st).

Upozornění

1. Váhu nesmí používat osoby s kardiostimulátorem nebo jinými implantovanými zdravotními pomůckami.
2. Aby nedocházelo k uklouznutí, nepokládejte váhu na kluzkou podlahu a nepoužívejte ji, pokud je mokrá nebo pokud máte mokré nohy.
3. Vždy si stoupejte doprostřed váhy, aby se během vážení nešťastnou náhodou nepřevrátila.
4. Používejte váhu pouze v suchém prostředí a neponořujte ji do vody.
5. Vyčistěte váhu otíráním vlhkým hadrem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte organická rozpouštědla, ani jiné chemikálie.
6. Při výměně baterií za nesprávný typ hrozí riziko exploze. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny.
7. Po vybití baterie ihned vyjměte, aby nedošlo k jejich případnému vytečení a korozi.
8. Těhotným ženám se použití nedoporučuje. Pro těhotné ženy, prosím, před vážení vypněte měření složení těla.
9. Profesionální atleti a lidé, kteří pravidelně cvičí, by měli pro vážení používat „Sportovní režim“.
10. Nevažte se, pokud se necítíte dobře (horečka, průjem, opilost), pokud trpíte extrémní dehydratací, po použití sauny nebo po koupeli v termálním pramenu nebo po intenzivním cvičení.
11. Změřené údaje o tělesné kompozici se mohou lišit pro osoby, které mají v těle kovové předměty, pro osoby které užívají medikamenty vyvolávající zadržování vody v těle, pro osoby se silnou pokožkou chodidel a pro určité další osoby se zvláštními podmínkami.

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny produkty s tímto symbolem spadají do odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být směřován s netříděným domácím odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte odpadní zařízení do určeného sběrného místa stanoveného vládními nebo místními úřady pro účel recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalační firmu nebo na místní úřady, kde se dozvíte další informace a podmínky ohledně těchto sběrných míst.

Certifikace a bezpečnostní schválení



Společnost Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A2003 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://en.amazfit.com/support.html>

Technické údaje

Název: Amazfit Smart Scale

Jednotky hmotnosti: kg / lb

Přírůstky: 0,1 kg / lb

Frekvence Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz

Max. výkon Wi-Fi: < 20 mW

Frekvence Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Max. výkon Bluetooth: < 3 mW

Bezdrátová konektivita: 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi, 2,4 GHz Bluetooth 5.0

Provozní teplota: 5 °C – 40 °C

Zdroj napájení: 6V  (4 x 1.5 V AAA)

Materiál pouzdra: Tvrdné sklo, technický plast ABS

Kompatibilita: Android 5.0 nebo iOS 10.0 a novější

Obsah balení: Amazfit Smart Scale, uživatelská příručka

Model: A2003

Rozměry: 320 x 320 x 25 mm

Čistá hmotnost: 2,2 kg

Rozsah vážení: 5 kg – 180 kg

Záruka a vrácení zboží

Omezená záruka Amazfit pokrývá produkty Amazfit v souvislosti s výrobními vadami počínaje datem původního nákupu. Trvání záruční doby je 12 měsíců nebo i jiná délka, jestliže tak vyžadují platné spotřebitelské zákony v zemi nákupu zákazníka. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony.

Oficiální webové stránky: en.amazfit.com

Nápověda: support.amazfit.com