

JOVS

světelná maska na
krk a hrudník



Instagram Jovs_czsk


Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku,
která obsahuje „Záruční list produktu“.

1 ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali produkty JOVS. Abyste zajistili optimální uživatelský komfort a efektivitu, před použitím si prosím pečlivě přečtete obsah tohoto návodu.

2 Popis zařízení

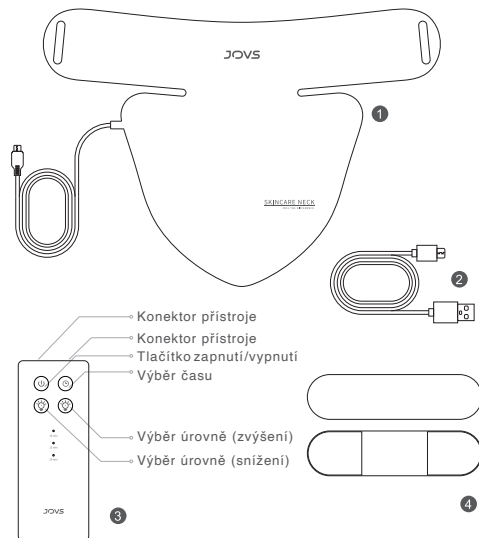

- 1 LEDJOVSMaska na krk a hrudník
- 2 Nabíjecí kabel typu C
- 3 Ovladač
- 4 Pevný popruh

Poznámka: Příslušenství se řídí podle skutečně dodaných položek.


3 Průvodce rychlým startem




Krok 1: Umyjte a osušte krk.



Krok 2: Připojte hlavní jednotku k ovladači a nastavte popruh. Nasaďte si produkt a podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 1,5 sekundy, aby se zapnul. Po zapnutí se automaticky nastaví režim 1. Krátkým stisknutím tlačítka pro výběr režimu můžete přepínat mezi režimy.

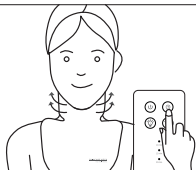

Krok 3: Zařízení má tři časová nastavení: 10, 15 a 20 minut. Po zapnutí je výchozí nastavení 10 minut a lze jej upravit krátkým stisknutím tlačítka času.

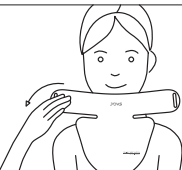

Krok 4: Po uplynutí nastavené doby se produkt automaticky vypne. Produkt sundejte a pokračujte ve své běžné péči o pleť. Doporučujeme používat 3–5krát týdně.

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento výrobek nepoužívejte, pokud patříte do některé z následujících skupin.

1. Těhotné ženy nebo ženy plánující těhotenství.
2. Osoby citlivé na světlo nebo osoby, které v současné době užívají fotosenzitivní léky.
3. Osoby s genetickými poruchami očí nebo kožními onemocněními (například lupus erythematosus, fotosenzitivní ekzém nebo vitiligo).



Pokyny k nabíjení

1. Ovladač obsahuje lithium-iontovou polymerovou baterii. Nepoužívejte jej během nabíjení. (Poznámka: Používání ovladače během nabíjení poškodí baterii a zařízení. Hlavní jednotka se nezapne a nebude fungovat.)
2. Před prvním použitím ovladač plně nabijte. Připojte USB nabíjecí kabel k ovladači a poté jej zapojte do zdroje napájení, aby se spustilo nabíjení. (Poznámka: Kromě ovládání vypínače, výběru režimu a nastavení času funguje ovladač také jako powerbanka. Během nabíjení proto jednoduše připojte nabíjecí kabel typu C k ovladači.)
3. Když kontrolka ovladače bliká, zařízení se nabíjí. Když kontrolka ovladače svítí trvale (neblíká), nabíjení je dokončeno.

5 TEST FOTOSENZITIVITY

Před prvním použitím tohoto produktu proveďte test fotosenzitivity.

Krok 1	Umístěte produkt na předloktí a zapněte jej, aby ozařoval po dobu 10 minut. Pokud se na kůži objeví příznaky jako zarudnutí nebo svědění, znamená to potenciální fotosenzitivitu. Doporučujeme přerušit používání a před dalším použitím se poradit s dermatologem.
Krok 2	Před použitím očistěte a osušte krk (bez make-upu), aby potenciálně fotosenzitivní složky v kosmetických přípravcích neovlivňovaly účinnost péče o pleť.
Krok 3	Po použití může pokožka mírně zčervenat, což je normální reakce, která by měla během 1–2 hodin odeznít. Pokud pocítíte pálení nebo jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte přípravku používat.

6 OPATŘENÍ

 NEBEZPEČÍ	1. Uživatelé elektronických zařízení, jako jsou kardiostimulátory, EKGsenery, umělé kardiopulmonální přístroje, infuzní pumpy atd., by tento výrobek neměli používat. Nesprávná obsluha lékařských elektronických zařízení může způsobit nehody a fyzické nepohodlí. 2. Nepoužívejte v blízkosti naplněných van, sprchových vaniček, umyvadel nebo jiných nádob. Udržujte výrobek a zdroje napájení v suchu. 3. Nepoužívejte v blízkosti sporáků nebo pod vývody klimatizace, aby nedošlo k nehodám a poruchám produktu. 4. Nepoužívejte, pokud je produkt, dálkové ovládání nebo napájecí kabel poškozen, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 5. Uchovávejte mimo dosah kojcenců a dětí, aby nedošlo k nehodám. 6. Tento produkt není vodotěsný. Neponořujte jej do vody, aby nedošlo k poruchám nebo nehodám. Nepoužívejte, pokud byl poškozen.
 NEPOUŽÍVEJTE V KOUPELNĚ.	
 UPOZORNĚNÍ	1. Tento výrobek je určen k použití na krku. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen. 2. Aby byl zajištěn normální provoz, výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte sami. 3. Během menstruace nebo kojení používejte v případě potřeby podle doporučení lékaře. 4. Používejte nabíjecí zařízení, které odpovídá vstupnímu napětí výrobku, a dodržujte bezpečnostní předpisy pro elektrické zařízení. Nedoporučuje se kombinovat s jinými nekompatibilními nabíjecími zařízeními.

7 ZÁRUČNÍ SERVIS

Při běžném používání poskytuje tento produkt jednoroční záruku na jakékoli problémy s kvalitou hlavní jednotky. Poškození nebo problémy, které nejsou považovány za související s kvalitou produktu, nejsou kryty zárukou.

V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů během používání se obraťte na zákaznický servis.

8 ÚDRŽBA A PÉČE PRODUKT

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte v chladném a suchém prostředí, vyhněte se místům s prachem, přímým slunečním zářením nebo vlhkostí.

ČIŠTĚNÍ

Před a po použití masku očistěte hadříkem namočeným ve vodě nebo vlhkým čisticím hadříkem. Během čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od napájení.



LIKVIDACE

Ovladač obsahuje dobíjecí baterii. Před likvidací produktu vyměňte baterii z ovladače. Baterii zlikvidujte v souladu s vládními předpisy pro recyklaci baterií. Při vyjímání baterie se ujistěte, že je odpojen napájecí zdroj, a baterii zlikvidujte v určených zařízeních pro recyklaci baterií, kde bude řádně rozebrána.

9 ZÁRUČNÍ SERVIS

Název produktu: JOVSLEDmaska na krk a hrudník

Kontrola: Certifikovaný vysoce kvalitní produkt

Datum : _____

Inspektor: _____

10 SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ zařízení	Domácí přenosné kosmetické zařízení
Název produktu	JOVSLEDmaska na krk a hrudník
Značka	JOVS
Model	JNL1
Provozní výkon	3W
Proud	1A
Vstupní napětí	5V
Rozměry produktu	340*236*5.5mm
Normy	CE

11 SERVIS A OPRAVY

1. Na hlavní jednotku tohoto přístroje se vztahuje záruka v délce jednoho roku od data zakoupení (s účtenkou). Na příslušenství a spotřební materiál se záruka nevztahuje. Služby oprav a aktualizací mimo záruční dobu nebo služby, na které se záruka nevztahuje, jsou k dispozici (za poplatek).

2. Pro doplnění nebo výměnu příslušenství a spotřebního materiálu se obraťte na distributora.

3. Bezplatné opravy se nevztahují na poruchy způsobené následujícími lidskými faktory:

- Poruchy způsobené vlastní demontáží nebo úpravou přístroje.
- Poruchy způsobené nesprávným používáním nebo nedostatečnou údržbou.
- Poruchy způsobené náhodným pádem nebo nárazem.

12 ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu		
Číslo objednávky		
Datum nákupu		
Jméno zákazníka a telefonní číslo		
Doba opravy	Záznamy o opravách	Podpis technika provádějícího opravu

Poznámky

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Infinite Reach Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.jovs.com/

Kontaktní adresa pro EU:

TYGOTECs.r.o., Studenéves 138, 27379 Studenéves, Česká Republika

info@tygotec.eu

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM – Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. K správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

