

## Product Parameters

Tento produkt je založen na ošetření DPL nabízeném v kosmetických salonech. Díky použití úzkopásmového filtru, který dokáže extrahovat účinné vlnové délky, a přesnému systému řízení energie dokáže tento produkt účinně rozjasnit a omladit vaši pokožku.


Specifikace	
Název produktu	JOVS Blacken Pro Photorejuvenation Device
	JP1P
Plocha osvětlení	1,6 cm <sup>2</sup>
Jmenovitý příkon	24V=2,5A
Napájecí adaptér	Vstup: 100-240V-50/60Hz, 1,5A Výstup: 24V=2,5A
Normy	GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008

JOVS

Uživatelská příručka

01

## Představení produktu

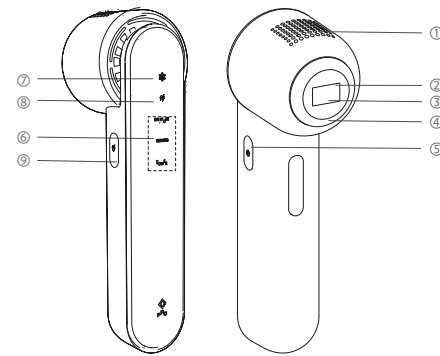

### [Popis produktu]

① Větrací otvory	② Chladič panel
③ Výstup světla	④ Indikátor
⑤ Tlačítko napájení / režim	⑥ Ikona režimu
⑦ Ikona režimu chlazení	⑧ Ikona režimu automatického blesku
⑨ (Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund, aby se aktivoval nebo deaktivoval režim automatického blesku, režim automatického blesku se automaticky deaktivuje po několika po sobě jdoucích záblescích).	

\*V případě zablokování větracích otvorů může dojít k poškození produktu nebo k přepnutí do režimu vypnutí při vysoké teplotě.

02

## Režimy

Vzhledem k tomu, že pokožka každého člověka je jiná, doporučujeme začít s režimem BRI./PORE a postupně zvyšovat intenzitu. V případě jakýchkoli potíží při používání produktu nás prosím neprodleně kontaktujte online. Před použitím produktu se v případě potřeby poraďte se svým lékařem.



### Režim BRI./PORE

> Nizká intenzita

> Doporučeno pro pokožku obličje

> Vyrovnává tón pleti, rozjasňuje pokožku, zjemňuje póry



### Režim REDNESS

> Střední intenzita

> Přípůsobeno pro pokožku vykazující odpovídající vlastnosti (zarudnutí)

> Snižuje zarudnutí pokožky



### Režim POWER

> Vysoká intenzita

> Pro léčbu skvrn

> Pro oblasti s odolnými skvrnami/akné

(Nepoužívejte produkt na místech, která nesnášejí světlo, jak je uvedeno v uživatelské příručce.)

03

## Nevhodné pro následující uživatele a situace

Tento produkt nesmí být používán u osob mladších 16 let, těhotných žen, kojících žen, žen v menstruačním období ani u osob trpících jizvami na povrchu těla, cukrovkou, citlivou pokožkou nebo fotosenzitivitou kůže.

Je zakázáno používat tento produkt u osob trpících závažným srdečním onemocněním, středně těžkou nebo těžkou hypertenzi, zhoubným nádorem, folikulitidou, infekčním onemocněním kůže, popáleninami kůže nebo poruchou srážlivosti krve.

Tento produkt nesmí být používán u osob trpících poruchami metabolismu kolagenu, včetně starých jizev a špatného hojení starých ran.

Tento produkt nesmí být používán u osob trpících onemocněním cév (např. křečovými žilami v oblasti cílové kůže).

Tento produkt nesmí být používán na žádné cílové oblasti kůže postižené infekcemi, herpes simplex, patologickými změnami nebo hematomy.

Tento produkt nesmí být používán u osob trpících imunodeficiencí, jako je HIV, lupus erythematosus nebo porfyrie.

Je zakázáno používat tento produkt u osob trpících poruchami srážlivosti krve nebo užívajících léky pro vnější použití, jako je izotretinoin, alfa-hydroxy kyselina (AHA), beta-hydroxy kyselina (BHA) nebo kyselina azelaová.

Tento produkt použijte s opatrností u osob, které v období 30 dnů před zamýšleným použitím tohoto produktu použily chemické depilační přípravky k odstranění chlupů v obličejí.

04

Tento produkt používejte s opatrností u osob, které týden před zamýšleným použitím tohoto produktu používaly produkty na bělení pokožky nebo kosmetiku obsahující vitamín A.

Tento produkt nesmí být používán současně s éterickými oleji. Pokožku udržujte čistou, suchou a izotretinoin.

Je zakázáno používat tento produkt u osob, které v poslední době užívaly léky, které mohou vyvolat fotosenzitivitu (například tetracyklin).

Je zakázáno používat tento produkt na citlivých částech těla (např. na místech postižených zánětem a sliznicích).

Osoba, která byla vystavena intenzivnímu slunečnímu záření během posledních 3 dnů nebo trpí poškozením způsobeným světlem (spálením), nesmí tento produkt používat, dokud se její pokožka nezažije.

Je zakázáno používat tento produkt na jakékoli typy ran, které se ještě nezažily.

Nedoporučuje se používat tento přípravek u osob trpících hirsutismem.

V den použití přípravku nepijte alkohol a vyhýbejte se kořeněným jídlům a jímavým potravinám, které mohou způsobit podráždění pokožky.

05

Před použitím na obličej vyčkejte produkt na vnitřní straně paže. Pokud se po hodně neobjeví žádné problémy, můžete produkt použít.

Nepoužívejte produkt nadměrně na stejném místě, aby nedošlo k poškození pokožky teplem.

(V případě potřeby se před použitím tohoto produktu poraďte se svým lékařem.)

Tento produkt je speciálně vyvinut pro pokožku obličje. S výjimkou vnitřní strany paže nelze k testování pokožky použít jiné části těla. Na následujících citlivých částech pokožky je použití přísně zakázáno.

1/ Uvnitř úst, ochlupení, sliznice atd.	4/ Oční bulvy, oční víčka a váčky pod očima
2/ Oblasti podrobené plastické chirurgii nebo jiným operacím	5/ Uši
3/ Ohyzek	6/ Oblasti postižené akné
7/ Velké žíly	8/ Oblasti postižené névy
9/ Uvnitř pupku	10/ Obočí a vlasý
11/ Bradavky a dvorce	
12/ Oblasti charakterizované jakýmkoli tetováním nebo body paintingem a jizvami	

(Poznámka: Tento seznam není vyčerpávající. Pokud si nejste jisti, zda můžete tento produkt používat, poraďte se se svým lékařem.)

06

Před použitím tohoto produktu nenanášejte na cílovou oblast pokožky žádné produkty pro péči o pleť! Tento produkt sestavte a používejte podle uživatelské příručky.

**Upozornění: Nesprávné použití může vést k tělesným zraněním nebo škodám na majetku.**

**Upozornění: Nesprávné použití může vést k nebezpečným situacím.**

**Nebezpečí: Nesprávné ovládání může způsobit zranění osob.**

### Před použitím



Před použitím očistěte cílovou oblast pokožky a udržte ji suchou.



Před použitím ani po něm nevystavujte ošetřenou oblast pokožky intenzivnímu slunečnímu záření.



Před použitím si oholte si všechny tmavé chlupy na obličejí.



Před použitím produktu proveďte test na malém kousku kůže.



Udržte mimo dosah osob pod 16 let věku.



S tímto výrobkem silně neklepejte ani s ním netřesejte.



Nepoužívejte tento výrobek na tmavém místě.



Při používání tohoto produktu noste ochranné brýle.



Naneste hydratační tento produkt, si neumyjte obličej horkou vodou.



V den, kdy používáte tento produkt, si neumyjte obličej horkou vodou.



Prosím, dodržte přísnou ochranu před sluncem po dobu jednoho týdne.



Nepoužívejte žádné funkční produkty pro péči o pleť po dobu 24 hodin.

08

## Varování

Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti dětí, protože vydává blikající světlo, které může ohrozit jejich oči.

Pravidelně čistěte veškeré nečistoty ulpívající na výstupu světla, aby nedošlo k poruše výrobku a poškození výstupu světla.

Výstup světla udržte mimo dosah předmětů, které by mohly tento výrobek demagnetizovat, aby nedošlo k jeho poruše nebo poškození.

Nepoužívejte tento výrobek, pokud je jeho odvětrávací otvor upcán, aby nedošlo k jeho poškození nebo vznici.

Nevystavujte světlu žádné oděvy, vlasy ani jiné předměty, aby nedošlo k jejich spálení, zbarvení nebo poškození.

Nepoužívejte tento výrobek na žádná domácí zvířata, aby nedošlo k jejich poškození.

Před použitím tohoto výrobku se poraďte se svým lékařem, pokud podstupujete jakoukoli fotoelektrickou léčbu v lékařské kosmetologii.

Po použití tohoto produktu seřete všechny vlasy, které na něm uplyly, aby nedošlo k poškození produktu nebo k poškození pokožky při dalším použití.

Mírně zahřátí nebo zarudnutí v oblasti pokožky po použití tohoto produktu není neobvyklé. Jako nápravu použijte hydratační pleťovou masku.

V závislosti na typu pokožky můžete při používání produktu pociťovat bolest. Pokud je bolest intenzivní, přepněte na režim s nižší úrovní energie nebo přestaňte používat tento produkt.

09

## Rizika



Při aplikaci produktu v blízkosti pokožky kolem očí nepoužívejte režim automatického blesku. Místo toho si nasadte ochranné brýle a zavřete oči, aby došlo k jedinému záblesku.

Nenechávejte produkt bez dozoru, když je zapnutý. Po použití produkt vypněte, odpojte od napájení a uložte.

Tento produkt se používá při okolní teplotě 0–25 °C. Před přemístěním tohoto produktu z jednoho místa na druhé, kde je teplota vyšší nebo nižší o 20 °C, jej vypněte a nechte jej asi 2 hodiny nepoužívaný, než jej znovu zapnete.

Nedoporučuje se používat produkt za velmi vlhkého počasí. V obdobích s vysokou vlhkostí (například při dlouhodobém deštivém počasí) se doporučuje tento produkt dočasně nepoužívat.

Nepoužívejte tento produkt v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek (například rozprašovačů nebo čerpacích stanic), abyste předešli úrazům způsobeným požárem nebo úrazem elektrickým proudem.

Vystavená oblast kůže nesmí být vystavena přímému ultrafialovému (UV) záření po dobu 48 hodin po použití tohoto produktu.

Nevystavujte tento produkt intenzivnímu slunečnímu záření nebo fungující UV lampě po dlouhou dobu, což by mohlo způsobit jeho vážné poškození.

Nepoužívejte tento produkt, pokud po zapnutí napájení nefunguje vestavěný ventilátor (např. není slyšet žádný zvuk ventilátoru), aby nedošlo k poškození produktu nebo jiným nebezpečím.

10

## Test na kousku kůže

Jelikož má každý člověk jinou pokožku, proveďte před prvním použitím test na malém kousku kůže, abyste určili vhodný režim a intenzitu pro další nastavení.

Proveďte například test na vnitřní straně paže:

Vyberte režim BRI./PORE, přiložte světelný výstup na cílovou oblast pokožky a stiskněte tlačítko Lighting jednou, když svítí indikátor.

Jemně posuňte produkt po pokožce do další oblasti, protože by mohlo dojít k poškození kůže teplem nebo opáření. Přitlačte produkt na jednu cílovou oblast kůže, aby jednou vyzařoval světlo, a posuňte jej na další oblast.

Pokud dojde k poškození tohoto výrobku, okamžitě přestaňte jej používat a nedotýkejte se žádných jeho vnitřních součástí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Znečištěná oblast pokožky snižuje účinnost a může způsobit nekontrolovatelné vyzařování světla nebo úplné selhání výrobku.

Nevystavujte stejnou oblast opakovanému osvětlení, protože by mohlo dojít k poškození kůže teplem nebo opáření. Přitlačte produkt na jednu cílovou oblast kůže, aby jednou vyzařoval světlo, a posuňte jej na další oblast.

Tento produkt uchovávejte a používejte mimo dosah dětí mladších 15 let.

Přítlačte výstup světla na cílovou oblast kůže, abyste zabránili poškození teplem nebo opáření.



12

## Pokyny k používání

Jelikož má každý člověk jinou pokožku, proveďte před prvním použitím test na malém kousku kůže, abyste určili vhodný režim a intenzitu pro další nastavení.

Proveďte například test na vnitřní straně paže:

Vyberte režim BRI./PORE, přiložte světelný výstup na cílovou oblast pokožky a stiskněte tlačítko Lighting jednou, když svítí indikátor.

Jemně posuňte produkt po pokožce do další oblasti, protože by mohlo dojít k poškození kůže teplem nebo opáření. Přitlačte produkt na jednu cílovou oblast kůže, aby jednou vyzařoval světlo, a posuňte jej na další oblast.

Pokud dojde k poškození tohoto výrobku, okamžitě přestaňte jej používat a nedotýkejte se žádných jeho vnitřních součástí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Znečištěná oblast pokožky snižuje účinnost a může způsobit nekontrolovatelné vyzařování světla nebo úplné selhání výrobku.

Nevystavujte stejnou oblast opakovanému osvětlení, protože by mohlo dojít k poškození kůže teplem nebo opáření. Přitlačte produkt na jednu cílovou oblast kůže, aby jednou vyzařoval světlo, a posuňte jej na další oblast.

Tento produkt uchovávejte a používejte mimo dosah dětí mladších 15 let.

Přítlačte výstup světla na cílovou oblast kůže, abyste zabránili poškození teplem nebo opáření.



13

## Krok 4

Nasměrujte světelný výstup na cílovou oblast pokožky a když se rozsvítí indikátor, stiskněte tlačítko osvětlení, aby se rozsvítilo světlo. (Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund zapnete nebo vypnete režim automatického blikání; pokud aplikujete produkt v blízkosti pokožky kolem očí, nepoužívejte režim automatického blikání, nasadte si ochranné brýle a zavřete oči, aby blikalo pouze jednou za čas.)

## Krok 5

Pro léčbu zarudnutí pokožky přepněte do režimu REDNESS (použití produktu na alergických nebo zanícených místech pokožky je zakázáno) nebo pro léčbu skvrn a fleků na obličejí přepněte do režimu WHITEN (na místa postižená névy nalepte nálepku na névy).

Vyberte režim vhodný pro váš typ pokožky.

## Krok 6

Po ošetření naneste na 15–20 minut hydratační pleťovou masku.



15

## Doporučení ohledně frekvence a použití

2–3krát týdně

Jelikož pokožka každého člověka je jiná, před prvním použitím pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření a návod k použití, vyberte režim a proveďte test na malém kousku kůže.

Začněte prosím s režimem BRI./PORE.

Pokud pokožka vykazuje vysokou toleranci, po procesu rozjasnění pokožky v režimu BRI./POREmode pokračujte v používání různých režimů na problematických místech pokožky. Pokud se pokožka dobře nepřizpůsobuje, používejte pouze režim BRI./POREmode nebo přestaňte přístroj používat.

## Řešení problémů

Tato část shrnuje problémy, které mohou nastat při používání tohoto produktu, a odpovídající řešení. Pokud vám následující informace nepomohou vyřešit daný problém, obraťte se na zákaznické centrum ve vaší zemi nebo regionu.

Problém	Příčina	Řešení
Produkt nejde zapnout.	Produkt není připojen k napájecímu zdroji.	Zkontrolujte, zda je produkt správně připojen k napájení.
Produkt nebleská.	Hlava nebo tělo produktu se přehřívá nebo hlava nedosahuje kontaktu s pokožkou.	Počkejte chvíli, až se produkt ochladí, a poté přiložte hlavici na pokožku, dokud indikátor nezačne blikat.

15

Problém	Příčina	Řešení
Ikona režimu se nerozsvítí.	Chyba produktu.	Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj v provozu. Výrobek nepoužívejte a kontaktujte podporu.
Během ošetření je cítit zvláštní zápach.	Výstup světla je znečištěný nebo tmavé chloupky nejsou ohořelé.	Před použitím zkontrolujte, zda je výstup světla čistý. Oholte tmavé chlupy na obličejí.
Ošetřovaná místa zčervená.	Mírně zarudnutí je normální a není škodlivé pro tělo, rychle zmizí.	Přestaňte tento produkt používat a nepoužívejte jej, dokud příznaky nezmizí. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na odborníka v rámci popředníhoho servisu.
Pociťujete nenesitelnou bolest	Tmavé chloupky nebo vousy na cílovém místě pokožky se neholí.	Před použitím tohoto produktu oholte tmavé chloupky nebo vousy na ošetřované oblasti pokožky. (Vyhýbejte se holení na sucho, které může narušit vstřívání stratum corneum a způsobit alergickou reakci pokožky.)
	Tento produkt není vhodný pro cílovou oblast pokožky.	Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny týkající se skupin uživatelů a oblastí pokožky, na které se tento produkt nesmí používat.
	Výstup světla je poškozený.	Výrobek nepoužívejte a kontaktujte podporu.
Výsledek je neuspokojivý.	Zvolený režim není vhodný pro stav vaší pokožky.	Vyberte režim, který odpovídá stavu vaší pokožky.

16

Problém	Příčina	Řešení
Výsledek je neuspokojivý.	Nesplníte požadovaný výsledek, pokud jsou ošetřované oblasti příliš vzdálené od sebe, protože by pak mnoho oblastí nebylo ošetřeno, nebo pokud doba ošetření není dostatečně dlouhá.	Používejte zařízení podle návodu k použití: posuňte zařízení, zatímco vydává světlo, v pravidelných intervalech, nasměrujte světlo na cílovou oblast pokožky a poté přejděte k další oblasti, dokud nebude ošetřena celá tvář.
	Frekvence používání je nedostatečná.	Vyberte příslušný režim.
	Vaša ochrana před sluncem je před a po použití nedostatečná.	UV záření má větší tendenci k tmavnutí pokožky v případě nedostatečné ochrany před sluncem.
	Vaše reakce na světelné záření je pomalá.	Prosím, používejte produkt ještě chvíli a chráňte svou pokožku před sluncem.
	Když je intenzivní pulzní světlo (PL) nasměrováno na pokožku, odpařuje vlhkost v pokožce, čímž pokožku vysušuje, to není neobvyklé.	Po použití produktu naneste na pleť masku, která ji hydratuje a vyhlazuje.
Produkt se během používání zahřívá a zvlhčuje.	Toto není neobvyklé.	Pro lepší komfort používání nechte produkt po dobu jedné minuty v pohotovostním režimu, než jej znovu začnete používat.

17

V případě abnormalit nebo pokud nejste schopni vyřešit problém, obraťte se na zákaznickou podporu a požádejte o pomoc. Uchovejte si prosím nákupní doklad a záruční list pro případné budoucí servisní požadavky.

## Poznámky

E-mail na podporu: [info@tygotec.eu](mailto:info@tygotec.eu)

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Infinite Reach Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese [www.jovs.com/](http://www.jovs.com/)

Kontaktní adresa pro EU: TYGOTEC s.r.o., Studenčevés 138 27379 Studenčevés - Česká Republika [info@tygotec.eu](mailto:info@tygotec.eu)

18

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určené sběrné místo. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

19