

NÁVOD K POUŽITÍ




Otevřete kryt na LED přístroji a odstraňte plastovou pojistku




Připevněte náustek na LED přístroj



Otočte uzávěrem gelu před jeho aplikaci

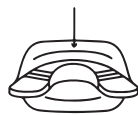

Aplikujte 1/4 gelu na horní stranu náustku dle vyznačené linky

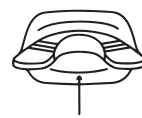

Aplikujte 1/4 gelu na spodní stranu náustku dle vyznačené linky



Nechte bělit 10 minut. Opláchněte a opakujte následující den

Používejte denně, 6 po sobě jdoucích dní. Každý gel obsahuje množství na 2 dny. Pro dlouhodobé výsledky opakujte 6ti denní kúru každé 2 týdny.

Jak na to?

1

Před použitím si řádně vyčistěte zuby kartáčkem, následně zuby vysušte



2

Otevřete kryt baterie na přístroji, vyjměte plastovou pojistku a poté baterie vraťte zpět




3

Nasadte náustek na přístroj



4

Aplikujte 1/4 gelu na vrchní i spodní oblou stěnu zubní formy tak, aby gel kryl přední stranu Vašich zubů

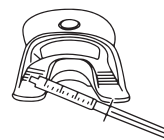

5

Vložte náustek mezi zuby a zapněte přístroj




6

LED světlo se samo vypne po deseti minutovém cyklu



7

Odejměte náustek od svítilny a pečlivě jej umyjte

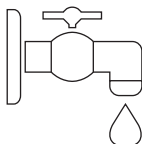


8

Úsměv



Tipy pro lepší výsledky

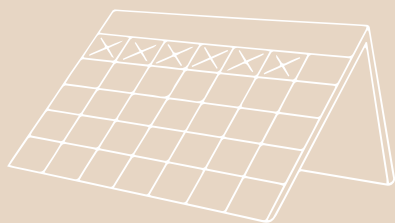

Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno denní užívání



Omezte konzumaci tmavých nápojů, jako jsou čaje, červené víno, nebo káva.



Behem bělení mějte lehce skousnuto a vyvíjejte mírný tlak na formu

ÚČINNÉ LÁTKY



Granátové jablko



Heřmáněk



Aloe Vera



Sodium Perborate a Hydroxyapatite

Bělící gel na zuby

Složení: Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propylparaben

VAROVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt není vyvinut a doporučován pro užívání dětem a osobám mladším 12 let. Všechny produkty značky Toothy® nejsou určeny jako náhrada za běžnou zubní péči. Konzultujte používání produktu se svým zubním lékařem, pokud jste mladší 18 let, těhotná žena, máte vážné problémy se svými zuby, či jste po operaci související s dutinou ústní. Gel nepolykejte. Předjeďte kontaktu s očima.

Pokud ke kontaktu dojde, oči řádně vypláchněte čistou vodou. Při kontaktu s citlivou pokožkou může dojít k jejímu dočasnému podráždění. Gel nebude bělit korunky, vyplněné, či protézy.