

FOREO

ISSA™ play

OBJEVTE, JAK BY MĚLA VYPADAT
RUTINA ÚSTNÍ PÉČE!



KOMPLETNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ZAČÍNÁME

Gratulujeme! Zakoupením tohoto přístroje pro ústní péči ISSA™ učinili první krok k bělejšímu a zářivějšímu úsměvu. Než začnete využívat všech výhod sofistikované stomatologické technologie v pohodlí domova, věnujte prosím chvíli prostudování této příručky.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento produkt pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v této příručce.

⚠ VAROVÁNÍ: Žádné úpravy tohoto zařízení nejsou povoleny.

ISSA™ play SHRUTÍ

Díky flexibilnímu a ergonomickému designu nabízí ISSA™ play dosud nejdynamičtější řešení ústní péče. Odolná hybridní hlavice kartáčku kombinuje ultrahygienický silikon s PBT polymerovými štětinkami pro intenzivnější čištění a přitom zůstává šetrná k dásním. Vyzkoušejte sílu technologie sonických pulzů se stejnou lehkostí pohybu jako u manuálního zubního kartáčku.



POUŽITÍ VAŠEHO ISSA™ play

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: Pro použití v domácnosti, k podpoře celkové ústní hygieny čištěním zubů a dásní. Nabízí 800 použití v nenabíjecím modelu.


DOPORUČENÝ POSTUP ČIŠTĚNÍ

Pro dosažení nejúčinnějších výsledků čištění vám doporučujeme používat následující 2minutovou techniku ISSA™ play dvakrát denně:



APLIKUJTE ZUBNÍ PASTU

Použijte svou běžnou zubní pastu a zapněte ISSA™ play stisknutím středového tlačítka.

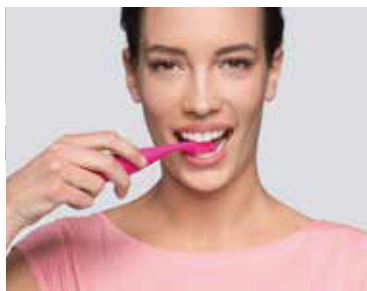

ČIŠTĚNÍ

Čistěte si zuby širokými krouživými pohyby po dobu 2 minut; 30 sekund v každém kvadrantu úst.



OPLACHOVÁNÍ

Vypněte zařízení stisknutím stejného středového tlačítka. Vypláchněte si ústa a opláchněte svůj ISSA™ play vodou. Opakujte dvakrát denně pro svěžejší a zářivější úsměv!

POZOR: Pokud při používání zařízení FOREO zaznamenáte jakékoli nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat a poradte se s lékařem. Pokud na povrchu kartáčku najdete krev, očistěte zařízení vodou nebo silikonovým čisticím sprejem FOREO.

ČIŠTĚNÍ VAŠEHO ISSA™play

Vyčistěte zařízení po každém použití tak, že kartáč umyjete teplou vodou a přitom prsty projedete mezi štětinkami. Pro optimální výsledky doporučujeme nastříkat zařízení silikonovým čisticím sprejem FOREO a poté opláchnout teplou vodou. Nechte zařízení oschnout na vzduchu.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. Vyhněte se používání zubních past s bělidlem na vašem zařízení.

DŮLEŽITÉ PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- Pokud máte zdravotní problémy, poradte se před použitím ISSA™ play se svým lékařem.
- Pokud podstupujete léčbu jakéhokoli onemocnění dutiny ústní, poradte se před použitím se svým zubním lékařem.
- Nenechávejte zařízení na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu horku nebo vařící vodě.
- Pokud toto zařízení používají děti, čistíte jim s ním zuby nebo je zařízení používáno v jejich blízkosti, stejně jako u osob se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi, je nutný přísný dohled.
- Pokud se tento produkt zdá být jakýmkoliv způsobem poškozen, přestaňte jej používat. Tento produkt neobsahuje žádné opravitelné díly.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že by se mělo odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.

SPECIFIKACE

MATERIÁLY:	Silikon + PBT Polymer
BARVA:	Černá / Kobaltová modř / Letní obloha / Lesní jahoda / Růžová
VELIKOST:	159 mm x 30 mm x 24 mm
VÁHA:	61 g
BATERIE:	AAA, nedobíjecí
VÝDRŽ:	180 dní
FREKVENCE:	216 Hz
MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU:	<50 dB
ROZHRANÍ:	1 tlačítkové

Vyloučení odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající, přímo či nepřímo, z používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinná o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

Model může být bez upozornění upraven za účelem vylepšení.

©2017 FOREO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

DOVOZCE A DISTRIBUTOR V EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO.

DOVOZCE A DISTRIBUTOR V USA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA.

NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ FOREO SWEDEN.

VYROBENO PRO FOREO AB.

www.foreo.com