



JEMNÁ SONICKÁ
ZUBNÁ KEFKA PRE
DETI



ONLINE MANUÁL

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ZAČÍNAME

Gratulujeme k prvému kroku k rozvoju a zlepšeniu ústnej hygieny vášho dieťaťa s ISSA™ baby! Predtým, ako si vychutnáte všetky výhody tejto štýlovej zvukovej zubnej kefy v pohodlí vášho domova, nájdite si chvíľu na preštudovanie tejto príručky.

URČENÉ NA POUŽITIE: Na domáce použitie na podporu celkovej ústnej hygieny čistením zubov a d'asien.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a používajte tento produkt iba na určený účel, ako je popísané v tejto príručke.

VÝSTRAHA: Silné žuvanie môže časom poškodiť silikónový kryt zubnej kefy. Dojčatá a malé deti by mali byť počas používania vždy pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby. Ak si všimnete, že silikón je poškodený alebo prepichnutý, prestaňte kefu používať a zodpovedne ju zlikvidujte. Ak máte podozrenie, že vaše dieťa prehltlo akúkoľvek časť detskej zubnej kefy ISSA™, okamžite kontaktujte svojho lekára.

⚠ **Modifikácie tohto zariadenia nie sú povolené.**

ISSA™ baby PREHLAD

Prvá sonicky poháňaná detská zubná kefa ISSA™, ktorá je vyrobená výlučne z lekárskeho silikónu a prispôbená potrebám starostlivosti o ústnu dutinu našich najmenších nadšencov, je účinná a jemná - ideálna na masáž d'asien a upokojujúce podráždenie, ako aj na jemné čistenie prvých zubov s maximálnou účinnosťou hneď, ako sa objavia.

S použitím rovnakej inovatívnej technológie ako zvyšok rodiny ISSA je ISSA™ baby postavené tak, aby sa používalo rovnakým spôsobom ako manuálna zubná kefa, a vyznačuje sa ultra dlhou výdržou batérie, ktorá vydrží až 480-krát s jednou hodinou nabíjania USB, ako aj hravými smajlíkmi, ktoré podporujú dvojminútovú rannú a večernú rutinu - pretože kefovanie nemusí byť nudné!

ZOZNÁMTE SA S ISSA BABY™



VÝHODY ISSA™ baby PRE STAROSTLIVOSŤ O ÚSTNU DUTINU


PRED PRVÝM ZUBOM

- Jemné zvukové pulzácie masírujú d'asná bez prílišného tlaku.
- Znižuje množstvo baktérií v ústach odstránením zvyškov potravín.
- Upokojuje podráždenie d'asien a zmierňuje citlivosť vyplývajúcu z prerezávania zubov.

PO PRVOM ZUBE

- Presné čistenie každého zuba zvlášť zo všetkýchuhlov.
- Ultrajemný silikón zostáva šetrný k d'asnám a šetrný k detskej zubnej sklovine.
- Vytvára dobré návyky v starostlivosti o ústnu dutinu a uvádza dieťa do čistenia zubov.

AKO POUŽÍVAŤ ISSA™ baby

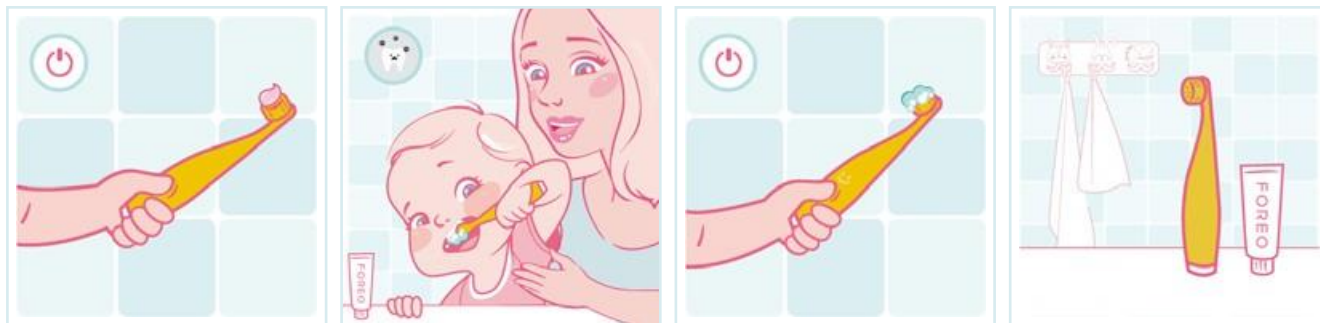

1.Stlačte univerzálne tlačidlo napájania raz pre režim čistenia alebo dvakrát pre režim masáže. V závislosti od veku dieťaťa použite upokojujúci gél alebo zubnú pastu odporúčanú zubným lekárom.

2.Povzbud'te svoje dieťa, aby používalo detskú zubnú kefku ISSA™ rovnakým spôsobom ako manuálnu zubnú kefku, t.j. čistite si zuby a masírujte si d'asná krúživými pohybmi po dobu 2 minút. Po 2 minútach sa pomocník "Glee" rozsvieti s úsmevom a odmení vaše dieťa za skvelú prácu!

3.Opätovným stlačením univerzálneho tlačidla napájania vypnete detskú zubnú kefku ISSA™.

4.Opláchnite detskú zubnú kefku ISSA™ teplou vodou a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

UPOZORNENIE: Ak vaše dieťa pociťuje akékoľvek nepohodlie pri používaní dieťaťa ISSA™, okamžite prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom. Ak nájdete krv na povrchu kefy, vyčistite kefu mydlom a vodou.

ISSA™ baby ČISTENIE

Po každom použití očistite ISSA™ baby umytím teplou vodou a prechádzaním prstami po štetinách. Potom jednoducho nechajte zubnú kefku vyschnúť na vzduchu.

Umiestnenie detskej kefy ISSA™ do UV sanitárneho puzdra je možné, ale môže ovplyvniť farbu silikónu. Môžete tiež umývať ISSA™ baby v umývačke riadu pri maximálnej teplote 80°C s hodinovým cyklom prania / oplachovania a 30-minútovým cyklom sušenia, alebo pomocou sterilizátora dojčenskej fľaše s maximálnou teplotou 100 ° C maximálne 20 minút.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón. Na prístroji nepoužívajte zubnú pastu s bielidlom.

NABÍJANIE ZUBNEJ KEFKY ISSA™ baby

Ak sa zdá, že zvuková pulzačná sila klesá alebo kontrolka začne blikať, je čas, aby sa ISSA™ baby nabilo. Pripojte nabíjací kábel USB k akejkoľvek zásuvke na 1 hodinu. Keď svetlo prestane blikať, ISSA™ baby je úplne nabité.

UPOZORNENIE: Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací port a nabíjací kábel USB neobsahujú vodu a zvyšky zubnej pasty. Počas nabíjania nepoužívajte ani nenabíjajte svoje dieťa ISSA™ dlhšie ako 24 hodín. Používajte iba nabíjací kábel USB dodaný spoločnosťou FOREO.

DÔLEŽITE PRE OPTIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

- Pri používaní tohto zariadenia deťmi alebo v ich blízkosti je potrebný prísny dohľad. Deti a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami by mali byť primerane kontrolované a poučené o bezpečnom používaní.
- ISSA™ baby je určené a na čistenie zubov a masáže d'ásien. Nie je určený na použitie ako žuvacia hračka. V prípade, že vaše dieťa uhryzne cez silikónový kryt, prestaňte výrobok používať a zodpovedne ho zlikvidujte podľa pokynov v tejto príručke.
- Ak máte vy alebo vaše dieťa zdravotné problémy, pred použitím ISSA™ baby sa poraďte so svojím lekárom.
- Ak sa vaše dieťa lieči na akékoľvek ochorenie ústnej dutiny, pred použitím sa poraďte s odborníkom.
- Ak vaše dieťa pocíti akékoľvek nepohodlie pri používaní ISSA™ baby, okamžite prestaňte používať prístroj a poraďte sa s lekárom.
- Nenechávajte zariadenie na priamom slnečnom svetle a nikdy ho nevystavujte extrémnemu teplu alebo vriacej vode.
- Ak sa zdá, že tento výrobok je akýmkoľvek spôsobom poškodený (hlava kefy, rukoväť, nabíjačka), prestaňte ho používať. Tento výrobok neobsahuje žiadne opraviteľné časti.
- Aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom, musí byť toto zariadenie pripojené iba k elektrickej sieti s ochranným uzemnením.
- Nikdy nepoužívajte ISSA baby alebo nabíjačku, ak sú poškodené, a používajte iba nabíjačku dodanú spoločnosťou FOREO s ISSA™ baby.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade zmien vo výkone detskej zubnej kefy ISSA™.

Ak sa ISSA™ baby neaktivuje po stlačení univerzálneho tlačidla napájania:

- Batéria je takmer vybitá. Nabíjajte ho pomocou nabíjacieho kábla USB až 1,5 hodiny, kým sa úplne nenabije, a potom reštartujte dieťa ISSA™ podržaním tlačidla univerzálneho napájania.

Ak sa ISSA™ baby nedá vypnúť a / alebo univerzálne tlačidlo napájania nereaguje:

- Mikroprocesor je dočasne nefunkčný. Pripojte sa k nabíjacímu káblu a/alebo stlačte a podržte univerzálne tlačidlo na reštartovanie zariadenia.

Ak ISSA™ baby neblinká, keď pripojíte nabíjací kábel USB:

- Batéria je plne nabitá a pripravená až na 480 použití.
- Batéria je vybitá a potvrdenie nabíjacieho kábla bude trvať niekoľko minút.
- Nabíjací kábel nie je správne pripojený. Skontrolujte elektrickú zásuvku/USB zásuvku a nabíjací port.

ZÁRUKA A PODMIENKY

REGISTRÁCIA ZÁRUKY

Ak si chcete aktivovať dvojročnú obmedzenú záruku, navštívte webovú stránku foreo.com/product-registration, kde sa dozviete viac.

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie po dobu DVOCH (2) ROKOV od dátumu zakúpenia proti chybám spôsobeným chybným spracovaním alebo materiálmi vyplývajúcimi z bežného používania zariadenia. Záruka sa vzťahuje na pracovné časti, ktoré ovplyvňujú činnosť zariadenia. Nezahŕňa kozmetické poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbanlivosťou. Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo demontáž zariadenia (alebo jeho príslušenstva) ruší záruku.

Ak počas záručnej doby zistíte chybu a nahlásite ju spoločnosti FOREO, spoločnosť FOREO vám podľa vlastného uváženia zariadenie bezplatne vymení. Záručné nároky musia byť podložené primeranými dôkazmi o tom, že dátum reklamácie spadá do záručnej doby. Na potvrdenie platnosti záruky si ponechajte originál dokladu o kúpe spolu s týmito záručnými podmienkami po dobu trvania záručnej doby.

Ak chcete uplatniť nárok na záruku, musíte sa prihlásiť do svojho účtu na www.foreo.com a potom vybrať možnosť uplatnenia nároku na záruku. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok dopĺňa vaše zákonné práva spotrebiteľa a žiadnym spôsobom tieto práva neovplyvňuje.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Zneškodňovanie starých elektronických zariadení (platné v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu odpadu).



Preškrtnutý symbol smetného koša označuje, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale malo by sa skôr odviezť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou manipuláciou s odpadom s výrobkom. Recyklácia materiálov tiež pomôže zachovať prírodné zdroje.

Ak potrebujete ďalšie informácie o recyklácii vášho zariadenia, obráťte sa na miestnu službu likvidácie domového odpadu alebo na miesto nákupu.

ODSTRÁNENIE BATÉRIE

POZNÁMKA: Tento proces nie je reverzibilný. Otvorením zariadenia zaniká jeho záruka. Táto akcia by sa mala vykonať iba vtedy, keď je zariadenie pripravené na likvidáciu.

Pretože toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, batéria musí byť pred zneškodnením odstránená a nemala by sa likvidovať v domovom odpade. Ak chcete vybrať batériu, odlepte silikónový kryt, otvorte plastový obal a vyberte batériu, ktorá bude zlikvidovaná v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi. Počas tohto procesu noste pre svoju bezpečnosť rukavice. Podrobné vizuálne pokyny sú uvedené nižšie:



ŠPECIFIKÁCIA

MATERIÁL ÁLY:	lékařský kremík, PC + ABS
BARVA:	Jahodová ruža, Perleťovo ružový zajačik, Slniečnicovo žltá veverička, Kiwi Zelená Panda, Bublinková modrá Dino
ROZMERY:	148 × 31 × 25 mm
HMOTNOSŤ:	54 g
BATERIE:	Li-Ion 420mAh 3.7V
POUŽITIE:	Až 480 použití
POHOTOVOSTNÝ REŽIM:	180 dní
FREKVENCE:	166 Hz
ROZHRANIE:	1 tlačidlo
POLOVIČNÉ TEMPO/MIN:	Až 6 000

PODMIENKY PROSTREDIA POUŽITIA:	
TEPLOTA:	5 ° až 40 °C
VLHKOSŤ:	40 % až 80 %
ATMOSFERICKÝ TLAK:	800 až 1,060 hPa

PODMIENKY PROSTREDIA PRE SKLADOVANIE A PREPRAVU:	
TEPLOTA:	-10° až 50 °C
VLHKOSŤ:	30 % až 80 %
ATMOSFERICKÝ TLAK:	500 až 1 060 hPa

DEKLARÁCIA

Používatelia tohto zariadenia tak robia na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek fyzické alebo iné zranenia alebo škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tohto zariadenia. Okrem toho si spoločnosť FOREO vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a z času na čas meniť jej obsah bez toho, aby bola povinná informovať kohokoľvek o takejto revízii alebo zmenách.

Model sa môže zmeniť na zlepšenie bez predchádzajúceho upozornenia.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ZÁKLADY

1. AKO ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ ISSA™ BABY?

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť detskú zubnú kefku ISSA™, stlačte univerzálne tlačidlo napájania.

2. ČO OBSAHUJE BALÍČEK ISSA™ baby?

1 detská zubná kefka ISSA, 1 nabíjací kábel USB, 1 príručka ISSA™™ Range.

3. OD AKÉHO VEKU SA MÔŽE ISSA™ BABY POUŽÍVAŤ?

ISSA™ baby je vhodné pre dojčatá a deti od 0 do 4 rokov. Pre deti staršie ako 5 rokov odporúčame používať ISSA™ kids.

ZARIADENIE

4. AKO ČASTO POUŽÍVAŤ ISSA™ BABY?

Odporúčame používať detskú zubnú kefku ISSA™ dvakrát denne, ráno a večer, po dobu 2 minút. Usmievaví pomocníci na zubnej kefke vám pomôžu zapamätať si to: "Glee" sa rozsvieti po 2 minútach čistenia zubov a "Gollum" sa rozsvieti, keď ste si zuby nečistili dlhšie ako 12 hodín.

5. JE ISSA™ BABY BEZPEČNÉ PRE MALÉ DETI?

Áno, ISSA™ baby bolo špeciálne navrhnuté tak, aby bolo bezpečné pre deti vo veku 0 a viac rokov. Je vyrobený z lekárskeho silikónu a PBT, neobsahuje BPA a ftaláty a má jemné zvukové pulzácie, ktoré sú príjemné a upokojujúce pre zuby a d'asná, zabraňujú poškodeniu zubnej skloviny a podráždenia d'asien pri čistení celých úst detí.

6. MÔŽU DETI ISSA™ baby POUŽÍVAŤ SAMY?

Detská zubná kefka ISSA™ bola navrhnutá tak, aby ju deti mohli ľahko držať samy. Pri používaní zubnej kefky však musí byť vždy prítomný rodič alebo dospelý zákonný zástupca, ktorý dohliada na zubnú kefku a pomáha naučiť dieťa, ako správne používať zubnú kefku pre optimálne výsledky.

7. MÔŽE MOJE DIEŤA ŽVÝKAŤ ISSA™ baby, ABY SA ZBAVILO BOLAVÝCH DASNÍ?

ISSA™ baby je určené na čistenie zubov a masáž d'asien. Nie je určený na žuvanie. Intenzívne žuvanie môže spôsobiť poškodenie silikónovej kefkovej hlavy a štetín.

8. MÔŽU ISSA™ baby POUŽÍVAŤ DETI, KTORÉ TRPIA OCHORENÍM ÚSTNEJ DUTINY?

Detské zubné kefky ISSA™ boli vyvinuté na jemné, ale účinné čistenie detských zubov a d'asién a sú ideálne pre naše menšie deti, ktoré majú citlivé zuby a d'asná. Ak však vy alebo vaše dieťa máte zdravotné problémy, odporúčame vám pred použitím detskej zubnej kefky ISSA™ poradiť sa so svojím zubným lekárom.

9. AKÝ DRUH ZUBNEJ PASTY JE MOŽNÉ POUŽIŤ S ISSA™ baby?

Detské zubné kefky ISSA™ je možné použiť s akýmkoľvek upokojujúcim gélom, zubnou pastou, zubným prachom, lakom na zuby alebo inými vekom odporúčanými prostriedkami na čistenie zubov. Nepoužívajte žiadnu zubnú pastu so zariadením, ktoré obsahuje bielidlo.

10. JE MOŽNÉ NASTAVIŤ INTENZITU T-SONIC PULZÁCIÍ?

ISSA™ baby ponúka 2 optimálne režimy pre skorú ústnu hygienu - režim masáže d'asién a režim čistenia zubov. Intenzita t-sonic pulzácií je už prednastavená pre oba tieto režimy pre optimálne pohodlie a lepšie výsledky, a preto ju nie je možné upraviť.

11. AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ISSA™ kids a ISSA™ baby?

Hlavný rozdiel medzi zubnými kefkami ISSA™ kids a ISSA™ baby spočíva v tom, že zubná kefka ISSA™ baby je špeciálne navrhnutá pre dojčatá a deti vo veku 0-4 roky, a preto nemá žiadne odnímateľné časti a je vyrobená výhradne z lekárskeho silikónu, ktorý je mimoriadne šetrný k d'asnam a jemnej detskej zubnej sklovine. Naproti tomu kefka ISSA™ kids bola navrhnutá špeciálne pre deti vo veku 5-12 rokov a je vybavená odnímateľnou hybridnou kefkovou hlavou vyrobenou z kombinácie lekárskeho silikónu a štetín z polyméru PBT, ktorá je silná voči zubnému plaku a zároveň šetrná k d'asnam.

12. AKO SA ISSA™ BABY LÍŠI OD INÝCH ELEKTRICKÝCH ZUBNÝCH KEFIEK PRE DETI?

ISSA™ baby sa líši od ostatných elektrických zubných kefiiek pre deti tromi veľmi dôležitými spôsobmi. Po prvé, je vyrobený výlučne z lekárskeho silikónu, takže sa nemusíte báť, že by vaše dieťa poškriabalo jemnú zubnú sklovinu vášho dieťaťa alebo poškodilo tkanivo d'asién. Po druhé, na rozdiel od iných zubných kefiiek, ktoré majú náhradné kefkové hlavy, detskú kefkovú hlavu ISSA™ nikdy nie je potrebné vymieňať, a preto nemá absolútne žiadne odnímateľné časti, čo ju robí mimoriadne bezpečnou. A po tretie, detská zubná kefka ISSA™ vydrží na jedno nabitie až 480 použití, čo znamená, že vydrží oveľa dlhšie ako akákoľvek iná detská zubná kefka na trhu!

RIEŠENIE PROBLÉMOV A SERVIS

13. ČO TO ZNAMENÁ, KEĎ SVETLO NA ISSA™ BABY NEUSTÁLE BLIKÁ?

Ak kontrolka na detskej zubnej kefke ISSA™ neustále bliká, znamená to, že zariadenie je potrebné nabiť.

14. AKO DOBIŤ ISSA™ BABY?

ISSA™ baby sa nabíja cez USB, s 1 hodinou nabíjania až na 480 použití. Indikátor intenzity na spodnej strane zariadenia bliká, keď sa zariadenie nabíja, aby indikoval, koľko batérie má zariadenie k dispozícii. Keď kontrolka prestane blikáť, znamená to, že vaša detská zubná kefka ISSA™ je úplne nabitá.

15. AKO ČISTIŤ ISSA™ BABY?

Najprv sa uistite, že detská zubná kefka ISSA™ je vypnutá. Potom kefu očistite umytím teplou vodou a prejdite prstami po štetinách. Po každom použití odporúčame kefu umyť. Po umytí jednoducho nechajte kefu vyschnúť na vzduchu. Umiestnenie ISSA™ baby do UV sanitárneho puzdra je možné, ale môže ovplyvniť farbu silikónu. Môžete tiež umývať ISSA™ baby v umývačke riadu pri maximálnej teplote 80°C s hodinovým cyklom umývania/oplachovania a 30-minútovým cyklom sušenia, alebo pomocou sterilizátora dojčenskej fľaše s maximálnou teplotou 100 ° C maximálne 20 minút.

©2020 FOREO AB. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

EÚ DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA. VYRÁBA: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHEG ROAD, TINGLIN TOWN, OKRES JINSHAN, ŠANGHAJ, ČÍNA

NAVRHNUTÉ A VYVINUTÉ SPOLOČNOSŤOU FOREO SWEDEN.

VYROBENÉ PRE FOREO AB. WWW.FOREO.COM