

FOREO
SWEDEN



UFO™ 3

URZĄDZENIE DO GŁĘBOKIEGO NAWILŻANIA TWARZY
z krioterapia



INSTRUKCJA ELEKTRONICZNA

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI



PIERWSZE KROKI

Gratulujemy pierwszego kroku na drodze do inteligentnej pielęgnacji, którym był zakup urządzenia UFO™ 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze wszystkich zalet zaawansowanej technologii spa w domowym zaciszu poświęć kilka chwil na dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO W ŻADEN SPOSÓB MODYFIKOWAĆ TEGO URZĄDZENIA.

OMÓWIENIE URZĄDZENIA UFO™ 3

UFO™ 3 to urządzenie do zabiegów głębokiego nawilżania twarzy, które oferuje korzyści 5 zabiegów na twarz spa i w zaledwie 2 minuty zwiększa poziom nawilżenia o 126% – co jest niezbędne dla młodziej wyglądającej, promiennej cery każdego dnia, tygodnia, przez cały rok.

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE UFO™ 3

FUNKCJE

UNIWERSALNY PRZYCISK
Włącza/wyłącza urządzenie, uaktywnia tryb parowania Bluetooth i umożliwia przełączanie między różnymi zabiegami.

ULTRAHIGIENICZNY SILIKON
Odporny na bakterie i wyjątkowo miękki.

MASAŻ T-SONIC™
Delikatne pulsacje oferują łagodzący masaż twarzy, aby zwiększyć promienność cery.

PORT ŁADOWANIA
Działa do 50 minut na jednym, pełnym ładowaniu USB.

TERAPIA PEŁNYM SPEKTRUM ŚWIATŁA LED

Pomaga w uzyskaniużywionej i naturalnie wyglądającej cery.

TERMOTERAPIA

Delikatne ciepło zmiękcza skórę, aby wprowadzić składniki maseczki do najgłębszych warstw.

KRIOTERAPIA

Chłód zmniejsza pory i zapewnia jędrniej wyglądającą cerę.

PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY

Służy do mocowania maseczki aktywowanej UFO™.



APLIKACJA FOREO

Automatycznie synchronizuje zaprogramowane wstępnie zabiegi maseczką z urządzeniem i oferuje więcej ustawień.



KABEL ŁADUJĄCY USB

Ładuj w dowolnym miejscu i czasie za pomocą kabla USB.



ELEGANCKA I STYLOWA PODSTAWKA

Chroni UFO™ 3 i umożliwia jego eksponowanie oraz szybsze suszenie.

ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować urządzenie. Wykonaj poniższe proste kroki:

1. Pobierz aplikację FOREO For You na telefon.
 2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
 3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
 4. Wybierz gamę urządzeń.
 5. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną.
 6. Wypełnij informacje dotyczące zakupu.
- Urządzenie będzie już gotowe do użytku!

www.foreo.com/app



JAK STOSOWAĆ

MASECZKI AKTYWOWANE UFO™



1. ZAMOCUJ MASECZKĘ

Zacznij od czystej i suchej skóry. Odłącz pierścień mocujący od UFO™ 3 i wyjmij maseczkę aktywowaną UFO™ z saszetki. Następnie umieść maseczkę w urządzeniu i zamocuj ją, ponownie zakładając pierścień mocujący.



2. WYBIERZ ZABIEG

Włącz UFO™ 3, naciskając uniwersalny przycisk. Naciśnij ponownie uniwersalny przycisk (do 8 razy), aby wybrać jeden z ośmiu przygotowanych wstępnie zabiegów. Możesz też wybrać specjalny zabieg dla maseczki aktywowanej UFO™ w aplikacji, na karcie „Zabiegi”.



3. NAWILŻAJ

Wmasowuj formułę maseczki w skórę okrężnymi ruchami wokół twarzy za pomocą urządzenia UFO™ 3 do momentu zakończenia zabiegu.

*W przypadku maseczki do okolic oczu delikatnie przesuwaj urządzenie wokół konturu jednego i drugiego oka, aż do zakończenia zabiegu.

TRYB PROSTY

Urządzenie UFO™ 3 jest łatwe w użyciu bez aplikacji dzięki 8 zaprogramowanym wstępnie zabiegom dostępnym na urządzeniu po naciśnięciu przycisku.

8 ZAPROGRAMOWANYCH ZABIEGÓW

Naciśnij uniwersalny przycisk, gdy urządzenie jest włączone:

1 raz:	CZERWONE ŚWIATŁO LED + TERMOTERAPIA + T-SONIC™	5 razy:	FIOLETOWE ŚWIATŁO LED + T-SONIC™
2 razy:	POMARAŃCZOWE ŚWIATŁO LED + TERMOTERAPIA + T-SONIC™	6 razy:	NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED + KRIOTERAPIA + T-SONIC™
3 razy:	ŻÓŁTE ŚWIATŁO LED + T-SONIC™	7 razy:	CYJANOWE ŚWIATŁO LED + KRIOTERAPIA + T-SONIC™
4 razy:	ZIELONE ŚWIATŁO LED + T-SONIC™	8 razy:	BIAŁE ŚWIATŁO LED + T-SONIC™

MASECZKI W PŁACHCIE FOREO

1. NAŁÓŻ MASECZKĘ

Zacznij od czystej i suchej skóry. Wyjmij maseczkę w płachcie FOREO z saszetki, delikatnie rozłóż i nałóż ją na twarz, dopasowując wokół oczu i ust.

2. WYBIERZ ZABIEG

Włącz UFO™ 3, naciskając uniwersalny przycisk. Naciśnij ponownie uniwersalny przycisk, aby wybrać jeden z ośmiu przygotowanych wstępnie zabiegów. Możesz też wybrać w aplikacji zaprogramowany zabieg dla maseczki w płachcie FOREO.


3. NAWILŻAJ

Wmasowuj formułę maseczki w skórę okrężnymi ruchami wokół twarzy za pomocą urządzenia UFO™ 3 do momentu zakończenia zabiegu. Następnie, zgodnie z preferencjami, pozostaw maseczkę w płachcie na 10 minut albo wyrzucić ją.

Możesz używać UFO™ 3 z większością wybranych maseczek w płachcie dzięki zaawansowanej kontroli temperatury, która umożliwia regulację nagrzewania i chłodzenia urządzenia.

UWAGA! Temperatura wpływa na różne produkty do pielęgnacji skóry w różny sposób i mogą negatywnie wpływać na składniki formuł. W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa zalecamy sprawdzenie ciepła i zimna na każdej maseczkę inną niż FOREO przed zastosowaniem jej z UFO™ 3.

APLIKACJA MOBILNA FOREO FOR YOU

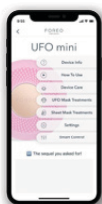

Aplikacja mobilna FOREO For You oferuje instrukcje dotyczące używania i konserwacji urządzenia UFO™ 3, ustawienia, zaprogramowane zabiegi oraz funkcję znalezienia utraconego urządzenia.



ZABIEGI

Wybierz spośród 14 wstępnie zaprogramowanych zabiegów maseczką odpowiadających każdej z maseczek UFO™ lub maseczek w płachcie FOREO. Zależnie od wybranej maseczki zabiegi trwają od 90 sekund do 2 minut. Wystarczy, że odprężysz się, a aplikacja przeprowadzi Cię przez zabieg, wyjaśniając zalety każdej technologii.



Jeśli jeden zabieg UFO™ 3 nie wystarczy, naciśnij ponownie uniwersalny przycisk w ciągu 30 sekund od zakończenia zabiegu, aby rozpocząć go ponownie!

USTAWIENIA

Ustawienie domyślne urządzenia umożliwia uzyskanie dostępu do 8 zaprogramowanych zabiegów po naciśnięciu przycisku. Jeśli wolisz, możesz również przełączyć się w „tryb maseczki”, klikając przycisk menu w prawym górnym rogu ekranu.



TRYB PROSTY

Dostosuj 8 zabiegów zaprogramowanych na urządzeniu według własnych preferencji. Dla każdego koloru LED można:

- dodać nagrzewającą termoterapię, chłodzącą krioterapię lub wyłączyć ustawienie temperatury;
- dostosować intensywność masażu T-Sonic™;
- dostosować czas automatycznego wyłączenia, aby wydłużyć albo skrócić zabieg.

TRYB MASECZKI

Tryb maseczki umożliwia zapisanie na urządzeniu 7 zaprogramowanych zabiegów maseczką i 1 dostosowanego zabiegu do użycia w trybie offline.

- Zaprogramowane zabiegi maseczką Make My Day i Call It a Night są już zapisane w pierwszych dwóch pozycjach.
- Trzecia pozycja jest zarezerwowana dla dostosowanego zabiegu.
- Dodaj inny zaprogramowany zabieg maseczką UFO™, naciskając przycisk plusa.

Dostęp do zabiegu w trybie offline można uzyskać po naciśnięciu uniwersalnego przycisku. Jeśli na przykład chcesz uruchomić zabieg zapisany w 5. pozycji, włącz urządzenie i naciśnij 5 razy uniwersalny przycisk (zaświeci się wszystkie 5 kontrolki), a ten zaprogramowany zabieg natychmiast się uruchomi.



INTELLIGENTNE STEROWANIE

Wypróbuj wszystkie funkcje UFO™ 3, korzystając z telefonu jak z pilota zdalnego sterowania – co obejmuje pełne spektrum światła LED, pulsacje T-Sonic™, chłodzenie i nagrzewanie!

CZYSZCZENIE UFO™ 3

Zawsze dokładnie wyczyść urządzenie UFO™ 3 po użyciu. Umyj urządzenie i plastikowy pierścień mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Osusz bezpyłową ściereczką lub ręcznikiem. Zalecamy spryskać urządzenie sprayem do czyszczenia silikonowych urządzeń FOREO i spłukać ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych efektów, a następnie odstawić je do wyschnięcia na podstawę.

UWAGA! Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.


MASECZKI FOREO

Daily Duo COLLECTION



Make My Day

- Nawilżająca i ochronna
- Kwas hialuronowy + czerwone algi
- Dla wysuszonej i odwodnionej skóry

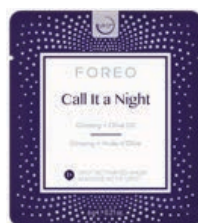

Call It a Night

- Rewitalizująca i odżywiająca
- Żeń-szeń + oliwa z oliwek
- Przeciw zmarszczkom i wysuszeniu

Advanced COLLECTION 2.0



H2Overdose

- Ultranawilżająca
- Kwas hialuronowy + trzęsak morszczynowaty + ceramid + witamina E + witamina B5
- Dla wysuszonej i odwodnionej skóry



Matte Maniac

- Ekstra oczyszczająca
- Węgiel drzewny + wyciąg z oczaru wirginijskiego + wąkrota azjatycka + saussurea + chryzantema
- Przeciw wypryskom i powiększonym porom



Glow Addict

- Zaawansowane rozjaśnienie
- Ekstrakt z pereł + niacynamid + witamina E + witamina C + olejek jojoba
- Do matowej, pozbawionej blasku cery



Youth Junkie

- Intensywna odnowa
- Kolagen + peptydy + oliwa z oliwek + masło shea + olejek jojoba
- Przeciw zmarszczkom i wysuszeniu



Shimmer Freak

- Rozświetlone, perfekcyjne spojrzenie
- Kofeina + woda różana + niacynamid + witamina B5 + ekstrakt z żurawiny
- Przeciw cieniom i opuchliznie



Acai Berry

- Łagodząca
- Masło shea + olejek z nasion jojoba + zielona herbata + trójpeptyd + wąkrota azjatycka
- Dla matowej, pozbawionej elastyczności skóry



Bulgarian Rose

- Nawilżająca
- Olejek z nasion jojoba + kwas hialuronowy + witamina E + oliwa z oliwek + aminokwasy jedwabiu
- Dla odwodnionej, matowej cery



Manuka Honey

- Rewitalizująca
- Alantoina + betaina + 17 aminokwasów + pantenol
- Dla wysuszonej, starzejącej się skóry



Green Tea

- Oczyszczająca
- Ekstrakt z wiązu + olej z wiesiołka dwuletniego + ekstrakt z sosny + korzeń kudzu
- Dla skóry tłustej i skłonnej do wyprysków



Cannabis Seed Oil

- Uspokajająca
- Rumianek + witamina C + witamina E + alantoina
- Do skóry wrażliwej, przeciw trądzikowi i zaczerwienieniom



Coconut Oil

- Odżywiająca
- Olej z nasion baobabu + olejek z nasion jojoba + olej ze słodkich migdałów + oliwa z oliwek + masło shea + skwalan + ceramidy + olej z dzikiej róży
- Dla wysuszonej i odwodnionej skóry

OSTRZEŻENIE

DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Jeśli masz chorobę skóry lub jakiekolwiek obawy medyczne, przed skorzystaniem z urządzenia skonsultuj się z dermatologiem.
- Używanie urządzenia UFO™ 3 powinno być komfortowe. Jeśli doświadczysz dyskomfortu, natychmiast przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania UFO™ 3 w okolicach oczu i nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami ani gałkami ocznymi.
- W żadnym przypadku nie wolno umieszczać włączonego urządzenia bezpośrednio na skórze/twarzy.
- Ze względów higienicznych odradzamy udostępnianie urządzenia UFO™ 3 innym osobom.
- Nie pozostawiaj urządzenia UFO™ 3 na bezpośrednim świetle słonecznym i nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur ani wrzącej wody.
- Urządzenie UFO™ 3 ma nagrzewającą się powierzchnię. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas używania urządzenia.
- Firma FOREO nie oszacowała ani nie przetestowała bezpieczeństwa i skuteczności urządzenia UFO™ 3 w połączeniu ze wszystkimi maseczkami w płachcie i środkami pielęgnacji skóry firm innych niż FOREO. Użytkownik używa tego urządzenia z maseczkami i produktami pielęgnacji skóry firm innych niż FOREO na własne ryzyko.
- Należy zachować szczególną uwagę podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych.
- Przerwij używanie produktu, jeśli zostanie on uszkodzony w dowolny sposób. Urządzenie to nie ma części do serwisowania.
- Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub w przypadku pytań związanych z działaniem urządzenia, odwiedź stronę www.foreo.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zachowaj ostrożność w przypadku zmian w działaniu urządzenia UFO™ 3.

Jeśli urządzenie UFO™ 3 nie włączy się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku:

- Akumulator jest rozładowany. Naładuj UFO™ 3 za pomocą ładowarki USB do momentu, w którym kontrolka zapali się światłem stałym. Pełne naładowanie starcza na maksymalnie 50 minut.

Jeśli urządzenia UFO™ 3 nie można wyłączyć lub uniwersalny przycisk nie reaguje:

- Wystąpiła tymczasowa awaria mikroprocesora. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli UFO™ 3 nie synchronizuje się z aplikacją FOREO:

- Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i ma włączony Bluetooth.
- Wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go i spróbuj połączyć się ponownie.
- Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie i powtórz proces.
- Usuń i ponownie zainstaluj aplikację – może wystarczy zaktualizować aplikację.
- Po usunięciu i ponownym zainstalowaniu aplikacji uruchom ponownie telefon.
- Usuń pliki cookie i wyczyść pamięć podręczną.
- Upewnij się, że system operacyjny urządzenia mobilnego został zaktualizowany do najnowszej wersji.

GWARANCJA I REGULAMIN

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby uaktywnić 2-letnią, ograniczoną gwarancję, zarejestruj się, pobierając aplikację FOREO For You i wykonując udostępnione w niej instrukcje.

2-LETNIA, OGRANICZONA GWARANCJA

Firma FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT (chyba że lokalne przepisy prawa nakładają dłuższy okres gwarancji minimalnej) od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania. Gwarancja obejmuje części pracujące, które wpływają na działanie urządzenia. NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego spowodowanego zwykłym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych w następstwie wypadku, niewłaściwego użycia lub zaniedbania. Jakakolwiek próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte uzasadnionymi dowodami wskazującymi na to, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić gwarancję, należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zobowiązanie to stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta i nie wpływa w żaden sposób na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).




Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego urządzenia nie należy traktować jak odpadów domowych, ale należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki poprawnej utylizacji tego urządzenia pomożesz zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, który może mieć miejsce w przypadku nieodpowiedniej utylizacji produktu. Recykling materiałów pomoże także oszczędzić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub punktem zakupu.

USUWANIE AKUMULATORA

UWAGA! Tego procesu nie można cofnąć. Otwarcie urządzenia unieważni gwarancję. Działanie to należy wykonać, gdy urządzenie zostanie przeznaczone do utylizacji.

Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy, który należy usunąć przed utylizacją produktu i którego nie należy wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego. Aby usunąć akumulator, zdejmij silikonową warstwę zewnętrzną, otwórz wewnętrzną, plastikową powłokę i wyjmij akumulator, aby zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Dla bezpieczeństwa proces ten należy wykonać w rękawiczkach. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje graficzne.

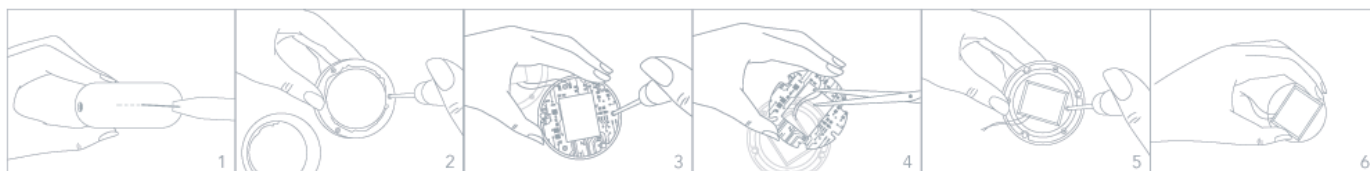

SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	Bezpieczny dla skóry silikon i PC + ABS, stop aluminium	TEMPERATURA:	5–45 stopni Celsjusza
KOLOR:	Pearl Pink/Arctic Blue/Fuchsia/Black	UŻYTKOWANIE:	Do 50 minut na ładowanie
WYMIARY:	72.5 mm x 31.4 mm	GOTOWOŚĆ:	180 dni
WAGA:	146.2g	CZĘSTOTLIWOŚĆ:	180 Hz
AKUMULATOR:	Litowo-jonowy, 1200 mAh, 3,7 V	MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:	<50 dB
		INTERFEJS:	1-przyciskowy

Wyłączenie odpowiedzialności: Używasz tego urządzenia na własne ryzyko. Firma FOREO ani jej sprzedawcy nie przyjmują odpowiedzialności za żadne obrażenia i szkody, fizyczne lub inne, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto firma FOREO zastrzega sobie prawo do korekty niniejszej publikacji i okresowej zmiany jej treści bez obowiązku poinformowania o tym użytkownika.

OSTRZEŻENIE! Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA! Urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenie zawiera nadajnik/odbiornik nieobjęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia licencyjnego zgodnie z normą RSS Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Model może zostać ulepszony bez powiadomienia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

URZĄDZENIE UFO™ – PODSTAWY

1. CO NALEŻY ZROBIĆ PO ODEBRANIU URZĄDZENIA UFO™ 3?

Gratulujemy odkrycia inteligentnej pielęgnacji skóry! Zacznij od pobrania aplikacji FOREO For You, aby za darmo odblokować i zarejestrować urządzenie. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Aplikacja” powyżej).

2. JAK ZACZĄĆ PIERWSZY ZABIEG?

Najpierw dokładnie oczyść i wysusz twarz oraz szyję – dla najlepszych wyników zalecamy oczyszczenie za pomocą urządzenia LUNA™. Następnie przymocuj maseczkę aktywowaną UFO™ do urządzenia UFO™ 3 lub umieść maseczkę w płachcie FOREO na twarzy. Naciśnij uniwersalny przycisk na urządzeniu, aby je włączyć i wybierz preferowany zabieg, naciskając ponownie uniwersalny przycisk albo wybierz go w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Jak stosować” powyżej.

3. JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE UFO™ 3?

Naciśnij uniwersalny przycisk urządzenia UFO™ 3, aby je włączyć. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy uniwersalny przycisk. Po ukończeniu zaprogramowanego zabiegu urządzenie wyłączy się automatycznie.

4. CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z URZĄDZENIEM UFO™ 3?

UFO™ 3, kabel ładowający USB, podstawka, przewodnik „Szybki start”, instrukcja obsługi.

URZĄDZENIE UFO™

5. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA UFO™ 3?

Urządzenie UFO™ 3 zostało zaprojektowane do używania dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Jednak, zależnie od potrzeb skóry i osobistych preferencji, można korzystać z niego rzadziej.

6. CZY KAŻDY ZAPROGRAMOWANY ZABIEG MASECZKĄ UFO™ 3 JEST TAKI SAM?

Nie. Dla optymalnych wyników każda maseczka aktywowana UFO™ i maseczka w płachcie FOREO ma unikalny zabieg.

7. CZY URZĄDZENIA UFO™ 3 MOŻNA BEZPIECZNIE UŻYWAĆ NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE?

Urządzenia UFO™ 3 są bezpieczne i odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry. Ponadto możesz wybrać z szerokiego wachlarza różnych masetek FOREO odpowiadających na konkretne potrzeby skóry.

8. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA UFO™ 3 PO OPERACJI PLASTYCZNEJ, BOTOKSIE LUB WYPEŁNIACZACH SKÓRNYCH?

Urządzenia UFO™ 3 oferują delikatne zabiegi na twarz odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry. Przed użyciem skonsultuj się jednak z lekarzem w przypadku niedawnego zabiegu medycznego.

9. CZY MOGĘ UŻYWAĆ SZCZOTECZKI FOREO LUNA™ Z URZĄDZENIEM UFO™ 3?

Tak! Urządzenia UFO™ 3 i LUNA™ pracują lepiej razem – masażery oczyszczające twarz LUNA™ delikatnie usuwają martwy naskórek, odblokowują pory i usuwają do 99% nieczystości i sebum, sprawiając, że skóra staje się idealnym płótnem dla zabiegu maseczką UFO™ 3.

10. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY URZĄDZENIAMI UFO™ 3 I UFO™ 2?

W przeciwieństwie do urządzenia UFO™ 2, które oferowało 8 pozycji do zapisania ulubionych rutyn maseczką, UFO™ 3 ma 8 zaprogramowanych, dostosowanych zabiegów, które można dostosować zgodnie z preferencjami w ustawieniach aplikacji. W razie potrzeby możesz ustawić rutyny maseczką dla każdej pozycji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Ustawienia” powyżej.

APLIKACJA

11. DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ FOREO PRZED SKORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA UFO™ 3?

Wszystkie produkty FOREO obsługujące aplikację muszą zostać uaktywnione i odblokowane w aplikacji FOREO For You po ich pierwszym włączeniu. Chroni to klientów przez podrobionymi produktami FOREO oraz ułatwia rejestrację dla uzyskania ochrony gwarancyjnej.

12. JAK SPAROWAĆ URZĄDZENIE UFO™ 3 Z APLIKACJĄ FOREO?

Pobierz aplikację FOREO For You na smartfon lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij uniwersalny przycisk urządzenia, aby je włączyć. Migające światło oznacza przejście urządzenia w tryb parowania. Wykonaj instrukcje dostępne w aplikacji, aby zarejestrować i sparować urządzenie UFO™ 3.

13. CZY MOJE URZĄDZENIE UFO™ 3 DZIAŁA BEZ APLIKACJI?

Tak, możesz uzyskać ręcznie dostęp do 8 zabiegów zaprogramowanych na urządzeniu bez użycia aplikacji. Włącz UFO™ 3, naciskając uniwersalny przycisk. Następnie naciśnij ponownie uniwersalny przycisk (do 8 razy), aby wybrać jeden z ośmiu przygotowanych wstępnie zabiegów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA

14. CO OZNACZA CIĄGŁE MIGANIE KONTROLKI URZĄDZENIA UFO™ 3?

Migające światło wokół urządzenia UFO™ 3 oznacza, że urządzenie działa w trybie parowania Bluetooth albo należy je naładować. Wykonaj instrukcje dostępne w aplikacji, aby zsynchronizować urządzenie.

15. JAK NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE UFO™ 3?

Urządzenia UFO™ 3 są ładowane przez USB za pomocą dołączonego kabla ładującego USB. Po pełnym naładowaniu urządzenie zapewni do 50 minut użytkowania.

16. JAK CZYŚCIĆ URZĄDZENIE UFO™ 3?

Umyj urządzenie i plastikowy pierścień mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Osusz bezpyłową ściereczką lub ręcznikiem. Zalecamy spryskać urządzenie sprayem do czyszczenia silikonowych urządzeń FOREO i spłukać ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych efektów, a następnie odstawić je do wyschnięcia na podstawę. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

MASECZKI FOREO

17. CZY MOGĘ PONOWNIE UŻYĆ MASECZEK FOREO?

Wszystkie maseczki aktywowane UFO™ i maseczki w płachcie FOREO są jednorazowe. Jeśli jednak jeden zabieg nie wystarczy, naciśnij ponownie uniwersalny przycisk w ciągu 30 sekund od zakończenia rutyny, aby ponownie rozpocząć ten sam zabieg.

18. CZY MUSZĘ ZMYĆ ESENCJĘ MASECZKI PO SKOŃCZENIU UŻYWANIA URZĄDZENIA UFO™ 3?

Nie, technologia Hyper-Infusion została stworzona, aby ułatwić głębsze i szybsze wchłanianie esencji maseczki w skórę. Jeśli po zabiegu na skórze pozostała esencja maseczki, wmasuj ją w skórę.