

FOREO
SWEDEN



ESPADA™ 2 plus

OŠETRENIE NEDOKONALOSTÍ KONCENTROVANÝM MODRÝM LED
SVETLOM



ONLINE MANUÁL

KOMPLETNÁ POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ÚVOD

Gratulujeme k tomu, že ste urobili prvý krok k inteligentnej starostlivosti o pokožku s ESPADA™ 2 plus . Pred tým, než si začnete užívať všetky výhody dokonalej starostlivosti pre akné v pohodlí vášho domova, prosím venujte pár minút prečítaniu tohto manuálu.

PRED POUŽITÍM SI PROSÍM PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a používajte tento prístroj len na účely, ktoré sú uvedené v tomto manuáli.

⚠ VAROVANIE: NA TOMTO ZARIADENÍ NIE JE POVOLENÉ ROBIŤ ŽIADNE ÚPRAVY.

ESPADA™ 2 plus

Získajte čistú, hladkú a zdravú pokožku s ESPADA™ 2 plus – špeciálne vyvinutým prístrojom na odstránenie opakujúcej sa akné a zápalov na liečbu každého individuálneho pupienka koncentrovaným modrým LED svetlom. Pracuje rýchlo a efektívne na reguláciu tvorby kožného mazu, zároveň ESPADA™ 2 plus tiež predchádza budúcim zápalom.

POZNAJTE SVOJÚ ESPADA™ 2 plus

FUNKCIE

MODRÉ LED SVETLO

Vlnová dĺžka 415 nm preniká cez epidermis, aby zničila baktérie spôsobujúce zápal.

PRESNÉ A CIELENÉ SVETLO

Ziaci každé miesto a zamieri koncentrované LED svetlo s dokonalou presnosťou.

UNIVERZÁLNE TLAČIDLO

Zapína a vypína zariadenie a aktivuje modré LED svetlo.

TSONIC™ PULZÁCIA

Masírujú pokožku, stimulujú cirkuláciu a pomáhajú obnovovať pleť.

ANTIBAKTERIÁLNY SILIKÓN

Ultrahygienický silikón zabraňuje šíreniu baktérií z jedného miesta na ďalšie.

NABÍJACÍ PORT

Až 210 použití na jedno nabitie cez USB. 100% vodeodolné.

KONTROLKA

Biele svetlo ukazuje, že modré LED svetlo je aktívne . Červené označuje vybitú batériu.



AKO POUŽÍVAŤ ESPADA™ 2 plus

ZAREGISTRUJTE SI ZÁRUKU

Pred prvým použitím si stiahnite aplikáciu FOREO For You, egistrujte zariadenie a aktivujte záruku podľa týchto jednoduchých krokov:

1. Stiahnite si FOREO aplikáciu do telefónu naskenovaním QR kódu.
2. Prihláste sa do svojho účtu, alebo si zaregistrujte nový.
3. Pridajte zariadenie (vo vrchnej časti obrazovky).
4. Vyberte sériu zariadení.
5. Nasledujte pokyny v aplikácii a vyplňte Informácie o nákupe.

www.foreo.com/app



A vaše zariadenie je pripravené na použitie!

SPÔSOB POUŽITIA



1



2



3

VYČISTITE

Vyčistite a osušte tvár a krk. Pre optimálne výsledky odporúčame používať kefku na čistenie tváre FOREO LUNA™.

APLIKUJTE

Naneste gél FOREO™ ESPADA BHA + PHA Blemish Solution na každý pupienok, ktorý si prajete ošetriť.

OŠETRITE

Stlačte univerzálne tlačidlo pre zapnutie ESPADA™ 2 plus. Zamierte zariadenie na pupienok. Stlačte univerzálne tlačidlo pre aktiváciu modrého LED a podržte ho na koži po dobu 30 sekúnd. Jedno miesto môžete ošetriť 2 krát počas jedného ošetrenia.

ČISTENIE VAŠEJ ESPADA™ 2 plus

Vždy dôkladne vyčistite ESPADA™ 2 plus po použití. Umyte zariadenie mydlom, opláchnite teplou vodou a osušte mäkkým uterákom. Po použití odporúčame nastriekať na zariadenie FOREO Silicone Cleansing Spray a opláchnite teplou vodou pre optimálne výsledky.

POZNÁMKA: Nikdy na čistenie nepoužívajte produkty obsahujúce alkohol, ropu alebo acetón, pretože môžu podráždiť kožu a poškodiť silikón.

DÔLEŽITÉ

PRE OPTIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

- Ak máte závažné kožné ochorenie alebo máte akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím s dermatológom.
- Používanie ESPADA™ 2 plus by malo byť pohodlné – ak pocítite nepohodlie, okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Pri používaní ESPADA™ 2 plus v okolí očí dbajte na zvláštnu opatnosť. Zabráňte kontaktu zariadenia s očnými viečkami alebo očami samotnými.
- Z hygienických dôvodov neodporúčame zdieľať ESPADA™ 2 plus s niekým iným.
- Nenechávajte ESPADA™ 2 plus na priamom slnku a nikdy ho nevystavujte extrémnemu teplu alebo vriacej vode.
- Keď toto zariadenie používajú deti, na nich alebo v ich blízkosti, rovnako ako osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami, je nutný starostlivý dohľad.
- Ak sa tento produkt javí akýmkoľvek spôsobom poškodený, prestaňte ho používať. Tento produkt neobsahuje žiadne opraviteľné diely.
- Používajte toto zariadenie iba na zamýšľané použitie, ako je popísané v tomto návode. Pokiaľ nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku alebo ak máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa prevádzky zariadenia, navštívte prosím www.foreo.com

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opatrenia , ktoré je potrebné prijať v prípade zmien vo výkone ESPADA™ 2 plus .

Ak sa ESPADA™ 2 plus neaktivuje po stlačení univerzálneho tlačidla :

Batéria je vybitá . Nabíjajte svoju ESPADA™ 2 plus pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB po dobu 1,5 hodiny , kým nebude plne nabitá . Plné nabitie vydrží až 150 tridsaťsekundových ošetrovaní .

Ak ESPADA™ 2 plus nemožno vypnúť a/ alebo tlačidlá rozhranie nereagujú :

Mikroprocesor dočasne nefunguje . Stlačením a podržaním univerzálneho tlačidla reštartujete zariadenia .

Ak kontrolka ESPADA™ 2 plus neblinká , keď je pripojený nabíjací kábel USB:

Batéria je plne nabitá a pripravená až na 150 ošetrovaní .

Batéria je vybitá a potvrdenie nabíjacieho kábla USB bude vyžadovať niekoľko minút .

Nabíjací kábel USB nie je správne pripojený . Skontrolujte elektrickú zásuvku / zásuvku USB a nabíjací port.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

REGISTRÁCIA ZÁRUKY

Ak chcete aktivovať svoju 2-ročnú obmedzenú záruku, zaregistrujte sa prostredníctvom aplikácie FOREO For You alebo navštívte foreo.com/product-registration pre viac informácií.

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie po dobu DVA (2) ROKOV (okrem krajín, kde národné zákony vyžadujú dlhšiu minimálnu záruku) po pôvodnom dátume kúpy na vady spôsobené chybným spracovaním alebo materiálmi vzniknutými pri normálnom používaní zariadenia. Záruka sa vzťahuje na funkčné diely, ktoré ovplyvňujú funkciu zariadenia. NEVZŤAHUJE sa na kozmetické poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbalosťou. Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo rozobranie zariadenia (alebo jeho príslušenstva) spôsobí neplatnosť záruky.

Pokiaľ zistíte závalu a upozorníte na ňu FOREO počas záručnej doby, FOREO podľa vlastného uváženia zariadenie bezplatne vymení. Nároky v rámci záruky musia byť podložené primeraným dôkazom, že dátum uplatnenia reklamácie je v záručnej dobe. Aby bola záruka potvrdená, uschovajte si po dobu trvania záručnej doby spolu s týmito záručnými podmienkami originálny doklad o kúpe.

Pre uplatnenie záruky sa musíte prihlásiť k svojmu účtu na www.foreo.com a potom vybrať možnosť uplatnenia záruky. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok je doplnkom k vašim zákonným právam ako spotrebiteľa a tieto práva žiadnym spôsobom neovplyvňuje.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Likvidácia starého elektronického zariadenia (platí v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémom triedeného zberu odpadu).




Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale že by sa malo odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Recyklácia materiálov tiež pomôže zachovať prírodné zdroje.

Ďalšie informácie o recyklácii vášho zariadenia vám poskytne miestna služba pre likvidáciu domového odpadu alebo miesto nákupu.

VYBRATIE BATÉRIE

POZNÁMKA: Tento proces nie je vratný. Otvorením zariadenia strácate záruku. Táto akcia musí byť vykonaná iba vtedy, keď je zariadenie pripravené na likvidáciu.

Pretože toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, musí byť pred likvidáciou vybratá a nemala by byť vyhadzovaná do domového odpadu. Ak chcete batériu vybrať, po odstránení silikónovej vonkajšej vrstvy otvorte vnútorný plastový obal a vyberte batériu, aby ste ju zlikvidovali v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia. Pre vašu bezpečnosť počas tohto procesu používajte rukavice. Podrobné vizuálne pokyny sú uvedené nižšie.

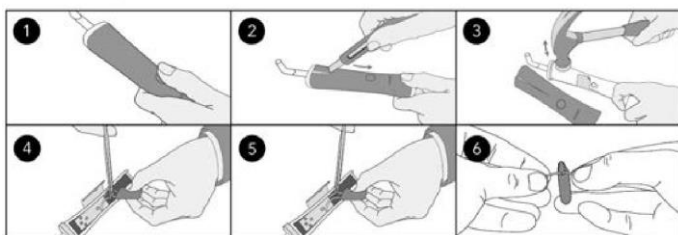

ŠPECIFIKÁCIA

MATERIÁLY: Silikón bezpečný pre telo, PC + ABS, nerez. oceľ
FARBA : Levanduľa / pistácie
ROZMERY : V 191 x Š 36 x D 31 mm
HMOTNOSŤ : 97 g

POUŽITIE: Až 210 použití na jedno nabitie
POHOTOVOSTNÝ REŽIM: 180 dní
FREKVENCIA: 103 Hz
MAX. ÚROVEŇ HLUKU: <50 dB
ROZHRANIE: 1 tlačidlo

Upozornenie: Užívatelia tohto zariadenia tak robia na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo škody, fyzické alebo iné, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tohto zariadenia. Spoločnosť FOREO si ďalej vyhradzuje právo túto publikáciu revidovať a čas od času vykonávať zmeny v jej obsahu bez toho, aby bola povinná o takej revízii alebo zmenách kohokoľvek informovať.

UPOZORNENIE: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie.

Model môže byť bez upozornenia zmenený za účelom vylepšenia.

©2023 FOREO AB. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

EU DISSTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO. US DISSTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISSTR.: PREHASKY STREET 6, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA. NAVRHNUTÉ A VYVINUTÉ SPOLOČNOSŤOU FOREO SWEDEN.

VYROBENÉ PRE FOREO AB.

EN-P1-2023060

www.foreo.com