

FOREO
SWEDEN



ESPADA™ 2 plus

OŠETŘENÍ NEDOKONALOSTÍ KONCENTROVANÝM MODRÝM LED
SVĚTLEM



ONLINE MANUÁL

KOMPLETNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ÚVOD

Gratulujeme k tomu, že jste udělali první krok k inteligentní péči o pokožku s ESPADA™ 2 plus . Předtím, než si začnete užívat všech výhod dokonalé péče pro akné v pohodlí vašeho domova, prosím věnujte pár minut pročtení tohoto manuálu.

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento přístroj jen k účelům, které jsou uvedeny v tomto manuálu.

⚠ VAROVÁNÍ: NA TOMTO ZAŘÍZENÍ NENÍ POVOLENO DĚLAT ŽÁDNÉ ÚPRAVY.

ESPADA™ 2 plus

Získejte čistou, hladkou a zdravou pokožku s ESPADA™ 2 plus – speciálně vyvinutým přístrojem pro odstranění opakujících se akné a zánětů pro léčbu každého individuálního pupínku koncentrovaným modrým LED světlem. Pracuje rychle a efektivně pro regulaci tvorby kožního mazu, zároveň ESPADA™ 2 plus také předchází budoucím zánětům.

POZNEJTE SVOU ESPADA™ 2 plus

FUNKCE

MODRÉ LED SVĚTLO

Vlnová délka 415 nm proniká přes epidermis , aby zničila bakterie způsobující záněty.

PŘESNÉ A CÍLENÉ SVĚTLO

Zacílí každé místo a zamíří koncentrované LED světlo s dokonalou přesností.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Zapíná a vypíná zařízení a aktivuje modré LED světlo.

TSONIC™ PULZACE

Masírují pokožku, stimulují cirkulaci a pomáhají obnovovat pleť.

ANTIBAKTERIÁLNÍ SILIKON


Ultrahygienický silikon zabraňuje šíření bakterií z jednoho místa na další.

NABÍJECÍ PORT

Až 210 použití na jedno nabití přes USB. 100% voděodolné .

KONTROLKA

Bílé světlo ukazuje, že modré LED světlo je aktivní . Červené označuje vybitou baterii.

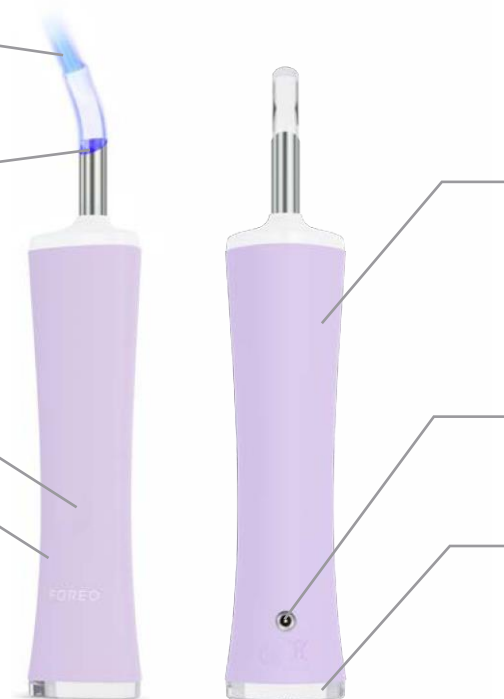

JAK POUŽÍVAT ESPADA™ 2 plus

ZAREGISTRUJTE SI ZÁRUKU

Před prvním použitím si stáhněte aplikaci FOREO For You, registrujte zařízení a aktivujte záruku podle těchto snadných kroků:

1. Stáhněte si FOREO aplikaci do telefonu naskenováním QR kódu.
2. Přihlašte se do svého účtu, nebo si zaregistrujte nový.
3. Přidejte zařízení (ve vrchní části obrazovky).
4. Vyberte sérii zařízení.
5. Následujte pokyny v aplikaci a vyplňte Informace o nákupu.



A vaše zařízení je připraveno k použití!

ZPŮSOB POUŽITÍ



vyčistěte

Vyčistěte a osušte obličej a krk. Pro optimální výsledky doporučujeme používat kartáček na čištění obličeje FOREO LUNA™.



aplikujte

Naneste gel FOREO™ ESPADA BHA+PHA Blemish Solution na každý pupínek, který si přejete ošetřit.



ošetřete

Stiskněte univerzální tlačítko pro zapnutí ESPADA™ 2 plus. Zamiřte zařízení na pupínek. Stiskněte univerzální tlačítko pro aktivaci modrého LED a podržte ho na kůži po dobu 30 sekund. Jedno místo můžete ošetřit 2 krát během jednoho ošetření.

ČIŠTĚNÍ VAŠÍ ESPADA™ 2 plus

Vždy důkladně vyčistěte ESPADA™ 2 plus po použití. Umyjte zařízení mýdlem, opláchněte teplou vodou a osušte měkkým ručníkem. Po použití doporučujeme nastříkat na zařízení FOREO Silicone Cleansing Spray a opláchněte teplou vodou pro optimální výsledky.

POZNÁMKA: Nikdy k čištění nepoužívejte produkty obsahující alkohol, ropu nebo aceton, jelikož mohou podráždit kůži a poškodit silikon.

DŮLEŽITÉ

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:

- Pokud máte závažné kožní onemocnění nebo máte jakékoli zdravotní problémy, poraďte se před použitím s dermatologem.
- Používání ESPADA™ 2 plus by mělo být pohodlné – pokud pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Při používání ESPADA™ 2 plus v okolí očí dbejte zvláštní opatrnosti. Zabraňte kontaktu zařízení s očními víčky nebo očima samotnými.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet ESPADA™ 2 plus s někým jiným.
- Nenechávejte ESPADA™ 2 plus na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vařící vodě.
- Když toto zařízení používají děti, na nich nebo v jejich blízkosti, stejně jako osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi, je nutný pečlivý dohled.
- Pokud se tento produkt jeví jakýmkoli způsobem poškozený, přestaňte jej používat. Tento produkt neobsahuje žádné opravitelné díly.
- Používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenaleznete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte nějaké další otázky týkající se provozu zařízení, navštivte prosím www.foreo.com

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu ESPADA™ 2 plus.

Pokud se ESPADA™ 2 plus neaktivuje po stisknutí univerzálního tlačítka:

Baterie je vybitá. Nabíjejte svou ESPADA™ 2 plus pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB po dobu 1,5 hodiny, dokud nebude plně nabitá. Plné nabití vydrží až 150 třicetisekundových ošetření.

Pokud ESPADA™ 2 plus nelze vypnout a/nebo tlačítka rozhraní nereagují:

Mikroprocesor dočasně nefunguje. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujete zařízení.

Pokud kontrolka ESPADA™ 2 plus neblíká, když je připojen nabíjecí kabel USB:

Baterie je plně nabitá a připravená až na 150 ošetření.

Baterie je vybitá a potvrzení nabíjecího kabelu USB bude vyžadovat několik minut.

Nabíjecí kabel USB není správně připojen. Zkontrolujte elektrickou zásuvku / zásuvku USB a nabíjecí port.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat svou 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO For You nebo navštivte foreo.com/product-registration pro více informací.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVA (2) LET (kromě zemí, kde národní zákony vyžadují delší minimální záruku) po původním datu koupě na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály vzniklými při normálním používání zařízení. Záruka se vztahuje na funkční díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) způsobí neplatnost záruky.

Pokud zjistíte závadu a upozorníte na ni FOREO během záruční doby, FOREO dle vlastního uvážení zařízení bezplatně vymění. Nároky v rámci záruky musí být podloženy přiměřeným důkazem, že datum uplatnění reklamace je v záruční době. Aby byla záruka potvrzena, uschovejte si po dobu trvání záruční doby spolu s těmito záručními podmínkami originální doklad o koupi.

Pro uplatnění záruky se musíte přihlásit ke svému účtu na www.foreo.com a poté vybrat možnost uplatnění záruky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek je doplňkem k vašim zákonným právům jako spotřebitele a tato práva žádným způsobem neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).




Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že by se mělo odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.

VYJMUTÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení ztrácíte záruku. Tato akce musí být provedena pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být před likvidací vyjmuta a neměla by být vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, po odstranění silikonové vnější vrstvy otevřete vnitřní plastový obal a vyjměte baterii, abyste ji zlikvidovali v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí. Pro vaši bezpečnost během tohoto procesu používejte rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže.

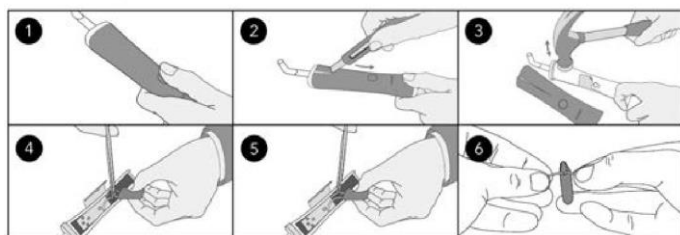

SPECIFIKACE

MATERIÁLY : Silikon bezpečný pro tělo , PC +
ABS, nerez. ocel
BARVA : Levandule / pistácie
ROZMĚRY : V 191 x Š 36 x D 31 mm
HMOTNOST : 97 g

POUŽITÍ : Až 210 použití na jedno nabití
POHOTOVOSTNÍ REŽIM: 180 dní
FREKVENCE: 103 Hz
MAX. ÚROVEŇ HLUKU : <50 dB
ROZHRANÍ: 1 tlačítko

Upozornění: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní riziko. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo tuto publikaci revidovat a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinná o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Model může být bez upozornění změněn za účelem vylepšení.

©2023 FOREO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

EU DISSTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO. US DISSTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISSTR.: PROHASKY STREET 6, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIE. NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ FOREO SWEDEN.

VYROBENO PRO FOREO AB.

EN-P1-2023060

www.foreo.com