

FOREO
SWEDEN



KIWI™

URZĄDZENIE USUWAJĄCE WĄGRY PRZEZ
ZASYSANIE PRÓŻNIOWE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy odkrycia inteligentnej pielęgnacji skóry z KIWI™. Przed rozpoczęciem korzystania ze wszystkich zalet zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w domowym zaciszu poświęć kilka chwil na dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

 **OSTRZEŻENIE!** NIE WOLNO W ŻADEN SPOSÓB MODYFIKOWAĆ TEGO URZĄDZENIA.

OMÓWIENIE URZĄDZENIA KIWI™

Pozbądź się głębokich wągrów, wyprysków, sebum i innych niedoskonałości cery z najlepszym urządzeniem do usuwania wągrów przez zasysanie próżniowe – KIWI™. Dzięki zasysaniu próżniowemu i technologii niebieskiego światła LED urządzenie KIWI™ eliminuje wszystkie, zagnieżdżone w porach bakterie powodujące trądzik i pozostawia widocznie czystsza cerę

POZNAJ SVOJE URZĄDZENIE KIWI™

NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED

Długość fali 415 nm zabija bakterie na skórze i urządzeniu, zapobiegając przyszłym wypryskom. Przetaczaj między stałym lub pulsującym światłem LED albo wyłącz je całkowicie zgodnie z preferencjami.

LAMPKI KONTROLNE INTENSYWNOŚCI

Zapalają się, wskazując ustawienie intensywności ssania urządzenia.

ULTRAHIGIENICZNY SILIKON

Odporny na bakterie i aksamitnie miękki.

ZASYSANIE PRÓŻNIOWE

Doskonale skalibrowane ssanie jest delikatne dla skóry i jednocześnie skutecznie odblokowuje pory, usuwając wągrzy, pryszcze, zanieczyszczenia, sebum.

KOŃCÓWKĄ ZE STALI KLASY MEDYCZNEJ

Ultrahigieniczna, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się bakterii, odporna na korozję i prosta w czyszczeniu.

PORT ŁADOWANIA

Działa do 120 minut na jednym ładowaniu USB.

UNIWERSALNY PRZYCISK

Włącza i wyłącza urządzenie, zmienia poziom intensywności oraz przetacza urządzenie w tryb parowania Bluetooth.



KABEL ŁADUJĄCY USB

Naładuj urządzenie gdziekolwiek jesteś.

JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE KIWI™

ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować urządzenie. Wykonaj poniższe proste kroki:

1. Pobierz aplikację FOREO For You na telefon.
2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
4. Wybierz gamę urządzeń.
5. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną.
6. Wypełnij informacje dotyczące zakupu.

www.foreo.com/app



SPOSÓB UŻYCIA



1. OCZYŚĆ SKÓRĘ

Dokładnie wyczyść i osusz twarz oraz szyję. Zalecamy użycie oczyszczającego masażera twarzy FOREO LUNA™ z Micro-Foam Cleanser. (WSKAZÓWKA: dla optymalnych rezultatów można wcześniej, zgodnie z preferencjami, położyć na 5 minut na twarzy gorący ręcznik, aby rozszerzyć pory).



2. WYBIERZ PREFERENCJE

Naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć KIWI™. Zmień intensywność ssania, ponownie naciskając przycisk raz dla każdego poziomu. Więcej ustawień jest dostępnych w aplikacji FOREO.



3. USUŃ WĄGRY

Delikatnie napnij i przytrzymaj skórę. Następnie przyciśnij końcówkę na płasko do skóry i szybko przesuwaj ruchami skierowanymi w górę twarzy. Po zakończeniu delikatnie umyj twarz wodą i wysusz ją. Zakończ zabieg, dokładnie nawilżając skórę. Zalecamy użycie urządzenia do głębokiego nawilżania twarzy UFO™ z preferowaną maseczką aktywowaną UFO™.

WARTO WIEDZIEĆ:

- Zawsze przesuwaj urządzenie szybko i równomiernie po skórze, kierując się w górę. Nie zatrzymuj się na jednym obszarze, ponieważ może dojść do skaleczenia skóry.
- Nie stosuj na bardzo wrażliwej skórze, aktywnych zmianach trądzikowych ani otwartych ranach.
- Przed użyciem KIWI™ na twarzy możesz przetestować je na ramieniu, aby znaleźć swój komfortowy poziom intensywności. Zaczniij od poziomu 1 intensywności i sprawdź reakcję skóry. Następnie zwiększ poziom, aby znaleźć skuteczne i komfortowe zarazem ustawienie.
- Aby uniknąć podrażnień, zalecamy przesunięcie urządzenia tylko raz przez każdy obszar. Aby odessać urządzenie, delikatnie przechył końcówkę – nie odrywaj jej od skóry.
- Po zabiegu dokładnie nawilż skórę, aby nawodnić ją i zmniejszyć zaczerwienienie wrażliwych obszarów. Zalecamy użycie urządzenia do głębokiego nawilżania twarzy UFO™ z preferowaną maseczką aktywowaną UFO™.
- Dla optymalnych rezultatów zalecamy używanie KIWI™ raz do dwóch razy w tygodniu.



CZYSZCZENIE KIWI™

Ponieważ KIWI™ nie ma części wymiennych, dla skuteczności zabiegów ważne jest dokładne postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi jego czyszczenia.



Dla optymalnych rezultatów odkręć końcówkę, włóż ją pod bieżącą wodę, aby zmyć nieczystości i resztki, a następnie pozostaw do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem na urządzeniu.



W międzyczasie nanieś spray do czyszczenia silikonu FOREO na korpus urządzenia i wytrzyj za pomocą wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika.



Na koniec nanieś spray do czyszczenia silikonu FOREO na bawełniany wacik i delikatnie wytrzyj nim brud i resztki, które zgromadziły się na silikonowym filtrze.

UWAGA! KIWI™ NIE jest w 100% wodoodporne, więc nie wolno czyścić urządzenia pod bieżącą wodą. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

OSTRZEŻENIE

DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Z tego urządzenia mogą korzystać osoby, które ukończyły co najmniej 12 lat, oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, o ile korzystanie odbywa się pod nadzorem albo uzyskały one odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.
- Jeśli masz chorobę skóry lub jakiegokolwiek obawy medyczne, przed skorzystaniem z urządzenia skonsultuj się z dermatologiem.
- Używanie urządzenia KIWI™ powinno być komfortowe. Jeśli doświadczysz dyskomfortu, natychmiast przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia okolic oczu za pomocą KIWI™ i nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami ani gałkami ocznymi.
- W żadnym momencie nie wolno zatrzymywać ruchu włączonego urządzenia na skórze.
- Nie używaj urządzenia na wrażliwej skórze ani aktywnych zmianach trądzikowych.
- Ze względów higienicznych odradzamy udostępnianie urządzenia KIWI™ innym osobom.
- Nie pozostawiaj urządzenia KIWI™ na bezpośrednim świetle słonecznym i nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur ani wrzącej wody.
- Biorąc pod uwagę skuteczność zabiegów KIWI™, nie zalecamy przesuwania urządzenia więcej niż raz na danym obszarze zabiegu.
- KIWI™ stosuje zasysanie próżniowe. Osoby o skórze wrażliwej lub podatnej na trądzik powinny zachować ostrożność podczas używania urządzenia.
- Czyszczenia i czynności konserwacyjnych nie mogą przeprowadzać dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi ciężkich maszyn.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania.
- Nie wolno wkładać przedmiotów w otwory urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli się przegrzewa albo w przypadku podejrzenia jego nieprawidłowego działania.
- Urządzenie KIWI™ musi być całkowicie suche przed włączeniem. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało zanurzone pod wodą ani mokrymi rękoma.
- Urządzenia należy używać tylko z zasilaczem SELV.
- Do ładowania urządzenia zalecane jest używanie źródeł zasilania zgodnych ze standardem IEC60950.
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że wtyczka i gniazdo elektryczne są suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenie lub ładowarka wydają się nie działać prawidłowo lub być uszkodzone. Używaj tylko przewodu zasilania dołączonego do urządzenia.
- Przed użyciem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator. Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed wyjęciem akumulatora, który następnie powinien zostać bezpiecznie zutylizowany.
- Urządzenie to nie ma części do serwisowania.
- Urządzenie jest przeznaczone do zabiegów kosmetycznych twarzy i szyi. Firma FOREO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania, stosowania urządzenia na innych obszarach ciała, podłączania nieodpowiednich źródeł zasilania, stosowania zabrudzonych środków przewodzących lub półkuli ani żadnego innego nieodpowiedniego zastosowania.
- Urządzenie zawiera niewymienne akumulatory.
- Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub w przypadku pytań związanych z działaniem urządzenia, odwiedź stronę faqswiss.com/support.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zachowaj ostrożność w przypadku zmian w działaniu urządzenia KIWI™.

Jeśli urządzenie KIWI™ nie włączy się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku:

- Akumulator jest rozładowany. Naładuj KIWI™ za pomocą ładowarki USB do momentu zapalenia się lampek kontrolnych na zielono. Pełne naładowanie starcza na maksymalnie 120 minut.

Jeśli urządzenia KIWI™ nie można wyłączyć lub uniwersalny przycisk nie reaguje:

- Wystąpiła tymczasowa awaria mikroprocesora. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli KIWI™ nie synchronizuje się z aplikacją FOREO:

- Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i ma włączony Bluetooth.
- Wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go i spróbuj połączyć się ponownie.
- Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie i powtórz proces.
- Usuń i ponownie zainstaluj aplikację – może wystarczy zaktualizować aplikację.
- Po usunięciu i ponownym zainstalowaniu aplikacji uruchom ponownie telefon.
- Usuń pliki cookie i wyczyść pamięć podręczną.
- Upewnij się, że system operacyjny urządzenia mobilnego został zaktualizowany do najnowszej wersji.

Gdy lampki kontrolne na urządzeniu KIWI™ zmieniają kolor:

- Czerwony kolor oznacza niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj urządzenie.
- Pomarańczowy kolor wskazuje ładowanie urządzenia. Ładuj urządzenie do momentu zapalenia się lampek na zielono.
- Zielony kolor oznacza pełne naładowanie urządzenia. Odłącz kabel ładujący USB.

GWARANCJA I REGULAMIN

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią, ograniczoną gwarancję, zarejestruj się w aplikacji FOREO For You lub odwiedź stronę foreo.com/product-registration i zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

2-LETNIA, OGRANICZONA GWARANCJA

Firma FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania. Gwarancja obejmuje części pracujące, które wpływają na działanie urządzenia. NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego spowodowanego zwykłym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych w następstwie wypadku, niewłaściwego użycia lub zaniedbania. Jakakolwiek próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte uzasadnionymi dowodami wskazującymi na to, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić gwarancję, należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zobowiązanie to stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta i nie wpływa w żaden sposób na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).



Tego urządzenia nie należy traktować jak odpadów domowych, ale należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki poprawnej utylizacji tego urządzenia pomożesz zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, który może mieć miejsce w przypadku nieodpowiedniej utylizacji urządzenia. Recykling materiałów pomoże także oszczędzić zasoby naturalne.


Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub punktem zakupu.

USUWANIE AKUMULATORA

UWAGA! Tego procesu nie można cofnąć. Otwarcie urządzenia unieważni gwarancję. Działanie to należy wykonać, gdy urządzenie zostanie przeznaczone do utylizacji.

Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy, który należy usunąć przed utylizacją produktu i którego nie należy wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego. Aby usunąć akumulator, zdejmij silikonową warstwę zewnętrzną, otwórz wewnętrzną, plastikową powłokę i wyjmij akumulator, aby zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Dla bezpieczeństwa proces ten należy wykonać w rękawiczkach.

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje graficzne.

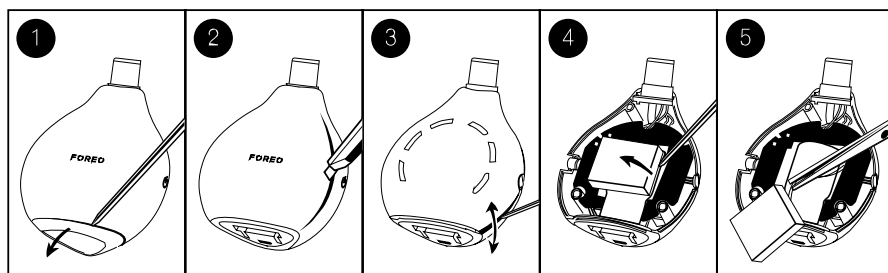

SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	Bezpieczny dla skóry silikon, ABS, PC, chromowany odlew cynku, stal nierdzewna
KOLOR:	Arctic Blue
WYMIARY:	W106 x S80,5 x G48 mm
WAGA:	154g
BATERIA:	Litowo-jonowy, 520 mAh, 3,7 V
UŻYTKOWANIE:	Działa do 120 minut na jednym ładowaniu
GOTOWOŚĆ:	90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	183 Hz
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:	<50 dB
INTERFEJS:	1-przyciskowy

Wyłączenie odpowiedzialności: Używasz tego urządzenia na własne ryzyko. Firma FOREO ani jej sprzedawcy nie przyjmują odpowiedzialności za żadne obrażenia i szkody, fizyczne lub inne, wynikię bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto firma FOREO zastrzega sobie prawo do korekty niniejszej publikacji i okresowej zmiany jej treści bez obowiązku poinformowania o tym użytkownika.

OSTRZEŻENIE! Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA! Urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenie zawiera nadajnik/odbiornik nieobjęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia licencyjnego zgodnie z normą RSS Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Firma FOREO deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE produktu jest dostępny pod adresem: <https://www.foreo.com/support/ec-conformity>.

Model może zostać ulepszony bez powiadomienia.