

FOREO
SWEDEN



KIWI™

PŘÍSTROJ S VAKUOVÝM SÁNÍ PRO
ODSTRANĚNÍ ČERNÝCH TEČEK



ONLINE MANUAL

ÚPLNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ZAČÍNÁME

Gratulujeme k objevení chytřejší péče o pleť s KIWI™. Než začnete využívat všech výhod sofistikované technologie péče o pleť v pohodlí domova, věnujte prosím chvíli pozornému přečtení pokynů v této příručce.

Prosím PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento výrobek pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu.

VAROVÁNÍ: ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEJSOU POVOLENY.

KIWI™ PŘEHLED

Zbavte se hluboce zakořeněných černých teček, bílých teček, oleje a dalších nečistot na obličeji s nejlepším odstraňovačem černých teček a vakuovým sacím zařízením na světě - KIWI™. Díky vakuovému sání a modré LED technologii KIWI™ eliminuje všechny bakterie způsobující akné, které uvíznou ve vašich pórech, a zanechá vám viditelně jasnější pleť.

SEZNAMTE SE S KIWI™

MODRÉ LED

Vlnová délka 415 nm zabíjí bakterie na pokožce a na zařízení – předchází tak budoucím zánětům. Přepínejte mezi konstantní LED, pulzní LED nebo žádnou LED, podle vašich preferencí.

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR INTENZITY

Rozsvícení indikuje nastavení intenzity podtlakového sání vašeho zařízení.

ULTRA-HYGIENICKÝ SILIKON

Odolný vůči bakteriím a sametově hebký.

VAKUOVÉ SÁNÍ

Dokonale kalibrované sání je šetrné k pokožce, přesto účinné při uvolňování ucpaných pórů tím, že odstraňuje černé tečky, bílé tečky, špínu, mastnotu a další nečistoty z hloubi.

ŠPIČKA Z LÉKAŘSKÉ OCELI

Ultr-ahygienický k zastavení šíření bakterií, odolný proti korozi a snadno se čistí.

NABÍJECÍ PŘÍSTAV

Až 120 minut používání na jedno nabití.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Zapíná a vypíná zařízení, upravuje úroveň intenzity a uvádí zařízení do režimu párování Bluetooth.



USB NABÍJECÍ KABEL

Nabíjejte kdykoli a kdekoli.

JAK POUŽÍVAT KIWI™

REGISTRACE ZÁRUKY

Před prvním použitím si stáhněte aplikaci FOREO For You. Abyste zařízení zaregistrovali a aktivovali záruku, řiďte se následujícími kroky:

1. Stáhněte aplikaci FOREO For You do svého telefonu naskenováním QR kódu.
2. Přihlaste se do stávajícího účtu, nebo si vytvořte účet nový.
3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky).
4. Vyberte sérii zařízení.
5. Následujte instrukce v aplikaci a vyplňte informace o nákupu.

A vaše zařízení je připraveno k použití!

www.foreo.com/app



JAK POUŽÍVAT



1. VYČISTĚTE PLEŤ

Pechlivě vyčistěte a osušte obličej a krk. Doporučujeme používání čistícího masážního přístroje LUNA™ s přípravkem Micro-Foam Cleanser. (TIP: Pro optimální výsledky můžete svůj obličej po dobu pěti minut nahřát teplým ručníkem, aby se otevřely póry).



2. VYBERTE SI PŘEDVOLBY

Stiskněte univerzální tlačítko a zapněte tak KIWI™. Upravte si intenzitu vakuového sání opětovným stisknutím tlačítka, jednou pro každou úroveň. Objevte více nastavení v aplikaci FOREO.



3. ODSTRAŇTE ČERNÉ TEČKY

Jemně natáhněte pokožku. Poté přitiskněte hrot zařízení naplocho k pokožce a rychle klouzejte směrem nahoru. Jakmile ošetření dokončíte, omyjte si pleť vodou a osušte ji. Dokončete ošetření hloubkovou hydratací pleti. Doporučujeme použít zařízení FOREO UFO™ s preferovanou UFO™ maskou.

DOBŘÉ VĚDĚT:

- Vždy pracujte se zařízením na pokožce rychle a rovnoměrně, směrem nahoru. Nezastavujte na jednom místě, jelikož to může způsobit podráždění.
- Nepoužívejte na extrémně citlivou pleť, pleť s aktivními záněty nebo otevřenými rankami.
- Před použitím KIWI™ na obličej vyzkoušejte zařízení nejdříve na paži, abyste zjistili optimální intenzitu. Začněte na intenzitě 1 a zjistěte, jak vaše pokožka reaguje. Poté intenzitu stupňujte až do té chvíle, kdy bude efektivní, ale zároveň příjemná.
- Abyste se vyhnuli podráždění, doporučujeme používat na každé partii pouze jednou. Pro přerušení sání zahněte hrot zařízení do jiného úhlu. Neoddalujte celý hrot od pokožky.
- Po ošetření hloubkově hydratujte pleť, abyste snížili začervenání citlivých míst. Doporučujeme použít zařízení FOREO UFO™ s preferovanou UFO™ maskou.
- Pro optimální výsledky doporučujeme používat KIWI™ jednou až dvakrát za týden.



ČIŠTĚNÍ VAŠEHO KIWI™

KIWI™ nevyžaduje žádné náhradní díly, je důležité, abyste pečlivě dodržovali naše pokyny k čištění zařízení, aby vaše ošetření byla co nejúčinnější.



Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, odšroubujte špičku, podržte ji pod tekoucí vodou, abyste smyli veškeré nečistoty a nečistoty, a před jejím nasazením na zařízení jej nechte zcela vyschnout na vzduchu.



Mezitím nastříkejte tělo zařízení silikonovým čisticím sprejem FOREO a setřete veškeré zbytky vlhkým hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna.



Nakonec nastříkejte FOREO Silikonový čisticí sprej na vatový tampon a jemně jím setřete veškeré nečistoty a nečistoty, které se nashromáždily na silikonovém filtru.

POZNÁMKA: KIWI™ NENÍ 100% vodotěsný, proto zařízení nečistěte pod tekoucí vodou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon

DŮLEŽITÉ

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:

- Tento spotřebič mohou používat osoby ve věku 12 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny. Ohledně používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím. Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Pokud máte kožní onemocnění nebo jakékoli zdravotní problémy, poraďte se před použitím s dermatologem.
- Pomocí KIWI™ by měla být pohodlná – pokud pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Při používání KIWI buďte zvláště opatrní™ kolem oblastí pod očima a nepřiváděte zařízení do kontaktu s očními víčky nebo očima samotnými.
- V žádném okamžiku byste neměli přestat pohybovat se zapnutým zařízením na kůži.
- Nepoužívejte přístroj na citlivou pokožku nebo na aktivní léze akné.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet vaše KIWI™ s kýmoli jiným.
- Nenechávejte své KIWI™ na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu horku nebo vařící vodě.
- Vzhledem k účinnosti KIWI™ ošetření, doporučujeme, abyste během ošetření neklouzali přístrojem více než jednou po oblasti.
- KIWI™ využívá vakuové odsávání. Osoby s citlivou pokožkou nebo pletí náchylnou k rosacei musí být při používání tohoto zařízení opatrní a opatrní.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte při řízení nebo obsluze těžkých strojů.
- Zařízení nepoužívejte, když je zapojeno.
- Nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru zařízení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud se přehřívá nebo máte podezření, že nefunguje správně.
- KIWI™ před aktivací by měl být zcela suchý. Nepoužívejte zařízení, pokud bylo ponořeno do vody, a nepoužívejte jej s mokrými rukama.
- Toto zařízení by mělo být používáno pouze s napájecím adaptérem SELV.
- K nabíjení zařízení se doporučuje používat standardní napájecí zdroje IEC60950.
- Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Během nabíjení zařízení nepoužívejte. Pokud toto zařízení nebo nabíječka nefunguje správně nebo se zdá být jakýmkoliv způsobem poškozená, přestaňte ji používat. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s vaším zařízením.
- Tento přístroj obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.
- Před likvidací je nutné z přístroje vyjmout baterii. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě a baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Tento produkt neobsahuje žádné opravitelné díly.
- Tento přístroj je určen pro kosmetické použití na obličej a krk. Společnost FOREO nenese odpovědnost za jakékoli škodlivé následky vyplývající z nesprávného použití, aplikace na jiné části těla, připojení k nesprávným zdrojům napětí, znečištěného vodivého roztoku nebo koulí nebo jakýchkoli jiných nesprávných aplikací.
- Používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenajdete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte nějaké další otázky týkající se provozu zařízení, navštivte prosím foreo.com/support

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu KIWI™.

Pokud KIWI™ není aktivován při stisknutí univerzálního tlačítka:

- Baterie je prázdná. Nabijte své KIWI™ přes USB nabíječku po dobu až 1,5 hodiny, nebo dokud se kontrolky nerozsvítí zeleně. Plně nabití vydrží až 120 minut.

Pokud KIWI™ nelze vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje:

- Mikroprocesor dočasně nefunguje. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujete zařízení.

Pokud KIWI™ se nesynchronizuje s aplikací FOREO:

- Ujistěte se, že je vaše zařízení plně nabitě a že máte zapnuté Bluetooth.
- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FOREO a poté ji znovu otevřete, aby se proces restartoval.
- Smažte a znovu nainstalujte aplikaci – možná je třeba aplikaci jednoduše aktualizovat.
- Po odstranění a opětovné instalaci aplikace nezapomeňte restartovat telefon.
- Vymažte soubory cookie a mezipaměť telefonu.
- Ujistěte se, že je operační systém vašeho mobilního telefonu aktualizován na nejnovější verzi.

Pokud se kontrolka KIWI™ rozsvítí a změní barvu:

- Červená kontrolka signalizuje vybitou baterii. Nabijte své zařízení.
- Oranžové kontrolky indikují, že se zařízení nabíjí. Pokračujte v nabíjení, dokud se kontrolky nerozsvítí zeleně.
- Zelené kontrolky indikují, že zařízení je plně nabitě. Odpojte nabíjecí kabel USB.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat svou 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO For You nebo navštivte foreo.com/product-registration pro více informací.

2LETÁÍ LIMITOVANÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVOU (2) LET od původního data koupě na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály vzniklými při běžném používání zařízení. Záruka se vztahuje na funkční díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) způsobí neplatnost záruky.

Pokud zjistíte závadu a upozorníte na ni FOREO během záruční doby, FOREO dle vlastního uvážení zařízení bezplatně vymění. Nároky v rámci záruky musí být podloženy přiměřeným důkazem, že datum uplatnění reklamace je v záruční době. Aby byla záruka potvrzena, uschovejte si po dobu trvání záruční doby spolu s těmito záručními podmínkami originální doklad o koupi.

Pro uplatnění záruky se musíte přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a poté vyberte možnost uplatnění záruky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek je doplňkem k vašim zákonným právům jako spotřebitele a tato práva žádným způsobem neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).




Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že by se mělo odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není reverzibilní. Otevřením zařízení ztrácíte záruku. Tato akce musí být provedena pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být před likvidací vyjmuta a neměla by být vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, po odstranění vnější silikonové vrstvy otevřete vnitřní plastový obal a vyjměte baterii, aby byla zlikvidována v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí. Pro vaši bezpečnost během tohoto procesu používejte rukavice.

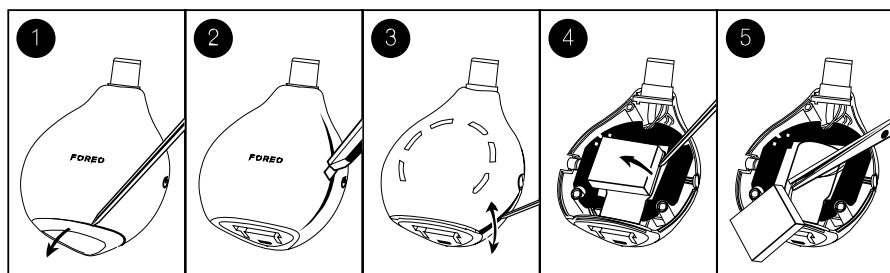

SPECIFIKACE

MATERIÁLY:	Silikon bezpečný pro tělo, ABS, PC, Chromovaná slitina zinku, Nerezová ocel
BARVA:	Arctic Blue
VELIKOST:	V106 x Š80,5 x H48 mm
HMOTNOST:	154g
BATERIE:	Li-ion 520 mAh 3,7V
POUŽÍVÁNÍ:	Až 120 minut používání na jedno nabití
POHOTOVOSTNÍ:	90 dní
FREKVENCE:	183 Hz
MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU:	<50 dB
ROZHRANÍ:	1-tlačítko

Vyloučení odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto zařízení. Dále FOREO si vyhrazuje právo toto revidovat zveřejnění a čas od času provádět změny v jejich obsahu, aniž byste byli povinni o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

POZOR: Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

FOREO prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě pro produkt je k dispozici na <https://www.foreo.com/support/ec-conformity>

Model může být bez upozornění změněn za účelem vylepšení.