

FOREO
SWEDEN



KIWI™ derma

DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE & PŘÍSTROJ PRO
VAKUOVÉ SÁNÍ PÓRŮ



ONLINE MANUAL

ÚPLNÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ZAČÍNÁME

Gratulujeme k objevení chytřejší péče o pleť s KIWI™ derma. Než začnete využívat všech výhod sofistikované technologie péče o pleť v pohodlí domova, věnujte prosím chvíli pozornému přečtení pokynů v této příručce.

Prosím PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento výrobek pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu.

⚠ UPOZORNĚNÍ: ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEJSOU POVOLENY.

KIWI™ derma PŘEHLED

Trápí vás nerovnoměrná struktura pleti, vrásky a stařecké skvrny? KIWI™ derma je trojitě technologické řešení, které vyřeší všechny vaše problémy se stárnutím pleti. Mikrodermabraze jemně odstraňuje matnou, poškozenou, nerovnou horní vrstvu pokožky a odhaluje svěží a zářivou vrstvu pod ní. Dokonale kalibrované sání „vysává“ příliš ucpané póry a zanechává je dokonale vyčištěné a minimalizované. T-Sonic™ masáž zlepšuje mikrocirkulaci a lymfatickou drenáž, aby pomohla vyblednout pigmentaci a snížit otoky. Pro pleť, která vypadá mladší, zdravější a jemnější.

SEZNAMTE SE S KIWI™ derma

MIKRODERMABRAZIVNÍ HROTY

Ocel lékařské kvality s diamanty Adamas odlupuje pokožku, zlepšuje vrásky a vyrovnává texturu a tón. Navrženy tak, aby se nikdy nemusely vyměňovat.

INDIKÁTORY INTENZITY

Rozsvícení indikuje nastavení intenzity podtlakového sání vašeho zařízení.

ULTRAHYGIENICKÝ SILIKON

Odolný vůči bakteriím a sametově hebký.

VAKUOVÉ SÁNÍ

Dokonale kalibrované jemné, ale účinné sání odstraňuje nečistoty z hloubky pórů, aniž by poškozovalo pokožku.

T-SONIC™ MASÁŽ

Zlepšuje cirkulaci, lymfatickou drenáž a absorpci produktu a dočasně rozšiřuje póry pro účinnější sání.

NABÍJECÍ PORT

Až 120 min používání na jedno nabití.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Zapíná a vypíná zařízení, upravuje úroveň intenzity a uvádí zařízení do režimu párování Bluetooth.



MALÝ HROT

Precizně exfoliuje oblast T-zóny.



STŘEDNÍ HROT

Pomáhá redukovat viditelné vrásky a nedokonalosti.



VELKÝ HROT

Jemně exfoliuje tváře a citlivé oblasti.



USB NABÍJECÍ KABEL

Nabíjejte kdykoliv a kdekoliv.

JAK POUŽÍVAT KIWI™derma ZAREJESTRUJTE ZÁRUKU

Před prvním použitím si stáhněte aplikaci FOREO For You, zaregistrujte své zařízení a aktivujte záruku podle následujících kroků:

1. Stáhněte aplikaci FOREO do svého telefonu naskenováním QR kódu.
2. Přihlaste se do svého stávajícího účtu, nebo si vytvořte účet nový.
3. Přidejte zařízení (na horní straně obrazovky).
4. Vyberte sérii zařízení.
5. Následujte instrukce v aplikaci a vyplňte nákupní informace. A vaše zařízení je připraveno k použití!

www.foreo.com/app



JAK POUŽÍVAT



1. VYČISTĚTE PLEŤ

Důkladně očistěte a osušte obličej a krk. Doporučujeme používat FOREO LUNA™ čistící masážní přístroj na obličej s mikropěnou. (TIP: Pro optimální výsledky si můžete na obličej přiložit horký ručník po dobu 5 minut k otevření pórů, je-li to žádoucí).



2. VYBERTE SI PŘEDVOLBY

Připojte svůj preferovaný hrot k zařízení. Poté stiskněte univerzální tlačítko pro zapnutí KIWI™derma. Nastavte intenzitu podtlakového sání opětovným stisknutím tlačítka, jednou pro každou úroveň. Získejte přístup k dalším nastavením prostřednictvím aplikace FOREO.




3. VYČISTĚTE A OMLAĎTE

Jemně držte pokožku napnutou. Poté přitiskněte špičku zařízení naplocho na kůži a rychle klouzejte po obličeji nahoru. Po dokončení jemně omyjte obličej vodou a osušte. Dokončete své ošetření důkladnou hydratací pokožky. Doporučujeme používat FOREO UFO™ s vaší preferovanou UFO™ maskou.


WARTO WIEDZIEĆ:

- Vždy rychle a rovnoměrně klouzejte po kůži směrem nahoru. Nedělejte pauzy na jednom místě, protože by se mohly objevit modřiny.
- Před použitím KIWI™derma na obličej, si ho můžete otestovat na paži, abyste našli optimální úroveň pohodlí. Začněte na úrovni intenzity 1 a sledujte, jak vaše pokožka reaguje. Poté se propracujte na úroveň intenzity, která je efektivní a zároveň pohodlná.
- Neexfoliujte příliš – stačí jeden skluz na oblast. A nevyvíjejte nadměrný tlak - KIWI™derma bude fungovat i při minimálním tlaku.
- Po ošetření důkladně hydratujte pokožku, abyste hydratovali pokožku a snížili zarudnutí citlivých oblastí.
- Doporučujeme používat FOREO's UFO™ s vaší preferovanou UFO™ maskou.
- Pro optimální výsledky doporučujeme používat KIWI™derma jednou týdně ve večerních hodinách, aby se vaše pokožka přes noc uzdravila.
- Vyhněte se používání retinoidů, peelingů nebo jiných exfoliačních ošetření po dobu nejméně tří dnů před a po provedení mikrodermabrazie doma. Kromě toho se alespoň týden před a po zákroku zdržte používání produktů s vitamínem C, abyste předešli nadměrnému podráždění.
- Je důležité omezit pobyt na slunci před a po ošetření mikrodermabrazí. Vyhněte se slunci a používejte opalovací krém alespoň týden před a po zákroku, abyste předešli možnému poškození pokožky. Doporučujeme používat širokospektrální opalovací krém s vysokým SPF.

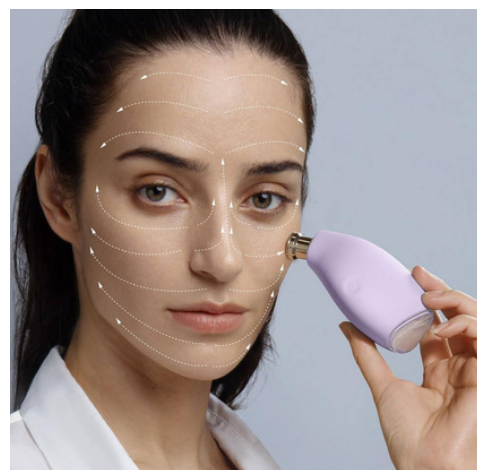

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ KIWI™derma

Od KIWI™derma je první mikrodermabrazní zařízení na světě, které nevyžaduje žádné náhradní díly, je důležité, abyste pečlivě dodržovali naše pokyny k čištění zařízení, aby vaše ošetření byla co nejúčinnější.

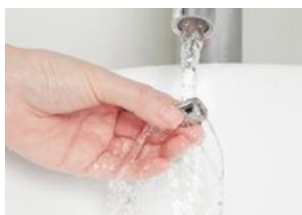

Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, odšroubujte špičku, podržte ji pod tekoucí vodou, abyste smyli veškeré nečistoty a nečistoty, a před jejím nasazením na zařízení jej nechte zcela vyschnout na vzduchu.



Mezitím nastříkejte tělo zařízení silikonovým čistícím sprejem FOREO a setřete veškeré zbytky vlhkým hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna.



Nakonec nastříkejte FOREO Silikonový čistící sprej na vatový tampon a jemně jím setřete veškeré nečistoty a nečistoty, které se nashromáždily na silikonovém filtru.

POZNÁMKA: KIWI™derma NENÍ 100% voděodolné, proto zařízení nečistěte pod tekoucí vodou. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

DŮLEŽITÉ PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ:

- Toto zařízení mohou používat osoby ve věku 12 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a porozuměli souvisejícím nebezpečím. Děti by si se zařízením neměly hrát.
- Pokud máte kožní onemocnění nebo jakékoli zdravotní problémy, poraďte se před použitím s dermatologem.
- Ošetření pomocí KIWI™derma by měla být pohodlná – pokud zaznamenáte nepohodlí, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Při používání KIWI derma buďte zvláště opatrní kolem oblastí pod očima a nepřiveďte zařízení do kontaktu s očními víčky nebo očima samotnými.
- V žádném okamžiku byste neměli přestat pohybovat se zapnutým zařízením na kůži.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet vaše KIWI™derma s kýmoli jiným.
- Nenechávejte své KIWI™derma na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vařící vodě.
- Vzhledem k účinnosti KIWI™ derma ošetření mikrodermabraze, doporučujeme, abyste během ošetření neklouzali přístrojem více než jednou po ploše.
- KIWI™derma využívá vakuové odsávání. Osoby s citlivou pokožkou nebo pletí náchylnou k rosaci musí být při používání tohoto zařízení opatrní a opatrní.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte při řízení nebo obsluze těžkých strojů.
- Zařízení nepoužívejte, když je zapojeno.
- Nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru zařízení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud se přehřívá nebo máte podezření, že nefunguje správně.
- KIWI™derma by měla být před aktivací zcela suchá. Nepoužívejte zařízení, pokud bylo ponořeno do vody, a nepoužívejte jej s mokřýma rukama.
- Toto zařízení by mělo být používáno pouze s napájecím adaptérem SELV.
- K nabíjení zařízení se doporučuje používat standardní napájecí zdroje IEC60950.
- Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Během nabíjení zařízení nepoužívejte. Pokud toto zařízení nebo nabíječka nefunguje správně nebo se zdá být jakýmkoliv způsobem poškozená, přestaňte ji používat. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s vaším zařízením.
- Tento přístroj obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.
- Před likvidací je nutné z přístroje vyjmout baterii. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě a baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Tento produkt neobsahuje žádné opravitelné díly.
- Tento přístroj je určen pro kosmetické použití na obličej a krk. Společnost FOREO nenese odpovědnost za jakékoli škodlivé následky vyplývající z nesprávného použití, aplikace na jiné části těla, připojení k nesprávným zdrojům napětí, znečištěného vodivého roztoku nebo koulí nebo jakýchkoli jiných nesprávných aplikací.
- Používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenajdete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte nějaké další otázky týkající se provozu zařízení, navštivte prosím foreo.com/support

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu KIWI™derma.

Pokud se KIWI™derma neaktivuje při stisknutí univerzálního tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabijte své KIWI™derma přes USB nabíječku po dobu až 1,5 hodiny, nebo dokud se kontrolky nerozsvítí zeleně. Plné nabití vydrží až 120 minut.

Pokud KIWI™derma nelze vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje:

- Mikroprocesor dočasně nefunguje. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujete zařízení.

Pokud se KIWI™derma nesynchronizuje s aplikací FOREO:

- Ujistěte se, že je vaše zařízení plně nabité a že máte zapnuté Bluetooth.
- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FOREO a poté ji znovu otevřete, aby se proces restartoval.
- Smažte a znovu nainstalujte aplikaci – možná je třeba aplikaci jednoduše aktualizovat.

Pokud se kontrolka rozsvítí, KIWI™derma mění barvu:

- Červená kontrolka signalizuje vybitou baterii. Nabijte své zařízení.
- Oranžové kontrolky indikují, že se zařízení nabíjí. Pokračujte v nabíjení, dokud se kontrolky nerozsvítí zeleně.
- Zelené kontrolky indikují, že zařízení je plně nabité. Odpojte nabíjecí kabel USB.
-

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat svou 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO For You nebo navštivte foreo.com/product-registration pro více informací.

2LETÁ LIMITOVANÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVOU (2) LET od původního data koupě na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály vzniklými při běžném používání zařízení. Záruka se vztahuje na funkční díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) způsobí neplatnost záruky.

Pokud zjistíte závadu a upozorníte na ni FOREO během záruční doby, FOREO dle vlastního uvážení zařízení bezplatně vymění. Nároky v rámci záruky musí být podloženy přiměřeným důkazem, že datum uplatnění reklamace je v záruční době. Aby byla záruka potvrzena, uschovejte si po dobu trvání záruční doby spolu s těmito záručními podmínkami originální doklad o koupi.

Pro uplatnění záruky se musíte přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a poté vyberte možnost uplatnění záruky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek je doplňkem k vašim zákonným právům jako spotřebitele a tato práva žádným způsobem neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).




Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že by se mělo odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není reverzibilní. Otevřením zařízení ztrácíte záruku. Tato akce musí být provedena pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být před likvidací vyjmuta a neměla by být vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, po odstranění vnější silikonové vrstvy otevřete vnitřní plastový obal a vyjměte baterii, aby byla zlikvidována v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí. Pro vaši bezpečnost během tohoto procesu používejte rukavice.

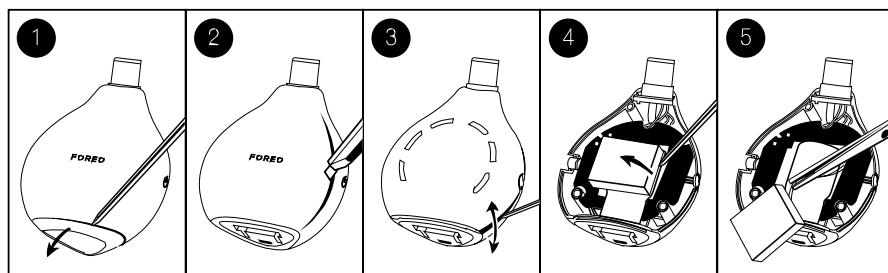

SPECIFIKACE

MATERIÁLY:	Tělu bezpečný silikon, ABS, PC, Chromovaná slitina zinku, Nerezová ocel, Adamas Diamonds
BARVA:	Lavender
VELIKOST:	H106 x W80.5 x D48 mm
HMOTNOST:	157g
BATERIE:	Li-ion 520mAh 3.7V
POUŽITÍ:	Až 120 minut na 1 použití
POHOTOVOSTNÍ REŽIM:	90 dní
FREKVENCE:	183 Hz
MAX ÚROVEŇ HLUKU:	<50 dB
ROZHRANÍ:	1 tlačítko

Vyloučení odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto zařízení. FOREO si vyhrazuje právo toto revidovat a čas od času provádět změny v jejich obsahu, aniž byste byli povinni o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

POZOR: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

FOREO prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě pro produkt je k dispozici na <https://www.foreo.com/support/ec-conformity>

Model může být bez upozornění změněn za účelem vylepšení.