

FOREO
SWEDEN



KIWI™ derma

URZĄDZENIE DO DIAMENTOWEJ MIKRODERMABRAZJI
I WYSYSANIA PORÓW



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy odkrycia inteligentnej pielęgnacji skóry z KIWI™ derma. Przed rozpoczęciem korzystania ze wszystkich zalet zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w domowym zaciszu poświęć kilka chwil na dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO W ŻADEN SPOSÓB MODYFIKOWAĆ TEGO URZĄDZENIA.

KIWI™ derma

Dreńczy Cię nierówna struktura skóry, zmarszczki i plamy starcze? KIWI™ derma to potrójne rozwiązanie technologiczne, które rozwiąże wszystkie problemy starzejącej się skóry. Mikrodermabrazja delikatnie usuwa matową, zniszczoną, nierówną, górną warstwę skóry, aby odsłonić świeżą i promienną warstwę poniżej. Idealnie skalibrowane ssanie "odkurza" nadmiernie zatkane pory, pozostawiając je idealnie oczyszczone i zminimalizowane. Masaż T-Sonic™ poprawia mikrokążenie i drenaż limfatyczny, pomagając zniwelować przebarwienia i zmniejszyć opuchliznę. Dla cery, która wygląda młodziej, zdrowiej i bardziej wyrafinowanie.

OMÓWIENIE URZĄDZENIA KIWI™ derma

KOŃCÓWKI

DO MIKRODERMABRAZJI

Stal medyczna osadzona w diamentach Adamas złuszcza skórę, poprawia zmarszczki oraz wyrównuje teksturę i koloryt. Zaprojektowane tak, aby nigdy nie wymagały wymiany.

LAMPKI KONTROLNE INTENSYWNOŚCI

Zapalają się, wskazując ustawienie intensywności ssania urządzenia.

ULTRAHIGIENICZNY SILIKON

Odporny na bakterie i aksamitnie miękki.

ZASYSANIE PRÓŻNIOWE

Doskonale skalibrowane ssanie jest delikatne dla skóry i jednocześnie skutecznie odblokowuje pory, usuwając wagi, pryszcze, zanieczyszczenia, sebum.

T-SONIC™ MASSAGE

Poprawia krążenie, drenaż limfatyczny i wchłanianie produktu, a także tymczasowo rozszerza pory, zapewniając skuteczniejsze odsysanie.

PORT ŁADOWANIA

Działa do 120 minut na jednym ładowaniu USB.

UNIWERSALNY PRZYCISK

Włącza i wyłącza urządzenie, zmienia poziom intensywności oraz przełącza urządzenie w tryb parowania Bluetooth.



MAŁA KOŃCÓWKA

Dokładnie złuszcza obszar strefy T.



ŚREDNIA KOŃCÓWKA

Pomaga zredukować widoczne drobne zmarszczki i uporczywe niedoskonałości.



DUŻA KOŃCÓWKA

Delikatnie złuszcza policzki i wrażliwe miejsca.



KABEL ŁADUJĄCY USB

Naładuj urządzenie gdziekolwiek jesteś.

JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE KIWI™derma

ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować urządzenie. Wykonaj poniższe proste kroki:

1. Pobierz aplikację FOREO For You na telefon.
2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
4. Wybierz gamę urządzeń.
5. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną.
6. Wypełnij informacje dotyczące zakupu.

www.foreo.com/app



SPOSÓB UŻYCIA



1. OCZYŚĆ SKÓRĘ

Dokładnie wyczyść i osusz twarz oraz szyję. Zalecamy użycie oczyszczającego masażera twarzy FOREO LUNA™ z Micro-Foam Cleanser. (WSKAZÓWKA: dla optymalnych rezultatów można wcześniej, zgodnie z preferencjami, położyć na 5 minut na twarzy gorący ręcznik, aby rozszerzyć pory).



2. WYBIERZ USTAWIENIA

Podłącz preferowaną końcówkę do urządzenia. Następnie naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć KIWI™ derma. Dostosuj intensywność ssania naciskając przycisk ponownie, raz dla każdego poziomu. Więcej ustawień można uzyskać za pośrednictwem aplikacji FOREO.



3. UDOSKONAL I ODMŁADZAJ

Delikatnie przytrzymaj napiętą skórę. Następnie dociśnij końcówkę urządzenia płasko do skóry i szybko przesuwaj po twarzy ruchami w górę. Po zakończeniu delikatnie umyj twarz wodą i osusz. Zakończ zabieg, dokładnie nawilżając skórę. Zalecamy stosowanie urządzenia FOREO UFO™ z wybraną maską UFO™ Activated Mask.


WARTO WIEDZIEĆ:

- Zawsze przesuwaj urządzenie szybko i równomiernie po skórze, ruchem w górę. Nie zatrzymuj się na jednym obszarze, ponieważ mogą wystąpić siniaki.
- Przed użyciem urządzenia KIWI™ derma na twarzy można przetestować je na ramieniu, aby znaleźć optymalny poziom komfortu. Zaczynaj od poziomu intensywności 1 i sprawdź, jak reaguje Twoja skóra. Następnie przejdź do poziomu intensywności, który jest skuteczny, a jednocześnie komfortowy.
- Nie należy nadmiernie ztłuszczać skóry - wystarczy jeden ruch na obszar. Nie stosuj też nadmiernego nacisku - diamentowa mikrodermabrazja za pomocą KIWI™ derma zadziała nawet przy minimalnym nacisku.
- Po zabiegu należy dokładnie nawilżyć skórę, aby zmniejszyć zaczerwienienie wrażliwych obszarów. Zalecamy użycie urządzenia FOREO UFO™ z ulubioną maską UFO™ Activated Mask.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy stosowanie KIWI™ derma raz w tygodniu, po południu, aby skóra mogła się zagoić przez noc.
- Unikaj stosowania retinoidów, peelingów lub innych zabiegów ztłuszczających przez co najmniej trzy dni przed i po wykonaniu mikrodermabrazji w domu. Ponadto należy powstrzymać się od stosowania produktów z witaminą C co najmniej tydzień przed i po zabiegu, aby uniknąć nadmiernego podrażnienia.
- Ważne jest, aby ograniczyć ekspozycję na słońce przed i po zabiegu mikrodermabrazji. Unikaj słońca i stosuj filtry przeciwsłoneczne co najmniej tydzień przed i po zabiegu, aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu skóry. Zalecamy stosowanie filtrów przeciwsłonecznych o szerokim spektrum działania i wysokim współczynniku SPF.



CZYSZCZENIE KIWI™ derma

Ponieważ KIWI™ derma jest pierwszym na świecie urządzeniem do mikrodermabrazji, które nie wymaga żadnych części zamiennych, ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji czyszczenia urządzenia, aby zabiegi były jak najbardziej skuteczne.

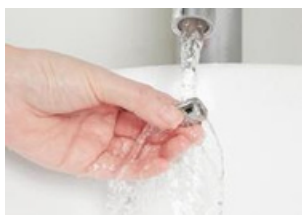

Dla optymalnych rezultatów odkręć końcówkę, włóż ją pod bieżącą wodę, aby zmyć nieczystości i resztki, a następnie pozostaw do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem na urządzeniu.



W międzyczasie nanieś spray do czyszczenia silikonu FOREO na korpus urządzenia i wytrzyj za pomocą wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika.



Na koniec nanieś spray do czyszczenia silikonu FOREO na bawełniany wacik i delikatnie wytrzyj nim brud i resztki, które zgromadziły się na silikonowym filtrze.

UWAGA! KIWI™ derma NIE jest w 100% wodoodporne, więc nie wolno czyścić urządzenia pod bieżącą wodą. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

OSTRZEŻENIE

DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Z tego urządzenia mogą korzystać osoby w wieku 12 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały pouczone na temat zasad bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Jeśli masz problemy skórne lub problemy zdrowotne, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.
- Stosowanie KIWI™ derma powinno być komfortowe – jeśli odczuwasz dyskomfort, natychmiast przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas stosowania KIWI™ derma w okolicach oczu i nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami lub samymi oczami.
- W żadnym wypadku nie należy przerywać przesuwania włączonego urządzenia po skórze.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy dzielenia się KIWI™ derma z nikim innym.
- Unikaj wystawiania skóry KIWI™ derma na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnego ciepła lub wrzącej wody.
- Biorąc pod uwagę skuteczność zabiegów mikrodermabrazji KIWI™ derma, zalecamy, aby podczas zabiegu nie przesuwać urządzenia więcej niż raz na dany obszar.
- KIWI™ derma wykorzystuje ssanie próżniowe. Osoby o skórze wrażliwej lub skłonnej do trądziku różowatego muszą zachować ostrożność i ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie stosować podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwanie ciężkich maszyn.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest podłączone do prądu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli się przegrzewa lub podejrzewasz, że działa nieprawidłowo.
- KIWI™ derma powinna być całkowicie sucha przed aktywacją. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało zanurzone w wodzie i nie używaj go mokrymi rękami.
- To urządzenie powinno być używane wyłącznie z zasilaczem SELV.
- Zaleca się stosowanie zasilaczy zgodnych ze standardem IEC60950 aby naładować urządzenie.
- Przed ładowaniem upewnij się, że wtyczka i gniazdko są całkowicie suche. Niezastosowanie się do tego może spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Jeśli urządzenie lub ładowarka nie działają prawidłowo lub wyglądają na uszkodzone w jakikolwiek sposób, należy przestać ich używania. Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem.
- To urządzenie zawiera niewymienne baterie.
- Przed utylizacją należy wyjąć akumulator z urządzenia.
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania, a akumulator należy utylizować w bezpieczny sposób.
- Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- To urządzenie jest przeznaczone do stosowania kosmetycznego na twarz i szyję. FOREO nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkodliwe konsekwencje wynikające z niewłaściwego użycia, zastosowania na innych obszarach ciała, podłączenia do niewłaściwych źródeł napięcia, zanieczyszczonego roztworu przewodzącego lub kulek lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego zastosowania.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje konkretne pytanie lub masz inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź foreo.com/support

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zachowaj ostrożność w przypadku zmian w działaniu urządzenia KIWI™ derma.

Jeśli KIWI™ derma nie zostanie aktywowany po naciśnięciu przycisku uniwersalnego:

- Bateria jest rozładowana. Ładuj urządzenie KIWI™ derma za pomocą ładowarki USB przez maksymalnie 1,5 godziny lub do momentu, gdy wskaźnik zaświeci się na zielono. Pełne naładowanie wystarcza na 120 minut.

Jeśli nie można wyłączyć urządzenia KIWI™ derma i/lub przycisk uniwersalny nie odpowiada:

- Mikroprocesor tymczasowo działa nieprawidłowo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli KIWI™ derma nie synchronizuje się z aplikacją FOREO:

- Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i Bluetooth jest włączony.
- Wyłącz i ponownie włącz Bluetooth, aby spróbować nawiązać połączenie.
- Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie, aby wznowić proces.
- Usuń i ponownie zainstaluj aplikację - być może wymaga ona aktualizacji.

Jeśli wskaźniki na urządzeniu KIWI™ derma zmieniają kolor:

- Czerwone diody wskazują niski poziom naładowania baterii. Naładuj urządzenie.
- Pomarańczowe kontrolki wskazują, że urządzenie jest w trakcie ładowania. Kontynuuj ładowanie, aż kontrolki zmienią kolor na zielony.
- Zielone diody wskazują, że urządzenie jest w pełni naładowane. Odłącz kabel USB do ładowania.

GWARANCJA I REGULAMIN

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią, ograniczoną gwarancję, zarejestruj się w aplikacji FOREO For You lub odwiedź stronę foreo.com/product-registration i zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

2-LETNIA, OGRANICZONA GWARANCJA

Firma FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania. Gwarancja obejmuje części pracujące, które wpływają na działanie urządzenia. NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego spowodowanego zwykłym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych w następstwie wypadku, niewłaściwego użycia lub zaniedbania. Jakakolwiek próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte uzasadnionymi dowodami wskazującymi na to, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić gwarancję, należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zobowiązanie to stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta i nie wpływa w żaden sposób na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).



Tego urządzenia nie należy traktować jak odpadów domowych, ale należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki poprawnej utylizacji tego urządzenia pomożesz zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, który może mieć miejsce w przypadku nieodpowiedniej utylizacji urządzenia. Recykling materiałów pomoże także oszczędzić zasoby naturalne.


Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub punktem zakupu.

USUWANIE AKUMULATORA

UWAGA! Tego procesu nie można cofnąć. Otwarcie urządzenia unieważni gwarancję. Działanie to należy wykonać, gdy urządzenie zostanie przeznaczone do utylizacji.

Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy, który należy usunąć przed utylizacją produktu i którego nie należy wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego. Aby usunąć akumulator, zdejmij silikonową warstwę zewnętrzną, otwórz wewnętrzną, plastikową powłokę i wyjmij akumulator, aby zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Dla bezpieczeństwa proces ten należy wykonać w rękawiczkach.

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje graficzne.

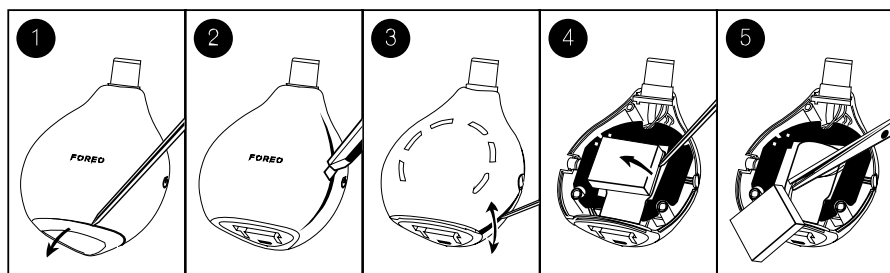

SPECIFICATIONS

MATERIAŁY:	Bezpieczny dla skóry silikon, ABS, PC, chromowany odlew cynku, stal nierdzewna, diamenty Adamas
KOLOR:	Lavender
WYMIARY:	W106 x S80,5 x G48 mm
WAGA:	157g
BATERIA:	Litowo-jonowy, 520 mAh, 3,7 V
UŻYTKOWANIE:	Działa do 120 minut na jednym ładowaniu
GOTOWOŚĆ:	90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	183 Hz
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:	<50 dB
INTERFEJS:	1-przyciskowy

Wyłączenie odpowiedzialności: Używasz tego urządzenia na własne ryzyko. Firma FOREO ani jej sprzedawcy nie przyjmują odpowiedzialności za żadne obrażenia i szkody, fizyczne lub inne, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto firma FOREO zastrzega sobie prawo do korekty niniejszej publikacji i okresowej zmiany jej treści bez obowiązku poinformowania o tym użytkownika.

OSTRZEŻENIE! Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA! Urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenie zawiera nadajnik/odbiornik nieobjęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia licencyjnego zgodnie z normą RSS Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Firma FOREO deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE produktu jest dostępny pod adresem:

Model może zostać ulepszony bez powiadomienia.