

FOREO
SWEDEN



BEAR™ 2

POKROČILÉ ZARIADENIE NA MIKROPRÚDOVÉ
TÓNOVANIE TVÁRE



ONLINE MANUÁL

ÚPLNÁ POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ZAČÍNAME

Blahoželáme k objaveniu múdrejšej starostlivosti o pleť s BEAR™ 2. Než začnete využívať všetky výhody sofistikované technológie starostlivosti o pleť v pohodlí vášho domova, venujte prosím chvíľu pozornému prečítaniu pokynov v tejto príručke.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a používajte toto zariadenie iba na zamýšľané použitie, ako je popísané v tomto manuálu.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE: BEAR™ 2 je určený na stimuláciu tváre a krku a je indikovaný na voľnopredajné kozmetické použitie.

⚠ **VAROVANIE:** ŽIADNE ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA NIE SÚ POVOLENÉ.

PREHĽAD BEAR™ 2

Predstavujeme prvý lekársky mikroprúdový prístroj na svete schválený FDA so systémom Anti-Shock System™ a 4 revolučnými typmi mikroprúdu. Zdvihnite a spevnite tvárové svaly, revitalizujte a vyhladzte pokožku, tvarujte a konturujete svoju pleť - bezpečná, bezbolestná a neinvazívna alternatíva faceliftingu a botoxu.

ZOZNÁMTE SA S BEAR™ 2

FUNKCIE

MIKROPRÚDOVÉ GULIČKY

Dodajte mikroprúd priamo do pokožky pre pokročilé výsledky proti starnutiu.

T-SONIC™ PULZACE

Zvýšte vstrebávanie aktívnych zložiek vo vašej starostlivosti o pleť a jemne masírujte tvár na zvýšenie jasnosti.

CHYTRÝ ŠVÉDSKY DIZAJN

Ľahký a jemne zakrivený, aby sa prispôbil kontúram vašej tváre a ruky.

PROTIÚRAZOVÝ SYSTÉM

Sníma odolnosť pokožky voči elektrine a upravuje mikroprúd pre maximálne pohodlie.

KONTROLKA BLUETOOTH

Blikanie indikuje, kedy je zariadenie v režime párovania Bluetooth a kedy je potrebné zariadenie nabiť.

UNIVERZÁLNE TLAČIDLO

Zapne/vypne zariadenie, zmení úroveň intenzity mikroprúdu a prepne zariadenie do režimu párovania Bluetooth.

5 KONTROLNÝCH SVETIEL INTENZITY

Rozsvietením indikujete úroveň intenzity mikroprúdu vášho zariadenia.

NABÍJACÍ PORT

AŽ 300 minút používania na jedno nabitie cez USB.




USB NABÍJACÍ KÁBEL

Nabíjajte kedykoľvek a kdekoľvek pomocou USB kábla.



INTERAKTÍVNA APLIKÁCIA

Získajte prístup k ošetrovaniu s video sprievodcom a širšiemu rozsahu intenzít.

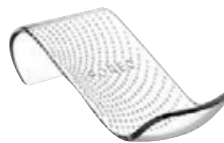

STOJAN

Chrání a vystavuje váš prístroj BEAR™ 2.



CESTOVNÁ TAŠTIČKA

Pohodlne uskladní zariadenie na cestách.

TYPY MIKROPRÚDU

BEAR™ 2 je jediné mikroprúdové zariadenie, ktoré obsahuje 4 typy mikroprúdu, jedinečné pre FOREO. Každý má svoj špeciálny prínos a je implementovaný do ošetrovania s videom v aplikácii na optimalizované výsledky.



Advanced Microcurrent™ - Stály prúd stimuluje svaly na ich posilnenie a zároveň napína pokožku nad nimi.



Lifting Microcurrent™ - Opakovane mení prúd z nízkej na vysokú frekvenciu, jemne prinúti svaly k prirodzenému zdvíhaniu pre tvarovaný vzhľad.



Tapping Microcurrent™ - Rýchle a krátke vlny prúdu pretekajú hornými vrstvami pokožky, aby sa rozjasnili a naplnili.



Sculpting Microcurrent™ - Vede mikroprúd hlbšie do svalov, aby ich účinne tonizoval, pre pevný a tvarovaný vzhľad.

AKO POUŽÍVAŤ BEAR™ 2

ODOMKNUTIE ZARIADENIA

Pred prvým použitím si stiahnite mobilnú aplikáciu FOREO For You pre odomknutie a registráciu vášho zariadenia. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov;

1. Stiahnite si do mobilného telefónu aplikáciu FOREO For You.
2. Prihláste sa k svojmu účtu alebo si zaregistrujte nový.
3. Pridajte zariadenie (v hornej časti obrazovky).
4. Vyberte rad zariadení.
5. Stlačte a podržte univerzálne tlačidlo pre pripojenie zariadenia k mobilnej aplikácii.
6. Vyplňte údaje o nákupe.

www.foreo.com/app



1. APLIKUJTE SÉRUM

Uistite sa, že vaša pokožka aj zariadenie BEAR™ sú čisté a suché. Potom naneste sérum FOREO SUPERCHARGED™ rovnomerne na všetky oblasti tváre/krku, ktoré chcete ošetriť, zanechajte na povrchu pokožky tenkú vrstvu podobnú maske.



2. VYBERTE PREDVOĽBY

Stlačením univerzálneho tlačidla zapnete zariadenie BEAR™. Upravte intenzitu mikroprúdu opätovným rýchlym stlačením tlačidla, raz pre každú úroveň. Získajte prístup k videám so sprievodcom a ďalším nastavením prostredníctvom aplikácie FOREO.



3. TONIZUJTE & ZPEVNŮJTE

Lahko pritlačte obe kovové gule na kožu a pomaly posuňte zariadenie hore a von po lícnych kostiach a čele, okolo úst a po čeľusti a krku, podľa potreby.

ČOMU VENOVAŤ POZORNOSŤ:

- Mikroprúdové prístroje ako BEAR™ 2 musia byť používané s vodivým sérom. Pre optimálne výsledky odporúčame používať FOREO SUPERCHARGED™ Serum 2.0 – vyvinuté špeciálne na použitie s mikroprúdovými zariadeniami FOREO a klinicky preukázané, že významne zvyšuje produkciu kolagénu typu 1.
- Nechajte na pokožke tenkú vrstvu podobnú maske FOREO SUPERCHARGED™ Serum, aby zariadenie mohlo hladko kĺzať. Pokiaľ ošetrujete viac oblastí v jednom sedení, môžete sérum naniesť na každú oblasť pred použitím zariadenia na danú oblasť.
- Nikdy nepoužívajte mikroprúdové prístroje ako BEAR™ 2 na strednej línii krčnej kosti alebo v orbitálnej kosti.
- Uistite sa, že sa obe mikroprúdové guľičky počas liečby dotýkajú vašej pokožky. Vždy posuňte zariadenie hore a von, od stredu tváre smerom k línii vlasov.

VAROVANIE

PRE OPTIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

- Tonizácia s BEAR™ 2 by mala byť pohodlná – ak zaznamenáte akékoľvek nepohodlie alebo podráždenie, okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Nepoužívajte na oblasť hrudníka / prs, oblasť očí (kruhový sval v orbitálnom leme), strednú líniu (kosť) krku alebo genitálie / oblasť slabín.
- Nepoužívajte na začervenanú kožu, vystúpené materské znamienka, hlavné tepny (napr. krčné tepny), rozšírené kapiláry, kovové implantáty, infikované oblasti alebo oblasti bez citu.
- Nepoužívajte zariadenie na liečbu rosacei, materských znamienok, bradavíc, otvorených vredov, rakovinových lézií alebo akýchkoľvek kožných ochorení.
- Nepoužívajte, ak máte nejaké existujúce zdravotné problémy, ako je epilepsia, hemoragické ochorenie, rakovina, nádory alebo percepčná porucha.
- Nepoužívajte, ak ste podstúpili laserové ošetrenie, chemický peeling alebo máte inú formu poranenej či poškodenej kože.
- Nepoužívajte, ak ste podstúpili kozmetický zákrok na tvári.
- Nepoužívajte, ak máte implantovaný lekárske prístroj alebo iný elektronický nástroj alebo telesné pomôcky.
- Elektronické monitorovacie zariadenia, ako sú EKG monitory a EKG alarmy, nemusia správne fungovať, keď je zariadenie zapnuté pri použití.
- BEAR™ 2 by nemal byť používaný u detí, v ich blízkosti alebo u detí alebo osôb so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami. Prísny dohľad je nutný, keď je toto zariadenie používané, čistené alebo skladované v blízkosti detí alebo osôb so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami.
- Dlhodobé účinky mikroprúdu nie sú známe.
- Bezpečnosť zariadenia na použitie počas tehotenstva nebola stanovená. Ak ste tehotná, poraďte sa so svojím lekárom pred použitím tohto zariadenia.
- Ak máte kožné ochorenie alebo akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím s lekárom.
- Ak máte podozrenie na srdcové ochorenie alebo mu bolo diagnostikované ochorenie srdca, dodržujte opatrenia odporúčané vašim lekárom.
- Pri tonizácii oblastí pod očami dbajte na zvýšenú opatrnosť a nepribližujte zariadenie do kontaktu s viečkami alebo očami.
- Počas používania vášho zariadenia môže dôjsť k vnímaniu blikajúcich svetiel v dôsledku stimulácie vašich nervov. Pokiaľ tento stav pozorujete neustále bez použitia zariadenia, poraďte sa so svojím lekárom.
- Pri používaní zariadenia sa môže objaviť mierne brnenie, čo je normálne a nespôsobuje žiadne obavy. Zníženie intenzity môže tento pocit znížiť alebo odstrániť.
- Vzhľadom na účinnosť tónovacích postupov vám odporúčame nepoužívať BEAR™ 2 dlhšie ako 3 minúty.
- Z hygienických dôvodov neodporúčame zdieľať váš BEAR™ 2 s niekým iným.
- Nepoužívajte pri riadení alebo obsluhu ťažkých strojov.
- Nepoužívajte zariadenie, keď je zapojené do zásuvky.
- Do žiadneho otvoru v zariadení nekladajte žiadne predmety.
- Nepoužívajte zariadenie, ak sa prehrieva alebo máte podozrenie, že nefunguje správne.
- Nenechávajte BEAR™ 2 na priamom slnku a nikdy ho nevystavujte extrémnej horúčave alebo vriacej vode.
- BEAR™ 2 by mal byť pred aktiváciou mikroprúdovej funkcie úplne suchý. Zariadenie nepoužívajte, ak bolo ponorené do vody a nepoužívajte ho mokrymi rukami.
- Toto zariadenie by malo byť používané iba s napájacím adaptérom SELV.
- Na nabíjanie zariadenia sa odporúča používať štandardné napájacie zdroje IEC60950.
- Pred nabíjaním sa uistite, že zástrčka a zásuvka sú úplne suché. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu okruhu alebo požiaru.
- Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania. Ak toto zariadenie alebo nabíjačka nefunguje správne alebo sa zdá byť poškodená, prestaňte ju používať akýmkoľvek spôsobom. Používajte iba napájací kábel dodaný s vašim zariadením.
- Pred likvidáciou je nutné z prístroja vybrať batériu. Prístroj musí byť odpojený pri vyberaní batérie od siete a batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.
- Tento produkt neobsahuje žiadne opraviteľné diely.
- Tento prístroj je určený na kozmetické použitie na tvári a krku. Za akékoľvek škodlivé následky vyplývajúce z nesprávneho použitia, aplikácie k iným oblastiam tela, pripojení k nesprávnym zdrojom napätia, chybnému vodivému roztoku alebo guli alebo iným nevhodným prípravkom nenesie FOREO zodpovednosť.
- Používajte toto zariadenie iba na zamýšľané použitie, ako je popísané v tomto návode. Pokiaľ nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku, alebo ak máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa prevádzky zariadenia, navštívte prosím foreo.com/support

ČISTENIE VÁŠHO BEAR™ 2

BEAR™ 2 po použití vždy dôkladne očistite. Potom umyte kovové guľičky a silikónový povrch vodou a mydlom, opláchnite teplou vodou. Osušte handričkou alebo uterákom, ktorý nepúšťa vlákna a neabrazívne. Po použití odporúčame nastriekať zariadenie silikónovým čistiacim sprejom FOREO a opláchnutím teplou vodou pre optimálne výsledky.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón, pretože môžu podráždiť pokožku a poškodiť silikón.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opatrenia, ktoré je potrebné prijať v prípade zmien vo výkone BEAR™ 2.

Ak sa BEAR™ 2 neaktivuje po stlačení univerzálneho tlačidla:

- Batéria je vybitá. Nabíjajte pomocou nabíjacieho kábla USB až 1,5 hodiny do úplného nabitia a potom reštartujte zariadenie podržaním univerzálneho tlačidla.

Pokiaľ BEAR™ 2 nie je možné vypnúť a/alebo univerzálne tlačidlo nereaguje:

- Mikroprocesor dočasne nefunguje správne. Stlačením a podržaním univerzálneho tlačidla reštartujete zariadenie.

Ak sa BEAR™ 2 nesynchronizuje s aplikáciou FOREO For You:

- Vypnite a znovu zapnite Bluetooth a skúste sa znovu pripojiť.
- Zatvorte aplikáciu FOREO For You a potom ju znovu otvorte, aby sa proces začal znovu.
- Skontrolujte, či je potrebné aplikáciu aktualizovať v obchode s aplikáciami vášho mobilného zariadenia.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

REGISTRÁCIA ZÁRUKY

Ak chcete aktivovať svoju 2-ročnú obmedzenú záruku, zaregistrujte sa prostredníctvom aplikácie FOREO For You alebo navštívte stránku foreo.com/product-registration pre viac informácií.

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie po dobu DVOCH (2) ROKOV od pôvodného dátumu nákupu na vady spôsobené chybným spracovaním alebo materiálmi vyplývajúce z normálneho používania zariadenia. Záruka sa vzťahuje na funkčné diely, ktoré ovplyvňujú funkciu zariadenia. NEVZŤAHUJE sa na kozmetické poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbalosťou. Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo rozobranie zariadenia (alebo jeho príslušenstva) spôsobí neplatnosť záruky.

Pokiaľ zistíte závalu a upozorníte FOREO počas záručnej doby, FOREO podľa vlastného uváženia zariadenie bezplatne vymení. Nároky v rámci záruky musia byť podložené primeraným dôkazom, že dátum uplatnenia reklamácie je v záručnej dobe.

Aby bola záruka potvrdená, uschovajte si po dobu trvania záručnej doby spolu s týmito záručnými podmienkami originálny doklad o kúpe. Pre uplatnenie záruky sa musíte prihlásiť k svojmu účtu na www.foreo.com a potom vybrať možnosť uplatnenia záruky. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok je doplnkom k vašim zákonným právam ako spotrebiteľa a tieto práva žiadnym spôsobom neovplyvňuje.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Likvidácia starého elektronického zariadenia (platí v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémom triedeného zberu odpadu).



EUROPEAN
CONFORMITY



PACKAGING IS MADE OF
RECYCLABLE MATERIAL



UK DECLARATION
OF CONFORMITY



TYPE BF
APPLIED PART



GARBAGE WASTE
ELECTRICAL & ELECTRONIC
EQUIPMENT DIRECTIVE



CONSULT INSTRUCTIONS
FOR USE


S týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale malo by byť odovzdané na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete predísť potenciálnemu negatívnemu dôsledku pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadmi so zariadením. Recyklácia materiálov tiež pomôže zachovať prírodné zdroje.

Ďalšie informácie o recyklácii vášho zariadenia vám poskytne miestna služba pre likvidáciu domového odpadu alebo miesto nákupu.

VYBRATIE BATÉRIE

POZNÁMKA: Tento proces nie je vratný. Otvorením zariadenia strácate záruku. Táto akcia musí byť vykonaná iba vtedy, keď zariadenie je pripravené na likvidáciu.

Pretože toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, musí byť pred likvidáciou vybratá a nemala by byť vyhadzovaná do domového odpadu. Ak chcete vybrať batériu, odrežte a odstráňte vonkajšiu silikónovú vrstvu, odskrutkujte kovové guľičky a odrežte plastovú škrupinu pozdĺž trhliny. Potom vypáčte kryt a oddelte batériu pomocou dispergátora. Potom odrežte kábel batérie, vyberte batériu a zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia. Pre vašu bezpečnosť počas tohto procesu používajte rukavice. Podrobné vizuálne pokyny sú uvedené nižšie.

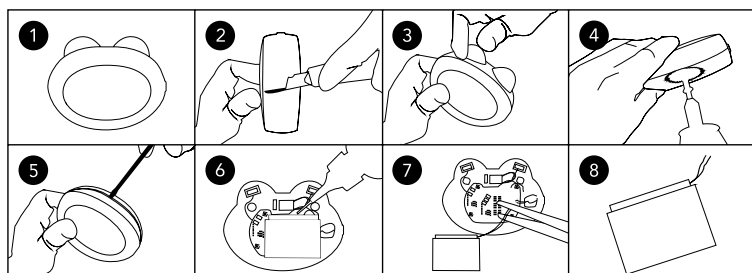

ŠPECIFIKÁCIA

MATERIÁLY:	Silikón bezpečný pre telo, ABS, PC, Chrómovaná zinková zliatina
FARBA:	Fuschia / Lavender / Evergreen
ROZMERY:	V64 x Š79 x H39 mm
VÁHA:	90g
BATÉRIA:	Li-ion 520mAh 3.7V
POUŽITIE:	Až 300 minút používania na jedno nabitie.
POHOTOVOSTNÝ	
REŽIM:	90 dní
FREKVENCIA:	185 Hz
MAXIMÁLNA	
HLADINA HLUKU:	<50 dB
ROZHRANIE:	1 tlačidlo

Vylúčenie zodpovednosti: Užívatelia tohto zariadenia tak robia na vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo škody, fyzické alebo iné, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tohto zariadenia. FOREO si ďalej vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a z času na čas vykonávať zmeny v jej obsahu bez povinnosti oznámiť takú revíziu alebo zmeny akejkoľvek osobe.

POZOR: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku

Toto zariadenie obsahuje licencované vysielacie/prijímače, ktoré spĺňajú požiadavky Innovation, Science and Economic RSS bez licencie pre Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

FOREO vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ

pre produkt je k dispozícii na adrese www.foreo.com/support.

Model môže byť bez upozornenia zmenený za účelom vylepšenia.

©2023 VYROBENÉ PRE: FOREO AB.

NAVRHNUTÉ A VYVINUTÉ: FOREO SWEDEN. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR:

EU: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO

USA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

Pr.: PREHASKY STREET 6, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA.

VÝROBCA: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGIE CO., LTD.

Č. 58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, ČÍNA

WWW.FOREO.COM