

FAQTM



FAQTM 201

SZILIKON LED-MASZK

ONLINE KÉZIKÖNYV

A KEZDETEK

Gratulálunk, a FAQ™ 201 megvásárlásával megtette az első lépést, hogy felfedezze az öregedésgátlás új korszakát. Mielőtt otthona kényelmében élvezné a kifinomult technológia minden előnyét, kérjük, szánjon néhány percet a kézikönyvben található utasítások áttanulmányozására.

Kérjük, **HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST** és csak a jelen kézikönyvben leírtak alapján, rendeltetésszerűen használja ezt a készüléket.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT: A FAQ™ 201 egy vény nélkül kapható eszköz, amely a LED-fényterápia (infravörös, kék, zöld színek) jótékony hatásával kezeli az öregedés látható jeleit az arcon.

FIGYELMEZTETÉS: A BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA NEM MEGENGEDETT.

FAQ™ 201 ÁTTEKINTÉS

A piros, zöld és kék LED-del ellátott maszk percek alatt segít revitalizálni az arcbőrt. Ultrakönnyű, flexi-fit szilikonból készült, így az arc vonalainak megfelelően; egyenletesen osztja el a fényterápiát. Mivel vezeték nélkül alkalmazható, így az arcmasszázs közben szabadon mozoghat és élvezheti a kezelést – bárhol, bármikor.

ISMERD MEG A FAQ™ 201-ET

UNIVERZÁLIS BEKAPCSOLÓGOMB

A bekapcsoláshoz nyomja meg egyszer a gombot. Ismét nyomja meg a LED színének megváltoztatásához. Tartsa nyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

NYITOTT SZEM KIALAKÍTÁS

Védi a szemet az erős LED-hullámhosszaktól, ugyanakkor biztosítja a magabiztos mozgást kezelés közben is.

FLEXI-FIT SZILIKON

Rendkívül higiénikus és könnyen tisztítható. Olyan, mint egy átlátszó, plusz bőrréteg.

TÖLTŐKÁBEL

USB-töltésként akár 2 óra használat.

CSÚSZÁSMENTES FEJPÁNT

Szilikonból készült a maximális kényelem érdekében, így nem húzza a haját. Biztosan tartja a maszkot az arcán, így könnyedén mozoghat.

600 FÉNYPONT

Másodpercenként 1000-szer pulzál és úgy optimalizálták, hogy a LED hullámhosszakat egyenletesen ossza el az arc minden területén.



**60 ml FAQ™ szilikon
tisztító spray**
Használja a készülék
tisztításához a maximális
higiénia érdekében.



Bemutatóállvány

Tárolja a maszkot a dobozban,
vagy állítsa ki büszkén a
bemutatóállványra támasztva.



USB töltőkábel

Töltés bárhol, bármikor.
Tartozékként kapható.

FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- A FAQ™ LED-es arcmaszkoknak kényelmesnek kell lenniük - ha használat során bármilyen kellemetlenséget tapasztal vagy alkalmazást követően hosszan tartó bőrpír jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.
- Ne használja sebhelyes, heges és műtét utáni sebes területeken.
- Ne használja fényérzékenység esetén, illetve napégette vagy gyulladt bőrre.
- Ne nézzen közvetlenül a LED-es lámpák fényére.
- Az eszközt gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek nem használhatják. Kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít vagy utasítást kapott az eszköz biztonságos és rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.
- Higiéniai okok miatt javasoljuk, hogy a FAQ™ 201-et ne ossza meg másokkal.
- Ne tegye ki a FAQ™ 201-et közvetlen napfénynek, illetve szélsőséges hőmérsékletnek, valamint ne tisztítsa forró vízzel.
- Ne húzza túl szorosra a szíjat, hogy elkerülje a maszk károsodását.
- Hagyja abba a használatot, ha a termék bármilyen módon sérültnek tűnik.
- Ez a termék nem tartalmaz cserélhető alkatrészeket.
- Ne próbálja meg szétszerelni a terméket, ellenkező esetben károsíthatja azt.
- Ne használja gépjárművezetés vagy nehéz gépek kezelése közben.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne használja a készüléket túlmelegedés esetén, illetve, ha úgy véli, hogy hibásan működik.
- Ezt az eszközt csak SELV hálózati adapterrel szabad használni.
- Javasoljuk, hogy IEC60950 szabványos áramszolgáltatót használjon a készülék töltéséhez.
- Töltés előtt ellenőrizze, hogy a dugó és az aljzat teljesen száraz-e. Ennek elmulasztása áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket töltés közben. Hagyja abba a használatot, ha az eszköz vagy a töltő nem működik megfelelően, illetve bármilyen módon sérültnek tűnik. Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.
- Az akkumulátort ártalmatlanítás előtt ki kell venni a készülékből. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a táphálózatról.
- Javasoljuk, hogy 15 percnél tovább ne használja a FAQ™ 201-et. Tekintettel a LED fényterápia hatékonyságára, 15 percnyi alkalmazás is elegendő a maximális eredmény eléréséhez.
- Ezt a LED-maszkot csak a kézikönyvben leírtak alapján, rendeltetésszerűen használja. Ha nem találja a válaszokat konkrét kérdéseire, kérjük, látogasson el faqswiss.com/support weboldalra.

A FAQ™ 201 HASZNÁLATA A KÉSZÜLÉK FELOLDÁSA

Az első használat előtt töltsse le a FAQ™ Swiss mobilalkalmazást, majd a készülék feloldásához és regisztrálásához hajtsa végre az alábbi egyszerű lépéseket;



1. Töltsse le a FAQ™ Swiss alkalmazást mobiltelefonjára a QR-kód beolvasásával.
2. Jelentkezzen be meglévő fiókjába vagy hozzon létre egy újat.
3. Adja hozzá eszközét (a képernyő tetején).
4. Válassza ki az eszközsorozatot.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva az univerzális gombot a készülék csatlakoztatásához.
6. Töltsse ki a vásárlási információkat.

És a készülék használatra kész!

HASZNÁLAT

1. Tisztítsa meg majd törölje szárazra arcát, szükség esetén vigyen fel FAQ™ alapozót. Helyezze a FAQ™ 201 szilikon LED-es maszkot az arcára és rögzítse a fejpánttal.
2. Nyomja meg az univerzális bekapcsológombot a maszk bekapcsolásához. A LED színeit a gomb ismételt; gyors megnyomásával módosíthatja.
3. Élvezze a LED-es arckezelést akár 15 percig, s közben akadálytalanul folytathatja napi tevékenységét. Ha végezett, 3 másodpercig tartsa nyomva az univerzális bekapcsológombot a maszk kikapcsolásához.

HASZNÁLATI JAVASLAT: 5-15 perc, heti 3-5 alkalommal.

VIGYÁZAT: Ne húzza meg túl szorosan a fejpántot, különben károsíthatja a szilikonmaszkot.

A FAQ™ 201 TISZTÍTÁSA

Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a FAQ™ LED-maszkot. Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy permetezze be a maszkot FAQ™ szilikon tisztító spray-vel. Ezután meleg vízzel nedvesítsen meg egy szőszmentes ruhát vagy törülközőt és alaposan törölje át.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítószereket, mivel ezek irritálhatják a bőrt és károsíthatják a szilikon.

HIBAELHÁRÍTÁS

A FAQ™ teljesítményében bekövetkező változások esetén megteendő intézkedések:

Ha a FAQ™ 201 nem aktiválódik az univerzális gomb megnyomásakor:

- Az akkumulátor lemerült. Töltsse fel az USB-töltőkábelrel, legfeljebb 2 óra alatt teljesen feltölt, majd indítsa újra a készüléket az univerzális gomb megnyomásával.

Ha a FAQ™ 201 nem kapcsolható ki és/vagy az univerzális gomb nem reagál:

- A mikroprocesszor átmenetileg hibásan működik. Nyomja meg és tartsa lenyomva az univerzális gombot az eszköz újraindításához.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

REGISZTRÁCIÓS GARANCIA

A 2 éves korlátozott garancia aktiválásához regisztráljon a FAQ™ Swiss alkalmazáson keresztül, vagy látogasson el a faqswiss.com/product-registration weboldalra a további információkért.

2 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

A FAQ™ Swiss az eredeti vásárlás dátumától számított KÉT (2) ÉVIG garanciát vállal erre a készülékre a hibás kivitelezésből vagy a készülék normál használatából eredő hibákért. A garancia kiterjed a készülék működését befolyásoló tartozékokra. NEM terjed ki a tisztességes elhasználódás okozta kozmetikai minőségromlásra, illetve a balesetből, helytelen használatból vagy elhanyagolásból eredő károokra. Az eszköz (vagy tartozékai) felnyitására vagy szétszerelésére tett bármilyen kísérlet érvényteleníti a garanciát.

Ha hibát fedez fel és értesíti a FAQ™ Swiss-t a jótállási időszak alatt, a FAQ™ Swiss saját belátása szerint ingyenesen kicseréli a készüléket. A garanciális igényeket ésszerű bizonyítékokkal kell alátámasztani, többek között, hogy a reklamáció dátuma a jótállási időn belül van. A garancia érvényesítéséhez kérjük, őrizze meg az eredeti vásárlási bizonylatot a jelen jótállási feltételekkel együtt.

A jótállás érvényesítéséhez be kell jelentkeznie fiókjába a www.faqswiss.com címen, majd ki kell választania a jótállási igény benyújtásának lehetőségét. A szállítási költségek nem téríthetők vissza. Ez a kötelezettségvállalás kiegészíti az Ön törvényes fogyasztói jogait és nem helyettesíti azokat.

ÁRTALMATLANÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Régi elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az EU-ban és más, elkülönített hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazható).



A CSOMAGOLÁS
ÚJRAHASZNOSÍT-
HATÓ ANYAGBÓL
KÉSZÜL



AZ ELEKTROMOS ÉS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK
HULLADÉKAIRÓL SZÓLÓ
IRÁNYELV



EURÓPAI
MEGFELELŐ-
SÉG




Ezt az eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából a megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni. Az eszköz megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket az eszköz nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása a természeti erőforrások megőrzését is elősegíti.

A készülék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy a vásárlás helyéhez.

AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

MEGJEGYZÉS: Ez a folyamat nem visszafordítható. A készülék felnyitása érvényteleníti a garanciát. Csak akkor végezze el a műveletet, ha az eszköz készen áll a megsemmisítésre!

Mivel ez az eszköz lítium-ion akkumulátort tartalmaz, így az akkumulátort ártalmatlanítás előtt el kell távolítani és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az akkumulátor eltávolításához vágja le és távolítsa el a külső szilikon réteget, a maszk homlokán lévő gyémánt alakú részről. Ezután vágja le a műanyag fedelet a repedés mentén és nyissa ki. Majd vágja el az akkumulátor kábelét, vegye ki az akkumulátort és dobja ki a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. A folyamat során viseljen kesztyűt a biztonsága érdekében. Alább megtekintheti a részletes vizuális utasításokat:

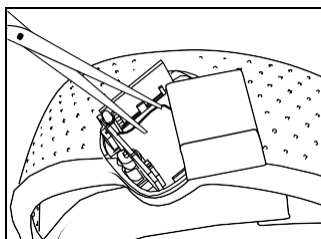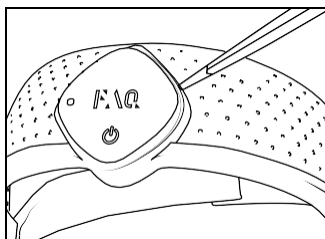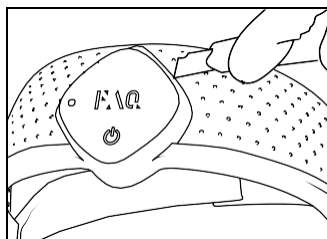

TERMÉKADATOK

ANYAG:	Testbiztos szilikon, PC + ABS
SZÍN:	Arany / Rózsaszín rubin
MÉRET:	162 x 100 x 182 mm
SÚLY:	169 g
AKKUMULÁTOR:	3.7V lítium akkumulátor 680mAh-val
KAPACITÁS:	Akár 2 óra használat töltésenként
KÉSZENLÉT:	90 nap
MAXIMÁLIS ZAJSZINT:	<50 dB

FELELŐSSÉGGKIZÁRÁSI NYILATKOZAT

Az eszköz felhasználói saját felelősségükre alkalmazzák a terméket. Sem a FAQ™ Swiss, sem kiskereskedői nem vállalnak felelősséget semmilyen fizikai vagy egyéb sérülésért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve az eszköz használatából ered. Továbbá a FAQ™ Swiss fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja ezt a kiadványt és időről időre módosítsa annak tartalmát anélkül, hogy bárkit értesítenie kellene az ilyen felülvizsgálatról vagy változásokról.

VIGYÁZAT: A készülék olyan módosításai, amelyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

A fejlesztések érdekében a modell előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÁLTALÁNOS

1. MIT TARTALMAZ A FAQ™ 201 LED-MASZK CSOMAGJA?

1x FAQ™ 201 LED-Armaszk, 1x 60mL FAQ™ Szilikon Tisztító Spray, 1x USB Töltőkábel, 1x Felhasználói kézikönyv, 1x Gyors üzembe helyezési útmutató.

2. HOGYAN KAPCSOLHATOM BE A FAQ™ 201 LED-MASZKOT?

A bekapcsoláshoz nyomja meg a LED-maszk univerzális bekapcsológombját.

3. HOGYAN KAPCSOLHATOM KI A FAQ™ 201 LED-MASZKOT?

A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a LED-maszk univerzális bekapcsológombját 3 másodpercig. A készülék 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

KEZELÉS

4. HOGYAN KEZDJEM EL AZ ELSŐ KEZELÉST?

Először gondosan tisztítsa és szárítsa meg az arcát és a nyakát, illetve szükség esetén vigyen fel FAQ™ alapozót. Ezután helyezze fel a FAQ™ 201 LED-maszkot az arcára és rögzítse a helyére a fejpánttal. Nyomja meg az univerzális bekapcsológombot a maszk bekapcsolásához. A LED színeit a gomb ismételt; gyors megnyomásával módosíthatja. Élvezze a LED-es arckezelést akár 15 percig, miközben zavartalanul folytatja napi teendőit. Ha végezett, tartsa nyomva az univerzális bekapcsológombot 3 másodpercig a maszk kikapcsolásához.

5. HASZNÁLHATOM A SAJÁT BŐRÁPOLÓMAT A FAQ™ 201 LED-MASZKOMMAL?

Javasoljuk a FAQ™ alapozó használatát a FAQ™ 201 LED-maszkkal, hiszen intenzív öregedésgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Szükség esetén használhatja saját bőrápolóját is. De győződjön meg róla, hogy az Ön által használt bőrápoló termékek nem tartalmaznak szilikonokat vagy savakat, illetve fényérzékeny összetevőket, például A-vitamint, retinolt, AHA-kat, benzoi-peroxidot és C-vitamint.

6. MÍLYEN GYAKRAN HASZNÁLHATOM A FAQ™ 201 LED-MASZKOMAT?

Javasoljuk, hogy az optimális eredmény érdekében heti 3-5 alkalommal használja a FAQ™ LED-maszkot, 5-15 percig.

7.MI AZ A LEDTERÁPIA?

A Ledterápia olyan bőrápoló kezelés, amely különböző hullámhosszú fényt használ. A NASA eredetileg a növénynövekedési kísérleteihez fejlesztette ki és később ígéretesnek találta a sebkezelésben is. A LED-es fényterápiát ma már a bőr regenerálódására is alkalmazzák.

8.BIZTONSÁGOS A LEDTERÁPIA?

Más típusú fényterápiával ellentétben a LED-ek nem tartalmaznak ultraibolya sugárzást, ezért biztonságosak a rendszeres használatra. Míg más öregedésgátló kezelések - például kémiai hámlasztás, dermabrázió és lézerterápia - égési sérüléseket okoznak, a LED-es fényterápiára nem jellemző.

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

9.MIT JELENT, HA A FAQ™ LED-MASZKOM 3-SZOR PIROSAN VILLOG?

A maszk 3-szor pirosan villog, amikor az alacsony töltöttségi szintet jelzi. Töltse fel a maszkot a mellékelt USB-töltőkábelrel, legfeljebb 2 óra alatt teljesen feltöltődik.

10.HOGYAN TISZTÍTSEM MEG A FAQ™ KÉSZÜLÉKEMET?

Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a FAQ™ LED-maszkot. Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy permetezze be a maszkot FAQ™ szilikon tisztító spray-vel. Ezután meleg vízzel nedvesítsen meg egy szőszmentes ruhát vagy törülközőt és alaposan törölje át.

(MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítószeret, mert irritálhatják a bőrt és károsíthatják a szilikont.)

©2023 FOREO AB. MINDEN JOG FENNTARTVA.

IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ AZ EU-BAN: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SVÉDORSZÁG

IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

GYÁRTÓ: FOREO AB.

TERVEZTE ÉS FEJLESZTETTE: FOREO SVÉDORSZÁG.

IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ AUSZTRÁLIÁBAN: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSZTRÁLIA.

GYÁRTÓ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, KÍNA

WWW.FAQSWISS.COM