

FAO™



ANTI-AGING
EXPERTS



FAO™ 202

ONLINE KÉZIKÖNYV

INTELLIGENS SZILIKON LED-MASZK

A KEZDETEK

Gratulálunk, a FAQ™ 202 megvásárlásával megtette az első lépést, hogy felfedezze az öregedésgátlás új korszakát. Mielőtt otthona kényelmében élvezné a kifinomult technológia minden előnyét, kérjük, szánjon néhány percet a kézikönyvben található utasítások áttanulmányozására.

Kérjük, **HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST** és csak a jelen kézikönyvben leírtak alapján, rendeltetésszerűen használja ezt a készüléket.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT: A FAQ™ 202 egy vény nélkül kapható eszköz, amely a LED-fényterápia (infravörös, vörös, kék, zöld, narancssárga, sárga, cián és lila színek) jótékony hatásával kezeli az öregedés látható jeleit az arcon.

FIGYELMEZTETÉS: A BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA NEM MEGENGEDETT.

FAQ™ 202 ÁTTEKINTÉS

Bemutatjuk a LED-maszkok forradalmian új generációját. Az eszköz ultrakönnnyű és rugalmasan illeszkedő szilikonból készült, így az arc vonalainak megfelelően; egyenletesen oszlatja el a fényterápiát. A FAQ™ 202 8 különböző hullámhosszal rendelkezik, beleértve a NIR-t (közeli infravörös), melyek nem csupán az öregedés látható jeleit, de a bőrproblémákat is hatékonyan kezelik. Mivel vezeték nélkül alkalmazható, így az arcmasszázs közben szabadon mozoghat és csupán egyetlen gombnyomással irányíthatja a kezeléseket.

ISMERKEDJ MEG A FAQ™ 202-VEL

JELZŐFÉNY

Jelzi, ha az eszköz Bluetooth párosítási módban és Smart Control módban van.

UNIVERZÁLIS BEKAPCSOLÓGOMB

A bekapcsoláshoz nyomja meg egyszer a gombot. Nyomja meg újra a LED színének váltásához. A kikapcsoláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig. Ha ki van kapcsolva, tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy a maszkot Bluetooth párosítási módba állítsa.

NYITOTT SZEM KIALAKÍTÁS

Védi a szemet az erős LED-hullámhosszaktól, ugyanakkor biztosítja a magabiztos mozgást kezelés közben is.

FLEXI-FIT SZILIKON

Rendkívül higiénikus és könnyen tisztítható. Olyan, mint egy átlátszó, plusz bőrréteg.

TÖLTŐKÁBEL

USB-töltésként akár 2 óra használat.

CSÚSZÁSMENTES FEJPÁNT

Szilikonból készült a maximális kényelem érdekében, így nem húzza a haját. Biztosan tartja a maszkot az arcán, így könnyedén mozoghat.

600 FÉNYPONT

Másodpercenként 3000-szer pulzál és úgy optimalizálták, hogy a LED hullámhosszakat egyenletesen oszlassa el az arc minden területén.



60 ml FAQ™ szilikon tisztító spray
Használja a készülék tisztításához a maximális higiénia érdekében.



Bemutatóállvány
Tárolja a maszkot a dobozban, vagy állítsa ki büszkén a bemutatóállványra támasztva.



USB töltőkábel
Töltés bárhol, bármikor. Tartozékként kapható.



Interaktív alkalmazás
Szabályozza az eszköz beállításait és szinkronizálja az előre programozott kezeléseket.


Figyelmeztetések

Általános biztonsági előírások:

- A FAQ™ LED-es arcmaszkoknak kényelmesnek kell lenniük - ha használat során bármilyen kellemetlenséget tapasztal vagy alkalmazást követően hosszan tartó bőrpír jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.
- Ne használja sebhelyes, heges és műtét utáni sebes területeken.
- Ne használja fényérzékenység esetén, illetve napégette vagy gyulladt bőrre.
- Ne nézzen közvetlenül a LED-es lámpák fényére.
- Az eszközt gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek nem használhatják. Kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít vagy utasítást kapott az eszköz biztonságos és rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.
- Higiéniai okok miatt javasoljuk, hogy a FAQ™ 202-t ne ossza meg másokkal.
- Ne tegye ki a FAQ™ 202-t közvetlen napfénynek, illetve szélsőséges hőmérsékletnek, valamint ne tisztítsa forró vízzel.
- Ne húzza túl szorossra a szíjat, hogy elkerülje a maszk károsodását.
- Hagyja abba a használatot, ha a termék bármilyen módon sérültnek tűnik.
- Ez a termék nem tartalmaz cserélhető alkatrészeket.
- Ne próbálja meg szétszerelni a terméket, ellenkező esetben károsíthatja azt.
- Ne használja gépjárművezetés vagy nehéz gépek kezelése közben.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne használja a készüléket túlmelegedés esetén, illetve, ha úgy véli, hogy hibásan működik.
- Ezt az eszközt csak SELV hálózati adapterrel szabad használni.
- Javasoljuk, hogy IEC60950 szabványos áramszolgáltatót használjon a készülék töltéséhez.
- Töltés előtt ellenőrizze, hogy a dugó és az aljzat teljesen száraz-e. Ennek elmulasztása áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket töltés közben. Hagyja abba a használatot, ha az eszköz vagy a töltő nem működik megfelelően, illetve bármilyen módon sérültnek tűnik. Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.
- Az akkumulátort ártalmatlanítás előtt ki kell venni a készülékből. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a táphálózatról.
- Javasoljuk, hogy 15 percnél tovább ne használja a FAQ™ 202-t. Tekintettel a LED fényterápia hatékonyságára, 15 percnyi alkalmazás is elegendő a maximális eredmény eléréséhez.
- Ezt a LED-maszkot csak a kézikönyvben leírtak alapján, rendeltetésszerűen használja. Ha nem találja a válaszokat konkrét kérdéseire, kérjük, látogasson el faqswiss.com/support weboldalra.

A FAQ™ 202 HASZNÁLATA A KÉSZÜLÉK FELOLDÁSA

Az első használat előtt töltsse le a FAQ™ Swiss mobilalkalmazást, majd a készülék feloldásához és regisztrálásához hajtsa végre az alábbi egyszerű lépéseket;

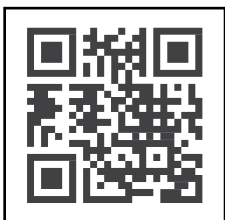

1. Töltsse le a FAQ™ Swiss alkalmazást mobiltelefonjára a QR-kód beolvasásával.
2. Jelentkezzen be meglévő fiókjába vagy hozzon létre egy újat.
3. Adja hozzá eszközét (a képernyő tetején).
4. Válassza ki az eszközsorozatot.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva az univerzális gombot a készülék csatlakoztatásához.
6. Töltsse ki a vásárlási információkat, majd használhatja a készüléket!



A FAQ™ Swiss alkalmazás segítséget kínál a FAQ™ szilikon LED-es arcmaszok használatához. Használhatja a beállítások vezérlésére és a videóvezérelt rutink elérésére is.

BEÁLLÍTÁSOK

Állítsa be a kezelés LED-fényét, illetve időtartamát és a készülék emlékezni fog az egyedi beállításokra offline módban is:



LED VILÁGÍTÁS

Válassza ki a kívánt LED-fényszínt. Ezután a NIR melletti váltógombra kattintva megadhatja, hogy szeretne-e közeli infravörös LED-et hozzáadni a kezeléshez.

FÉNYERŐ

Válassza ki a kívánt intenzitást az Alacsony, a Közepes vagy a Magas lehetőségek közül.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSI IDŐ

Válassza ki a kezelés hosszát a csúszó skála segítségével.



KEZELÉSEK

Válasszon előre programozott kezeléseink közül, melyekkel konkrét bőrproblémákat célozhat meg. Csupán kövesse a videóban szereplő utasításokat.



INTELLIGENS VEZÉRLÉS

Az alkalmazás ezen részével módosíthatja preferenciáit a kezelés során.



EMLÉKEZTETŐ BEÁLLÍTÁSA

Emlékeztetőt kaphat, amikor eljön a következő kezelés ideje. Válassza ki azt a kezelést, amelyhez szeretne emlékeztetőt beállítani. Ezután válassza ki, hogy mely napokon szeretne értesítést kapni.

A FAQ™ 20 2 HASZNÁLATA

A maszk használatához először fel kell oldania a készüléket. Ehhez először regisztrálja a FAQ™ Swiss alkalmazáson keresztül.

1. Tisztítsa meg majd törölje szárazra arcát, szükség esetén vigyen fel FAQ™ alapozót. Helyezze a FAQ™ 202 szilikon LED-es maszkot az arcára és rögzítse a fejpánttal.
2. Nyomja meg az univerzális bekapcsológombot a maszk bekapcsolásához. A LED színeit a gomb ismételt; gyors megnyomásával módosíthatja. Az előre programozott kezelésekhez és további beállításokhoz a FAQ™ Swiss alkalmazáson keresztül férhet hozzá. Töltse le az alkalmazást és kövesse az utasításokat.
3. Élvezze a LED-es arckezelést akár 15 percig, s közben akadálytalanul folytathatja napi tevékenységét. Ha végezt, 3 másodpercig tartsa nyomva az univerzális bekapcsológombot a maszk kikapcsolásához.

HASZNÁLATI JAVASLAT: 5-15 perc, heti 3-5 alkalommal.

VIGYÁZAT: Ne húzza meg túl szorosra a fejpántot, különben károsíthatja a szilikonmaszkot.

A FAQ™ 20 2 TISZTÍTÁSA

Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a FAQ™ LED-maszkot. Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy permetezze be a maszkot FAQ™ szilikon tisztító spray-vel. Ezután meleg vízzel nedvesítsen meg egy szőszmentes ruhát vagy törülközőt és alaposan törölje át.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítószereket, mivel ezek irritálhatják a bőrt és károsíthatják a szilikon.

HIBAELHÁRÍTÁS

A FAQ™ teljesítményében bekövetkező változások esetén megteendő intézkedések:

Ha a FAQ™ 202 nem aktiválódik az univerzális gomb megnyomásakor:

- Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az USB-töltőkábellel, legfeljebb 2 óra alatt teljesen feltölt, majd indítsa újra a készüléket az univerzális gomb megnyomásával.

Ha a FAQ™ 202 nem kapcsolható ki és/vagy az univerzális gomb nem reagál:

- A mikroprocesszor átmenetileg hibásan működik. Nyomja meg és tartsa is lenyomva az univerzális gombot az eszköz újraindításához.

Ha a FAQ™ 202 nem szinkronizálódik a FAQ™ Swiss alkalmazással:

- Kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t az újracsatlakozáshoz.
- Zárja be a FAQ™ Swiss alkalmazást, majd nyissa meg ismét a folyamat újratekésítéséhez.
- Ellenőrizze, hogy kell-e frissíteni az alkalmazást a mobilkészítők alkalmazásboltjában.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

REGISZTRÁCIÓS GARANCIA

A 2 éves korlátozott garancia aktiválásához regisztráljon a FAQ™ Swiss alkalmazáson keresztül, vagy látogasson el a faqswiss.com/product-registration weboldalra a további információkért.

2 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

A FAQ™ Swiss az eredeti vásárlás dátumától számított KÉT (2) ÉVIG garanciát vállal erre a készülékre a hibás kivitelezésből vagy a készülék normál használatából eredő hibákért. A garancia kiterjed a készülék működését befolyásoló tartozékokra. NEM terjed ki a tisztességes elhasználódás okozta kozmetikai minőségromlásra, illetve a balesetből, helytelen használatból vagy elhanyagolásból eredő károokra. Az eszköz (vagy tartozékai) felnyitására vagy szétszerelésére tett bármilyen kísérlet érvényteleníti a garanciát.

Ha hibát fedez fel és értesíti a FAQ™ Swiss-t a jótállási időszak alatt, a FAQ™ Swiss saját belátása szerint ingyenesen kicseréli a készüléket. A garanciális igényeket ésszerű bizonyítékokkal kell alátámasztani, többek között, hogy a reklamáció dátuma a jótállási időn belül van. A garancia érvényesítéséhez kérjük, őrizze meg az eredeti vásárlási bizonylatot a jelen jótállási feltételekkel együtt.

A jótállás érvényesítéséhez be kell jelentkeznie fiókjába a www.faqswiss.com címen, majd ki kell választania a jótállási igény benyújtásának lehetőségét. A szállítási költségek nem téríthetők vissza. Ez a kötelezettségvállalás kiegészíti az Ön törvényes fogyasztói jogait és nem helyettesíti azokat.

ÁRTALMATLANÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Régi elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az EU-ban és más, elkülönített hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazható).



A CSOMAGOLÁS
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
ANYAGBÓL
KÉSZÜL



AZ ELEKTROMOS ÉS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK
HULLADÉKAIRÓL SZÓLÓ
IRÁNYELV



EURÓPAI
MEGFELELŐSÉG


Ezt az eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából a megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni. Az eszköz megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket az eszköz nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása a természeti erőforrások megőrzését is elősegíti.

A készülék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy a vásárlás helyéhez.

AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

MEGJEGYZÉS: Ez a folyamat nem visszafordítható. A készülék felnyitása érvényteleníti a garanciát. Csak akkor végezze el a műveletet, ha az eszköz készen áll a megsemmisítésre!

Mivel ez az eszköz lítium-ion akkumulátort tartalmaz, így az akkumulátort ártalmatlanítás előtt el kell távolítani és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az akkumulátor eltávolításához vágja le és távolítsa el a külső szilikon réteget, a maszk homlokán lévő gyémánt alakú részről. Ezután vágja le a műanyag fedelet a repedés mentén és nyissa ki. Majd vágja el az akkumulátor kábelét, vegye ki az akkumulátort és dobja ki a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. A folyamat során viseljen kesztyűt a biztonsága érdekében. Alább megtekintheti a részletes vizuális utasításokat:

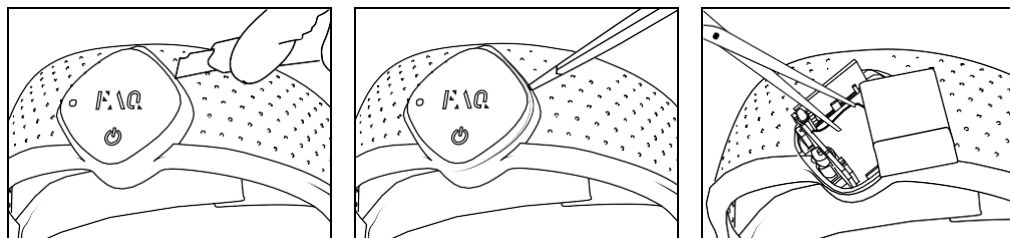

TERMÉKADATOK

ANYAG:	Testbiztos szilikon, PC + ABS
SZÍN:	Arany / Fekete
MÉRET:	162 x 100 x 182 mm
SÚLY:	169 g
AKKUMULÁTOR:	3.7V lítium akkumulátor 680mAh-val
KAPACITÁS:	Akár 2 óra használat töltésenként
KÉSZENLÉT:	90 nap
MAXIMÁLIS ZAJSZINT:	<50 dB

FELELŐSSÉGGKIZÁRÁSI NYILATKOZAT

Az eszköz felhasználói saját felelősségükre alkalmazzák a terméket. Sem a FAQ™ Swiss, sem kiskereskedői nem vállalnak felelősséget semmilyen fizikai vagy egyéb sérülésért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve az eszköz használatából ered. Továbbá a FAQ™ Swiss fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja ezt a kiadványt és időről időre módosítsa annak tartalmát anélkül, hogy bárkit értesítenie kellene az ilyen felülvizsgálatról vagy változásokról.

Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az **FCC-szabályok** 15. részében leírtaknak. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakóépületekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat és amennyiben nem a kézikönyvnek megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádió kommunikáció számára. **Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél.**

VIGYÁZAT: A készülék olyan módosításai, amelyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez az eszköz olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-nek. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

A fejlesztések érdekében a modell előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÁLTALÁNOS

1.MIT TARTALMAZ A FAQ™ 202 LED-MASZK CSOMAGJA?

1x FAQ™ 202 LED-arcmaszk, 1x 60mL FAQ™ Szilikon Tisztító spray, 1x USB Töltőkábel, 1x Felhasználói kézikönyv, 1x Gyors Üzembe helyezési Útmutató.

2.MIT TEGYEK, MIUTÁN MEGKAPTAM A FAQ™ 202 LED-MASZKOT?

Gratulálunk, a FAQ™ 202 megvásárlásával megtette az első lépést, hogy felfedezze az öregedésgátlás új korszakát. Mielőtt elkezdené az első kezelést a FAQ™ 202-vel, fel kell oldania a készüléket és regisztrálnia kell a FAQ™ Swiss alkalmazás ingyenes letöltésével; az applikációban található utasításokat követve. (További információkért kérjük, olvassa el az alábbi, "FAQ SWISS ALKALMAZÁS" című részt).

3.HOGYAN KAPCSOLHATOM BE A FAQ™ 202 LED-MASZKOT?

A bekapcsoláshoz nyomja meg a LED-maszk univerzális bekapcsológombját.

4.HOGYAN KAPCSOLHATOM KI A FAQ™ 202 LED-MASZKOT?

A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a LED-maszk univerzális bekapcsológombját 3 másodpercig. A készülék 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

KEZELÉS

5.HOGYAN KEZDJEM EL AZ ELSŐ KEZELÉST?

Először gondosan tisztítsa és szárítsa meg az arcát és a nyakát, illetve szükség esetén vigyen fel FAQ™ alapozót. Ezután helyezze fel a FAQ™ 202 LED-maszkot az arcára és rögzítse a helyére a fejpánttal. Nyomja meg az univerzális bekapcsológombot a maszk bekapcsolásához. A LED színeit a gomb ismételt; gyors megnyomásával módosíthatja. További beállításokat és előre programozott kezeléseket is elérhet a FAQ™ Swiss alkalmazáson keresztül. Élvezze a LED-es arckezelést akár 15 percig, miközben zavartalanul folytatja napi teendőit. Ha végzett, tartsa nyomva az univerzális bekapcsológombot 3 másodpercig a maszk kikapcsolásához.

6.HASZNÁLHATOM A SAJÁT BŐRÁPOLÓMAT A FAQ™ 202 LED-MASZKOMMAL?

Javasoljuk a FAQ™ alapozó használatát a FAQ™ 202 LED-maszkkal, hiszen intenzív öregedésgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Szükség esetén használhatja saját bőrpolóját is. De győződjön meg róla, hogy az Ön által használt bőrpoló termékek nem tartalmaznak szilikonokat vagy savakat, illetve fényérzékeny összetevőket, például A-vitamint, retinolt, AHA-kat, benzoil-peroxidot és C-vitamint.

7.MILYEN GYAKRAN HASZNÁLHATOM A FAQ™ 202 LED-MASZKOMAT?

Javasoljuk, hogy az optimális eredmény érdekében heti 3-5 alkalommal használja a FAQ™ LED-maszkot, 5-15 percig.

8.MI AZ A LEDTERÁPIA?

A Ledterápia olyan bőrpoló kezelés, amely különböző hullámhosszú fényt használ. A NASA eredetileg a növény-növekedési kísérleteihez fejlesztette ki és később ígéretesnek találta a sebkezelésben is. A LED-es fényterápiát ma már a bőr regenerálására is alkalmazzák.

9.BIZTONSÁGOS A LEDTERÁPIA?

Más típusú fényterápiával ellentétben a LED-ek nem tartalmaznak ultraibolya sugárzást, ezért biztonságosak a rendszeres használatra. Míg más öregedésgátló kezelések - például kémiai hámlasztás, dermabrázió és lézertherápia - égési sérüléseket okoznak, a LED-es fényterápiára nem jellemző.

APPLIKÁCIÓ

10.HOGYAN PÁROSÍTHATOM A FAQ™ 202 LED-MASZKOMAT A FAQ™ SWISS ALKALMAZÁSSAL?

Először töltsen le a FAQ™ Swiss alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére és kapcsolja be a Bluetooth-t okostelefonján / táblagépén. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a maszk univerzális gombját 3 másodpercig. A maszk kékre vált, ha Bluetooth párosítási módban van. Majd egyszerűen kövesse az alkalmazás utasításait a párosítás befejezéséhez. (MEGJEGYZÉS: A maszknak kikapcsolt állapotban kell lennie, mielőtt Bluetooth párosítási módba állíthatja).

11.MŰKÖDIK A FAQ™ 202 LED-MASZKOM ALKALMAZÁS NÉLKÜL?

Igen, arcmaszkját a FAQ™ Swiss alkalmazás nélkül is használhatja. Egyszerűen váltson a LED színei között az univerzális bekapcsológomb megnyomásával. Ne feledje azonban, hogy mielőtt először használná a maszkot, fel kell oldania és regisztrálnia kell a FAQ™ Swiss applikáción keresztül.

12.MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR A FAQ™ SWISS ALKALMAZÁS HASZNÁLATA?

A FAQ™ Swiss alkalmazás előre programozott arckezelést, valamint speciális beállításokat kínál, amelyeket preferenciái szerint elmenthet eszközére. Ezenkívül regisztrálhatja garanciáját és az alkalmazáson keresztül hozzáférhet a javasolt használati utasításokhoz.

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

13.MIT JELENT, HA A FAQ™ LED-MASZKOM 3-SZOR PIROSAN VILLOG?

A maszk 3-szor pirosan villog, amikor az alacsony töltöttségi szintet jelzi. Töltse fel a maszkot a mellékelt USB-töltőkábellel, legfeljebb 2 óra alatt teljesen feltöltődik.

14.MIT JELENT, HA A FAQ™ LED-MASZKOM KÉKEN VILLOG?

A maszk kéken villog, amikor a Bluetooth párosítási módot jelzi és készen áll az alkalmazáshoz való csatlakozásra.

15.HOGYAN TISZTÍTSAM MEG A FAQ™ KÉSZÜLÉKEMET?

Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a FAQ™ LED-maszkot. Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy permetezze be a maszkot FAQ™ szilikon tisztító spray-vel. Ezután meleg vízzel nedvesítsen meg egy szőszmentes ruhát vagy törülközőt és alaposan törölje át.

(MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítószeret, mert irritálhatják a bőrt és károsíthatják a szilikont.)

©2023 FOREO AB. MINDEN JOG FENNTARTVA.

IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ AZ EU-BAN: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SVÉDORSZÁG

IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

GYÁRTÓ: FOREO AB.

TERVEZTE ÉS FEJLESZTETTE: FOREO SVÉDORSZÁG.

IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ AUSZTRÁLIÁBAN: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSZTRÁLIA.

GYÁRTÓ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, KÍNA

WWW.FAQSWISS.COM