

FAQ™



FAQ™ 211

SILIKONOWA MASKA LED NA SZYJĘ I DEKOLT

**INSTRUKCJA  
OBŚŁUGI**

## NA POCZĄTEK

Gratulujemy wykonania pierwszego kroku w nową erę anti-aging poprzez zakup urządzenia FAQ™ 211. Zanim zaczniesz korzystać ze wszystkich zalet profesjonalnej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu własnego domu, poświęć kilka chwil na uważne przeczytanie instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku.

Prosimy o **ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM** i korzystanie z produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

**OSTRZEŻENIE:** ŻADNE MODYFIKACJE TEGO URZĄDZENIA NIE SĄ DOZWOLONE.

## FAQ™ 211

Prezentujemy zupełnie nową generację masek LED. Ultralekka, bezprzewodowa i wykonana z elastycznego silikonu, który dopasowuje się do konturów ciała, zapewniając równomierne pokrycie światłem LED. FAQ™ 211 oferuje 8 różnych długości fal, w tym NIR, aby zwalczać oznaki starzenia i inne problemy skórne - podczas gdy Ty robisz dostownie wszystko inne. Poruszaj się swobodnie i korzystaj z zabiegów LED na poziomie spa za naciśnięciem jednego przycisku.

## POZNAJ FAQ™211

### WSKAŹNIK ŚWIETLNY

Wskazuje, kiedy urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth i w trybie Smart Control.

### PRZYCISK ZASILANIA

Naciśnij raz, aby włączyć. Naciśnij ponownie, aby przełączyć kolory LED. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć. Po wyłączeniu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć maskę w tryb parowania Bluetooth w celu połączenia z aplikacją.

### PORT ŁADOWANIA

Do 2,5 godziny użytkowania po 2 godzinach ładowania przez USB. Kabel USB do ładowania w zestawie.

### ZŁOTY PASEK NA SZYJĘ

Regulowany, utrzymuje maskę bezpiecznie na szyi, dzięki czemu można się swobodnie poruszać. Umożliwia również noszenie maski na karku.

### 761 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH

Pulsujące 3000 razy na sekundę i zoptymalizowane tak, aby zapewnić równomierne wnikiwanie fal LED na wszystkich obszarach skóry.

### ELASTYCZNY SILIKON

Niezwykle higieniczny i łatwy w czyszczeniu. Dopasowuje się do szyi i dekoltu niczym przezroczysta, druga skóra, zapewniając swobodę ruchów.



### Kabel USB

Ładuje zawsze i wszędzie.



### Aplikacja

Steruj ustawieniami urządzenia i synchronizuj preferencje. Posiada również zaprogramowane rutyny zabiegowe.

# OSTRZEŻENIE

## DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- FAQ™ Maski LED powinny być wygodne - w przypadku odczuwania dyskomfortu lub długotrwałego zaczerwienienia skóry należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na owrzodzenia, urazy i rany pooperacyjne.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na światło, oparzeń słonecznych lub stanów zapalnych skóry.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na diody LED.
- Produkt nie powinien być używany, czyszczony ani konserwowany przez dzieci.
- Niniejszy produkt może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i zrozumieją związane z tym zagrożenia.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania urządzenia FAQ™ 211 innym osobom.
- Unikaj pozostawiania FAQ™ 211 bezpośrednio na ekspozycję światła słonecznego i nigdy nie wystawiaj go na działanie wysokiej temperatury lub wrzącej wody.
- Nie należy zbyt mocno naciągać złotego łańcuszka na szyję, aby uniknąć uszkodzenia silikonowej maski.
- Jeśli produkt okaże się w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy zaprzestać jego używania.
- Produkt nie zawiera części, które można naprawić.
- Nie manipulować przy produkcie ani nie podejmować prób jego demontażu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie używać podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi ciężkich maszyn.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli się przegrzewa lub podejrzewasz, że działa nieprawidłowo.
- To urządzenie powinno być używane wyłącznie z zasilaczem SELV.
- Do ładowania urządzenia zaleca się stosowanie zasilaczy zgodnych ze standardem IEC 60335-2-29 lub IEC 61558-2-16.
- Przed ładowaniem należy upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Jeśli urządzenie lub ładowarka nie działają prawidłowo lub są w jakikolwiek sposób uszkodzone, należy zaprzestać ich używania. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem.
- Ten produkt zawiera baterie, których nie można wymienić. Baterię należy wyjąć z urządzenia przed jego utylizacją. Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej, a baterię należy bezpiecznie zutylizować.
- Biorąc pod uwagę wydajność masek LED FAQ™, zalecamy, aby nie używać maski FAQ™ 211 dłużej niż przez 15 minut.
- W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych skutków ubocznych w ciągu 48 godzin od użycia (np. swędzenie), należy skonsultować się z lekarzem przed kolejnym zastosowaniem urządzenia.
- Maski LED należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie lub jeśli masz inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę [faqswiss.com/support](https://faqswiss.com/support)

## SPOSÓB UŻYCIA FAQ™211

### ODBLOKUJ SWOJE URZĄDZENIE

Aby móc korzystać z maski, należy ją najpierw odblokować. Można to zrobić automatycznie, rejestrując maskę za pośrednictwem aplikacji FAQ™ Swiss po raz pierwszy. Wystarczy wykonać poniższe kroki:






1. Pobierz aplikację FAQ™ Swiss na swój telefon komórkowy, skanując kod QR.
2. Zaloguj się do istniejącego konta lub załóż nowe.
3. Dodaj urządzenie (w górnej części ekranu).
4. Wybierz serię urządzenia.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny, aby połączyć urządzenie z aplikacją.
6. Wprowadź informacje dotyczące zakupu.

Urządzenie jest gotowe do użycia!



## SPOSÓB UŻYCIA

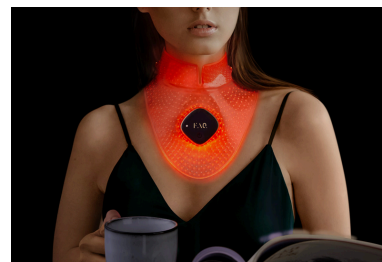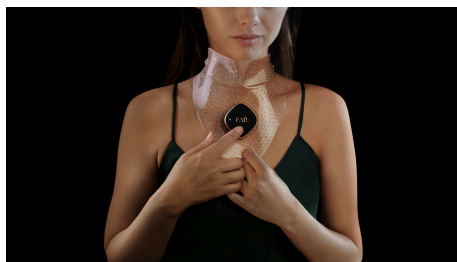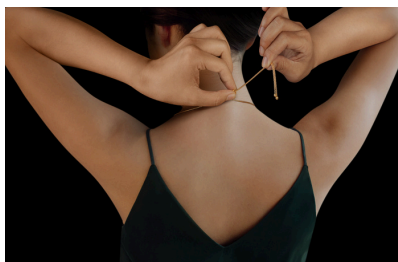


1. Zaczynij od czystej i suchej skóry i nałóż FAQ™ P1 Primer na szyję i dekolty, jeśli chcesz. Następnie umieść maskę FAQ™ 211 LED Mask z przodu szyi i dekoltu lub z tyłu szyi i górnej części pleców. Zabezpiecz w miejscu za pomocą złotego łańcuszka na szyję.
2. Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby włączyć maskę. Kolory diod LED można zmienić, ponownie naciskając przycisk. Możesz też uzyskać dostęp do zaprogramowanych zabiegów i innych ustawień za pośrednictwem aplikacji FAQ™ Swiss.
3. Ciesz się zabiegiem LED przez maksymalnie 15 minut. Po zakończeniu naciśnij uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć maskę.


### WAŻNE INFORMACJE:

- Zalecamy stosowanie maski przez 5-15 minut, 3-5 razy w tygodniu.
- Nie należy zbyt mocno naciągać złotego łańcuszka na szyję, ponieważ może to spowodować uszkodzenie maski.
- Zalecamy stosowanie FAQ™ P1 Primer z FAQ™ 211 LED Mask ze względu na jej silne właściwości przeciwstarzeniowe. Można w razie potrzeby użyć własnej pielęgnacji skóry. NIE używaj jednak żadnych produktów do pielęgnacji skóry, które zawierają silikony, kwasy lub składniki światłoczułe, takie jak witamina A, retinol / retinoidy, kwasy AHA, nadtlenek benzoilu i witamina C.

## APLIKACJA FAQ™ SWISS

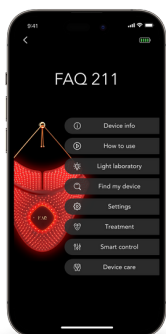

Aplikacja FAQ™ Swiss zawiera instrukcje dotyczące korzystania z maski FAQ™ 211 i dbania o nią. Można jej również używać do sterowania ustawieniami i uzyskiwania dostępu do zabiegów z przewodnikiem.

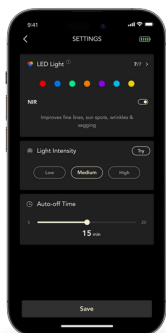

### USTAWIENIA

Ustaw swoje preferencje dotyczące światła LED i czasu trwania zabiegu, a urządzenie zapamięta je do użytku w trybie offline:

### ŚWIATŁO LED


Wybierz preferowany kolor światła LED. Następnie wybierz, czy chcesz dodać do zabiegu światło bliskiej podczerwieni, klikając przycisk przełączania obok NIR.

### INTENSYWNOŚĆ LED

Wybierz preferowaną intensywność, wybierając między niską, średnią lub wysoką.


### CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

Wybierz, jak długo ma trwać zabieg, korzystając z przesuwanej skali.

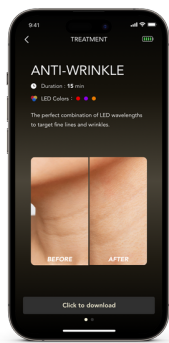


### ZABIEGI

Wybierz jeden z naszych zaprogramowanych zabiegów ukierunkowanych na konkretne problemy skórne.

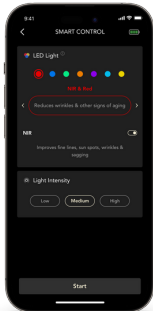

### INTELIĞENTNE STEROWANIE

Używaj telefonu jak pilota do urządzenia, aby dostosować swoje preferencje podczas zabiegu.

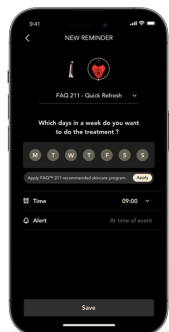

### USTAW PRZYPOMNIENIE

Możesz otrzymywać przypomnienia, gdy nadejdzie czas na następny zabieg. Wybierz zabieg, dla którego chcesz ustawić przypomnienie. Następnie wybierz dni, w które chcesz otrzymywać przypomnienia.

## CZYSZCZENIE FAQ™211

Po użyciu należy zawsze dokładnie wyczyścić maskę FAQ™ 211. Wystarczy zwilżyć niestrzępiącą się ściereczkę lub ręcznik ciepłą wodą i przetrzeć silikonową powierzchnię maski. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zalecamy najpierw spryskanie maski sprayem do czyszczenia FAQ™ Silicon Cleaning Spray, a następnie dokładne wytarcie wilgotną, niestrzępiącą się szmatką lub ręcznikiem.

**UWAGA:** Produkt nie jest w 100% wodoodporny, dlatego nie należy myć go pod bieżącą wodą. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia FAQ™ 211:

Jeśli FAQ™ 211 nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku włączania:

- Bateria jest rozładowana. Podłącz urządzenie do kabla ładującego USB i przez maksymalnie 2 godziny ładuj, aż do pełnego naładowania, a następnie uruchom ponownie urządzenie, naciskając przycisk uniwersalny.

Jeśli FAQ™ 211 nie można wyłączyć i/lub przycisk włączania nie odpowiada:

- Mikroprocesor tymczasowo działa nieprawidłowo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli urządzenie FAQ™ 211 nie synchronizuje się z aplikacją FAQ™ Swiss:

- Wyłącz i ponownie włącz Bluetooth na swoim telefonie, aby spróbować ponownie nawiązać połączenie.
- Zamknij aplikację FAQ™ Swiss, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa.
- Sprawdź, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji w sklepie z aplikacjami na telefonie.

# WARUNKI GWARANCJI

## REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się za pomocą **aplikacji FAQ™ Swiss lub odwiedź stronę [faqswiss.com/product-registration](http://faqswiss.com/product-registration)**, aby uzyskać więcej informacji.

## 2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FAQ™ Swiss udziela gwarancji na to urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub materiałami wynikającymi z normalnego użytkowania urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które wpływają na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona pogorszenia stanu kosmetycznego spowodowanego zwykłym zużyciem lub uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Wszelkie próby otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowodują unieważnienie gwarancji.

Jeśli użytkownik wykryje wadę i powiadomi FAQ™ Swiss w okresie gwarancyjnym, FAQ™ Swiss, według własnego uznania, wymieni urządzenie bezpłatnie. Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte uzasadnionymi dowodami, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić gwarancję, należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres obowiązywania gwarancji.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie [www.faqswiss.com](http://www.faqswiss.com), a następnie wybrać roszczenia gwarancyjne. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i innych krajach europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów).



OPAKOWANIE JEST  
WYKONANE  
Z MATERIAŁÓW  
NADAJĄCYCH SIĘ  
DO RECYKLINGU



DYREKTYWA W SPRAWIE  
ZUŻYTEGO SPRZĘTU  
ELEKTRYCZNEGO  
I ELEKTRONICZNEGO



ZGODNOŚĆ  
Z NORMAMI  
EUROPEJSKIMI


To urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad domowy, ale raczej powinno zostać dostarczone do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami urządzenia. Recykling materiałów pomoże również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub miejscem zakupu.

# DEMONTAŻ AKUMULATORA

**UWAGA:** Proces ten nie jest odwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Czynność tę należy wykonać tylko wtedy, gdy urządzenie jest gotowe do utylizacji.

Ponieważ to urządzenie zawiera baterię litowo-jonową, baterię należy wyjąć przed utylizacją i nie należy jej wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, należy przeciąć i usunąć silikonową warstwę zewnętrzną z części maski w kształcie rombu. Następnie należy przeciąć plastikową powłokę wzdłuż pęknięcia i podważyć ją. Należy przeciąć kabel akumulatora, wyjąć akumulator i zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa podczas tego procesu należy nosić rękawice. Szczegółowe instrukcje wizualne znajdują się poniżej:

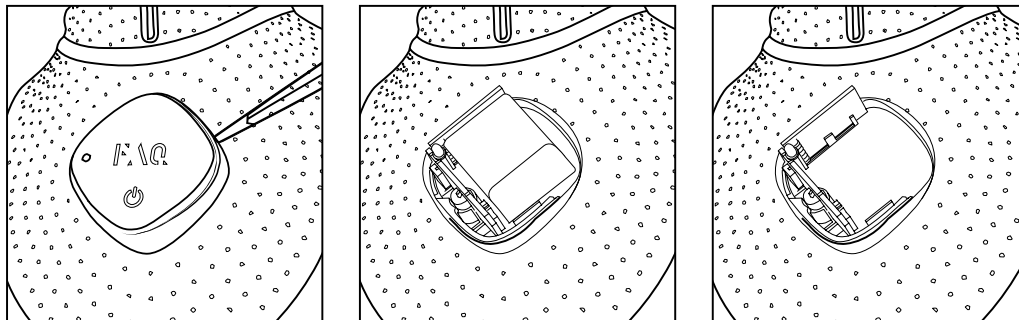

## SPECYFIKACJA

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁY:</b>                | Bezpieczny dla ciała silikon, PC + ABS, pozłacana stal nierdzewna |
| <b>ROZMIAR:</b>                  | 203 x 197 x 25 mm                                                 |
| <b>WAGA:</b>                     | 104 g                                                             |
| <b>BATERIA:</b>                  | Li-ion 680mAh 3.7V                                                |
| <b>UŻYTKOWANIE:</b>              | Do 2,5 godziny użytkowania na 2-godzinny ładowaniu                |
| <b>STAN GOTOWOŚCI:</b>           | 90 dni                                                            |
| <b>MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:</b> | <50 dB                                                            |

## ZASTRZEŻENIA

Użytkownicy tego urządzenia, używają je na własne ryzyko. Ani FAQ™ Swiss, ani jego sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tego urządzenia. Ponadto, FAQ™ Swiss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej publikacji oraz do okresowego wprowadzania zmian w jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby o takich zmianach.

**PRZESTROGA:** Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

**UWAGA:** To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z kanadyjskimi przepisami RSS dotyczącymi zwolnień z licencji. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

FAQ™ oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dla tego produktu jest dostępny na stronie [www.faqswiss.com/support/eu-conformity](http://www.faqswiss.com/support/eu-conformity).




Model może zostać zmieniony w celu wprowadzenia ulepszeń bez powiadomienia.

**Dodatkowe informacje prawne i regulacyjne są dostępne w aplikacji. Aby je wyświetlić, wystarczy wykonać poniższe kroki:**

Krok 1: Otwórz aplikację FAQ™ Swiss i wybierz ikonę profilu

Krok 2: Wybierz "Przepisy prawne i regulacje"

Krok 3: Wybierz swoje urządzenie.

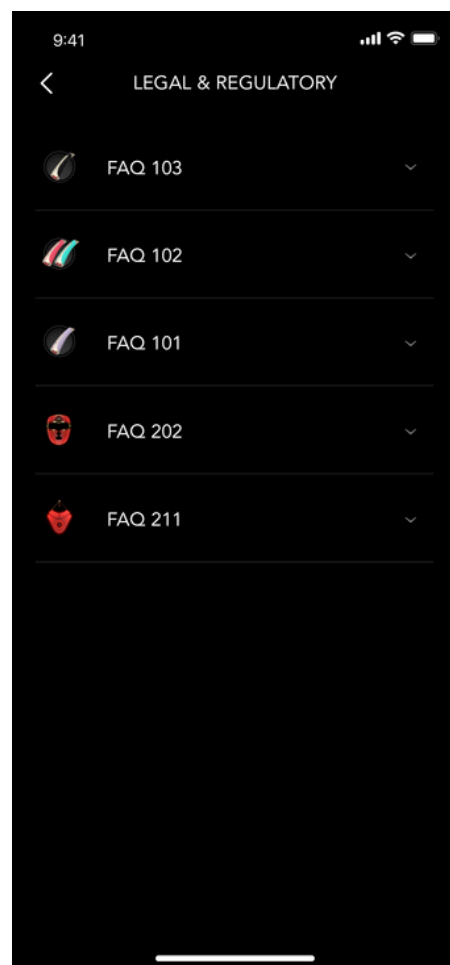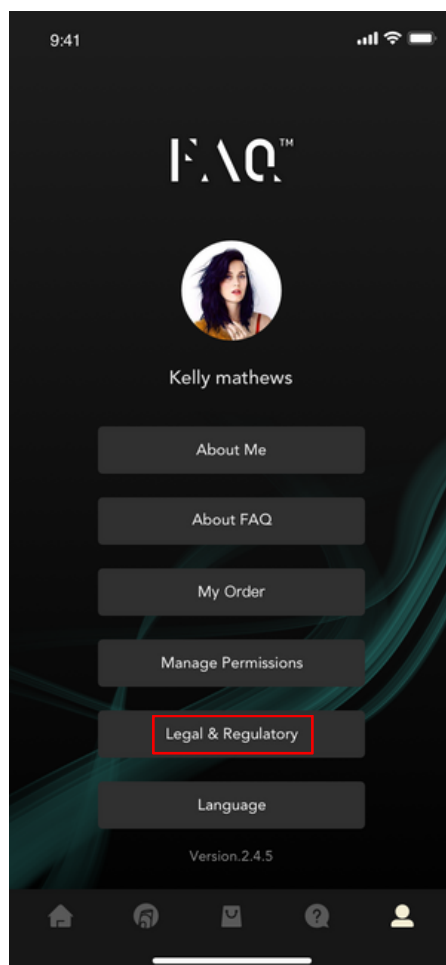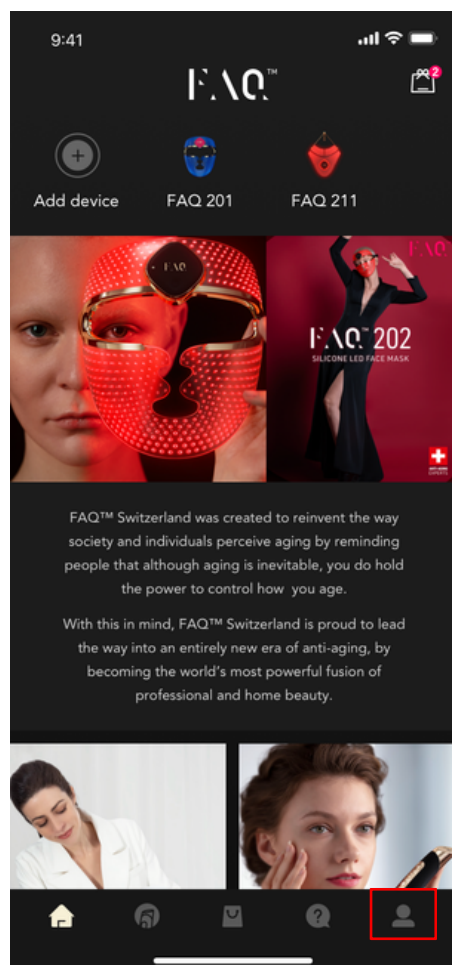



# CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

## POCZĄTKI

### 1. CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z MASKĄ FAQ™ 211 LED?

Maska LED FAQ™ 211, kabel USB do ładowania, instrukcja obsługi i skrócona instrukcja obsługi.

### 2. CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU MASKI FAQ™ 211?

Przed rozpoczęciem pierwszego zabiegu z użyciem FAQ™ 211 należy odblokować i zarejestrować urządzenie, pobierając bezpłatnie aplikację FAQ™ Swiss i postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji. (Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji zatytułowanej "APLIKACJA").

### 3. JAK WŁĄCZYĆ MASKĘ FAQ™ 211?

Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania na masce LED, aby ją włączyć.

### 4. JAK WYŁĄCZYĆ MASKĘ FAQ™ 211?

Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania na masce LED przez 3 sekundy, aby ją wyłączyć. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

## ZABIEG

### 5. JAK ROZPOCZĄĆ PIERWSZY ZABIEG?

Najpierw dokładnie oczyść i osusz skórę, a w razie potrzeby nałóż FAQ™ P1 Primer na szyję i dekolte. Następnie nałóż maskę FAQ™ 211 na szyję i dekolte lub na tył szyi i górną część pleców. Zabezpiecz w miejscu za pomocą złotego łańcuszka na szyję. Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby włączyć maskę. Możesz zmienić kolory diod LED, ponownie naciskając przycisk. Możesz także uzyskać dostęp do większej liczby ustawień i wstępnie zaprogramowanych zabiegów za pośrednictwem aplikacji FAQ™ Swiss. Noś maskę przez maksymalnie 15 minut. Po zakończeniu naciśnij uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć maskę.

### 6. CZY MOGĘ UŻYWAĆ SWOICH KOSMETYKÓW Z MASKĄ FAQ™ 211?

Zalecamy stosowanie FAQ™ P1 Primer z maską FAQ™ 211 ze względu na jego silne właściwości przeciwstarzeniowe. W razie potrzeby można użyć własnych kosmetyków. Jednak NIE używaj żadnych produktów, które zawierają silikony lub kwasy, lub składniki światłoczułe, takie jak witamina A, retinol / retinoidy, AHA, nadtlenek benzoilu i witamina C.

### 7. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ MASKĘ FAQ™ 211 ?

Zalecamy stosowanie FAQ™ 211 przez 5-15 minut, 3-5 razy w tygodniu, aby uzyskać optymalne rezultaty.

### 8. CO TO JEST TERAPIA LED?

Terapia LED (Light Emitting Diode) to zabieg pielęgnacyjny wykorzystujący światło o różnej długości fali. NASA pierwotnie opracowała ją do eksperymentów wzrostu roślin podczas misji wahadłowców, ale w trakcie procesu odkryła, że jest obiecująca w leczeniu ran. Terapia światłem LED jest obecnie stosowana przez lekarzy medycyny estetycznej w celu odmłodzenia starzejącej się skóry.

### 9. CZY TERAPIA ŚWIATŁEM LED JEST BEZPIECZNA?

W przeciwieństwie do innych rodzajów terapii światłem, diody LED nie zawierają promieni ultrafioletowych. Dlatego są bezpieczne do regularnego stosowania.

## APLIKACJA

### 10. JAK SPAROWAĆ MASKĘ FAQ™ 211 Z APLIKACJĄ FAQ™ SWISS?

Najpierw pobierz aplikację FAQ™ Swiss na swój smartfon lub tablet i włącz Bluetooth na smartfonie/tablecie. Następnie naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk na masce przez 3 sekundy. Maska zmieni kolor na niebieski, wskazując, że jest w trybie parowania Bluetooth. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć parowanie maski z aplikacją. (UWAGA: Maska musi być wyłączona przed przełączeniem jej w tryb parowania Bluetooth).

### 11. CZY MOJA MASKA FAQ™ 211 DZIAŁA BEZ APLIKACJI?

Tak, można ręcznie używać maski bez aplikacji FAQ™ Swiss. Wystarczy przełączać się między kolorami LED, naciskając uniwersalny przycisk zasilania. Należy jednak pamiętać, że przed pierwszym użyciem maski należy ją odblokować i zarejestrować w aplikacji FAQ™ Swiss.

## **12. JAKIE SĄ ZALETY KORZYSTANIA Z APLIKACJI FAQ™ SWISS?**

Aplikacja FAQ™ Swiss oferuje wstępnie zaprogramowane zabiegi LED, a także funkcję bezprzewodowego zdalnego sterowania. Oferuje również zaawansowane ustawienia, które można zapisać w urządzeniu, zgodnie z własnymi preferencjami, do następnego włączenia. Ponadto za pośrednictwem aplikacji można zarejestrować gwarancję i uzyskać dostęp do instrukcji obsługi.

## **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA**

### **13. CO OZNACZA, ŻE MASKA FAQ™ 211 MIGA 3 RAZY NA CZERWONO?**

Maska mignie 3 razy na czerwono, wskazując niski poziom naładowania baterii. Naładuj maskę za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB przez maksymalnie 2 godziny, aż do pełnego naładowania.

### **14. CO OZNACZA, ŻE MOJA MASKA FAQ™ 211 MIGA NA NIEBIESKO?**

Maska miga na niebiesko, wskazując, że jest w trybie parowania Bluetooth i jest gotowa do połączenia z aplikacją.