

FAO™



FAO™ 221

SILIKONOVÁ LED MASKA NA RUCE

ONLINE
MANUAL

ZAČÍNÁME

Gratulujeme k tomu, že jste udělali první krok do nové éry anti-agingu získáním FAQ™ 221. Než začnete využívat všech výhod profesionální technologie péče o pleť v pohodlí domova, věnujte prosím chvíli pečlivému přečtení pokynů v tomto návodu.

PŘED **POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY** a používejte tento výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍ: ŽÁDNÁ ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ NENÍ DOVOLENA.

FAQ™ 221 PŘEHLED

Představujeme zcela novou generaci LED masky. Ultralehký, bezdrátový a vyrobený ze silikonu Flexi-Fit, který se přizpůsobí konturám vašeho těla a rovnoměrně je pokryje. FAQ™ 221 nabízí 8 různých vlnových délek, včetně NIR, které se vypořádají se známkami stárnutí a dalšími problémy pleti – zatímco vy děláte doslova cokoli jiného. Volně se pohybujte a užívejte si lázeňské LED procedury pouhým stisknutím tlačítka.

SEZNAMTE SE S FAQ™ 221

SVĚTLO INDIKÁTORU

Ukazuje, kdy je zařízení v režimu párování Bluetooth a v režimu Smart Control.

DESIGN S OTEVŘENÝMI DLANĚMI

Aby byl zcela nenápadný.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Jedním stisknutím se zapne. Dalším stisknutím přepnete barvy LED. Stisknutím na 3 sekundy vypnete. V režimu otč stisknutím na 3 s přepnete masku do režimu párování Bluetooth pro připojení k aplikaci.

623 SVĚTELNÝCH BODŮ

Pulzuje 3000x za sekundu a je optimalizován tak, aby vlnové délky LED diod pronikaly rovnoměrně do všech oblastí pokožky.

FLEXI-FIT SILIKON

Velmi hygienické a snadno se čistí. Přizpůsobí se vaší ruce jako průhledná druhá kůže, což usnadňuje pohyb.

NABÍJECÍ PORT

Až 2,5 hodiny provozu na 2 hodiny nabíjení USB. Nabíjecí kabel USB je součástí dodávky.

ZLATÝ NÁRAMEK

Nastavitelná maska bezpečně drží na ruce, takže se můžete volně pohybovat.



USB nabíjecí kabel
Nabíjejte kdykoli a kdekoli.



Interaktivní aplikace

Ovládá nastavení zařízení a synchronizuje vaše předvolby. S předem naprogramovanými ošetřeními.

UPOZORNĚNÍ

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ:

- FAQ™ LED masky by měly být pohodlné – pokud zaznamenáte jakékoli nepohodlí nebo dlouhodobé zarudnutí pokožky, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte na vředy v ráně, traumata a pooperační rány.
- Nepoužívejte, pokud máte citlivou pokožku na světlo nebo spálenou nebo zanícenou pokožku.
- Nedívejte se přímo do LED světel.
- Tento výrobek by neměly používat, hrát si s nimi, čistit nebo udržovat děti.
- Tento výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet FAQ™ 221 s nikým jiným.
- Nenechávejte FAQ™ 221 na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí vodě.
- Netahejte zlatý řetízek na krk příliš pevně, aby nedošlo k poškození silikonové masky.
- Pokud se zdá, že je tento výrobek jakkoli poškozený, přestaňte jej používat.
- Tento produkt neobsahuje žádné opravitelné díly.
- Nepokoušejte se pokoušet výrobek rozebírat, protože by to mohlo způsobit poškození jednotky.
- Nepoužívejte při řízení nebo obsluze těžkých strojů.
- Nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru zařízení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud se přehřívá nebo máte podezření, že nefunguje správně.
- Toto zařízení by mělo být používáno pouze s napájecím adaptérem SELV.
- K nabíjení zařízení se doporučuje použít standardní napájecí zdroje IEC 60335-2-29 nebo IEC 61558-2-16.
- Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Během nabíjení zařízení nepoužívejte. Pokud toto zařízení nebo nabíječka nefunguje správně nebo se zdá být jakkoli poškozená, přestaňte ji používat. Používejte pouze napájecí kabel dodaný se zařízením.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Před likvidací musí být ze zařízení vyjmuta baterie. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě a baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Vzhledem k účinnosti FAQ™ LED masek doporučujeme nepoužívat FAQ™ 221 déle než 15 minut v kuse.
- Pokud se neočekávané vedlejší účinky, jako je svědění, objeví do 48 hodin od prvního ošetření tímto zařízením, je třeba před další expozicí vyhledat lékařskou pomoc.
- Tuto LED masku používejte pouze k účelu, ke kterému je určena, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenajdete odpověď na svou konkrétní otázku nebo máte jakékoli další dotazy týkající se provozu zařízení, navštivte **prosím faqswiss.com/support**

JAK POUŽÍVAT FAQ™221

ODEMKNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Abyste mohli masku použít, musíte ji nejprve odemknout. Můžete to udělat automaticky tak, že svou masku poprvé zaregistrujete prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss. Jednoduše postupujte podle následujících kroků:



1. Stáhněte si do telefonu aplikaci FAQ™ Swiss tím, že naskenujete QR kód.
2. Přihlaste se do stávajícího účtu, nebo vytvořte nový.
3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky).
4. Vyberte sérii zařízení.
5. Stiskněte a podržte univerzální tlačítko na zařízení, aby se připojilo k aplikaci.
6. Vyplňte informace o nákupu.

A vaše zařízení je připraveno k použití!

JAK POUŽÍVAT



1. Začněte s čistou a suchou pokožkou. Poté si na hřbet ruky přiložte masku FAQ™ 221 LED. Zajistěte ji na místě pomocí zlatého řetízku na zápěstí.


2. Stisknutím univerzálního tlačítka napájení masku zapnete. Barvy LED diod můžete změnit opětovným rychlým stisknutím tlačítka. Nebo můžete přistupovat k předprogramovaným ošetřením a dalším nastavením prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss.

3. Vychutnejte si LED ošetření po dobu až 15 min. Po dokončení zopakujte na opačné straně. Stisknutím univerzálního tlačítka napájení na 3 sekundy masku vypnete.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Doporučujeme používat tuto masku 5-15 minut na každou ruku, 3-5krát týdně.
- Netahejte zlatý řetízek na zápěstí příliš pevně, jinak můžete masku poškodit.
- Během ošetření LED nepoužívejte žádné přípravky pro péči o ruce, které obsahují silikony nebo kyseliny, ani světlocitlivé složky, jako je vitamin A, retinol / retinoidy, AHA, benzoylperoxid a vitamin C.

FAQ™ SWISS APLIKACE

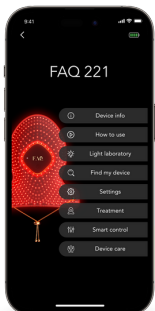

Aplikace FAQ™ Swiss nabízí pokyny, jak používat a starat se o vaši FAQ™ LED masku. Můžete ji také použít k ovládání nastavení a přístupu k řízeným ošetřením.

NASTAVENÍ

Nastavte si předvolby pro LED světlo a dobu léčby a zařízení si je zapamatuje pro offline použití:

LED SVĚTLA


Vyberte preferovanou barvu LED světla. Poté vyberte, zda chcete k ošetření přidat blízkou infračervenou LED diodu kliknutím na přepínací tlačítko vedle NIR.


INTENZITA SVĚTLA

Vyberte preferovanou intenzitu výběrem mezi Nízká, Střední nebo Vysoká.

ČAS AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ


Pomocí posuvné stupnice vyberte, jak dlouho chcete, aby vaše ošetření trvalo.

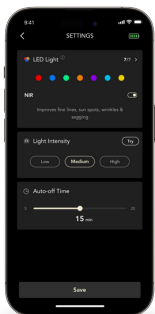

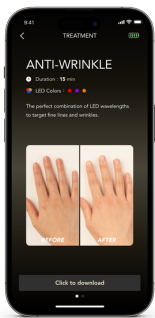


OŠETŘENÍ

Vyberte si jedno z našich předprogramovaných ošetření a zaměřte se na konkrétní problémy pleti.

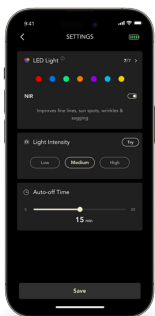

SMART CONTROL

Používejte telefon jako dálkové ovládání svého zařízení a upravujte své preference během ošetření.

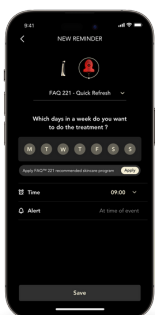

UNASTAVENÍ PŘIPOMÍNEK

Jako alarm pro váš režim péče o pleť můžete dostávat připomenutí, kdy je čas na další ošetření. Vyberte ošetření, u kterého chcete nastavit připomenutí. Poté vyberte, ve které dny chcete připomenutí dostávat.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ FAQ™221

Po použití LED masku FAQ™ vždy důkladně vyčistěte. Jednoduše navlhčete teplou vodou hadřík nebo ručník, který nepouští vlákna, a otřete silikonový povrch masky. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme masku nejprve postříkat silikonovým čisticím sprejem FAQ™ a všechny zbývající zbytky důkladně setřít mokrým hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna.

POZNÁMKA: Tento výrobek není 100% vodotěsný, proto jej nemyjte pod tekoucí vodou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu FAQ™ 221 :

Pokud se FAQ™ 221 nezaktivuje, když podržíte univerzální tlačítko:

- Baterie je vybitá. Nabijte ji pomocí USB kabelu po dobu 2 hodin, než bude plně nabitá, a poté restartujte přístroj pomocí univerzálního tlačítka.

Pokud FAQ™ 221 nemůžete vypnout, nebo neodpovídá na univerzální tlačítko:

- Mikroprocesor je dočasně nefunkční. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka přístroj restartujete.

Pokud se FAQ™ 221 nespáruje s aplikací FAQ™ Swiss:

- Vypněte Bluetooth a poté ho zase zapněte, zkuste párování znovu.
- Zavřete aplikaci FAQ™ Swiss a poté ji znovu otevřete a zkuste proces znovu.
- Zkontrolujte v obchodě s aplikacemi, zda aplikaci není třeba aktualizovat.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat dvouletou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss nebo navštivte stránku faqswiss.com/product-registration, kde najdete další informace.

2LETÁ ZÁRUKA

Společnost FAQ™ Swiss poskytuje na tento přístroj záruku po dobu DVOU (2) LET od původního data zakoupení na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály, které vznikly při běžném používání přístroje. Záruka se vztahuje na pracovní části, které ovlivňují funkci zařízení. NEpokrývá kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky.

Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti FAQ™ Swiss během záruční doby, společnost FAQ™ Swiss vám zařízení podle svého uvážení bezplatně vymění. Záruční reklamace musí být doloženy přiměřenými důkazy, že datum reklamace spadá do záruční doby. Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby.

Chcete-li uplatnit záruční nárok, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.faqswiss.com a poté vybrat možnost uplatnit záruční nárok. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva spotřebitele a nijak tato práva neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu).



OBALY JSOU
VYROBENY Z
RECYKLOVATELNÉH
O
MATERIÁLU



SMĚRNICE O ODPADNÍCH
ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH



EVROPSKÁ
SHODA


S tímto zařízením by se nemělo nakládat jako s domovním odpadem, ale mělo by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto zařízení, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo způsobit nevhodné nakládání s tímto zařízením. Recyklace materiálů také pomůže šetřit přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení zaniká jeho záruka. Tento úkon je třeba provést pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Vzhledem k tomu, že toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být baterie před likvidací vyjmuta a neměla by být vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, odřízněte a odstraňte silikonovou vnější vrstvu z kosočtvercové části masky. Poté rozřízněte plastový plášť podél praskliny a plášť vypáchte. Poté přerážněte kabel baterie, vyjměte baterii a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Během tohoto procesu si v zájmu své bezpečnosti nasad'te rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže:

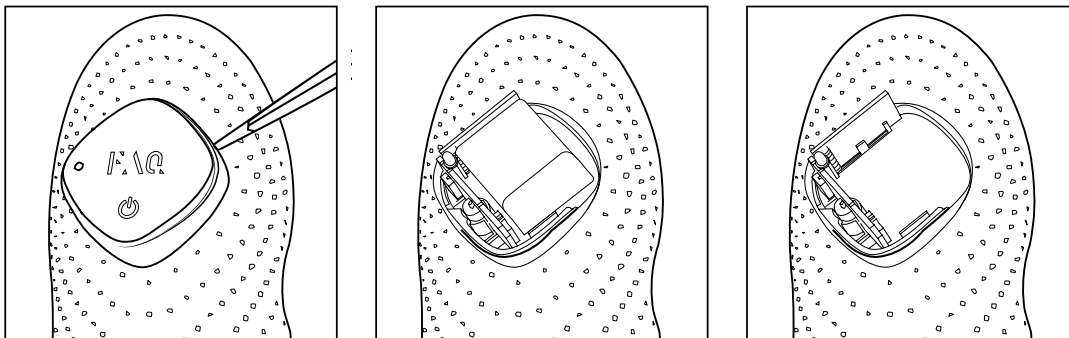

SPECIFIKACE

MATERIÁLY:	Silikon bezpečný pro tělo, PC + ABS
ROZMĚR:	154 x 171 x 25 mm
HMOTNOST:	74 g
BATERIE:	Li-ion 680mAh 3.7V
POUŽITÍ:	Až 2,5 hodiny provozu na 2 hodiny nabíjení
POHOTOVOST:	90 dní
MAX ÚROVEŇ HLUKU:	<50 dB

PROHLÁŠENÍ

Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost FAQ™ Swiss ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo škody, ať už fyzické nebo jiné, které přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku používání tohoto zařízení. Společnost FAQ™ Swiss si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinna o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licencí, které jsou v souladu s licencí osvobozenou od RSS organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Společnost FAQ™ prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě výrobku je k dispozici **na adrese www.faqswiss.com/support/eu-conformity**.




Model může být změněn za účelem vylepšení bez předchozího upozornění.

Další právní a regulační informace jsou k dispozici v aplikaci. Chcete-li je zobrazit, postupujte podle níže uvedených kroků:

Krok 1: Otevřete aplikaci FAQ™ Swiss a vyberte ikonu profilu

Krok 2: Vyberte "Právní a regulační předpisy".

Krok 3: Vyberte své zařízení.

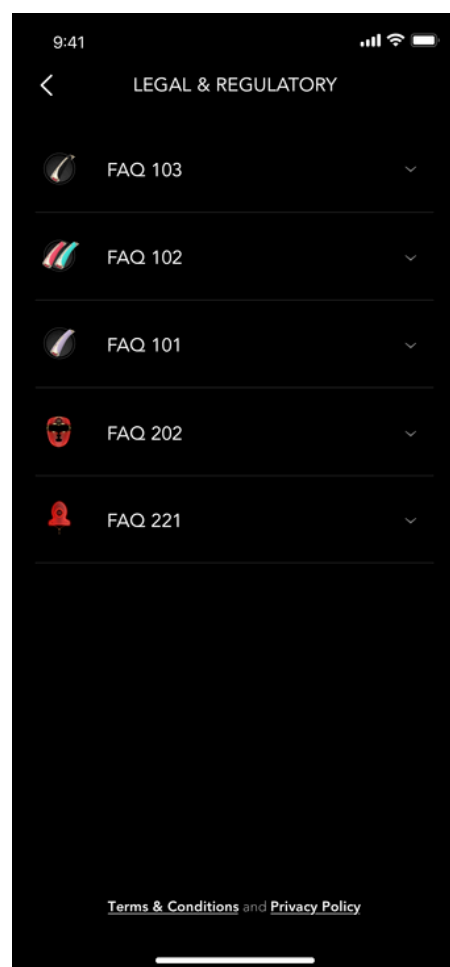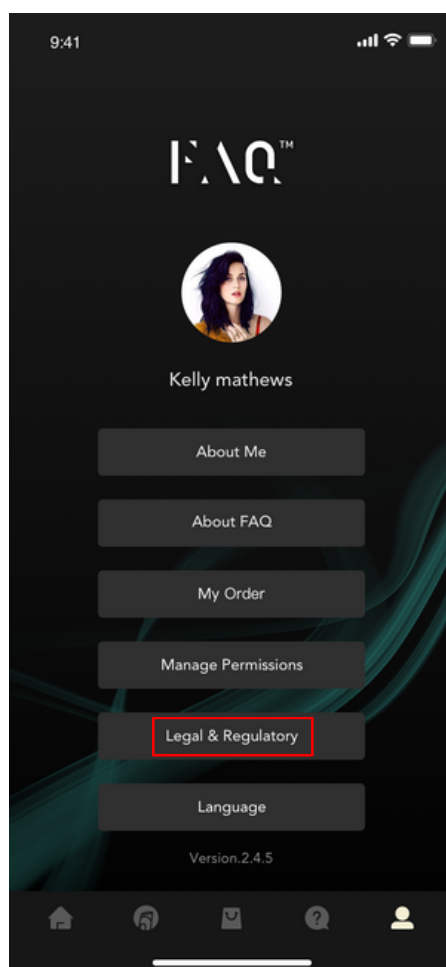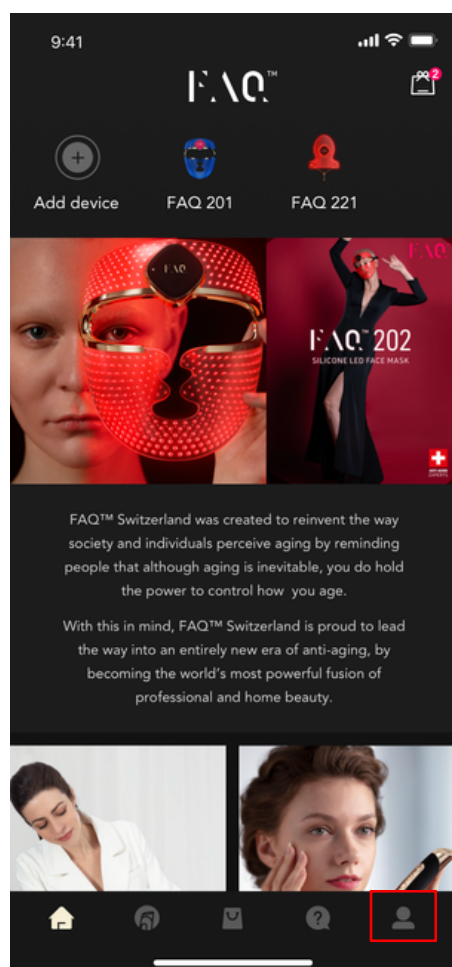

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ZÁKLADNÍ

1. CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ LED MASKY FAQ™ 221?

FAQ™ 221 LED maska, nabíjecí kabel USB, uživatelská příručka a stručný návod k použití.

2. CO DĚLAT PO OBDRŽENÍ LED MASKY FAQ™ 221?

Před zahájením prvního ošetření pomocí FAQ™ 221 je třeba zařízení odemknout a zaregistrovat tak, že si zdarma stáhnete aplikaci FAQ™ Swiss a budete postupovat podle pokynů v aplikaci. (Další informace naleznete v části níže nazvané "APLIKACE").

3. JAK ZAPNOUT LED MASKU FAQ™ 221?

Stisknutím univerzálního tlačítka napájení na masce ji zapnete.

4. JAK VYPNOUT LED MASKU FAQ™ 221?

Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka napájení na 3 sekundy ji vypnete. Zařízení se automaticky vypne po 15 minutách.

OŠETŘENÍ

5. JAK ZAČÍT PRVNÍ OŠETŘENÍ?

Začněte s čistou a suchou pokožkou. Poté si na hřbet ruky přiložte LED masku FAQ™ 221. Zajistěte ji na místě pomocí zlatého řetízku na zápěstí. Stisknutím univerzálního tlačítka napájení masku zapnete. Barvy LED diod můžete změnit opětovným rychlým stisknutím tlačítka. Prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss máte také přístup k dalším nastavením a předprogramovaným procedurám. Vychutnejte si LED ošetření až po dobu 15 minut, zatímco budete pokračovat ve svém dni - pro multitasking v té nejlepší kvalitě. Po dokončení zopakujte ošetření na opačné ruce. Stisknutím univerzálního tlačítka napájení na 3 sekundy masku vypnete.

6. MOHU SPOLU S LED MASKOU FAQ™ 221 POUŽÍVAT I KOSMETIKU NA RUCI?

Ano, můžete. Během ošetření LED však NEPOUŽÍVEJTE žádné produkty péče o ruce, které obsahují silikonu nebo kyseliny, ani světlocitlivé složky, jako je vitamin A, retinol / retinoidy, AHA, benzoylperoxid a vitamin C.

7. JAK ČASTO POUŽÍVAT LED MASKU FAQ™ 221?

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat FAQ™ LED masku 3-5krát týdně po dobu 5-15 minut.

8. CO JE LED TERAPIE?

Terapie LED (Light Emitting Diode) je ošetření pleti pomocí světla o různých vlnových délkách. NASA ji původně vyvinula pro pokusy s růstem rostlin při misích raketoplánů, ale během procesu zjistila, že je slibná i pro ošetření ran. Světelnou terapii LED nyní používají esteticí k omlazení stárnoucí pleti.

9. JE LED TERAPIE BEZPEČNÁ?

Na rozdíl od některých jiných typů světelné terapie neobsahují LED diody ultrafialové záření. Proto jsou bezpečné pro pravidelné používání.

APLIKACE

10. JAK SPÁROVAT LED MASKU FAQ™ 221 S APLIKACÍ FAQ™ SWISS?

Nejprve si do chytrého telefonu nebo tabletu stáhnete aplikaci FAQ™ Swiss a zapnete na chytrém telefonu funkci Bluetooth. Poté stisknete a podržíte univerzální tlačítko na masce po dobu 3 sekund. Maska se zbarví modře, což signalizuje, že je v režimu párování Bluetooth. Poté jednoduše postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete párování masky s aplikací. (POZNÁMKA: Maska musí být vypnutá, než ji přepnete do režimu párování Bluetooth).

11. FUNGUJE LED MASKA FAQ™ 221 BEZ APLIKACE?

Ano, masku můžete používat ručně bez aplikace FAQ™ Swiss. Jednoduše přepínejte mezi barvami LED stisknutím univerzálního tlačítka napájení. Mějte však na paměti, že před prvním použitím masky ji musíte odemknout a zaregistrovat prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss.

12. JAKÉ JSOU VÝHODY APLIKACE FAQ™ SWISS?

Aplikace FAQ™ Swiss nabízí předprogramované procedury LED a také funkci bezdrátového dálkového ovládání. Nabízí také pokročilá nastavení, která si můžete uložit do zařízení podle svých preferencí pro příští zapnutí. Kromě toho můžete prostřednictvím aplikace zaregistrovat záruku a získat přístup k návodu k použití.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ÚDRŽBA

13. CO ZNAMENÁ, KDYŽ LED MASKA FAQ™ 221 3X ČERVENĚ ZABLIKÁ?

Maska třikrát červeně zabliká, což signalizuje vybití baterie. Nabíjejte masku pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB po dobu až 2 hodin, dokud nebude plně nabitá.

14. CO ZNAMENÁ, KDYŽ LED MASKA FAQ™ 221 BLIKÁ MODŘE?

Maska bude blikat modře, což znamená, že je v režimu párování Bluetooth a je připravena k připojení k aplikaci.