

FAQ



TM

ANTI-AGING  
EX RTS



TM

## PENTRU ÎNCEPUT

Felicitări pentru că ați făcut primul pas într-o nouă eră a anti-îmbătrânirii prin achiziționarea FAQ™ 202. Înainte de a începe să vă bucurați de toate beneficiile tehnologiei profesionale de îngrijire a pielii în confortul casei dumneavoastră, vă rugăm să vă acordați câteva momente pentru a citi cu atenție instrucțiunile din acest manual.

Vă rugăm să **CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE** și să folosiți acest produs numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual.

**UTILIZARE DESTINATĂ:** FAQ™ 202 este un dispozitiv fără prescripție medicală care emite energie în regiunile apropiate de infraroșu, roșie, albastră, verde, portocalie, galbenă, albăstruie și purpurie ale spectrului, destinat tratării ridurilor și/sau petelor faciale.

**AVERTISMENT:** NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT.

## FAQ™ 202 PREZENTARE GENERALĂ

Vă prezentăm o generație complet nouă de măști cu LED-uri. Ultrașoare, fără fir și fabricate cu silicon flexibil care se mulează pe conturul feței dvs. pentru o acoperire uniformă a luminii. FAQ™ 202 dispune de 8 lungimi de undă diferite, inclusiv NIR (infraroșu apropiat), pentru a aborda semnele de îmbătrânire și alte probleme ale pielii - în timp ce faceți literalmente orice altceva. Deplasați-vă liber și bucurați-vă de tratamente faciale cu LED la nivel de spa, la simpla apăsare a unui buton.

## SĂ NE CUNOAȘTEM FAQ™ 202

### INDICATOR LUMINOS

Indică atunci când dispozitivul se află în modul de împerechere Bluetooth și în modul Smart Control.

### BUTON UNIVERSAL DE PORNIRE

Apăsați o dată pentru a porni. Apăsați din nou pentru a schimba culorile LED-ului. Apăsați timp de 3 secunde pentru a opri. De la oprit, apăsați timp de 3 sec pentru a pune masca în modul de împerechere Bluetooth pentru a vă conecta la aplicație.

### DESIGN CU OCHI DESCHIS

Protejează ochii de lungimile de undă puternice ale LED-urilor și permite ușurința de mișcare, deoarece puteți vedea clar chiar și în timp ce purtați masca.

### SILICON FLEXI-FIT

Ultra-igienică și ușor de curățat. Se mulează pe față ca o a doua piele transparentă, pentru a facilita mișcarea.

### PORT DE ÎNCĂRCARE

Până la 2 ore de

---

utilizare per  
încărcare USB.

### BANDĂ DE CAP ANTI-ALUNECARE

Fabricat din silicon pentru un confort maxim și pentru a nu trage părul. Menține masca în siguranță pe față, astfel încât să vă puteți mișca liber.

### 600 DE PUNCTE DE LUMINĂ

---

Pulsând de 3000 de ori pe secundă și optimizat pentru a se asigura că lungimile de undă ale LED-ului pătrund uniform în toate zonele feței.

**Spray de curățare a  
siliconului FAQ™ 60mL**

Utilizați pentru a vă curăța  
dispozitivul pentru o  
igienă maximă.

**Vitrină de afișare**

Puteți fie să vă păstrați  
masca în cutie, fie să o  
expuneți cu mândrie pe  
suportul de prezentare.

**Cablu de încărcare USB**

Se încarcă oricând și  
oriunde. Se livrează  
într-o husă pentru  
accesorii.

**Aplicatie interactivă**  
Controlează setările  
dispozitivului și vă  
sincronizează preferințele.  
Cu pre-  
tratamente programate.



# AVERTISMENTE


## PENTRU O SIGURANȚĂ OPTIMĂ:

- Măștile LED FAQ™ trebuie să fie confortabile - dacă simțiți disconfort sau roșeață prelungită a pielii, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic.
- Nu utilizați pe plăgi ulcerate, traumatice și post-operatorii.
- Nu utilizați dacă aveți sensibilitate la lumină sau dacă aveți pielea arsă sau inflamată de soare.
- Nu vă uitați direct la luminile LED.
- Acest produs nu trebuie utilizat de către copii. Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest produs este utilizat de către, pe sau în apropierea copiilor și a celor cu abilități fizice și mentale reduse.
- Din motive de igienă, nu vă recomandăm să împărțiți cu nimeni altcineva dispozitivul FAQ™ 202.
- Evitați să lăsați aparatul FAQ™ 202 în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți niciodată la căldură extremă sau la apă clocotită.
- Nu trageți prea tare cureaua de silicon, pentru a evita deteriorarea măștii de silicon.
- Întrerupeți utilizarea în cazul în care acest produs pare deteriorat în vreun fel.
- Acest produs nu conține piese care pot fi reparate.
- Nu manipulați și nu încercați să dezamblați produsul, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea unității.
- Nu utilizați în timp ce conduceți sau folosiți utilaje grele.
- Nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere a dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul dacă se supraîncălzește sau dacă bănuieți că acesta funcționează defectuos.
- Acest dispozitiv trebuie utilizat numai cu un adaptor de alimentare SELV.
- Se recomandă utilizarea furnizorilor de alimentare standard IEC60950 pentru încărcarea dispozitivului.
- Înainte de încărcare, asigurați-vă că ștecherul și priza sunt complet uscate. În caz contrar, se pot produce șocuri electrice, scurtcircuite sau incendii.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării. Întrerupeți utilizarea în cazul în care acest dispozitiv sau încărcătorul nu funcționează corect sau pare deteriorat în orice mod. Utilizați numai cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul.
- Bateria trebuie să fie scoasă din aparat înainte de a fi eliminată. Aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când se scoate bateria, iar bateria trebuie eliminată în condiții de siguranță.
- Având în vedere eficiența măștilor LED FAQ™, vă recomandăm să nu utilizați FAQ™ 202 mai mult de 15 minute la rând.
- Folosiți această mască LED numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual. Dacă nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. specifică sau dacă aveți orice alte întrebări referitoare la funcționarea dispozitivului, vă rugăm să vizitați [faqswiss.com/support](http://faqswiss.com/support)

## CUM SE UTILIZEAZĂ FAQ™ 20 2

### DEBLOCAȚI-VĂ DISPOZITIVUL

Înainte de prima utilizare, descărcați aplicația mobilă FAQ™ Swiss pentru a vă debloca și înregistra dispozitivul, urmând acești pași simpli;




1. Descărcați aplicația FAQ™ Swiss pe telefonul dumneavoastră mobil prin scanarea codului QR.
2. Conectați-vă la contul dvs. existent sau înregistrați-vă pentru unul nou.
3. Adăugați un dispozitiv (în partea de sus a ecranului).
4. Alegeți seria dispozitivului.
5. Apăsăți și mențineți apăsat butonul universal pentru a vă conecta dispozitivul la aplicație.
6. Completați informațiile de achiziție și dispozitivul dvs. este gata de utilizare!

# APLICATIA FAQ™ SWISS



Aplicația elvețiană FAQ™ oferă instrucțiuni privind modul de utilizare și de îngrijire a măștii cu LED din silicon FAQ™. De asemenea, o puteți utiliza pentru a controla setările și pentru a accesa rutine ghidate video.

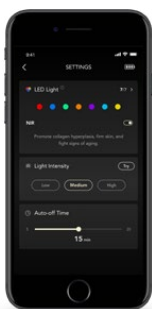

## SETĂRI

Setați-vă preferințele pentru lumina LED și durata tratamentului, iar dispozitivul le va reține pentru utilizarea offline:

### LUMINA LED

Selectați culoarea preferată a luminii LED. Apoi, selectați dacă doriți să adăugați LED cu infraroșu apropiat la tratamentul dumneavoastră, făcând clic pe butonul de comutare de lângă NIR.


### INTENSITATEA LUMINII

Selectați intensitatea preferată, alegând între Low, Medium sau High.




### TIMP DE OPRIRE AUTOMATĂ

Selectați cât timp doriți să dureze tratamentul utilizând scara descrescătoare.

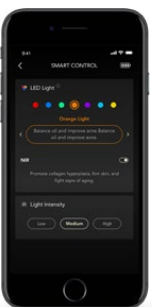

## TRATAMENTE

Alegeți unul dintre tratamentele noastre pre-programate pentru a viza probleme specifice ale pielii și urmați pur și simplu instrucțiunile video.

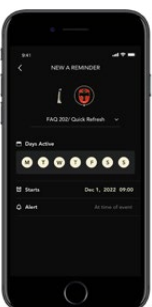

## CONTROL INTELIGENT

Utilizați această parte a aplicației ca o telecomandă pentru a vă ajusta preferințele în timpul tratamentului.

## SETAȚI REMINDER

La fel ca o alarmă pentru regimul de îngrijire a pielii, puteți primi memento-uri când este timpul pentru următorul tratament. Selectați tratamentul pentru care doriți să setați

un memento. Apoi, selectați zilele în care doriți să primiți memento-uri.

# CUM SE UTILIZEAZĂ FAQ™ 20 2

Pentru a vă putea folosi masca, TREBUIE mai întâi SĂ O DEBLOCAȚI. Puteți face acest lucru în mod automat înregistrându-vă masca prin intermediul aplicației FAQ™ Swiss pentru prima dată.

1. Începeți cu o față curată și uscată și aplicați primerul FAQ™, dacă doriți. Apoi, puneți masca de față cu LED din silicon FAQ™ 202 pe față și fixați-o cu ajutorul benzii.
2. Apăsăți butonul universal de alimentare pentru a porni masca. Puteți schimba culorile LED-ului apăsând din nou rapid butonul. Sau puteți accesa tratamentele preprogramate și mai multe setări prin intermediul aplicației FAQ™ Swiss. Pur și simplu descărcați aplicația și urmați instrucțiunile.
3. Bucurați-vă de tratamentul facial cu LED timp de până la 15 minute, în timp ce vă continuați ziua - pentru o activitate multitasking în cea mai bună formă. După ce ați terminat, apăsați butonul universal de alimentare timp de 3 secunde pentru a vă opri masca.

UTILIZARE RECOMANDATĂ: 5-15 minute, de 3-5 ori pe săptămână.

**ATENȚIE:** Nu strângeți prea tare banda pentru cap, altfel puteți deteriora masca de silicon.

## CURĂȚAREA FAQ™ 20 2

Întotdeauna curățați bine masca LED FAQ™ după utilizare. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să pulverizați masca cu FAQ™ Silicone Cleaning Spray. Apoi, umeziți o cârpă sau un prosop fără scame cu apă caldă și ștergeți bine toate reziduurile rămase.

**NOTĂ:** Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, benzină sau acetonă, deoarece acestea pot irita pielea și deteriora siliconul.

## DEPANARE

Măsuri de precauție care trebuie luate în cazul unor modificări ale performanțelor FAQ™:

În cazul în care FAQ™ 202 nu este activat la apăsarea butonului universal:

- Bateria este descărcată. Reîncărcați cu ajutorul cablului de încărcare USB timp de până la 2 ore, până la încărcare completă, apoi reporniți dispozitivul apăsând butonul universal.

În cazul în care FAQ™ 202 nu poate fi oprit și/sau butonul universal nu răspunde:

- Microprocesorul are o defecțiune temporară. Apăsăți și mențineți apăsat butonul universal pentru a reporni dispozitivul.

Dacă FAQ™ 202 nu se sincronizează cu aplicația FAQ™ Swiss:

- Dezactivați și apoi activați din nou funcția Bluetooth pentru a încerca să vă reconectați.
- Închideți aplicația FAQ™ Swiss și apoi redeschideți-o pentru a începe din nou procesul.
- Verificați dacă aplicația trebuie să fie actualizată în magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. mobil.

# TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

## ÎNREGISTRATI GARANȚIA

Pentru a vă activa garanția limitată de 2 ani, înregistrați-vă prin intermediul aplicației FAQ™ Swiss sau vizitați [faqswiss.com/product-registration](https://faqswiss.com/product-registration) pentru mai multe informații.

## GARANȚIE LIMITATĂ DE 2 ANI

FAQ™ Swiss garantează acest dispozitiv pentru o perioadă de DOUĂ (2) ANI de la data inițială de achiziție împotriva defectelor cauzate de defecte de manoperă sau de materiale care rezultă din utilizarea normală a dispozitivului. Garanția acoperă piesele de lucru care afectează funcționarea dispozitivului. NU acoperă deteriorarea cosmetică cauzată de uzura normală sau deteriorarea cauzată de accident, utilizare necorespunzătoare sau neglijență. Orice încercare de a deschide sau de a demonta dispozitivul (sau accesoriile acestuia) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și notificați FAQ™ Swiss în timpul perioadei de garanție, FAQ™ Swiss va înlocui gratuit dispozitivul, la discreția sa. Revendicările în cadrul garanției trebuie să fie susținute de dovezi rezonabile care să ateste că data reclamației se încadrează în perioada de garanție. Pentru a vă valida garanția, vă rugăm să păstrați chitanța de achiziție originală împreună cu aceste condiții de garanție pe toată durata perioadei de garanție.

Pentru a vă revendica garanția, trebuie să vă autentificați în contul dvs. la [www.faqswiss.com](https://www.faqswiss.com) și apoi să selectați opțiunea de a face o cerere de garanție. Costurile de expediere nu sunt rambursabile. Acest angajament se adaugă la drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator și nu afectează în niciun fel aceste drepturi.

## INFORMAȚIE DISPOZITALĂ

Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabil în UE și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a deșeurilor).



AMBALAJELE SUNT REALIZATE DIN MATERIALE  
RECICLABILE

DIRECTIVA PRIVIND DEȘEURILE DE  
ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE DE  
GUNOI

E  
U  
R  
O  
P  
E  
A  
N  
C  
O  
N  
F  
O  
R  
M  
I  
T  
Y




Acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie adus la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest dispozitiv este eliminat în mod corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea umană care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a dispozitivului ca deșeu. De asemenea, reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea dispozitivului dumneavoastră, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau locul de achiziție.

## ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

**NOTĂ:** Acest proces nu este reversibil. Deschiderea dispozitivului va anula garanția acestuia. Această acțiune trebuie întreprinsă numai atunci când dispozitivul este gata de a fi eliminat.

Deoarece acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion, aceasta trebuie îndepărtată înainte de a fi eliminată și nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Pentru a îndepărta bateria, tăiați și îndepărtați stratul exterior de silicon din partea în formă de diamant de pe fruntea măștii. Apoi, tăiați învelișul de plastic de-a lungul fisurii și faceți clic pe acesta pentru a-l deschide. Apoi tăiați cablul bateriei, scoateți bateria și aruncați-o în conformitate cu reglementările locale de mediu. Purtați mănuși în timpul acestui proces pentru siguranța dumneavoastră. Instrucțiuni vizuale detaliate sunt furnizate mai jos:

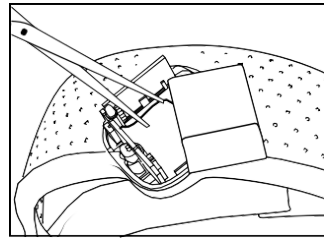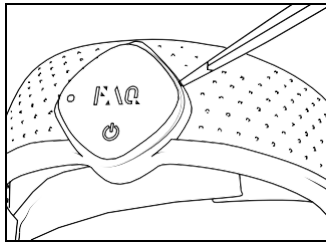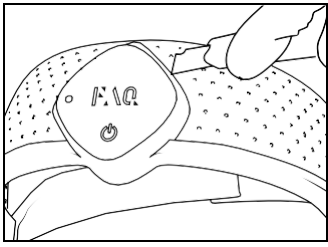

# SPECIFICAȚII

<b>MATERIALE:</b>	Silicon sigur pentru corp, PC + ABS
<b>CULOARE:</b>	Auriu / Negru
<b>DIMENSIUNE:</b>	162 x 100 x 182 mm
<b>GREUTATE:</b>	169 g
<b>BATERIE:</b>	Baterie cu litiu de 3.7V cu 680mAh
<b>UTILIZARE:</b>	Up to 2 hours of use per charge
<b>ÎN STARE DE AȘTEPTARE:</b>	90 zile
<b>NIVELUL MAXIM DE ZGOMOT:</b>	<50 dB

## DECLINAȚIE DE RESPONSABILITATE

Utilizatorii acestui dispozitiv o fac pe propriul risc. Nici FAQ™ Swiss și nici comercianții cu amănuntul nu își asumă vreo responsabilitate sau răspundere pentru orice vătămări sau daune, fizice sau de altă natură, care rezultă, direct sau indirect, din utilizarea acestui dispozitiv. În plus, FAQ™ Swiss își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a face modificări din când în când în conținutul acesteia, fără obligația de a notifica orice persoană cu privire la o astfel de revizuire sau modificare.

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

**ATENȚIE:** Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

**NOTĂ:** Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv conține un emițător (emițătoare)/receptor (receptoare) scutit(e) de licență, care este (sunt) conform(e) cu RSS-ul (RSS-urile) scutit(e) de licență al(e) Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Modelul poate fi modificat pentru îmbunătățiri fără notificare prealabilă.

# ÎNTREBĂRI FRECVENTE

## NOȚIUNI DE BAZĂ

### 1. CE VINE CU MASCA MEA FAQ™ 200 LED?

1x mască de față FAQ™ 200 LED, 1x spray de curățare cu silicon FAQ™ de 60 ml, 1x cablu de încărcare USB, 1x manual de utilizare, 1x ghid de pornire rapidă.

### 2. CE TREBUIE SĂ FAC DUPĂ CE AM PRIMIT MASCA FAQ™ 200 LED?

Felicitări pentru că ați descoperit o nouă eră de anti-îmbătrânire. Înainte de a începe primul tratament cu FAQ™ 202, trebuie să vă deblocați și să vă înregistrați dispozitivul descărcând gratuit aplicația FAQ™ Swiss și urmând instrucțiunile din aplicație. (Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos intitulată "APLICAȚIA").

### 3. CUM PORNESC MASCA MEA FAQ™ 200 LED?

Apăsați butonul universal de alimentare de pe masca LED pentru a o porni.

### 4. CUM ÎMI POT OPRI MASCA FAQ™ 200 LED?

Țineți apăsat butonul universal de alimentare de pe masca LED timp de 3 secunde pentru a o opri. Dispozitivul dvs. se va opri automat după 15 minute.

## TRATAMENT

### 5. CUM ÎNCEP PRIMUL MEU TRATAMENT?

În primul rând, curățați și uscați cu grijă fața și gâtul și aplicați primerul FAQ™, dacă doriți. Apoi, puneți masca FAQ™ 200 LED Face Mask pe față și fixați-o cu ajutorul benzii de cap. Apăsați butonul universal de alimentare pentru a porni masca. Puteți schimba culorile LED-ului apăsând din nou rapid butonul. (Cu FAQ™ 202, puteți accesa, de asemenea, mai multe setări și tratamente preprogramate prin intermediul aplicației FAQ™ Swiss). Bucurați-vă de tratamentul facial cu LED timp de până la 15 minute, în timp ce vă continuați ziua - pentru un multitasking în cea mai bună formă. După ce ați terminat, apăsați butonul universal de alimentare timp de 3 secunde pentru a vă opri masca.

### 6. POT FOLOSI PROPRIA MEA ÎNGRIJIRE A PIELII CU MASCA FAQ™ 200 LED?

Vă recomandăm să folosiți primerul FAQ™ cu masca FAQ™ 200 LED Mask datorită proprietăților sale puternice anti-îmbătrânire. Cu toate acestea, puteți folosi în schimb propria îngrijire a pielii, dacă doriți. Dar asigurați-vă că produsele de îngrijire a pielii pe care le folosiți nu conțin silicoane sau acizi, sau ingrediente fotosensibile, cum ar fi vitamina A, retinol, AHA, peroxid de benzoil și vitamina C.

### 7. CÂT DE DES POT FOLOSI MASCA MEA FAQ™ 200 LED?

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați FAQ™ LED Mask timp de 5-15 minute, de 3-5 ori pe săptămână.

### 8. CE ESTE TERAPIA LED?

Terapia cu LED-uri, sau cu diode emițătoare de lumină, este un tratament de îngrijire a pielii care utilizează diferite lungimi de undă de lumină. Inițial, NASA a dezvoltat-o pentru experimentele de creștere a plantelor în cadrul misiunilor navetei, iar mai târziu a constatat că este promițătoare pentru tratarea rănilor. Terapia cu lumină LED este folosită acum de esteticieni pentru a ajuta la regenerarea pielii în urma îmbătrânirii.

### 9. ESTE TERAPIA CU LED-URI SIGURĂ?

Spre deosebire de alte tipuri de terapie cu lumină, LED-urile nu conțin raze ultraviolete. Prin urmare, acestea sunt sigure pentru utilizarea regulată. De asemenea, terapia cu lumină LED nu provoacă arsuri precum alte tratamente anti-îmbătrânire, cum ar fi peelingul chimic, dermabraziunea și terapia cu laser.

## APLICATIE

### 10. CUM ÎMI ASOCIEZ MASCA FAQ™ 202 LED CU APLICAȚIA FAQ™ SWISS?

În primul rând, descărcați aplicația FAQ™ Swiss pe smartphone-ul sau tableta dvs. și activați Bluetooth pe smartphone/tabletă. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul universal de pe mască timp de 3 secunde. Masca va deveni albastră pentru a indica faptul că se află în modul de împerechere Bluetooth. Apoi,

urmați pur și simplu instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza împerecherea măștii cu aplicația. (NOTĂ: Masca dvs. trebuie să fie oprită înainte de a o putea pune în modul de împerechere Bluetooth).

### **11. MASCA MEA FAQ™ 202 LED FUNCȚIONEAZĂ FĂRĂ APLICAȚIE?**

Da, vă puteți utiliza manual masca fără aplicația FAQ™ Swiss. Pur și simplu comutați între culorile LED-ului apăsând butonul universal de alimentare. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, înainte de a utiliza masca pentru prima dată, trebuie să o deblocați și să o înregistrați prin intermediul aplicației FAQ™ Swiss.

### **12. CARE SUNT AVANTAJELE UTILIZĂRII APLICAȚIEI FAQ™ SWISS?**

Aplicația elvețiană FAQ™ Swiss oferă un tratament facial preprogramat de care să vă bucurați, precum și o funcție de telecomandă fără fir. De asemenea, vă oferă setări avansate pe care le puteți salva pe dispozitiv, în funcție de preferințele dumneavoastră, pentru următoarea dată când îl veți porni. În plus, vă puteți înregistra garanția și puteți accesa instrucțiunile de utilizare prin intermediul aplicației.

## DEPANARE ȘI ÎNTREȚINERE

### **13. CE ÎNSEAMNĂ CÂND MASCA MEA CU LED FAQ™ CLIPEȘTE ÎN ROȘU DE 3 ORI?**

Masca dumneavoastră va clipi în roșu de 3 ori pentru a indica faptul că bateria este descărcată. Reîncărcați masca cu ajutorul cablului de încărcare USB furnizat timp de până la 2 ore, până la încărcare completă.

### **14. CE ÎNSEAMNĂ CĂ MASCA MEA CU LED FAQ™ CLIPEȘTE ÎN ALBASTRU?**

Masca dvs. va clipi în albastru pentru a indica faptul că este în modul de împerechere Bluetooth și este gata să se conecteze la aplicație.

### **15. CUM ÎMI CURĂȚ DISPOZITIVUL FAQ™?**

Întotdeauna curățați bine masca LED FAQ™ după utilizare. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să pulverizați masca cu FAQ™ Silicone Cleaning Spray. Apoi, umeziți o cârpă sau un prosop fără scame cu apă caldă și ștergeți bine toate reziduurile rămase.

(NOTĂ: Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, benzină sau acetonă, deoarece acestea pot irita pielea și deteriora siliconul).

NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA.  
DESIGNED AND DEVELOPED BY / CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FAQ GmbH.  
**WWW.FAQSWISS.COM**