

FAQTM



FAQTM 411

URZĄDZENIE DO UJĘDRNIANIA CIAŁA
Z MIKROPRĄDAMI I CZERWONYM ŚWIATŁEM LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy zakupu urządzenia FAQ™ 401. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami profesjonalnej technologii w zaciszu własnego domu, poświęć chwilę na dokładne przeczytanie instrukcji zawartych w tym podręczniku.

Prosimy o **DOKŁADNE PRZECZYTANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA** i korzystanie z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ TEGO URZĄDZENIA.

FAQ™ 411

Wraz z upływem czasu, nasza skóra traci jędrność, elastyczność i sprężystość, co staje się coraz bardziej widoczne. Łącząc mikroprądy z czerwonym światłem LED, FAQ™ 411 pomaga wygładzić widoczność cellulitu na udach, jednocześnie modelując pośladki, ramiona i brzuch. Dzięki temu możesz z pewnością eksponować swoje ciało.

POZNAJ FAQ™ 411

PRZYCISK UNIWERSALNY

Włącza i wyłącza urządzenie oraz przełącza je w tryb parowania Bluetooth, aby połączyć je z aplikacją.

4 METALOWE SFERY

Dostarczają mikroprąd bezpośrednio do skóry i mięśni poniżej, aby wymodelować sylwetkę.

CZERWONE ŚWIATŁO LED

Wspomaga produkcję kolagenu, poprawiając wygląd cellulitu, zmarszczek i plam starczych.

PULSACJE T-SONIC™

Stymulują mikrokrążenie, poprawiając dostarczanie tlenu i niezbędnych składników odżywczych do komórek, przyspieszając proces odnowy skóry.

PRZYCISKI PLUS & MINUS

Dostosuj intensywność mikroprądu, aby idealnie dopasować go do swoich potrzeb.

DIODY

Wskazują poziom intensywności mikroprądów w urządzeniu. Migają, aby sygnalizować, kiedy urządzenie znajduje się w trybie parowania Bluetooth, trybie Remote Control oraz kiedy wymaga naładowania.

PORT ŁADUJĄCY


Do 180 minut użytkowania na jednym ładowaniu z dołączonym kablem USB. W 100% wodoodporne zamknięcie.

INTELENTNY SZWAJCARSKI DESIGN

Lekki i delikatnie wygięty, aby dopasować się do konturów dłoni i ciała, z instruktażowymi filmami dostępnymi w aplikacji FAQ™ Swiss.


RODZAJE MIKROPRĄDÓW

FAQ™ 411 oferuje 2 rodzaje mikroprądu, z których każdy ma swoje wyjątkowe korzyści:

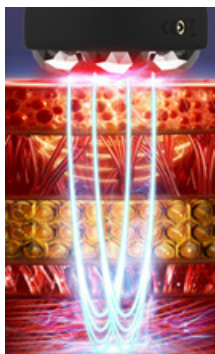

Sculpting Microcurrent™

Kieruje mikroprąd w głąb mięśni, skutecznie ujędrniając i zapewniając wymodelowany wygląd.

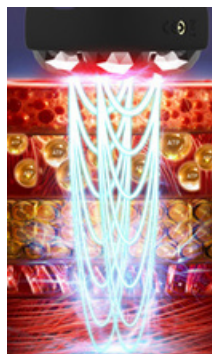

Advanced Microcurrent™

Stały prąd stymuluje mięśnie na każdej warstwie, wzmacniając je, jednocześnie napinając skórę na powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA FAQ™ 411

ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Aby użyć swoje urządzenia, musisz najpierw je odblokować. Można to zrobić automatycznie, rejestrując urządzenie za pomocą aplikacji FAQ™ Swiss po raz pierwszy. Wystarczy wykonać poniższe kroki:



1. Pobierz aplikację FAQ™ Swiss na swój telefon, skanując kod QR.
2. Zaloguj się na swoje istniejące konto lub zarejestruj nowe.
3. Dodaj urządzenie (na górze ekranu).
4. Wybierz serię urządzenia.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i wypełnij informacje o zakupie.

SPOSÓB UŻYCIA



1. NAŁÓŻ SERUM

Upewnij się, że skóra oraz urządzenie FAQ™ 411 są czyste i suche. Następnie równomiernie nałóż serum FAQ™ Body Sculpt na wszystkie obszary, które chcesz poddać zabiegowi, pozostawiając cienką warstwę przypominającą maskę na powierzchni skóry.



2. WYBIERZ USTAWIENIA

Naciśnij przycisk uniwersalny, aby włączyć urządzenie FAQ™ 411. Dostosuj intensywność mikroprądu za pomocą przycisków + i -. Dostęp do dodatkowych ustawień uzyskasz za pomocą aplikacji FAQ™ Swiss.



3. WYMODELUJ I UJĘDRNIJ

Przyciśnij wszystkie cztery metalowe kule do skóry z umiarkowanym lub mocnym naciskiem, a następnie powoli przesuwaj urządzenie w górę po nogach, pośladkach, brzuchu i ramionach, w zależności od potrzeb – przez maksymalnie 5 minut na każdy obszar. Dostęp do filmów instruktażowych dla konkretnych obszarów znajdziesz w aplikacji FAQ™ Swiss.

WAŻNE INFORMACJE

- Urządzenia z mikroprądem, takie jak FAQ™ 411, muszą być używane z serum przewodzącym. Dla najlepszych rezultatów zalecamy używanie FAQ™ Body Sculpt Serum – opracowanego specjalnie do użytku z urządzeniami FAQ™ do mikroprądu do ciała.
- Pozostaw cienką warstwę serum FAQ™ Body Sculpt na skórze, aby urządzenie mogło płynnie się przesuwać. Jeśli traktujesz wiele obszarów w jednej sesji, możesz nałożyć serum na każdy obszar przed zastosowaniem mikroprądu.
- Ogół każdą nadmierną ilość włosów w obszarze zabiegowym, ponieważ może to powodować uczucie mrowienia.
- Dla optymalnych rezultatów upewnij się, że wszystkie 4 metalowe kulki mikroprądu stykają się ze skórą podczas zabiegu.
- Zalecane stosowanie: raz na 24 godziny. Przez pierwsze 60 dni zalecamy stosowanie co najmniej 5 razy w tygodniu. Po 60 dniach lub po osiągnięciu pożądanych wyników, 2-3 razy w tygodniu w celu utrzymania efektów.

OSTRZEŻENIE

DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie używaj urządzenia, jeśli masz historię epilepsji lub napadów padaczkowych.
- Nie używaj go po niedawno przebytej operacji lub zabiegach chirurgicznych – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Nie stosuj urządzenia, jeśli posiadasz wszczepiony rozrusznik serca, stymulator rytmu serca lub inne aktywne urządzenia elektroniczne w ciele. Może to prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, zakłóceń działania urządzeń medycznych, a nawet śmierci.
- Nie używaj urządzenia w przypadku choroby nowotworowej lub w celu działania na podejrzaną zmianę skórne – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z urządzenia – bezpieczeństwo elektrostymulacji w czasie ciąży nie zostało potwierdzone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla niemowląt i dzieci poniżej 18. roku życia. Przechowuj je poza ich zasięgiem.
- Z urządzenia nie powinny korzystać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby bez odpowiedniego przeszkolenia – chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie nie służy do leczenia schorzeń medycznych. W przypadku występowania zmian skórnych (np. znamiona, wysypki, swędzenie, infekcje, guzki, brodawki itp.), skonsultuj się z lekarzem.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapobiec używaniu urządzenia jako zabawki.

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

- Masz jakiegokolwiek z powyższych przeciwwskazań
- Jesteś w trakcie leczenia lub przyjmujesz leki (np. fotouczulające) lub zioła, które mogą powodować reakcje skórne,
- Odczuwasz ból w konkretnych obszarach przed użyciem,
- Wystąpi jakakolwiek reakcja niepożądana podczas lub po użyciu urządzenia.

Nie stosuj urządzenia:

- Na klatce piersiowej – może to zwiększyć ryzyko zaburzeń rytmu serca, w tym migotania, które może być śmiertelne,
- Nie używaj urządzenia w obecności sprzętu medycznego do monitorowania (np. monitory serca, EKG) ani w pobliżu (np. 1 m) sprzętu do terapii falami krótkimi, mikrofalami lub elektromagnetycznymi falami, ponieważ może to spowodować awarię sprzętu medycznego. Tego typu sprzęt może powodować niestabilność w działaniu urządzenia i poparzenia w miejscu stymulacji.
- Urządzenia nie należy stosować na lub w pobliżu zmian rakowatych ani otwartych ran, takich jak wysypki, zaczerwienienia, opuchnięcia, zainfekowane lub zapalne obszary skóry, ani wykwitów skórnych, np. zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, pęknięte naczynia włosowate, żylaki itp.
- Urządzenia nie należy stosować na szyi, ponieważ może to spowodować silne skurcze mięśni prowadzące do zamknięcia dróg oddechowych, trudności w oddychaniu lub niepożądane skutki na rytm serca lub ciśnienie krwi.
- Urządzenie należy stosować tylko na normalnej, nienaruszonej, czystej i zdrowej skórze.
- Podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn lub wykonywania czynności, przy których mimowolne skurcze mięśni mogą stwarzać zagrożenie,
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone (np. po upadku, zalaniu) lub działa niestabilnie,
- Jeśli nosisz urządzenie medyczne, np. pompę insulinową.

Ważne środki ostrożności:

- W razie przegrzania – natychmiast wyłącz urządzenie.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody (wanna, prysznic, zlew).
- Nie upuszczaj urządzenia ani nie wkładaj niczego do jego otworów.
- Nie używaj w pobliżu sprzętu medycznego (np. EKG, monitorów pracy serca) ani urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne (np. mikrofały), ponieważ może to zaburzyć ich działanie lub spowodować oparzenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu zmian nowotworowych, otwartych ran, stanów zapalnych skóry, zakrzepów, żylaków itp.
- Nie stosuj urządzenia na szyi – może to wywołać silne skurcze mięśni, utrudnienia w oddychaniu lub zaburzenia pracy serca.
- Stosuj urządzenie tylko na czystej, zdrowej, nienaruszonej skórze.
- Nie demontuj urządzenia – grozi to uszkodzeniem, porażeniem prądem lub utratą gwarancji. Nie zawiera ono części możliwych do samodzielnej naprawy.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i kabli zalecanych przez producenta.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie wykonuj żadnych czynności innych niż zalecane w instrukcji.
- Nie demontuj urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie, awarię, porażenie prądem, pożar lub obrażenia. Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawić. **Uwaga: Demontaż unieważnia gwarancję.**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku kosmetycznego i przez osoby w dobrym stanie zdrowia. Jeśli nie masz pewności co do swojego stanu zdrowia, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

- Długoterminowe skutki stosowania przezskórnych stymulatorów elektrycznych nie są znane.
- W przypadku podejrzenia lub zdiagnozowanej choroby serca należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Zachowaj ostrożność podczas stosowania stymulacji w okolicy macicy w czasie menstruacji.
- Podczas użytkowania urządzenia może wystąpić lekkie mrowienie – jest to normalne zjawisko. W celu zmniejszenia lub wyeliminowania tego odczucia można obniżyć poziom intensywności.
- W razie podejrzenia negatywnej reakcji na działanie urządzenia, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Zgłaszano przypadki podrażnień skóry i oparzeń w miejscach kontaktu elektrod ze skórą przy stosowaniu innych urządzeń do elektrostymulacji. W razie wystąpienia podrażnienia lub pieczenia – natychmiast przerwij użytkowanie.
- Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzeń skóry, oczu lub wzroku (łącznie z ryzykiem utraty widzenia). Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją. Chroń oczy przed ekspozycją – nie stosuj urządzenia na powiekach ani w ich pobliżu.
- Jeśli podczas użytkowania pojawi się utrzymujący się ból lub dyskomfort – natychmiast przerwij użytkowanie.
- Urządzenie zawiera niewymienialną baterię. Przed wyrzuceniem należy ją wyjąć. Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed demontażem baterii. Zużyta baterię należy utylizować w sposób bezpieczny.
- Produkt nie zawiera żadnych części możliwych do serwisowania przez użytkownika.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz oznaki wycieku z wewnętrznej baterii.
- Nie przechowuj urządzenia w następcznym miejscu ani na gorących powierzchniach – wysokie temperatury mogą je uszkodzić.
- Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania i konserwacji zawartych w niniejszym podręczniku skutkuje utratą gwarancji.
- Przed użyciem sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń w obszarze optyki emisji lub obudowie urządzenia. W razie uszkodzeń – nie używaj urządzenia.
- Używaj wyłącznie kabla USB dołączonego do zestawu.
- Urządzenie należy zasilать wyłącznie za pomocą zasilacza SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie).
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche – w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – do kosmetycznego użytku na ciele, zgodnie z opisem w instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania, np. stosowania na inne obszary ciała lub twarzy, podłączenia do niewłaściwego źródła zasilania, użycia zanieczyszczonych elektrod czy niezgodnych akcesoriów.

CZYSZCZENIE FAQ™ 411

Zawsze dokładnie czyść urządzenie FAQ™ 411 po użyciu. Umyj metalowe sfery oraz silikonową powierzchnię wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Osusz delikatnie ściereczką lub ręcznikiem, który nie pozostawia włókien i nie jest szorstki. Dla optymalnych rezultatów zalecamy raz w tygodniu spryskać urządzenie środkiem FAQ™ Silicone Cleaning Spray i opłukać ciepłą wodą.

UWAGA: Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażniać skórę i uszkodzić silikon.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności w przypadku zmian w działaniu urządzenia FAQ™ 411 :

Jeśli urządzenie FAQ™ 411 nie włącza się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku:

- Bateria jest rozładowana. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB przez maksymalnie 1,5 godziny, aż do pełnego naładowania, a następnie uruchom je ponownie, przytrzymując uniwersalny przycisk.
-

Jeśli urządzenia FAQ™ 411 nie można wyłączyć i/lub uniwersalny przycisk nie reaguje:

- Procesor mikrokomputera tymczasowo nie działa prawidłowo. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli urządzenie FAQ™ 411 nie łączy się z aplikacją FAQ™ Swiss:

- Wyłącz, a następnie ponownie włącz Bluetooth, aby spróbować nawiązać połączenie.
- Zamknij aplikację FAQ™ Swiss, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa.
- Sprawdź, czy aplikacja wymaga aktualizacji w sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu mobilnym.

WARUNKI GWARANCJI

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj urządzenie za pośrednictwem aplikacji FAQ™ Swiss lub odwiedź stronę faqswiss.com/product-registration, aby uzyskać więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FAQ™ Swiss udziela gwarancji na to urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od daty pierwotnego zakupu, obejmującej wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów, powstałe podczas normalnego użytkowania urządzenia.

Gwarancja obejmuje elementy robocze mające wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych wynikających z normalnego zużycia, ani uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Jakakolwiek próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia (lub jego akcesoriów) unieważnia gwarancję.

Jeśli wykryjesz wadę i poinformujesz o niej FAQ™ Swiss w okresie gwarancyjnym, firma według własnego uznania wymieni urządzenie bezpłatnie. Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte odpowiednimi dowodami potwierdzającymi, że zgłoszenie nastąpiło w okresie objętym gwarancją.

Aby potwierdzić ważność gwarancji, zachowaj oryginał dowodu zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres jej trwania.

Aby zgłosić reklamację gwarancyjną, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.faqswiss.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia reklamacji.

Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i stanowi ich uzupełnienie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i innych krajach europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów).



OPAKOWANIE JEST
WYKONANE Z
MATERIAŁU
NADAJĄCEGO SIĘ DO
RECYKLINGU



DYREKTYWA W SPRAWIE
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO



ZGODNOŚĆ
Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI



CZĘŚĆ
STOSOWANA
TYPU BF



KONSULTUJ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI


To urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad domowy, lecz raczej dostarczone do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami urządzenia. Recykling materiałów pomoże również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub miejscem zakupu.

DEMONTAŻ BATERII

UWAGA: Proces ten nie jest odwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Czynność tę należy wykonać tylko wtedy, gdy urządzenie jest gotowe do utylizacji.

Ponieważ to urządzenie zawiera baterię litowo-jonową, baterię należy wyjąć przed utylizacją i nie należy jej wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, należy przeciąć i usunąć silikonową warstwę zewnętrzną z części w kształcie rombu na czole maski. Następnie należy przeciąć plastikową powłokę wzdłuż pęknięcia i podważyć ją. Następnie odetnij kabel akumulatora, wyjmij akumulator i zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa podczas tego procesu należy nosić rękawice. Szczegółowe instrukcje wizualne znajdują się poniżej:

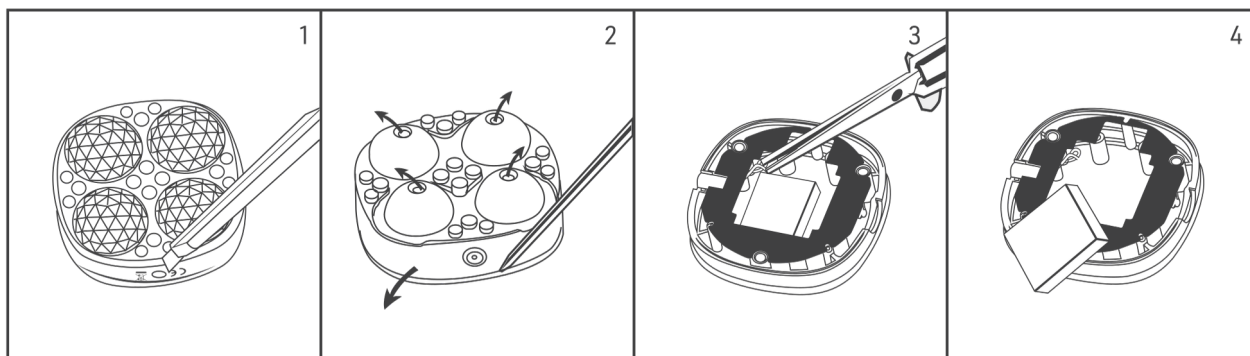

SPECYFIKACJA

MATERIAŁY: Silikon bezpieczny dla ciała, ABS, PC, Stop cynkowy z powłoką chromową

WYMIARY: 81,3 x 81,3 x 38,5 mm

WAGA: 140g

POJEMNOŚĆ BATERII: 520mAh

CZAS PRACY: Do 180 minut użytkowania na jedno ładowanie (1,5 godziny)

STAN GOTOWOŚCI: 90 dni

MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU: <50 dB

ZASTRZEŻENIE

Użytkownicy tego urządzenia robią to na własne ryzyko. Firma FAQ™ Swiss ani jej detaliści nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, które mogą wystąpić bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użytkowania tego urządzenia. Ponadto, FAQ™ Swiss zastrzega sobie prawo do zmiany tej publikacji oraz wprowadzania zmian w jej treści od czasu do czasu, bez obowiązku powiadamiania osób o takich zmianach.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC oraz zawiera nadajnik/odbiorcę wolny od licencji, który jest zgodny z przepisami dotyczącymi urządzeń wolnych od licencji wydanymi przez Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń. (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. FAQ™ deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dla produktu jest dostępny na stronie www.faqswiss.com/support/eu-conformity.

Model może zostać zmieniony w celu poprawy produktu bez uprzedzenia.

Dodatkowe informacje prawne i regulacyjne są dostępne w aplikacji. Aby je zobaczyć, wystarczy wykonać poniższe kroki:

Krok 1: Otwórz aplikację FAQ™ Swiss i wybierz ikonę profilu

Krok 2: Wybierz opcję „Legal & Regulatory”

Krok 3: Wybierz swoje urządzenie.

