

FAQTM



FAQTM 402

URZĄDZENIE DO UJĘDRNIANIA TWARZY I SZYI Z PODWÓJNYM
MIKROPRĄDEM I TERAPIĄ LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy zakupu urządzenia FAQ™ 402. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami profesjonalnej technologii w zaciszu własnego domu, poświęć chwilę na dokładne przeczytanie instrukcji zawartych w tym podręczniku.

Prosimy o **DOKŁADNE PRZECZYTANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA** i korzystanie z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ TEGO URZĄDZENIA.

FAQ™ 402

W miarę jak nasza skóra dojrzewa, staje przed nowymi wyzwaniami, takimi jak utrata jędrności, głębsze zmarszczki i matowość. Dzięki zaawansowanemu mikroprądowi i światłu LED, FAQ™ 402 zapewnia niezrównane efekty, oferując młodszy, wymodelowany wygląd skóry jednym naciśnięciem przycisku.

POZNAJ FAQ™ 402

4 METALOWE SFERY

Dostarczają mikroprąd bezpośrednio do skóry i mięśni poniżej, aby unieść i wymodelować wygląd skóry. Dodatkowo, dzięki elektroporacji, zwiększają wchłanianie aktywnych składników z Twoich kosmetyków.

MASAŻ T-SONIC™

Relaksuje punkty napięcia mięśni twarzy i poprawia drenaż limfatyczny, zapobiegając powstawaniu zmarszczek, poprawiając promienność skóry i redukując opuchliznę.

PRZYCISKI PLUS & MINUS

Dostosuj intensywność mikroprądu, aby idealnie dopasować go do swoich potrzeb.

SZWAJCARSKI DESIGN

Lekka konstrukcja z delikatnymi krzywiznami, które idealnie dopasowują się do konturów twarzy i dłoni, a także z instruktażowymi filmami w aplikacji FAQ™ Swiss.

TERAPIA ŚWIATŁEM NIR, CZERWONYM I NIEBIESKIM

Wspomaga produkcję kolagenu, poprawia strukturę skóry i redukuje oznaki starzenia dzięki różnorodnym długościom fal.

PRZECISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Włącza i wyłącza urządzenie oraz przełącza urządzenie w tryb parowania Bluetooth, aby połączyć je z aplikacją.

DIODY


Wskazują poziom intensywności mikroprądu w urządzeniu. Migają, aby poinformować o trybie parowania Bluetooth, trybie Smart Control oraz gdy urządzenie wymaga naładowania.

PORT ŁADUJĄCY

Do 240 minut użytkowania na jednym ładowaniu z dołączonym kablem USB. W 100% wodoodporne zamknięcie.


RODZAJE MIKROPRĄDÓW

FAQ™ 402 oferuje 4 rodzaje mikroprądu, z których każdy ma swoje wyjątkowe korzyści:

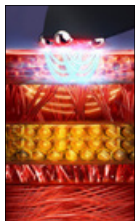


Tapping Microcurrent™

Szybkie i krótkie fale prądu przepływają przez górne warstwy skóry oraz powierzchniowe mięśnie, aby rozjaśnić, wygładzić skórę.

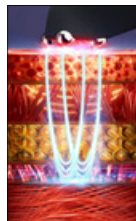

Lifting Microcurrent™

Prąd jest stopniowo zmieniany z niskiej na wysoką częstotliwość, delikatnie pobudzając średnie mięśnie do naturalnego uniesienia, zapewniając wymodelowany wygląd.

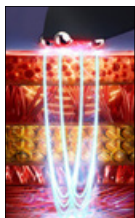

Sculpting Microcurrent™

Kieruje mikroprąd w głąb mięśni, skutecznie ujędrniając i zapewniając wymodelowany wygląd.



Advanced Microcurrent™


Stały prąd stymuluje mięśnie na każdej warstwie, wzmacniając je, jednocześnie napinając skórę na powierzchni.



SPOSÓB UŻYCIA FAQ™ 402

ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Aby użyć swoje urządzenia, musisz najpierw je odblokować. Można to zrobić automatycznie, rejestrując urządzenie za pomocą aplikacji FAQ™ Swiss po raz pierwszy. Wystarczy wykonać poniższe kroki:

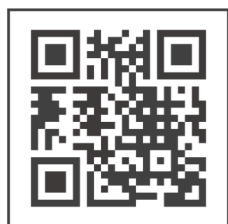


1. Pobierz aplikację FAQ™ Swiss na swój telefon, skanując kod QR.
2. Zaloguj się na swoje istniejące konto lub zarejestruj nowe.
3. Dodaj urządzenie (na górze ekranu).
4. Wybierz serię urządzenia.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i wypełnij informacje o zakupie.

SPOSÓB UŻYCIA




1. NAŁÓŻ PRZEWODZĄCY PRIMER

Upewnij się, że zarówno skóra, jak i urządzenie FAQ™ są całkowicie czyste i suche. Następnie równomiernie nałóż FAQ™ P1 Manuka Honey Primer na obszary twarzy/szyi, które chcesz poddać zabiegowi, pozostawiając cienką warstwę przypominającą maskę na powierzchni skóry.

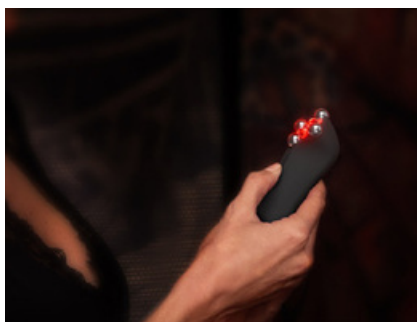

2. WYBIERZ USTAWIENIA

Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie FAQ™ 402. Dostosuj intensywność mikroprądu, naciskając przyciski + i -. Więcej ustawień możesz znaleźć w aplikacji FAQ™ Swiss.

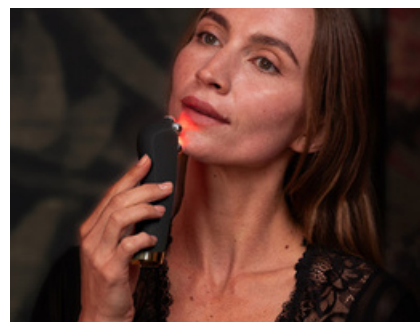

3. UJĘDRNIAJ I MODELUJ

Lekko przyciśnij wszystkie cztery metalowe sfery do skóry, a następnie powoli przesuwaj urządzenie w górę i na zewnątrz, wzdłuż kości policzkowych, czoła, wokół ust, a także po linii żuchwy i szyi, zgodnie z potrzebami. Początkujący mogą skorzystać z jednego z naszych zabiegów sterowanych przez AI w aplikacji, aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki.

WAŻNE INFORMACJE

- Urządzenia mikroprądowe, takie jak FAQ™ 402, muszą być stosowane z primerem przewodzącym. Dla optymalnych wyników, zalecamy stosowanie FAQ™ P1 Manuka Honey Primer – formułowanego z 17 aminokwasami naprawczymi, opracowanego specjalnie do użycia z urządzeniami mikroprądowymi FAQ™ do twarzy.
- Pozostaw ciekłą warstwę FAQ™ P1 Manuka Honey Primer na skórze, aby urządzenie mogło gładko się przesuwać. Jeśli traktujesz wiele obszarów podczas jednej sesji, możesz nałożyć primer na każdy obszar przed zastosowaniem mikroprądu na danym obszarze.
- Nigdy nie używaj urządzeń mikroprądowych, takich jak FAQ™ 402, na linii środkowej kości szyi ani w obrębie kości oczodołowych.
- Dla optymalnych wyników, upewnij się, że wszystkie 4 metalowe sfery dotykają skóry podczas zabiegu. W przypadku mniejszych obszarów twarzy, gdzie może to być trudne, zawsze upewnij się, że przynajmniej 2 metalowe sfery dotykają skóry.
- Zawsze przesuwaj urządzenie w górę i na zewnątrz, od środka twarzy w kierunku linii włosów.
- Zalecane użycie: raz na 24 godziny. Przez pierwsze 60 dni zaleca się co najmniej 5 razy w tygodniu. Po 60 dniach lub po osiągnięciu pożądaných rezultatów, 2-3 razy w tygodniu w celu utrzymania efektów.

OSTRZEŻENIE

DLA BEZPIECZEŃSTWA:

- Ujędrnianie skóry twarzy za pomocą FAQ™ 402 powinno być komfortowe – jeśli doświadczysz jakiegokolwiek dyskomfortu lub podrażnienia, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia na klatce piersiowej/okolicach piersi, w okolicach oczu (mięsień okrężny w obrębie oczodołu), na linii środkowej (kości) szyi ani w okolicach intymnych.
- Nie stosuj na zaczerwienionej skórze, wypukłych pieprzykach, głównych tętnicach (np. szyjna), rozszerzonych naczynek, implantach metalowych, zakażonych miejscach lub obszarach pozbawionych czucia.
- Nie używaj urządzenia do leczenia trądziku różowatego, pieprzyków, brodawek, otwartych ran, zmian nowotworowych ani innych chorób skóry.
- Nie stosuj, jeśli cierpisz na jakiegokolwiek choroby, takie jak padaczka, choroby krwotoczne, nowotwory, guzy lub zaburzenia percepcji.
- Nie używaj, jeśli jesteś po zabiegach laserowych, peelingach chemicznych lub po innych zabiegach uszkadzających skórę.
- Nie używaj, jeśli miałaś operację plastyczną twarzy.
- Nie używaj, jeśli posiadasz wszczepione urządzenie medyczne lub inne elektroniczne przyrządy wspomagające ciało.
- Sprzęt monitorujący, taki jak EKG i alarmy EKG, może nie działać prawidłowo podczas użycia urządzenia.
- FAQ™ 402 nie powinno być używane przez dzieci, w ich pobliżu ani przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi. Wymagana jest ścisła kontrola podczas używania, czyszczenia lub przechowywania urządzenia w ich pobliżu.
- Długoterminowe skutki stosowania mikroprądów są nieznane.
- Bezpieczeństwo używania urządzenia w czasie ciąży nie zostało potwierdzone. W przypadku ciąży skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
- Jeśli masz choroby skóry lub jakiegokolwiek obawy medyczne, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
- Jeśli masz podejrzenie lub zdiagnozowaną chorobę serca, przestrzegaj zaleceń lekarza.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas ujędrniania skóry w okolicy oczu i nigdy nie przykładaj urządzenia do powiek ani samych oczu.
- Podczas używania urządzenia może wystąpić wrażenie migających świateł, wynikające z pobudzenia nerwu wzrokowego. Jeśli zauważysz ten objaw bez używania urządzenia, skontaktuj się z lekarzem.
- Delikatne mrowienie podczas używania urządzenia jest normalne i nie powinno budzić niepokoju. Obniżenie intensywności może zmniejszyć lub wyeliminować to odczucie.
- Ze względu na skuteczność zabiegów FAQ™, nie zaleca się używania funkcji mikroprądu dłużej niż 3 minuty na jeden obszar.
- Ze względów higienicznych nie zaleca się dzielenia urządzenia FAQ™ 402 z innymi osobami.
- Nie używaj podczas prowadzenia pojazdu ani obsługi maszyn.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest podłączone do ładowania.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli się przegrzewa lub podejrzewasz, że jest uszkodzone.
- Unikaj pozostawiania FAQ™ 402 na słońcu i nigdy nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur lub wrzątku.
- FAQ™ 402 powinno być całkowicie suche przed aktywowaniem funkcji mikroprądu. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało zanurzone w wodzie ani nie używaj z mokrymi rękami.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie z zasilaczem SELV.
- Zaleca się stosowanie zasilaczy zgodnych z normą IEC60950 do ładowania urządzenia.
- Przed ładowaniem upewnij się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Przerwij użycie, jeśli urządzenie lub ładowarka nie działa prawidłowo lub wydaje się uszkodzone. Używaj wyłącznie kabla USB dołączonego do urządzenia.
- Bateria musi zostać wyjęta z urządzenia przed jego utylizacją. Przed wyjęciem baterii należy odłączyć urządzenie od zasilania, a bateria powinna zostać zutytylizowana w bezpieczny sposób.
- Produkt nie zawiera części wymiennych.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku kosmetycznego na twarzy i szyi. Wszelkie szkodliwe skutki wynikające z niewłaściwego użycia, stosowania na innych częściach ciała, podłączenia do nieprawidłowych źródeł zasilania, brudnego primeru lub kulek przewodzących nie są odpowiedzialnością firmy FAQ™.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie lub masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące działania urządzenia, odwiedź: faqswiss.com/support.

CZYSZCZENIE FAQ™ 402

Zawsze dokładnie czyść urządzenie FAQ™ 401 po użyciu. Umyj metalowe sfery oraz silikonową powierzchnię wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Osusz delikatnie ściereczką lub ręcznikiem, który nie pozostawia włókien i nie jest szorstki. Dla optymalnych rezultatów zalecamy raz w tygodniu spryskać urządzenie środkiem FAQ™ Silicone Cleaning Spray i opłukać ciepłą wodą.

UWAGA: Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażniać skórę i uszkodzić silikon.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności w przypadku zmian w działaniu urządzenia FAQ™ 401:

Jeśli urządzenie FAQ™ 401 nie włącza się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku:

- Bateria jest rozładowana. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB przez maksymalnie 1,5 godziny, aż do pełnego naładowania, a następnie uruchom je ponownie, przytrzymując uniwersalny przycisk.

Jeśli urządzenia FAQ™ 401 nie można wyłączyć i/lub uniwersalny przycisk nie reaguje:

- Procesor mikrokomputera tymczasowo nie działa prawidłowo. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli urządzenie FAQ™ 401 nie łączy się z aplikacją FAQ™ Swiss:

- Wyłącz, a następnie ponownie włącz Bluetooth, aby spróbować nawiązać połączenie.
- Zamknij aplikację FAQ™ Swiss, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa.
- Sprawdź, czy aplikacja wymaga aktualizacji w sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu mobilnym.

WARUNKI GWARANCJI

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj urządzenie za pośrednictwem aplikacji FAQ™ Swiss lub odwiedź stronę faqswiss.com/product-registration, aby uzyskać więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FAQ™ Swiss udziela gwarancji na to urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od daty pierwotnego zakupu, obejmującej wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów, powstałe podczas normalnego użytkowania urządzenia.

Gwarancja obejmuje elementy robocze mające wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych wynikających z normalnego zużycia, ani uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Jakakolwiek próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia (lub jego akcesoriów) unieważnia gwarancję.

Jeśli wykryjesz wadę i poinformujesz o niej FAQ™ Swiss w okresie gwarancyjnym, firma według własnego uznania wymieni urządzenie bezpłatnie. Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte odpowiednimi dowodami potwierdzającymi, że zgłoszenie nastąpiło w okresie objętym gwarancją.

Aby potwierdzić ważność gwarancji, zachowaj oryginał dowodu zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres jej trwania.

Aby zgłosić reklamację gwarancyjną, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.faqswiss.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia reklamacji.

Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i stanowi ich uzupełnienie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i innych krajach europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów).



OPAKOWANIE JEST
WYKONANE Z
MATERIAŁU
NADAJĄCEGO SIĘ DO
RECYKLINGU



DYREKTYWA W SPRAWIE
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO



ZGODNOŚĆ
Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI



CZĘŚĆ
STOSOWANA
TYPU BF



KONSULTUJ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI


To urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad domowy, lecz raczej dostarczone do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami urządzenia. Recykling materiałów pomoże również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub miejscem zakupu.

DEMONTAŻ BATERII

UWAGA: Proces ten nie jest odwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Czynność tę należy wykonać tylko wtedy, gdy urządzenie jest gotowe do utylizacji.

Ponieważ to urządzenie zawiera baterię litowo-jonową, baterię należy wyjąć przed utylizacją i nie należy jej wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, należy przeciąć i usunąć silikonową warstwę zewnętrzną z części w kształcie rombu na czole maski. Następnie należy przeciąć plastikową powłokę wzdłuż pęknięcia i podważyć ją. Następnie odetnij kabel akumulatora, wyjmij akumulator i zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa podczas tego procesu należy nosić rękawice. Szczegółowe instrukcje wizualne znajdują się poniżej:

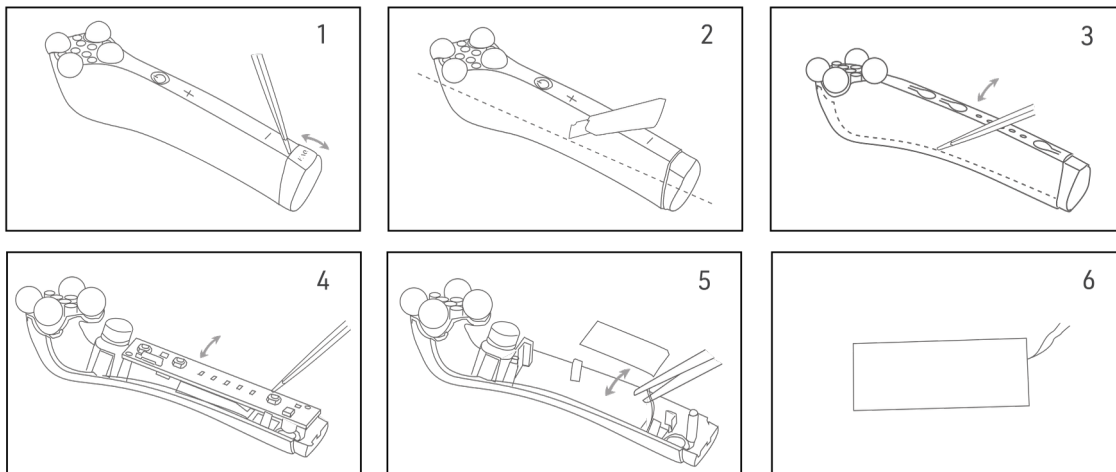

SPECYFIKACJA

MATERIAŁY: Silikon bezpieczny dla ciała, ABS, PC, Stop cynkowy z powłoką chromową

WYMIARY: 143,3 x 40 x 43 mm

WAGA: 105g

POJEMNOŚĆ BATERII: 420mAh

CZAS PRACY: Do 240 minut użytkowania na jedno ładowanie (1,5 godziny)

STAN GOTOWOŚCI: 90 dni

MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU: <50 dB

ZASTRZEŻENIE

Użytkownicy tego urządzenia robią to na własne ryzyko. Firma FAQ™ Swiss ani jej detaliści nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, które mogą wystąpić bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użytkowania tego urządzenia. Ponadto, FAQ™ Swiss zastrzega sobie prawo do zmiany tej publikacji oraz wprowadzania zmian w jej treści od czasu do czasu, bez obowiązku powiadamiania osób o takich zmianach.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.




UWAGA: To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC oraz zawiera nadajnik/odbiornik wolny od licencji, który jest zgodny z przepisami dotyczącymi urządzeń wolnych od licencji wydanych przez Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń. (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. FAQ™ deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dla produktu jest dostępny na stronie www.fagswiss.com/support/eu-conformity. Model może zostać zmieniony w celu poprawy produktu bez uprzedzenia.

Dodatkowe informacje prawne i regulacyjne są dostępne w aplikacji. Aby je zobaczyć, wystarczy wykonać poniższe kroki:

Krok 1: Otwórz aplikację FAQ™ Swiss i wybierz ikonę profilu

Krok 2: Wybierz opcję „Legal & Regulatory”

Krok 3: Wybierz swoje urządzenie.

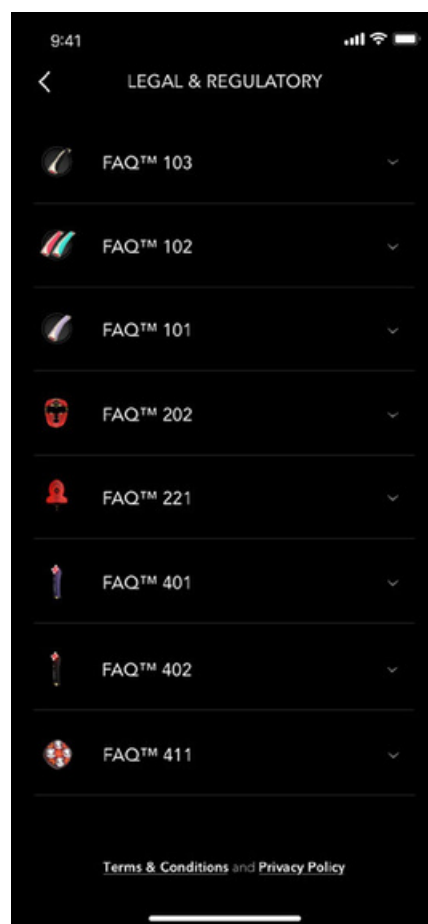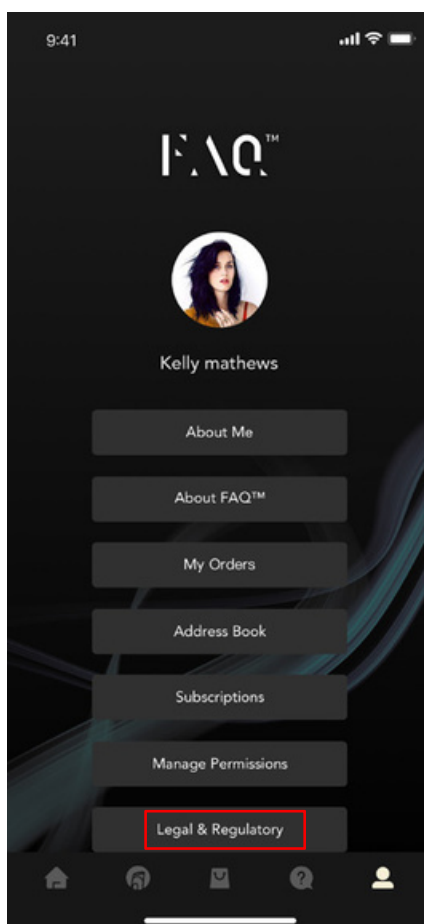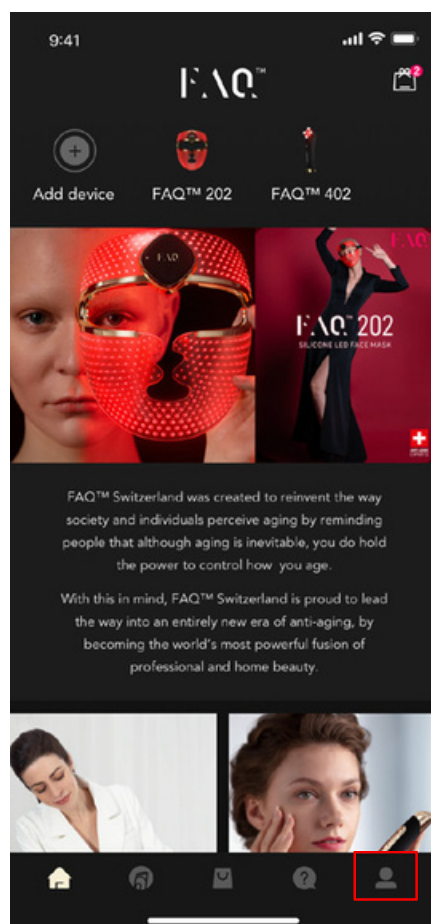

©2025 FAQ GmbH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. WYPRODUKOWANO DLA: FAQ. IMPORTER I PRZEDSTAWICIELSTWO UE: FAQ EUROPE D.O.O., RADNICKA CESTA 202, 10000 ZAGRZEB, CHORWACJA. DYSTRYBUCJA USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. DYSTRYBUCJA AUSTRALIA: FOREO AUS., 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. PRZEDSTAWICIELSTWO W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE: FOREO LTD., LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, N3 1QA LONDYN. WYPRODUKOWANE PRZEZ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO. LTD., NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA, 201505.

WWW.FAQSWISS.COM