

FAQTM



FAQTM 402

ZAŘÍZENÍ NA ZPEVNĚNÍ OBLIČEJE A KRKU S DUÁLNÍM
MIKROPROUDEM A LED TERAPIÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE

PRVNÍ KROKY

Gratulujeme k zakoupení zařízení FAQ™ 402. Než začnete využívat všechny výhody profesionální technologie pohodlně u vás doma, věnujte chvíli pečlivému přečtení pokynů obsažených v této příručce.

Prosíme **O PEČLIVÉ PŘEČTENÍ VŠECH POKYNŮ PŘED ZAČÁTKEM POUŽÍVÁNÍ** a používejte zařízení výhradně podle jeho určení, popsaného v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍ: NEROZEBÍREJTE TOTO ZAŘÍZENÍ.

FAQ™ 402

Jak naše pokožka stárne, čelí novým výzvám, jako je ztráta pevnosti, hlubší vrásky a mdlý vzhled. Díky pokročilému mikroproudu a LED světlu poskytuje FAQ™ 402 vynikající výsledky a nabízí mladistvý, vyhlazený vzhled pokožky jedním stisknutím tlačítka.

POZNÁTE FAQ™ 402

4 METALOVÉ SFÉRY

Dodávají mikroproud přímo do pokožky a svalů pod ní, aby zvedly a vytvarovaly vzhled pokožky. Navíc díky elektroporaci zvyšují vstřebávání aktivních složek z vašich kosmetických přípravků.

MASÁŽ T-SONIC™


Uvolňuje napjatá místa svalů obličeje a podporuje lymfatický odtok, čímž předchází vzniku vrásek, zlepšuje zářivost pokožky a snižuje otoky.

TLAČÍTKA PLUS & MINUS

Upravte intenzitu mikroproudu tak, aby byla ideálně přizpůsobena vašim potřebám.

ŠVÝCARSKÝ DESIGN

Lehká konstrukce s jemnými křivkami, které se dokonale přizpůsobí konturám obličeje a rukou, a také s instruktážními videi v aplikaci FAQ™ Swiss.

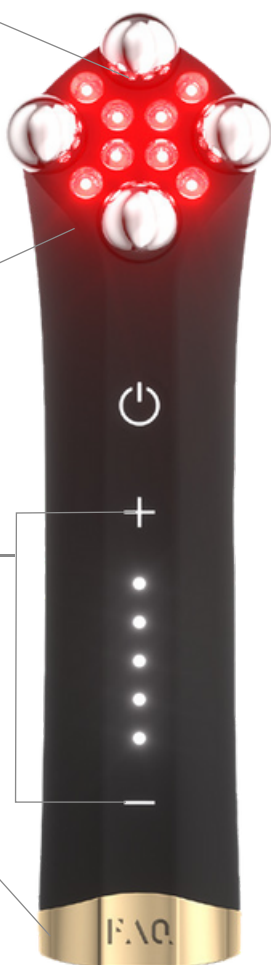

TERAPIE SVĚTLEM NIR, ČERVENÉ A MODRÉ

Podporuje produkci kolagenu, zlepšuje strukturu pokožky a snižuje známky stárnutí díky různým délkám vln.

TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Zapíná a vypíná zařízení a přepíná ho do režimu párování Bluetooth pro spojení s aplikací.

DIODY


Ukazují úroveň intenzity mikroproudu v zařízení. Blikají, aby signalizovaly režim párování Bluetooth, režim Smart Control a potřebu nabití zařízení.

NABÍJECÍ PORT

Až 240 minut používání na jedno nabití s přiloženým USB kabelem. 100% vodotěsné uzavření.


TYPY MIKROPROUDŮ

FAQ™ 402 nabízí 4 typy mikroproudu, z nichž každý má své jedinečné výhody:

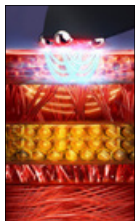


Tapping Microcurrent™

Rychlé a krátké proudové vlny procházejí horními vrstvami pokožky a povrchovými svaly, aby rozjasnily a vyhladily pokožku.

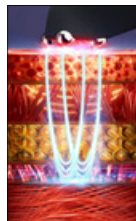

Lifting Microcurrent™

Proud se postupně mění z nízké na vysokou frekvenci, jemně stimuluje střední svaly k přirozenému zvednutí a poskytuje vytvarovaný vzhled.

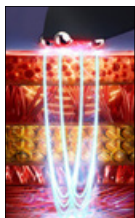

Sculpting Microcurrent™

Směřuje mikroproud hluboko do svalů, účinně zpevňuje pokožku a poskytuje vytvarovaný vzhled.



Advanced Microcurrent™


Stálý proud stimuluje svaly ve všech vrstvách, posiluje je a zároveň napíná pokožku na povrchu.



POUŽITÍ FAQ™ 402

ODBLOKOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Chcete-li zařízení používat, musíte jej nejprve odblokovat. To lze provést automaticky při prvním zaregistrování zařízení v aplikaci FAQ™ Swiss. Stačí provést následující kroky:

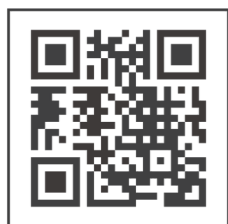


1. Stáhněte si aplikaci FAQ™ Swiss do svého telefonu pomocí QR kódu.
2. Přihlaste se ke svému stávajícímu účtu nebo vytvořte nový.
3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky).
4. Vyberte sérii zařízení.
5. Postupujte podle pokynů v aplikaci a vyplňte informace o nákupu.

POUŽITÍ



1. NANESTE KONDUKTIVNÍ PRIMER

Ujistěte se, že pokožka i zařízení FAQ™ jsou zcela čisté a suché. Poté rovnoměrně naneste FAQ™ P1 Manuka Honey Primer na oblasti obličeje/krku, které chcete ošetřit, přičemž na povrchu pokožky zanechte tenkou vrstvu připomínající masku.

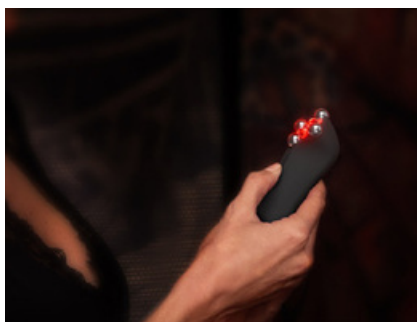

2. VYBERTE NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení FAQ™ 402. Upravte intenzitu mikroproudu pomocí tlačítek + a -. Další nastavení najdete v aplikaci FAQ™ Swiss.



3. ZPEVNŮJTE A TVARUJTE

Lehce přitiskněte všechny čtyři kovové sféry na pokožku a poté pomalu posunujte zařízení směrem nahoru a ven podél lícních kostí, čela, kolem úst a také po linii čelistí a krku podle potřeby. Začátečníci mohou využít jeden z našich AI řízených procedur v aplikaci pro podrobnější pokyny.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Mikroprroudová zařízení, jako je FAQ™ 402, musí být používána s vodivým primerem. Pro optimální výsledky doporučujeme používat FAQ™ P1 Manuka Honey Primer – formulovaný s 17 regeneračními aminokyselinami, speciálně vyvinutý pro použití s mikroprroudovými zařízeními FAQ™ na obličeji.
- Nechte na pokožce tenkou vrstvu FAQ™ P1 Manuka Honey Primer, aby zařízení mohlo hladce klouzat. Pokud ošetřujete více oblastí během jedné relace, můžete primer nanést na každou oblast před použitím mikroproudu na daném místě.
- Nikdy nepoužívejte mikroprroudová zařízení, jako je FAQ™ 402, na střední linii krčních kostí ani v oblasti očí.
- Pro optimální výsledky zajistěte, aby všechny 4 kovové sféry během ošetření dotýkaly pokožky. U menších oblastí obličeje, kde to může být obtížné, se vždy ujistěte, že se pokožky dotýkají alespoň 2 kovové sféry.
- Zařízení vždy posouvejte směrem nahoru a ven, od středu obličeje směrem k linii vlasů.
- Doporučené použití: jednou za 24 hodin. Prvních 60 dní doporučujeme minimálně 5krát týdně. Po 60 dnech nebo po dosažení požadovaných výsledků 2–3krát týdně pro udržení efektů.

UPOZORNĚNÍ

PRO BEZPEČNOST:

- ZPEVNŮVÁNÍ POKOŽKY OBLIČEJE pomocí FAQ™ 402 by mělo být pohodlné – pokud pocítíte jakýkoli diskomfort nebo podráždění, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte zařízení na hrudi/okolí prsou, v oblasti očí (okružní sval očníce), na střední linii krčních kostí ani v intimních oblastech.
- Nepoužívejte na zarudlé pokožce, vystouplých mateřských znaménkách, hlavních tepnách (např. krční), rozšířených cévách, kovových implantátech, infikovaných místech nebo oblastech bez citlivosti.
- Nepoužívejte zařízení k léčbě růžovky, mateřských znamének, bradavic, otevřených ran, nádorových změn nebo jiných kožních onemocnění.
- Nepoužívejte, pokud trpíte jakýmkoli onemocněním, jako je epilepsie, poruchy krvácení, nádory, tumory nebo poruchy vnímání.
- Nepoužívejte po laserových zákrocích, chemickém peelingu nebo jiných procedurách poškozujících pokožku.
- Nepoužívejte po plastických operacích obličeje.
- Nepoužívejte, pokud máte implantované lékařské nebo jiné elektronické zařízení podporující tělo.
- Monitorovací zařízení, jako EKG a EKG alarmany, nemusí během používání zařízení fungovat správně.
- FAQ™ 402 nesmí používat děti, v jejich blízkosti ani osoby s omezenou fyzickou či psychickou schopností. Během používání, čištění nebo skladování v jejich blízkosti je nutná přísná kontrola.
- Dlouhodobé účinky používání mikroprroudů nejsou známy.
- Bezpečnost používání zařízení během těhotenství nebyla potvrzena. V případě těhotenství se poraďte s lékařem před použitím.
- Pokud máte kožní onemocnění nebo jakékoli zdravotní problémy, konzultujte použití s lékařem.
- V případě podezření nebo diagnostikovaného onemocnění srdce dodržujte doporučení lékaře.
- Buďte zvláště opatrní při zpevnování pokožky v okolí očí a nikdy nepřikládajte zařízení na oční víčka ani přímo na oči.
- Během používání může dojít k pocitu blikajících světél v důsledku stimulace zrakového nervu. Pokud tento jev zaznamenáte i bez používání zařízení, obraťte se na lékaře.
- Lehké brnění během používání je normální a není důvodem k obavám. Snížení intenzity může tento pocit zmírnit nebo eliminovat.
- Z důvodu účinnosti procedur FAQ™ se nedoporučuje používat mikroprroud déle než 3 minuty na jednu oblast.
- Z hygienických důvodů se nedoporučuje sdílet zařízení FAQ™ 402 s jinými osobami.
- Nepoužívejte při řízení vozidla ani obsluze strojů.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je připojeno k nabíjení.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud se přehřívá nebo pokud je podezření na jeho poškození.
- Vyhnete se vystavování FAQ™ 402 slunečnímu záření a nikdy jej nevystavujte vysokým teplotám nebo vroucí vodě.
- FAQ™ 402 musí být zcela suché před aktivací funkce mikroproudu. Nepoužívejte zařízení, pokud bylo ponořeno ve vodě, ani s mokřýma rukama.
- Zařízení smí být používáno pouze se SELV napájením.
- Doporučuje se používat napájecí zdroje v souladu s normou IEC60950 pro nabíjení zařízení.
- Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení. Přerušte používání, pokud zařízení nebo nabíječka nefunguje správně nebo se zdá poškozená. Používejte pouze USB kabel dodaný se zařízením.
- Baterie musí být před likvidací zařízení vyjmuta. Před vyjmutím baterie odpojte zařízení od napájení a baterii zlikvidujte bezpečně.
- Produkt neobsahuje vyměnitelné části.
- Toto zařízení je určeno výhradně pro kosmetické použití na obličeji a krku. Veškeré škody způsobené nesprávným použitím, použitím na jiných částech těla, připojením k nesprávnému zdroji napájení, použitím špinavého primeru nebo vodivých koulí nejsou odpovědností FAQ™.
- Zařízení používejte pouze podle účelu popsaného v tomto návodu. Pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz nebo máte jakékoli pochybnosti o fungování zařízení, navštivte: faqswiss.com/support.

ČIŠTĚNÍ FAQ™ 402

Zařízení FAQ™ 402 vždy po použití důkladně očistěte. Omývejte kovové sféry a silikonový povrch mýdlovou vodou a poté opláchněte teplou vodou. Jemně osušte hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna a není drsný. Pro optimální výsledky doporučujeme jednou týdně postříkat zařízení přípravkem FAQ™ Silicone Cleaning Spray a opláchnout teplou vodou.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Opatření při změnách v chodu zařízení FAQ™ 402:

Pokud se zařízení FAQ™ 402 po stisknutí univerzálního tlačítka nezapne:

- Baterie je vybitá. Nabijte zařízení pomocí USB kabelu maximálně 1,5 hodiny, dokud nebude plně nabito, a poté jej znovu spusťte podržením univerzálního tlačítka.

Pokud nelze zařízení FAQ™ 402 vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje:

- Mikroprocesor dočasně nefunguje správně. Stiskněte a podržte univerzální tlačítko pro restartování zařízení.

Pokud se zařízení FAQ™ 402 nespojuje s aplikací FAQ™ Swiss:

- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste navázat spojení.
- Zavřete aplikaci FAQ™ Swiss a znovu ji otevřete, abyste zahájili proces od začátku.
- Zkontrolujte, zda aplikace nevyžaduje aktualizaci v obchodě s aplikacemi na vašem mobilním zařízení.

ZÁRUKNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Pro aktivaci dvouleté omezené záruky zaregistrujte zařízení prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss nebo navštivte faqswiss.com/product-registration pro více informací.

DVOULETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

FAQ™ Swiss poskytuje na toto zařízení záruku po dobu DVOU (2) LET od data původního zakoupení, kryjící vady způsobené chybným zpracováním nebo materiály vzniklé při běžném používání zařízení.

Záruka se vztahuje na pracovní části ovlivňující funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození vzniklé běžným opotřebením ani na poškození způsobené nehodami, nesprávným používáním nebo zanedbáním. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) zneplatňuje záruku.

Pokud během záruční doby zjistíte vadu a oznámíte ji FAQ™ Swiss, společnost podle svého uvážení zařízení bezplatně vymění. Záruční nároky musí být doloženy odpovídajícími důkazy potvrzujícími, že reklamáce byla podána během záruční doby.

Pro potvrzení platnosti záruky si uchovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito záručními podmínkami po celou dobu trvání záruky.

Pro podání záruční reklamace se přihlaste ke svému účtu na www.faqswiss.com a vyberte možnost podání reklamace.

Náklady na dopravu nejsou hrazeny. Toto ujednání neovlivňuje vaše zákonná práva jako spotřebitele a doplňuje je.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích s oddělenými systémy sběru odpadu).



OBAL JE VYROBEN Z
MATERIÁLU
VHODNÉHO K
RECYKLACI



SMĚRNICE O ELEKTRICKÉM
A ELEKTRONICKÉM ODPADU



SHODA S
EVROPSKÝMI
NORMAMI



ČÁST TYPU BF



KONZULTUJTE NÁVOD K
POUŽITÍ

Toto zařízení by nemělo být likvidováno jako běžný domácí odpad, ale mělo by být odevzdáno do příslušného sběrného místa k recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Správná likvidace tohoto zařízení pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout nesprávným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů rovněž pomáhá chránit přírodní zdroje.


Pro více informací o recyklaci zařízení kontaktujte místní společnost zabývající se likvidací komunálního odpadu nebo místo nákupu.

DEMONTÁŽ BATERIE

UPOZORNĚNÍ: Tento proces je nevratný. Otevření zařízení způsobí ztrátu záruky. Tento postup provádějte pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, baterii je třeba před likvidací vyjmout a nesmí být vyhazována spolu s domácím odpadem. Pro vyjmutí baterie odřízněte a odstraňte silikonovou vnější vrstvu na části ve tvaru diamantu na čele masky. Poté rozřízněte plastový kryt podél štěrbin a opatrně jej páčte. Následně odpojte kabel baterie, vyjměte baterii a zlikvidujte ji podle místních předpisů o ochraně životního prostředí.

Pro vlastní bezpečí během tohoto procesu doporučujeme nosit rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže:

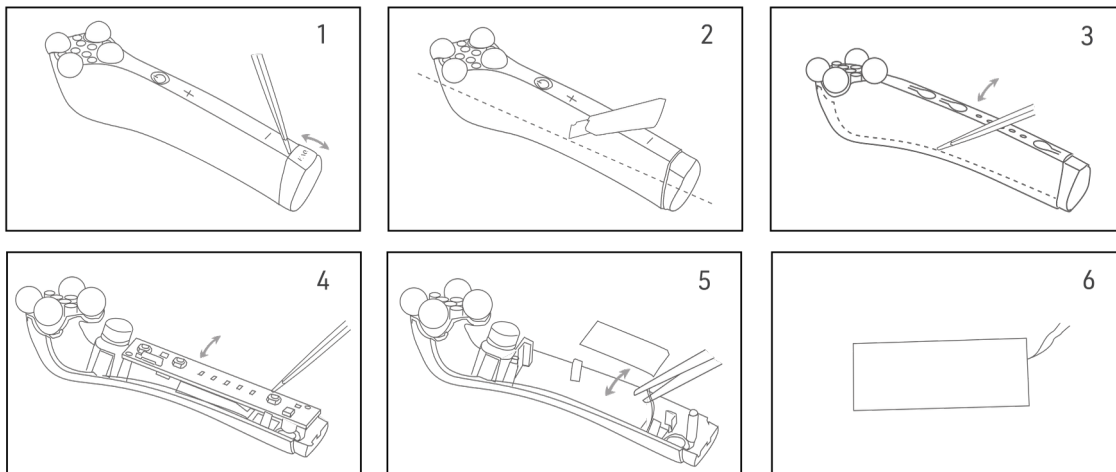

SPECIFIKACE

MATERIÁLY: Tělu bezpečný silikon, ABS, PC, zinková slitina s chromovaným povrchem

ROZMĚRY: 143,3 × 40 × 43 mm

HMOTNOST: 105 g

KAPACITA BATERIE: 420 mAh

DOBA PROVOZU: Až 240 minut používání na jedno nabití (1,5 hodiny)

STAV POHOTOVOSTI: 90 dní

MAXIMÁLNÍ HLUČNOST: <50 dB

UPOZORNĚNÍ

Používání tohoto zařízení je na vlastní riziko. Společnost FAQ™ Swiss ani její prodejci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo škody, fyzické či jiné, které mohou vzniknout přímo či nepřímo v důsledku používání tohoto zařízení. FAQ™ Swiss si rovněž vyhrazuje právo tuto publikaci měnit a aktualizovat její obsah bez povinnosti uživatele o těchto změnách informovat.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo modifikace tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zneplatnit oprávnění uživatele zařízení používat.

POZNÁMKA: Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC a obsahuje bezlicenční vysílač/přijímač, který je v souladu s předpisy pro bezlicenční zařízení vydanými Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Zařízení nesmí způsobovat rušení. (2) Zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

FAQ™ prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě produktu je k dispozici na www.faqswiss.com/support/eu-conformity.

Model může být změněn za účelem zlepšení produktu bez předchozího upozornění.

Další právní a regulační informace jsou dostupné v aplikaci. Pro jejich zobrazení postupujte podle následujících kroků:

Krok 1: Otevřete aplikaci FAQ™ Swiss a vyberte ikonu profilu

Krok 2: Zvolte možnost „Legal & Regulatory“

Krok 3: Vyberte své zařízení

